

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Dyna-Form® Static Air HZ

Bruksanvisning



Dyna-Form® Static Air HZ

Innehåll

1. Produktbeskrivning	3
1.1 Symboler	3
1.2 Symbolguide	3
2. Användning	4
2.1 Avsedd användning	4
2.2 Använd din madrass	4
2.3 Lägesändring av patient	4
3. Rengöring och skötsel	4
3.1 Lätt nedsmutsad	4
3.2 Mycket nedsmutsad	5
3.3 Torkning	5
3.4 Inspektion	5
4. Underhåll	5
4.1 Granskning	5
5. Efter användning	5
5.1 Förvaring	5
5.2 Transport	5
5.3 Återanvändning	5
5.4 Kassering	6
6. Kvalitet och testning	6
6.1 Livslängd	6
6.2 Produktgarantiperioder	6
6.3 Brandtest	6
6.4 Kvalitetsstandard	6
7. Tekniska data	6



Den här manualen måste ges till produktens användare.

Läs den här manualen innan produkten används och spara för framtida referens!

1. Produktbeskrivning

Din Dyna-Form® Static Air HZ (Hälzon) madrass använder ett stretchigt, ångpermeabelt överdrag i polyuretan, som är utformat för att minska att värme som är associerad med madrassöverdrag av PVC-typ byggs upp, dessutom är det vattentätt. Under överdraget, har den här madrassen en blandning av förbränningsmodifierat motståndskraftigt skum (CME) av hög kvalitet, tillsammans med en serie av luftceller, som garanterar att den här produkten inte endast har de bästa tryckomfördelande egenskaperna, utan att den även ger en bättre patientkomfort och produktlivslängd. Se produktinformationen för fler detaljer.

1.1 Symboler

Varningar

I den här bruksanvisningen indikeras varningar med symboler. Varningssymbolerna kommer tillsammans med en rubrik som indikerar hur allvarlig faran är.

VARNING

Indikerar en farlig situation som skulle kunna resultera i allvarlig skada eller dödsfall om den inte undviks.

FÖRSIKTIGHET


Indikerar en farlig situation som skulle kunna resultera i en mindre eller lätt skada om den inte undviks.

VIKTIGT

Indikerar en farlig situation som skulle kunna resultera i skada på egendom om den inte undviks.

1.2 Symbolguide

Madrassymboler

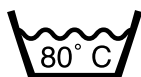

TVÄTTA I 80°



TORKTUMLA
PÅ LÅG VÄRME



KEMTVÄTTA INTE



SE BRUKSANVISNING



DIREKTIV
93/42EEC FÖR
LÄKARUTRUSTNING



BLEK INTE



STRYK INTE



RÖKNING
FÖRBJUDEN



MAXIMAL VIKTGRÄNS
FÖR ANVÄNDARE VARIERAR,
SE SIDA 7



ANVÄND INTE
VASSA FÖREMÅL



ANVÄND INTE FENOL

2. Användning

2.1 Avsedd användning

Tack för ditt köp av en tryckomfördelande madrass från Direct Healthcare Group. Dyna-Form® Static Air HZ madrass är utformad för att förhindra trycksår och är avsedd att användas tillsammans med en sängstomme av lämplig storlek, som en del av ett allmänt vårdprogram för att förebygga trycksår.

⚠️ VARNING Vilken madrass som är lämplig för ditt individuella bruk ska beslutas av din kliniker, som även kommer att besluta den lämpligaste trycksårsförebyggande metoden eller behandlingsplan, samt de relevanta vårdmetoderna.

⚠️ VARNING Följande bruksanvisning ska användas tillsammans med produktinformation och kommer att ge dig instruktioner om hur man får bästa resultat när man använder en av våra tryckreducerande madrasser, skulle du behöva ytterligare information, kontakta vår kundtjänst på +44 (0) 800 043 0881.

2.2 Använd din madrass

⚠️ FÖRSIKTIGHET Kontrollera att sängen inte har några hårda kanter som kan förstöra madrassen före du använder den. Placera madrassen på sängen med Direct Healthcare Group logotypen uppåt och nära sängens huvudände. Kontrollera att blytlåset är stängt och att blytlåsknappningen täcker blytlåset helt.

Torka av madrassen innan den täcks med ett löst sittande lakan.

⚠️ Använd inte tunga täcken eller väl "instoppade" lakan som kan ge extra tryck på tårna och leda till skador på de beniga utskjutande delarna av hämlarna. Det är inte rekommendabelt att använda andra vattentäta madrassöverdrag, elektriska filter, fårskinns eller andra liknande objekt som kan minska tryckets effektivitet samt minska madrassens egenskaper eller rent av leda till en extra ökning av kroppstemperaturen som kan orsaka klåda. Sök klinisk rådgivning om du vill använda ett annat överdrag än ett sänglakan av bomulls- eller linnetyyp.

Var försiktig vid användning av mekaniska objekt såsom kopplingskivor, PAT-lakan eller annan assisterande patienttransport, att skada inte uppkommer på madrassens överdrag på grund av vassa eller skadade kanter.

⚠️ VARNING Din madrass maximala användarvikt finns tillgänglig i produktinformationen.

⚠️ VARNING Den tryckta sidan av madrassöverdraget ska alltid vändas uppåt. Kontrollera att hälzonens område (identifieras av en ritad bild av två fötter på madrassöverdraget) är beläget i den nedre delen av sängen där patientens hälar kommer placeras. Kontrollera att distansen mellan madrassens yta och överdelen av sidracket är åtminstone 220 mm.

2.3 Lägesändring av patient

⚠️ VIKTIGT Din Dyna-Form® tryckomfördelande madrass kommer inte bara ge den bästa tryckomfördelningen utan även utmärkt patientkomfort och produktivslängd. För att undvika uppbyggnad av tryck, som kan leda till vävnadsskada och eventuell formation av trycksår, är det viktigt att patienten antingen ändrar läge på egen hand, eller med hjälp ändrar läge regelbundet. Det här ska baseras på klinisk bedömning från kvalificerad sjukvårdspersonal som även kommer att tillhandahålla dig med en lämplig vändningsregim.

3. Rengöring och skötsel

Madrassens rengöringsmetod beror på kontamineringsens natur och patientens känslighet. Rengöring ska ske både före och efter användning, samt efter varje patient.

3.1 Lätt nedsmutsad

⚠️ VIKTIGT Vid frånvaro av grov nedsmutsning eller ovanlig risk, ta bort smuts och rester med händerna, tillsammans med rent varmt vatten och neutralt rengöringsmedel. Men, vid behov kan överdraget torkas av med 0,1 % Hypokloritlösning (1 000 ppm). Försäkra att överdraget är sköljt med rent vatten, använd en engångstrasa som inte är sträv och helt torr. Försäkra adekvat ventilering.

3.2 Mycket nedsmutsad

⚠ VIKTIGT Vid fall av grov nedsmutsning ska madrassens överdrag rengöras först med rengöringsmedel och vatten, därefter med en utblandad lösning av hypoklorit (10 000 ppm). Skölj ordentligt med rent vatten och en fuktig engångstrasa som inte är skrovlig. Försäkra adekvat ventilering.

3.3 Torkning

Engångshandskar och förkläde ska användas. Om det finns risk för stänk ska även ögon- / ansiktsskydd bäras. Efter borttagning av handskar, rengör händerna. Kontrollera att madrassens överdrag har torkat helt före sängen bäddas på nytt. Fuktiga miljöer har visat sig leda till återupptagande av bakterietillväxt.

I kollektiva miljöer, kan det vara önskvärt att överdraget tvättas efter att det inre skummet tagits bort. I sådant fall, ska överdraget tvättas i högst 80° C. För att undvika att överdraget krymper ska det endast torktumlas på låg värme, högst 40° C och under högst 10 minuter. Överdraget måste torka ordentligt innan det sätts på madrassen på nytt.

3.4 Inspektion

⚠ VARNING Kontrollera överdragets inre och yttre ytor samt dess blytlås regelbundet för skador. Om överdraget är fläckat, smutsigt eller sönderslitet, ska det innersta skummet kontrolleras. Skadade / smutsiga överdrag och madrasser ska rapporteras till avdelningschefen. Om madrassens mitt är våt eller mycket fläckad, ska den sluta användas. Företaget rekommenderar även att sänggaveln rengörs efter varje patient.

4. Underhåll

4.1 Granskning

⚠ FÖRSIKTIGHET Det rekommenderas att granskning av alla madrasser på en avdelning ska göras var 6:e månad eller årligen. I kollektiva miljöer, ska även en granskning göras efter varje patient.

Se dokumenten skummadrasser: Förebyggande av korsinfektion MDA SN 1999 (31), Läkarutrustningsvarning: Alla typer av sängmadrasser (MDA/2010/002), och även BHTA-vägledning gällande vård, rengöring och inspektion av hälsovårdsmadrasser (BHTA skydda, skölj och torka). Mer information om hur du granskar din madrass finns tillgänglig hos Direct Healthcare Group.

5. Efter användning

5.1 Förvaring

⚠ FÖRSIKTIGHET Det är rekommendabelt att 2 personer lyfter / bär madrasserna. Madrassen kan skadas om den förvaras felaktigt. Det rekommenderas att madrassen förvaras ifrån golvet i en ren torr miljö. Förvara inte madrassen i närheten av uppvärmningsanordningar såsom elektriska kaminer eller värmeledningselement då hög värmeexponering kan försämra cellmaterialet. Där möjligt, ska madrasser lagras inuti ett skyddande överdrag.

5.2 Transport

⚠ FÖRSIKTIGHET Var varsam vid hantering av madrasserna för att försäkra att överdraget inte skadas. Det är rekommendabelt att två personer lyfter / bär madrasserna. Undvik kontakt med vassa föremål och sträva ytor o.s.v. Dra inte i madrasserna.

5.3 Återanvändning

⚠ VIKTIGT Ett rengöringsregister måste finnas som en del av rengöringssystemet. Produkten kan återanvändas. Antalet gånger den kan användas beror på hur ofta, samt hur produkten används. Före återanvändning, rengör produkten noggrant i enlighet med riktlinjerna.

5.4 Kassering

 **VIKTIGT** Kassering och återanvändning av apparat samt förpackning måste följa varje lands förordning.

6. Kvalitet och testning

6.1 Livslängd

Vi uppskattar en livslängd på åtta år för dessa produkter, givet att de används i enlighet med de riktlinjer som fastställs i det här dokumentet och att alla underhålls- och servicekrav möts.

Den uppskattade livslängden kan förlängas om produkten används med försiktighet och lagras korrekt, samt givet att tekniska och vetenskapliga framsteg inte resulterar i tekniska begränsningar. Livslängden kan även förkortas avsevärt vid extrem eller felaktig användning. Det faktum att vi har uppskattat en livslängd för dessa produkter utgör inte en extra garanti.

6.2 Produktgarantiperioder

Se produktinformation för din madrass garantiperiod. Din Dyna-Form® madrass garanti är giltig från och med tiden för leverans. Om en defekt eller ett fel upptäcks kontakta Direct Healthcare Group på +44 (0) 800 043 0881 som kommer att undersöka madrassen. Inget ansvar kommer att tas för skada orsakad av felaktig användning eller om instruktionerna som givits i den här bruksanvisningen inte efterlevs. Garantins villkor och bestämmelser finns tillgängliga vid begäran.

6.3 Brandtest

Direct Healthcares produkter har brandtestats oberoende. Överdragen följer BS 7175 crib 5.

Kuddarna följer BS 7176 crib 5. Madrasserna följer BS 7177 crib 5. (efterfölj crib 7 i enlighet med råden i produktinformationen).

6.4 Kvalitetsstandard

Kvalitet är fundamentalt för företagets drift, och vi arbetar inom disciplinerna för BS EN ISO 9001: 2008 och ISO 13485: 2012. Alla Direct Healthcare madrasser är CE-märkta, i enlighet med direktiven för läkarutrustning.

Alla ansträngningar har gjorts för att försäkra att innehållet av den här publiceringen är uppdaterad vid publiceringsdatumet. Som en del av vår fortlöpande förbättringsprocess, reserverar sig Direct Healthcare Group för rättigheten att modifiera existerande modeller när som helst.

7. Tekniska data

Produktkod	MAT0510001
Riskkategori	Väldigt Hög Risk
Viktgräns	Ingen minsta viktgräns. Produkt utvärderad för en kapacitet på 40 stone / 254 kg
Garanti	5 år
Dimensioner	(Längd) 198cm x (bredd) 88cm x (höjd) 15cm – Olika storlekar finns tillgängliga på begäran
Produktvikt	10 kg
Flamsäkerhet	BS7177; 2008 (Crib 5 sammansättning)
Färg	Röd
Kompatibel med hypokloritlösning	1 000 ppm utspädd eller 0,1 % (eller för att användas tillsammans med gällande riktlinjer för vårdhygien)

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Intelligent tryckvård

Specialist säte

Hyses- och servicelösningar

Direct Healthcare Group

Withey Court, Western Industrial Estate

Caerphilly, Storbritannien

CF83 1BF

T: +44 (0) 800 043 0881

F: +44 (0) 845 459 9832

E: info@directhealthcaregroup.com

Asien och Stillahavsområdet

Direct Healthcare Group PTY Ltd.

PO Box 562, Wembley

Western Australia 6913

T: +61 (0) 423 852 810

E: info@directhealthcaregroup.com.au



LIT-00001 Utgåva 8
Datum: Februari 2019

DIRECTHEALTHCAREGROUP.COM

