



Moving Health Forward

EN [User Manual](#)

DA [Brugervejledning](#)


SV [Användarhandbok](#)

NL [Gebruikershandleiding](#)

FR [Manuel d'utilisation](#)

LEJRELET

Pad High

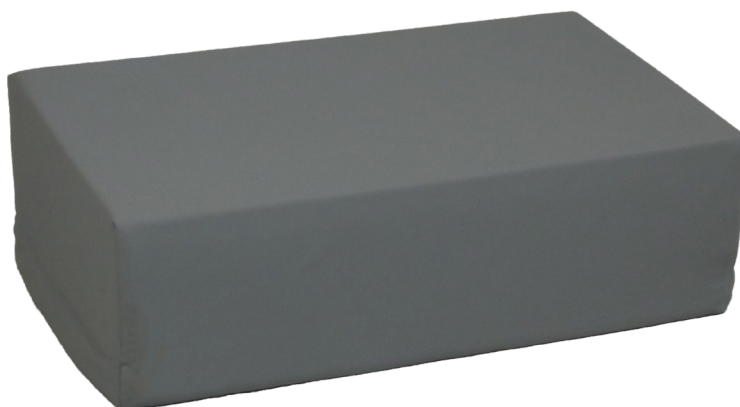

EN

Application


LEJRELET Pad High is a rectangular cushion made from a mixture of polyurethane foam and viscoelastic foam. It is used for various positioning situations and during lower hygiene procedures for the bedridden patient.

LEJRELET Pad High has a large support surface which in combination with viscoelastic foam offers good pressure relief and comfort for the bedridden patient.


Pad High can be used alone or in combination with other LEJRELET products.

Examples for use of LEJRELET Pad High:


- Support of leg in lateral position
- Support of leg during lower hygiene procedures
- Support of arm in lateral position
- Support of legs and pressure relief of heels

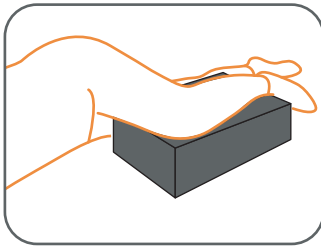


Support of leg in lateral position

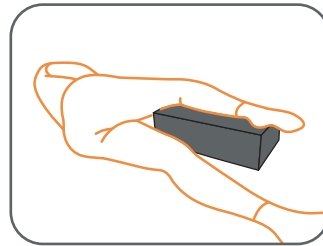

Support of leg during lower hygiene situations

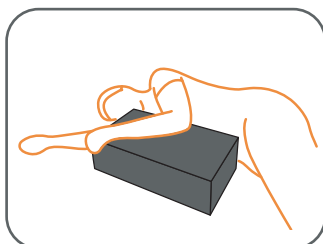

Support of arm in lateral position

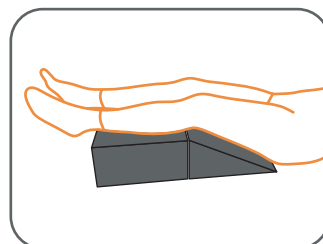

Support of legs and pressure relief of heels

Technical Information

Filling:

LEJRELET Pad High is pressure relieving and made with a core of poly-urethane foam covered with 2 cm of flameretardant viscoelastic foam on the top.

This combination means, that the cushions are firm and supportive, yet they are still flexible and provide effective pressure relief and comfort.

Fabric:

- Waterproof
- Water vapour permeable
- Two way stretch
- Anti-bacteria treated
- Tight to house dust mite
- Biocompatible
- Oeko-TEX, class 1
- Fire-retardant to crib 5

Washing & Cleaning

Can be wiped with mild soap and disinfectant fluids or showered with boiling water.



Hand wash



Do not dry clean



Do not tumble dry



Do not bleach



Do not iron

Size: H 15 x W 30 x L 50

Item no.: 5000003

Weight: 800 g

Other Symbols



Warning



Item no.



Year and month of manufacture



Name of manufacturer



CE marking:

The product complies with the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

DA

Anvendelse


LEJRELET Pad High er en rektangulær pude med en blanding af polyurethane skum og viscoelastisk skum. Den benyttes i flere forskellige lejringsituationer og ved nedre hygiejne.

LEJRELET Pad High har en stor understøttelsesflade, som i kombination med det trykaflastende skum giver god trykaflastning og komfort for den sengeliggende.


Pad High kan benyttes alene eller i kombination med andre LEJRELET produkter.

Benyt LEJRELET Pad High til f.eks.:


- Understøttelse af ben ved sideleje
- Understøttelse af ben i forbindelse med nedre hygiejne
- Understøttelse af arm i sideleje
- Aflastning af hæle, ben og lænd

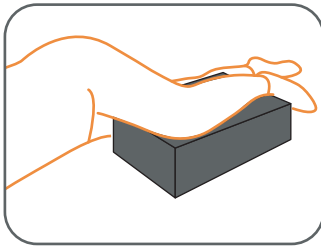


Understøttelse af ben ved sideleje

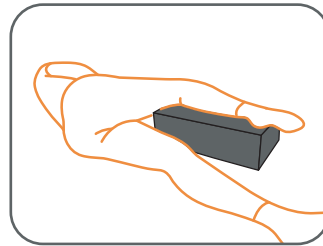

Understøttelse af ben i forbindelse med nedre hygiejne

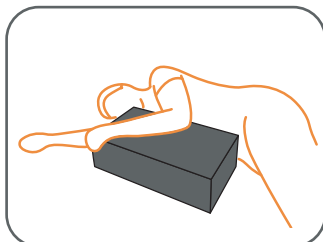

Understøttelse af arm i sideleje

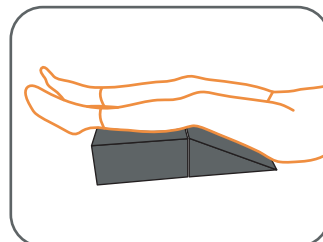

Aflastning af hæle, ben og lænd

Teknisk information

Fyld:

LEJRELET Pad High er tryksårsforebyggende og fremstillet med en kerne af brandsikker polyurethane skum belagt med 2 cm flamme-hæmmende visco-elastisk skum på oversiden.

Denne kombination giver puderne en god trykaflastning og komfort.

Betræk:

- Vandtæt
- Åndbart
- Strækbar i to retninger
- Antibakteriel
- Støvmide-tæt
- Bio-kompatibel
- Oeko-Tex, class 1
- Brandhæmmende

Vaske- og rengøringsanvisning

Kan aftørres med sæbevand og desinficerende væsker eller overhældes med kogende vand.



Vaskes i hånden



Tåler ikke rens



Må ikke tørretumbles



Tåler ikke blegning



Må ikke stryges

Størrelse: H 15 x W 30 x L 50

Varenr.: 5000003

Vægt: 800 g

HMI-nr.: 71865

Øvrige symboler



Advarsel



Varenummer



Produktionsår-
og måned



Fabrikantens
navn



CE-mærkning:
Produktet opfylder alle krav i hht. Medical
Device Regulation (EU) 2017/745

SV

Användning


LEJRELET Pad High är en rektangulär kudde med en blandning av polyuretanskum och viscoelastiskt skum. Den kan användas i flera olika positionerings-situationer och vid nedre hygien.

LEJRELET Pad High har en stor stödyta som i kombination med det tryckavlastande skummet ger god tryckavlastning samt hög komfort för den som är sängliggande.


Pad High kan användas enskilt eller i kombination med andra LEJRELET produkter.

Använd LEJRELET Pad High till t.ex.:


- Stöd under ben vid sidoläge
- Stöd under ben i samband med nedre hygien
- Stöd under arm i sidoläge
- Avlastning av hälar, ben och korsrygg

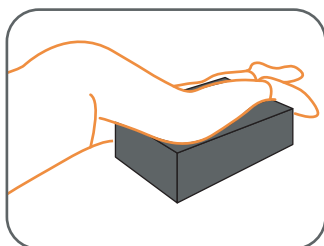


Stöd under ben vid sidoläge

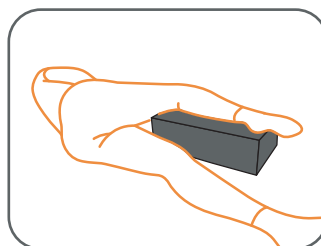

Stöd under ben i samband med nedre hygien

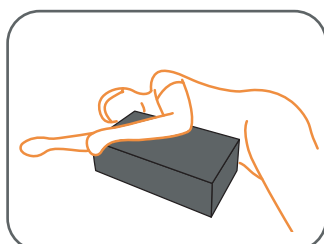

Stöd under arm i sidoläge

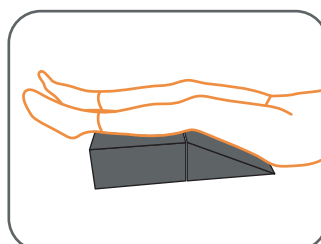

Avlastning av hälar, ben och korsrygg

Teknisk information

Fyllning:

LEJRELET Pad High förebygger trycksår och tillverkas med en kärna av brandsäker polyuretanskum med 2 cm beläggning av flamskyddande viscoelastiskt skum på ovansidan.

Denna kombination ger kuddarna en bra tryckavlastning och komfort.

Överdrag:

- Vattentätt
- Andningsbart
- Sträckbart i två riktningar
- Motverkar bakterier
- Dammkvalstertätt
- Bio-kompatibel
- Oeko-Tex, klass 1
- Brandhämmande

Tvätt- och rengöringsanvisning

Kan avtorkas med tvållösning och desinficerande vätskor eller avsköljas med kokande vatten.



Handtvätt



Ej kemtvätt



Får ej torktumlas



Ej blekmedel



Får ej strykas

Storlek: H 15 x W 30 x L 50

Art nr.: 5000003

Vikt: 800 g

Andra symboler



Varning



Artikelnummer



Produktionsår
och månad



Tillverkarens
namn



CE-märkning:
Produkten uppfyller alla krav i enlighet med
Medical Device Regulation (EU) 2017/745

NL


Gebruik

LEJRELET Pad High is een rechthoekig kussen dat wordt gebruikt voor stabilisatie, verlichting en positionering.


Pad High is gebaseerd op een anatomische weergave van de thorax en het bekken. Als Pad High bijvoorbeeld wordt gebruikt om het been in de laterale positie te ondersteunen, zorgt u ervoor dat de heupflexie neutraal wordt gehouden. Dat wil zeggen: u voorkomt lumbale rotatie, compressie in het heupgewricht en het uitrekken van het gewrichtskapsel.

Gebruik LEJRELET Pad High naar bijv.:


- Ondersteuning van het been in de laterale positie
- Ondersteuning van been tijdens lagere hygiëne
- Ondersteuning van de arm in de laterale positie
- Ondersteuning van benen en drukverlichting van de hielen

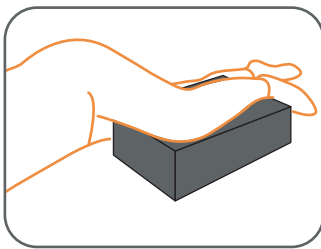


Ondersteuning van het been in de laterale positie

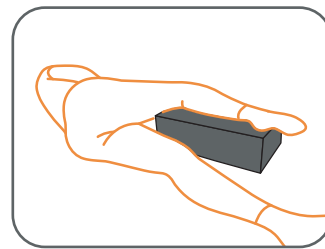

Ondersteuning van been tijdens lagere hygiëne

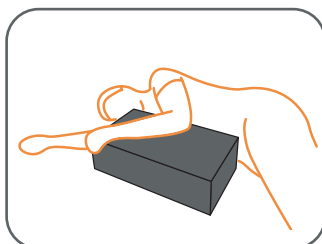

Ondersteuning van de arm in de laterale positie

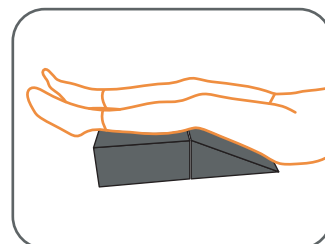

Ondersteuning van benen en drukverlichting van de hielen

Technische informatie

Vulling:

LEJRELET Pad High zijn gemaakt met een kern van polyurethaanschuim bedekt met 2 cm visco-elastisch schuim.

Deze combinatie maakt de kussens stevig en ondersteunend, maar ze zijn nog steeds flexibel en zorgen voor effectieve drukvermindering en comfort.

Stof:

- Waterbestendig
- Waterdamp doorlatend
- Antibacterieel behandeld
- Huisstofmijt dicht
- Bio compatibel
- Öko-TEX, klasse 1
- Brandvertragend tot Crib 5

Wassen en reinigen

LEJRELET Pad High kan worden afgenomen met milde zeep, desinfectantia of overgoten worden met kokend water.



Handwas



Niet droog reinigen



Niet drogen in een droogtrommel



Niet bleken



Niet strijken

Afmeting: H 15 x W 30 x L 50

Item no.: 5000003

Gewicht: 800 g

Andere symbolen



Waarschuwing



Item no.



Productiejaar en maand



Naam van de fabrikant



CE-keurmerk:

Het product voldoet aan de Medical Device Regulation (EU) 2017/745

FR

Utilisation


LEJRELET Pad High est un coussin rectangulaire rembourré d'un mélange de mousses polyuréthane et viscoélastique. Il est utile dans plusieurs situations de positionnement et pour faire la toilette intime.

LEJRELET Pad High offre une grande surface de contact qui, avec le rembourrage en mousse, soulage efficacement les points de pression et procure confort à la personne alitée.


Pad High peut être utilisé seul ou en combinaison avec d'autres produits LEJRELET.

LEJRELET Pad High est entre autres efficace pour:


- Soutien des jambes en décubitus latéral
- Soutien des jambes lors de la toilette intime
- Soutien des bras en décubitus latéral
- Soulagement des talons, des jambes, et des reins

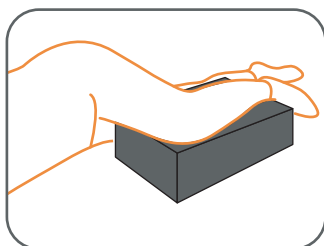


Soutien des jambes en décubitus latéral

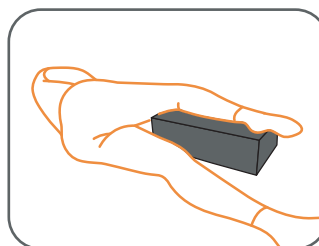

Soutien des jambes lors de la toilette intime

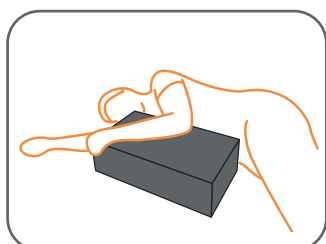

Soutien des bras en décubitus latéral

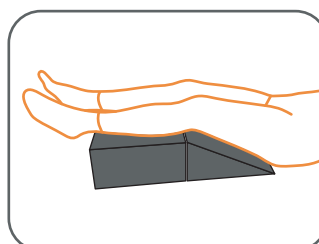

Soulagement des talons, des jambes, et des reins

Informations techniques

Rembourrage:

LEJRELET Wedge est rembourré avec un cœur de mousse polyuréthane incombustible, recouvert par de 2 cm de mousse viscoélastique ignifuge sur la partie supérieure. Il prévient la formation d'escarres.

Grâce à cette combinaison de matériaux, le coussin soulage les points de pression et apporte confort.

Housse:

- Imperméable
- Perméable à l'air
- Extensible dans deux directions
- Antibactérienne
- Traitée anti-acariens
- Biocompatible
- Oeko-Tex, classe 1
- Ignifugée

Instruction de lavage et de nettoyage

Peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse, des liquides désinfectants ou de l'eau bouillante.



Lavage à la main



Nettoyage à sec interdit



Séchage en machine interdit



Aucun type de blanchiment possible



Repassage interdit

Storlek: H 15 x W 30 x L 50

Art nr.: 5000003

Vikt: 800 g

Autres symboles



Avertissement



Référence catalogue



Date de fabrication



Fabricant



Marquage CE:

Le produit répond à toutes les exigences conformément au règlement (UE) relatif aux dispositifs médicaux 2017/745



Moving Health Forward

PRESSURE ULCER PREVENTION
SAFE MOVING & HANDLING
SPECIALIST THERAPIES
BATHROOM SAFETY
RENTAL & SERVICE SOLUTIONS



Direct Healthcare Group Ltd
Withey Court, Western Industrial Estate
Caerphilly, United Kingdom
CF83 1BF

T: +44 (0) 800 043 0881
F: +44 (0) 845 459 9832
E: info@directhealthcaregroup.com

EC **REP**

EU Authorised Representative, Importer, and Distributor:

Direct Healthcare Group Sverige AB,
Torshamnsgatan 35, SE-164 40, Kista
Sweden
T: +46 (0) 8 557 200

Australian Sponsor:

Direct Healthcare Group Pty Ltd.,
68 Howe Street, Osborne Park,
Western Australia 6017
T: +61 (0) 423 852 810



Issue 1
Date: February 2022

DHG-HEALTHCARE.COM