



Moving Health Forward

EN [User Manual](#)

DA [Brugervejledning](#)

SV [Användarhandbok](#)

NL [Gebruikershandleiding](#)

FR [Manuel d'utilisation](#)

LEJRELET

Tube 250



EN

Application


LEJRELET Tube 250 is a long soft cylinder filled with pressure relieving viscoelastic foam granules.

It is easy to shape and adapt Tube 250 for the individual user and care situation and thus possible to adapt Tube 250 to various situations and conditions.


The viscoelastic foam granules give great adaptability to the body and good support / pressure prevention. Further more, Tube 250 is very comfortable and calming for the bedridden person.

Examples for use of LEJRELET Tube 250:


- Support of the entire body in lateral position
- Positioning in a 30 degree angle
- Pressure relief for scapula and arms in supine position
- Support of legs and pressure relief of heels
- Comfort and calming positioning

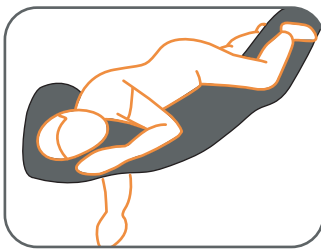


Support of the entire body in lateral position

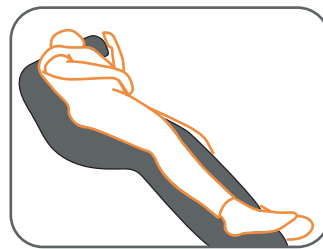

Positioning in a 30 degree angle

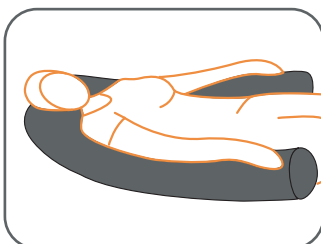

Pressure relief for scapula and arms

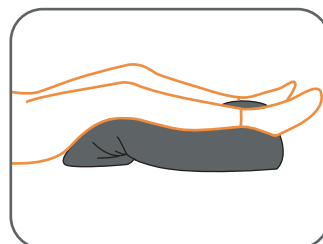

Support of legs and pressure relief of heels

Technical Information

Filling:

LEJRELET Tube 250 is filled with viscoelastic foam granules preventing decubitus.

Fabric:

- Waterproof
- Watervapour permeable
- Two way stretch
- Anti-bacteria treated
- Tight to house dust mite
- Biocompatible
- Oeko-TEX, class 1
- Fire-retardant to crib 5

Washing & Cleaning

Can be wiped with mild soap and disinfectant fluids or showered with boiling water.



Hand wash



Do not dry clean



Do not tumble dry



Do not bleach



Do not iron

Size: Ø 25 x L 250

Item no.: 5000001

Weight: 4700 g



Be aware that the patient is positioned such that airways are kept clear.

Other Symbols



Warning



Item no.



Year and month of manufacture



Name of manufacturer



CE marking:

The product complies with the Medical Device Regulation (EU) 2017/745

DA

Anvendelse

LEJRELET Tube 250 er en lang blød cylinder, fyldt med trykafastende skum granulat.


Den er let at forme og tilpasse den enkelte bruger og lejringsituation, hvilket giver et stort brugsområde.

Det viscoelastiske skumgranulat giver Tube 250 en god tyngde, hvilket har en beroligende effekt på den sengeliggende.


Tube 250 giver en høj grad af trykafastning og stor komfort for den sengeliggende.

Benyt LEJRELET Tube 250 til f.eks.:


- Støtte af hele kroppen i sideleje
- Lejring i ca. 30 graders vinkel
- Trykafastning for scapula og arme i rygleje
- Understøttelse af ben og aflastning af hæle
- Komfort og trykhedsskabende lejring

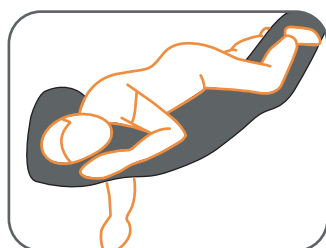


Støtte af hele kroppen i sideleje

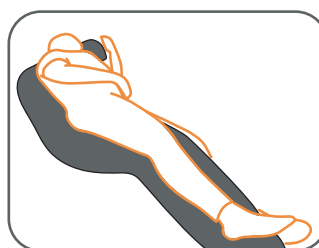

Lejring i ca. 30 graders vinkel

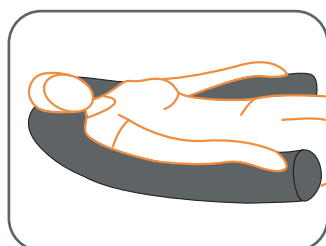

Trykafastning af scapula og arme i rygleje

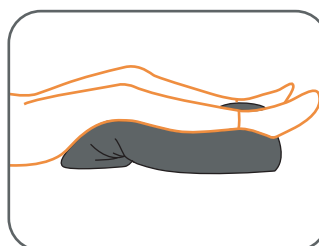

Understøttelse af ben og aflastning af hæle

Teknisk information

Fyld:

LEJRELET Tube 250 er tryksårforebyggende og fremstillet af viscoelastisk skum-granulat.

Betræk:

- Vandtæt
- Åndbart
- Strækbar i to retninger
- Antibakteriel
- Støvmide-tæt
- Bio-kompatibel
- Oeko-Tex, class 1
- Brandhæmmende

Vaske- og rengøringsanvisning

Kan aftørres med sæbevand og desinficerende væsker eller overhældes med kogende vand.



Vaskes i hånden



Tåler ikke rens



Må ikke tørretumbles



Tåler ikke blegning



Må ikke stryges

Størrelse: Ø 25 x L 250

Varenr.: 5000001

Vægt: 4700 g

HMI-nr.: 71863



Vær opmærksom på at den sengeliggende lejres således, at luftvejene holdes fri.

Øvrige symboler



Advarsel



Varenummer



Produktionsår- og måned



Fabrikantens navn



CE-mærkning:
Produktet opfylder alle krav i hht. Medical Device Regulation (EU) 2017/745

SV

Användning

LEJRELET Tube 250 är en lång, mjuk cylinder fylld med tryckavlastande skumgranulat.


Den är enkel att forma och anpassa till en enskild brukare och till gällande positioneringsituation, vilket bidrar till ett brett användningsområde.

Fyllningen ger tuben en bra tyngd vilket har en lugnande effekt på många brukare.


Tube 250 medger en hög grad av tryckavlastning samt betydande komfort för den som är sängliggande.

Använd LEJRELET Tube 250 till t.ex.:


- Stöd av hela kroppen vid sidoläge
- Positionering i ca 30 graders vinkel
- Tryckavlastning för skuldror och armar i rygläge
- Stöd under ben och avlastning av hälar
- Komfort och trygghetsskapande positionering

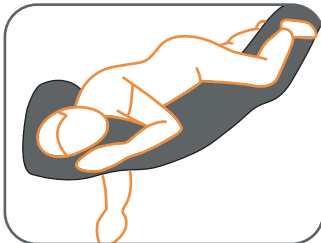


Stöd av hela kroppen vid sidoläge

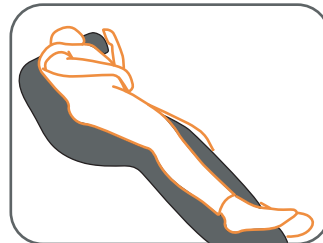

Positionering i ca 30 graders vinkel

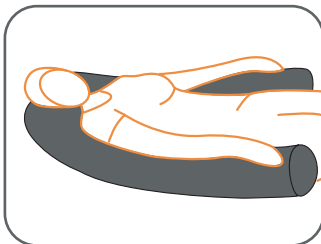

Tryckavlastning för skuldror och armar i rygläge

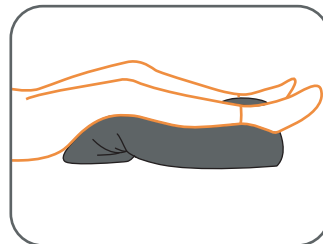

Stöd under ben och avlastning av hälar

Teknisk information

Fyllning:

LEJRELET Tube 250 är trycksårspåbyggande och tillverkad av viscoelastiskt skumgranulat.

Överdrag:

- Vattentätt
- Andningsbart
- Sträckbart i två riktningar
- Motverkar bakterier
- Dammkvalstertätt
- Bio-kompatibel
- Oeko-Tex, klass 1
- Brandhämmande

Tvätt- och rengöringsanvisning

Kan avtorkas med tvållösning och desinficerande vätskor eller avsköljas med kokande vatten.



Handtvätt



Ej kemtvätt



Får ej torktumlas



Ej blekmedel



Får ej strykas

Storlek: Ø 25 x L 250

Art nr.: 5000001

Vikt: 4700 g



Var uppmärksam på att den sängliggande positioneras så att luftvägarna hålls fria.

Andra symboler



Varning



Artikelnummer



Produktionsår
och månad



Tillverkarens
namn



CE-märkning:
Produkten uppfyller alla krav i enlighet med
Medical Device Regulation (EU) 2017/745

NL

Gebruik


LEJRELET Tube 250 is een lang zacht cilindervormig kussen, dat gevuld is met visco-elastische schuimkorrels.

Dit maakt Tube 250 stabiel, makkelijk te vormen en blijft de vulling daar waar je wilt. Bovendien geeft de vulling Tube 250 een goed gewicht, wat goede tactiele prikkels biedt. Daardoor heeft Tube 250 een kalmerend effect op veel gebruikers.


Tube 250 is langer dan andere cilindervormige kussens, waardoor het mogelijk is om de hele lichaam te positioneren, zelfs voor grotere gebruikers.

Gebruik LEJRELET Tube 250 naar bijv.:


- Ondersteuning van het gehele lichaam in laterale positie
- Positioneren in een 30 graden hoek
- Drukverlaging voor armen en schouderbladen
- Ondersteuning van de benen en drukverlaging van de hielen
- Comfortabele en rustgevende houding

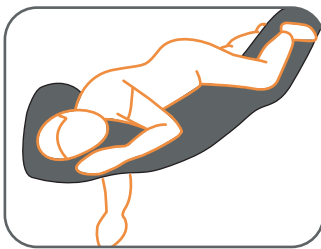


Ondersteuning van het gehele lichaam in laterale positie

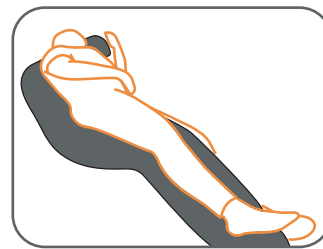

Positioneren in een 30 graden hoek

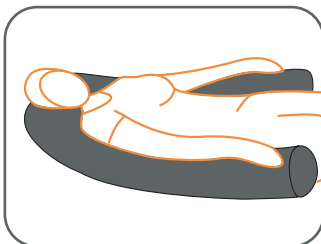

Drukverlaging voor armen en schouderbladen

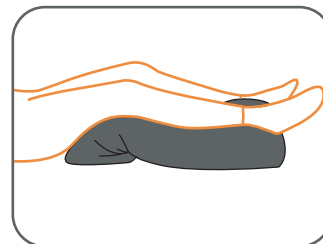

Ondersteuning van de benen en drukverlaging van de hielen

Technische informatie

Vulling:

LEJRELET Tube 250 is gevuld met viscoelastische schuimkorrels ter voorkoming van decubitus.

Stof:

- Waterbestendig
- Waterdamp doorlatend
- Antibacterieel behandeld
- Huisstofmijt dicht
- Bio compatibel
- Öko-TEX, klasse 1
- Brandvertragend tot Crib 5

Wassen en reinigen

LEJRELET Tube 250 kan worden afgenomen met milde zeep, desinfectantia of overgoten worden met kokend water.



Handwas



Niet droog reinigen



Niet drogen in een droogtrommel



Niet bleken



Niet strijken

Afmeting: Ø 25 x L 250

Item no.: 5000001

Gewicht: 4700 g



Houd er rekening mee dat de patiënt zo is gepositioneerd dat de luchtwegen vrij worden gehouden.

Andere symbolen



Waarschuwing



Item no.



Productiejaar en maand



Naam van de fabrikant



CE-keurmerk:

Het product voldoet aan de Medical Device Regulation (EU) 2017/745

FR

Utilisation

LEJRELET Tube 250 est un long cylindre souple rempli de granulés de mousse, soulageant les points de pressions.


Tube 250 est facile à former pour l'adapter à chaque besoin de positionnement, offrant ainsi un large éventail d'utilisation.

Les granulés de mousse viscoélastique donnent au Tube 250 un poids adapté pour un effet apaisant chez la personne alitée.


Tube 250 soulage très efficacement les points de pression et donne ainsi un grand confort à l'utilisateur.

LEJRELET Tube 250 est entre autres efficace pour:


- Soutien de l'ensemble du corps en décubitus latéral
- Positionnement avec un angle d'environ 30 degrés
- Soulagement de la pression sur l'omoplate et les bras, en décubitus dorsal
- Soutien des jambes et soulagement des talons
- Positionnement confortable et rassurant

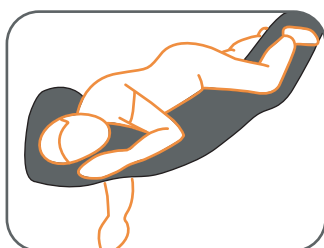


Soutien de l'ensemble du corps en décubitus latéral

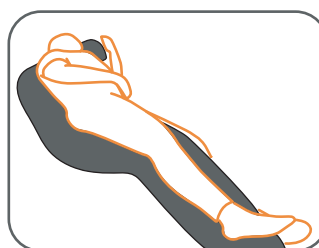

Positionnement avec un angle d'environ 30 degrés

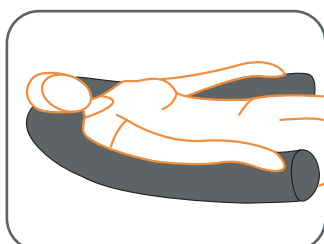

Soulagement de la pression sur l'omoplate et les bras, en décubitus dorsal

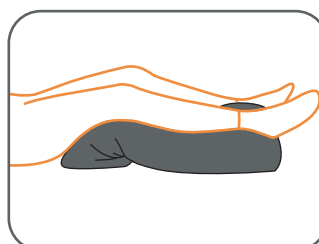

Soutien des jambes et soulagement des talons

Informations techniques

Rembourrage:

LEJRELET Tube 250 est rembourré de granulés de mousse viscoélastique, et prévient la formation d'escarres.

Housse:

- Imperméable
- Perméable à l'air
- Extensible dans deux directions
- Antibactérienne
- Traitée anti-acariens
- Biocompatible
- Oeko-Tex, classe 1
- Ignifugée

Instruction de lavage et de nettoyage

Peut être nettoyé avec de l'eau savonneuse, des liquides désinfectants ou de l'eau bouillante.



Lavage à la main



Nettoyage à sec interdit



Séchage en machine interdit



Aucun type de blanchiment possible



Repassage interdit

Dimensions: Ø 25 x L 250

Référence catalogue: 5000001

Poids: 4700 g



Attention, la personne alitée doit être positionnée sans blocage des voies respiratoires.

Autres symboles



Avertissement



Référence catalogue



Date de fabrication



Fabricant



Marquage CE:

Le produit répond à toutes les exigences conformément au règlement (UE) relatif aux dispositifs médicaux 2017/745



Moving Health Forward

PRESSURE ULCER PREVENTION
SAFE MOVING & HANDLING
SPECIALIST THERAPIES
BATHROOM SAFETY
RENTAL & SERVICE SOLUTIONS



Direct Healthcare Group Ltd
Withey Court, Western Industrial Estate
Caerphilly, United Kingdom
CF83 1BF

T: +44 (0) 800 043 0881
F: +44 (0) 845 459 9832
E: info@directhealthcaregroup.com

EC **REP**

EU Authorised Representative, Importer, and Distributor:

Direct Healthcare Group Sverige AB,
Torshamnsgatan 35, SE-164 40, Kista
Sweden
T: +46 (0) 8 557 200

Australian Sponsor:

Direct Healthcare Group Pty Ltd.,
68 Howe Street, Osborne Park,
Western Australia 6017
T: +61 (0) 423 852 810



Issue 1
Date: February 2022

DHG-HEALTHCARE.COM