



BRUGSANVISNING · USER MANUAL

XXL-Rehab Stand Tall gangbord  
XXL-Rehab Stand Tall

DK

UK



MAX 325 KG



DK

Kan med fordel anvendes til:

- Bariatriske brugere.
- Hospitalsbrug eller plejebolig.

UK

Ideal use for:

- Bariatric users.
- Hospitals or nursing homes.

BRUGSANVISNING · BRUGSANVISNING · BRUGSANVISNING · BRUGSANVISNING · BRUGSANVISNING

## Brugsanvisning for XXL-Rehab Stand Tall gangbord

### ⚠ ADVARSEL ⚠ ADVARSEL ⚠

- Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale.
- Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet.
- XXL-Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt.
- Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt XXL-Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele.
- XXL-Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra XXL-Rehab.

⚠ For at sikre korrekt brug af XXL-Rehab Stand Tall gangbord skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarslerne mærket med ⚠.

Desuden må gangbordet kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i dens brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade.

### ANVENDELSE

XXL-Rehab Stand Tall kan med fordel anvendes i plejeboliger og på hospitaler.

XXL-Rehab Stand Tall er beregnet til at give støtte og tryghed under gang for en person med en vægt op til 325 kg i indendørs omgivelser.

⚠ Anvendelse til brugere med en vægt over 325 kg kan medføre risiko for tipning, eller at gangbordet tager skade.

⚠ XXL-Rehab Stand Tall skal anvendes på et plant hårdt underlag med en maksimal hældning på 3,5° grader, da der ellers kan være risiko for tipning.

### BESKRIVELSE

XXL-Rehab Stand Tall er forsynet med 4 vandrette, gennemgående bolte (2 i hver side) til højdeindstilling af underarmsstøtter og håndstøtter. Boltene er låst med håndmøtrikker.

### INDSTILLING AF HØJDEN

Gangbordets underarmsstøtter og håndstøtter højdeindstilles ved at skru håndmøtrikkerne af og trække de to vandrette bolte helt ud af rammen, sætte underarmsstøtter/håndstøtter i ønsket position, stikke boltene gen-nem rammen og derefter skru håndmøtrikkerne fast på boltene.

⚠ Gangbordet må ikke benyttes før håndmøtrikkerne er skruet fast på boltene, da der ellers er fare for, at underarmsstøtter/håndstøtter kan løsne sig, så brugeren kan falde.

Vær opmærksom på, at boltenes buede hoveder ligger helt tæt an mod rammen, da der ellers kan være fare for, at håndmøtrikkerne ikke kan strammes korrekt og derfor løsner sig. Håndmøtrikkerne bør pege fremad på gangbor-det for at undgå skade på brugeren.

### UNDER BRUG

Bremserne låses ved at føre låsebøjlen ind over bremsehåndtagene, mens gangbordet holdes bremset.

⚠ Når gangbordet bruges som støtte skal bremserne låses, når brugeren rejser sig / sætter sig ned.

⚠ Bremserne kan være svære at aktivere for brugere med begrænsede fingerkræfter. Sådanne brugere skal instrueres i at bruge bremserne med begge hænder.

⚠ Gangbordet skal køres forsigtigt over forhindringer som dørtrin etc., da der ellers er risiko for tipning.

⚠ Gangbordet er ikke beregnet til at køre op og ned ad ramper, der hælder mere end 3,5°, da der ellers kan være risiko for tipning.

⚠ Gangbordet må kun køres i indendørs omgivelser på plant hårdt under-lag for at imødegå risiko for tipning.

### VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING

XXL-Rehab Stand Tall kan rengøres med vand og et almindeligt rengørings-middel.

Bolte og låsemøtrikker skal jævnligt efterses og evt. efterspændes.

⚠ Manglende overholdelse af eftersyn af bolte kan medføre fejlfunktion.

# • BRUGSANVISNING • BRUGSANVISNING • BRUGSANVISNING • BRUGSANVISNING • BRUGSANVISNING

**DK**

**UK**

## GARANTI

Garantiperioden for XXL-Rehab Stand Tall gangbord er 1 år fra købsdato. Fakturaen er "garantibevist".

Produkter, der er blevet anvendt til andre formål end den tilsigtede anvendelse; eller som har været genstand for forsømmelighed, misbrug, forkert opbevaring eller håndtering, fejlbetjening, uautoriserede modifikationer eller skader uden normal slitage, som er afgjort af XXL-Rehab, er ikke omfattet af denne garanti.

Hvis max brugervægt kapaciteten overskrides, vil garantien blive annulleret.

Enhver uautoriseret reparation af produktet / del af produktet, samt manipulation med nogle af komponenterne, vil ugyldiggøre garantien.

Brugervægt max.	325 kg
Total længde	73 cm
Total bredde	76 cm
Bredde mellem underarmspude fra midten til midten, justerbar	68-81 cm
Bredde indvendig	72 cm
Højde justerbar i 2,5 cm interval	100-130 cm
Vægt	20 kg
Sammenklappelig	Nej
Massive hjul	Ja
Ramme	Pulverlakeret krom molybdæn stål
Greb	PU skum
Underarmspuder	PU
Hjul	100 mm massive
ISO – klassifikation	ISO 12 06 12 - 06



XXL-Rehab Stand Tall gangbord er produceret og testet i overensstemmelse med de internationale DS/EN ISO 11199-3:2005 og DS/EN 12182:2000 standarder.

07/2014/JP

## PRODUCENT

XXL-Rehab  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
Tlf.: +45 70 25 25 22  
Fax: +45 70 25 25 44  
[www.xxlr-rehab.com](http://www.xxlr-rehab.com)



Scan koden og få flere produktinformationer.

## Instructions for XXL-Rehab Stand Tall

DK  
UK

### ⚠ CAUTION ⚠ CAUTION ⚠

- This product should not be used without proper instruction from a healthcare professional.
- Using the product for individuals weighing more than the maximum weight-bearing capacity may pose a risk for damaging the product.
- XXL-Rehab assumes no responsibility for any damage or injury caused by improper installation, assembly or use of this product.
- If components are damaged or missing, contact XXL-Rehab immediately. Do NOT use substitute parts.
- XXL-Rehab cannot be held liable for faults or accidents occurring after repairs by service staff without written authorisation from XXL-Rehab.

⚠ To ensure proper use of the XXL-Rehab Stand Tall, please read these instructions thoroughly before using the product. In doing so, pay particular attention to the warning notes marked with ⚠.

Also remember that in order to prevent the risk of injury to the user, the stand tall may be operated only by trained caregivers or aides or by individuals who have been instructed in its proper use.

### USE

The use of the XXL-Rehab Stand Tall is ideal in hospitals or nursing homes.

The XXL-Rehab Stand Tall is designed to provide support and security for persons weighing up to 325 kg when walking indoors.

⚠ Using the stand tall for persons weighing more than 325 kg may increase the risk of tilting or damage the stand tall.

⚠ The XXL-Rehab Stand Tall should be used on a plane hard surface with a maximum inclination of 3.5 degrees, as there may otherwise be a risk of tilting.

### DESCRIPTION

The XXL-Rehab Stand Tall is equipped with four horizontal, through-going bolts (two on each side) for height adjustment of forearm supports and hand supports. The bolts are locked with hand nuts.

### FINAL ASSEMBLY

The height of the stand tall's forearm supports and hand supports is adjustable by screwing the hand nuts off and pulling the two horizontal bolts out of the frame. Then set the forearm and hand supports at the appropriate position, push the bolts through the frame and screw on the hand nuts to secure the bolts.

⚠ The stand tall should not be used until the hand nuts have been screwed tightly onto the bolts, as there may otherwise be a risk of the forearm/hand supports loosening which may cause the user to fall.

Please ensure that the curved heads of the bolts abut closely against the frame, as there may otherwise be a risk that the hand nuts cannot be tightened correctly and therefore work loose.

The hand nuts ought to be facing forward on the stand tall to avoid injury to the user.

### DURING USE

Lock the brakes by bringing the locking bracket over the brake handles, while keeping the stand tall braked.

⚠ The brakes must be locked when the user gets up/sits down while using the stand tall as support.

⚠ The brakes may be difficult to activate for users with limited strength of fingers. Such users should be instructed in using the brakes with both hands.

⚠ The stand tall should be manoeuvred carefully across obstacles such as thresholds, as there may otherwise be a risk of tilting.

⚠ The stand tall is not designed for driving up and down ramps inclining more than 3.5 degrees, as there may otherwise be a risk of tilting.

⚠ The stand tall must only be used indoors and on plane hard surfaces to avoid the risk of tilting.

### MAINTENANCE AND CLEANING

The stand tall can be cleaned with water and ordinary cleaning agents.

Lock nuts and bolts must be checked on a regular basis and tightened, if necessary.

⚠ Non-compliance with the bolt inspection guidelines may lead to malfunction.

DK

UK

## WARRANTY

The XXL-Rehab Stand Tall is covered by one year warranty from the invoice date for materials and workmanship.

Products which have been used for purposes other than the intended use; or which have been subject to negligence, abuse, improper storage or handling, improper operation, unauthorized modifications or damages beyond normal wear and tear as determined by XXL-Rehab, are not covered by this warranty.

If weight capacity is exceeded, the warranty will be void.

Any unauthorized repairs to product / part, as well as tampering with any components, will void the warranty.

Maximum weight capacity is	325 kg
Total length	73 cm
Total width	76 cm
Width between underarm support, adjustable	68-81 cm
Internal width	72 cm
Adjustable height	100-130 cm
Weight	20 kg
Front wheel	100 mm
Rear wheel	125 mm
Frame	Powder-lacquered chromium molybdenum steel
Grip	PU foam
Underarm support	PU
ISO – classification	ISO 12 06 12 - 06



XXL-Rehab Stand Tall is produced and tested in compliance with international standards DS/EN ISO 11199-3:2005 and DS/EN 12182:2000.

07/2014/JP

## MANUFACTURER

XXL-Rehab  
Fuglebækej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Denmark  
Tlf.: +45 70 25 25 22  
Fax: +45 70 25 25 44  
[www.xxl-rehab.com](http://www.xxl-rehab.com)




# XXL REHAB®

Strongly engineered and functionally designed exclusively for bariatric users!




XXL-Rehab Minimaxx

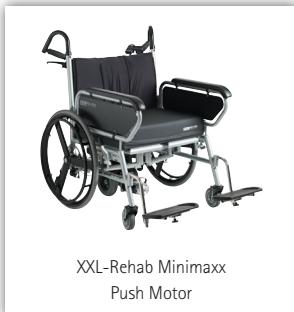

XXL-Rehab Minimaxx  
Push Motor



XXL-Rehab Manual  
Wheelchair - The Eclipse

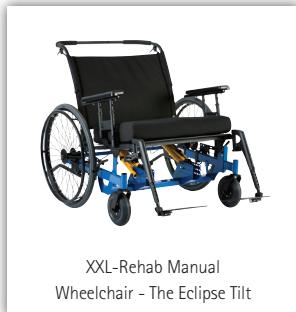

XXL-Rehab Manual  
Wheelchair - The Eclipse Tilt



XXL-Rehab  
HD Electric Wheelchair




XXL-Rehab Wheelchair Cushions



XXL-Rehab Shower Bench



XXL-Rehab  
Bedside commode

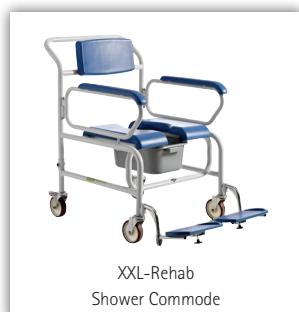

XXL-Rehab  
Shower Commode



XXL-Rehab  
Shower Commode Wheeler



XXL-Rehab  
Shower Commode Rise N Recline



XXL-Rehab  
Shower Commode Tilt



XXL-Rehab Barton Transferstol



XXL-Rehab Patient/Dinner chair



XXL-Rehab Rollator King




XXL-Rehab Rollator Support



XXL-Rehab Stand Tall



XXL-Rehab Bariatric walking frame

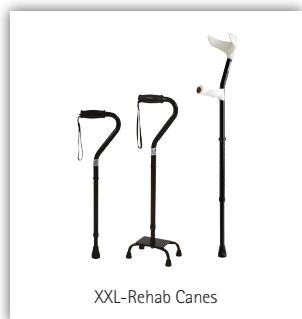

XXL-Rehab Canes



XXL-Rehab Multifunktional Scale




XXL-Rehab Lift and Slings



XXL-Rehab 400 bariatric hospital bed



XXL-Rehab Home Care Bed

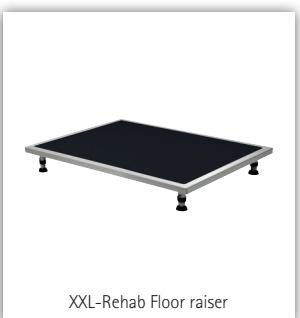

XXL-Rehab Floor raiser



XXL-Rehab  
Comfort Foam Mattress



XXL-Rehab  
Low Air Loss mattress



XXL-Rehab  
Alternating mattress



XXL-Rehab Bariatric suit



## BRUGSANVISNING · USER MANUAL



**XXL REHAB®**

XXL-Rehab · Fuglebækvej 1D · DK-2770 Kastrup · Denmark  
Telephone: +45 7025 2522 · Fax: +45 7025 2544  
[info@xxl-rehab.com](mailto:info@xxl-rehab.com) · [www.xxl-rehab.com](http://www.xxl-rehab.com)