

**Carico massimo: 300kg**

Gli anelli di estensione AdjustmentLoops vengono usati in particolare per allungare gli anelli delle imbracature fino a raggiungere la lunghezza desiderata, ad esempio per ottenere una posizione maggiormente sdraiata o una posizione seduta maggiormente diritta, o per migliorare l'equilibrio, come nel caso di pazienti emiplegici.

Il sistema RoMedic è suddiviso in quattro categorie: trasferimento, riposizionamento, supporto e sollevamento.



## Controllo funzionale

Controllare regolarmente le condizioni e il funzionamento dell'imbracatura, in particolare dopo ogni lavaggio.

Controllare che il tessuto non sia usurato, danneggiato o sbiadito.

In presenza di segni di usura, il prodotto non deve essere utilizzato e deve essere smaltito in caso di dubbi sulla sua sicurezza.



## Leggere sempre le istruzioni



Leggere le istruzioni di tutti i dispositivi di assistenza utilizzati per il trasferimento del paziente.

Scegliere con attenzione la taglia dell'imbracatura, in modo da evitare disagi e il rischio che il paziente scivoli fuori dall'imbracatura. Se l'imbracatura è troppo larga, sussiste il rischio che il paziente scivoli fuori.

Non lasciare il paziente da solo durante il sollevamento.


Applicare gli anelli posteriori dell'imbracatura prima di applicare gli anelli del supporto gambe. Usare sempre un bilancino appropriato.

## Istruzioni per l'uso degli anelli AdjustmentLoops

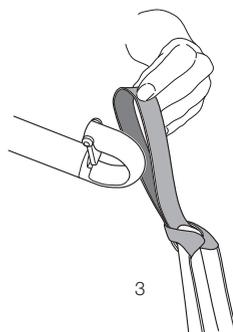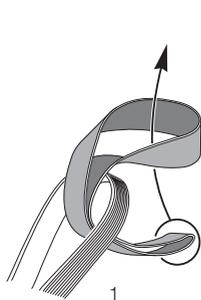


1. Annodare l'anello AdjustmentLoop attorno all'anello dell'imbracatura.
2. Stringerlo saldamente attorno all'anello dell'imbracatura.
3. Agganciare gli anelli al bilancino. Iniziare il sollevamento, e poi fermarlo in modo da verificare che tutto sia a posto prima di sollevare il paziente nella posizione desiderata.

## Applicazione alternativa degli anelli AdjustmentLoops

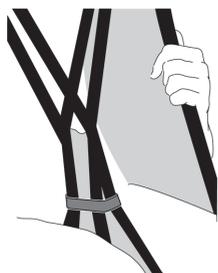

Gli anelli AdjustmentLoops possono essere applicati anche ai supporti per le gambe in modo da ridurre l'apertura e da evitare che il paziente scivoli fuori dall'imbracatura.

### Misura:

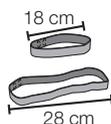

12 cm / 22 cm



### Materiale:

Poliestere: materiale resistente a basso attrito.

### Pulizia e manutenzione del prodotto:

Leggere l'etichetta del prodotto.



Non usare detersivi.  
Per garantire la massima durata del materiale, asciugare l'imbracatura appesa o nell'asciugatrice a basso calore.

In caso di dubbi, contattare il vostro rappresentante Handicare per provare i prodotti, per consulenza ed informazioni. Per ulteriori informazioni, chiedete al vostro specialista di prodotto o rappresentante, oppure visitate il sito [www.handicare.com](http://www.handicare.com). Assicuratevi di avere sempre la versione più aggiornata del manuale. I manuali sono disponibili e scaricabili dal nostro sito internet [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

SWEDEN

