



Commode/shower chairs soft seat Shower chairs textile seat Swimming pool hoist chair

Linido

Manual - English

Manual - Svenska

Manual - Norsk

Manual - Danske

Käyttöohje - Suomi

Gebrauchsanweisung - Deutsch

Handleiding - Nederlands

Manual - Français


Manual - Italiano

Manual - Español



REF: LI2135, LI2136, LI2137, LI2138, LI2139, LI2140, LI2141, LI2142

MAX: 200 kg/440 lbs

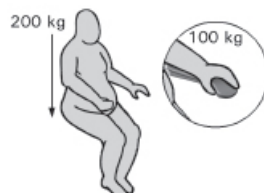

**EN Visual inspection**

Inspect the product regularly. Check to ensure that material is free from damage.

SE Visuell inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av produkten. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

NO Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Kontroller at materialet er helt og uten skader.

DK Visual inspektion

Foretag regelmæssige funktionskontroller af sengebordet. Kontroller, at materiale er helt og ikke udviser tegn på beskadigelse.

FI Silmämääräinen tarkastus

Tarkasta tuotteen toimivuus säännöllisesti. Tarkasta, ettei materiaalissa ole mitään vaurioita.

DE Sichtprüfung

Unterziehen Sie das Hilfsmittel regelmäßigen Funktionskontrollen. Vergewissern Sie sich, daß das Material unbeschädigt ist.

NL Visuele controle

Inspecteer het product regelmatig. Controleer op mogelijke beschadigingen van het materiaal.

FR Inspection visuelle

Effectuer des inspections régulières du fonctionnement du produit. Vérifier que le matériau est entièrement exempt de dommages.

IT Ispezione visiva

Testare il funzionamento del prodotto regolarmente. Verificare che il materiale non sia danneggiato.

ES Inspección visual

Realice periódicamente un control de funcionamiento del producto. Asegúrese de que el material no presente ningún tipo de desperfecto.

EN Before use

Ensure that the product is correctly mounted/installed.

SE Före användning

Kontrollera att produkten är rätt monterad/installerad.

NO Før bruk

Kontroller at produktet er korrekt installert.

DK Før brug

Kontroller, at produktet er korrekt installeret.

FI Ennen käyttöä

Tarkasta, että tuote on asennettu oikein.

DE Vor der Benutzung

Prüfen Sie das Produkt auf korrekte Montage.

NL Voor gebruik

Zorg ervoor dat het product juist is gemonteerd.

FR Avant l'utilisation

Vérifier que le produit est correctement installé.

IT Prima dell'uso

Verificare che il prodotto sia installato correttamente.

ES Antes de su uso

Compruebe que el producto esté correctamente instalado.

**EN Always read the manual**

Always read the manual.

Keep the manual where it is easily accessible for users of the product.

SE Läs alltid manualen

Läs alltid manualen.

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

NO Les alltid manualen

Les alltid manualen.

Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

DK Læs altid manualen

Læs altid manualen.

Opbevar manualen tilgængelig for brugere af produktet.

FI Lue aina käyttöohje

Lue aina käyttöohje.

Säilytä käyttöohje tuotteen käyttäjien saatavilla.

DE Lesen Sie stets die gebrauchsanweisung

Lesen Sie stets die gebrauchsanweisung.

Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.

NL Lees altijd de handleiding

Lees altijd de handleiding.

Bewaar de handleiding zo dat deze voor gebruikers van het product altijd beschikbaar is.

FR Toujours lire le manuel

Toujours lire le manuel.

Conserver le manuel pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.

IT Leggere sempre il manuale

Leggere sempre il manuale.


Tenere il manuale delle istruzioni in un luogo facilmente accessibile agli operatori che utilizzano il prodotto.

ES Lea siempre el manual

Lea siempre el manual.

Guarde el manual en un lugar accesible para el usuario del producto.

Using/Användning/Bruk/Brug/Käyttö/Anwendung/Gebruiken/Utilisation/Utilizzo/Empleo

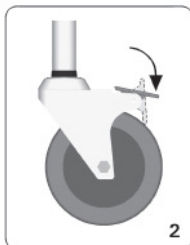

EN For optimum safety: tighten expander bolts on all wheels before use and again after 4 weeks of use. Check regularly thereafter.

SE För högsta säkerhet: dra åt expanderskruvarna på samtliga hjul före användning och igen efter 4 veckors användning. Kontrollera sedan regelbundet.

NO For størst mulig sikkerhet, stram til ekspansjonsboltene på samtligte hjul før bruk og stram/sjekk dem igjen etter 4 ukers bruk. Kontroller deretter regelmessig.

DK For maksimal sikkerhed: Fastspænd udvidelses bolte på alle hjul før brug - efterspænd efter 4 ugers brug. Check jævnligt herefter.

FI Käyttöturvallisuuden takaamiseksi: kiristä kaikki pyöräin kiinnityspultit ennen käyttöönottoa ja uudelleen 4 viikon käytön jälkeen. Säännöllisesti tarkistaa myöhemmin.







DE Um die optimale Sicherheit zu gewährleisten überprüfen Sie für Verwendung die Inbusschrauben der Lenkrollen auf festen Sitz. Diese Überprüfung sollte nach 4 Wochen wiederholt werden. Nachher regelmäßig kontrollieren.

NL Voor optimale veiligheid: Vooraf en na ongeveer 4 weken gebruik de bouten van de expander van ieder wiel aandraaien. Daarna regelmatig controleren.

FR Pour une sécurité optimale, serrer les vis de chacune des 4 roues avant utilisation et de nouveau après 4 semaines d'utilisation. Il est important de vérifier régulièrement le bon serrage des roues.

IT Per una sicurezza ottimale; stringere il perno ad espansione all'interno di ciascuna delle ruote prima dell'uso e successivamente dopo 4 settimane di utilizzo. Controllare regolarmente in seguito.

ES Para máxima seguridad controlar el tornillo de las 4 ruedas antes de comenzar a usar la silla y después de 4 semanas. Posteriormente controlar regularmente.

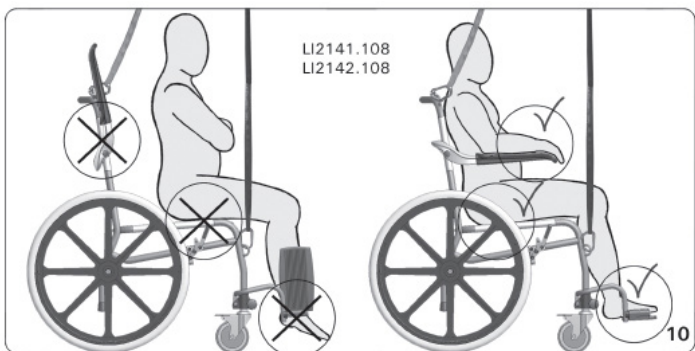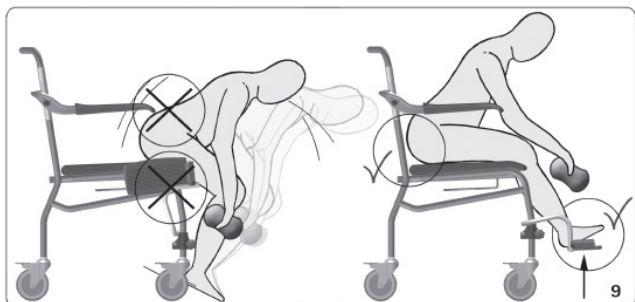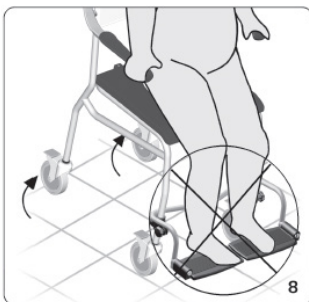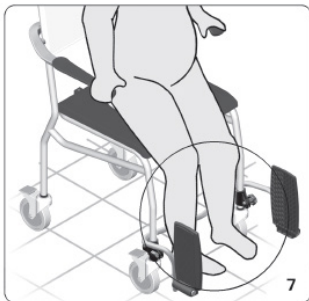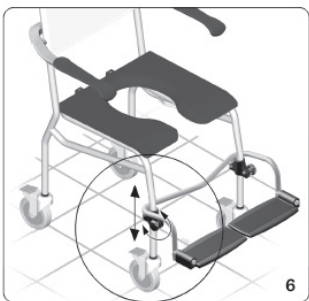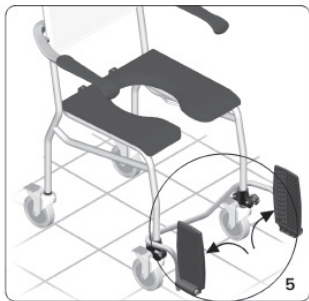

Accessories/Tillbehör/Tilbehør/Lisävarusteet/Zubehör/Accessoires/Accessori/Accessorios

Art.no.	Product name	Description
LI0121.904	Soft toilet seat	Toilet seat with open front, to replace original seat
LI0121.905	Soft toilet seat	Toilet seat with closed front, to replace original seat
LI09506.306	Insert for soft toilet seats	For toilet seats LI0121.904 and LI0121.905
LI02979.411	Bedpan	With lid and handle, stainless steel
LI02979.430	Bucket	With lid and handle, stainless steel

Maintenance/Rengöring/Vedlikeholdsråd/Vedligeholdelse/Hoito-ohje/Pflegeanleitung/Onderhoud/Conseils d'entretien/Cura del prodotto/Cuidado del producto

EN Clean regularly with normal household detergent. Do not use aggressive cleaners. Direct Healthcare Group is not liable for damage caused by improper mounting/use.

SE För rengöring använd normalt och inte aggressivt rengöringsmedel. Direct Healthcare Group står ej ansvarig för skador som uppstår pga. felaktig montering/användning.

NO For rengjøring bruk nøytralt/normalt rengjøringsmiddel og ikke etsende midler. Direct Healthcare Group står ikke ansvarlig for skader som kan oppstå pga feilaktig motering/bruk.

DK Efter brug tjernes sæberester. Dar må ikke anvendes hårde rengøringsmidler. Direct Healthcare Group er ikke ansvarig for skader opstået pga. torkert montering/brug.

FI Puhdista säännöllisesti käyttäen kodin yleispuhdistusaineita. Älä käytä voimakkaita liuottimia. Direct Healthcare Group ei ole vastuussa vahingosta, joka johtuu virheellisestä asennuksesta tai käytöstä.

DE Beseitige nach Benutzung Seifenreste. Kein aggressive Reinigungsmittel verwenden. Direct Healthcare Group ist nicht haftbar für Schäden die durch unsachgemäße Befestigung/Benutzung oder falsches Befestigungsmaterial entstanden sind.

NL Verwijder na gebruik zeepresten. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen. Direct Healthcare Group is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuiste bevestiging/gebruik.

FR Laver régulièrement avec un détergent ménager. Ne pas utiliser de détergent agressif. Direct Healthcare Group n'est pas responsable des dommages causés par un montage/utilization incorrect.

IT Pulire periodicamente, utilizzando detersivi di uso corrente per la casa. Non usar prodotti abrasivi e corrosivo. Direct Healthcare Group non è responsabile per i danni causati dal montaggio/uso improprio.

ES Limpiar regularmente con cualquier detergente no corrosivo. No usar lejía ya que es muy corrosivo. Direct Healthcare Group no se hace responsable de cualquier deterioro causado por un montaje/uso incorrecto.

Dimensions/Måttbeskrivning/Målbeskrivelse/Mitat/Maßbeschreibung/Afmetingen/ Dimensioni/Dimensiones



Article no:

LI2135.011 - Commode/shower chair soft seat, with closed front, 610 mm

LI2135.111 - Commode/shower chair soft seat, with closed front, 530 mm

LI2135.021 - Commode/shower chair soft seat, with open front, 610 mm

LI2135.121 - Commode/shower chair soft seat, with open front, 530 mm

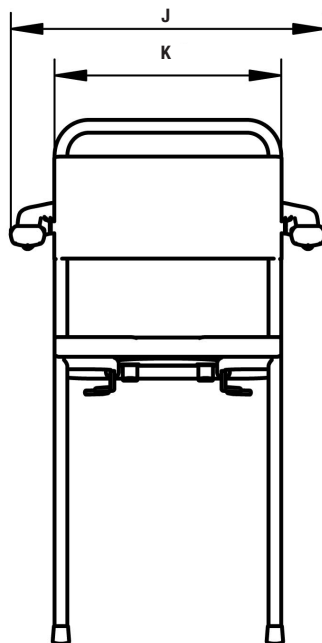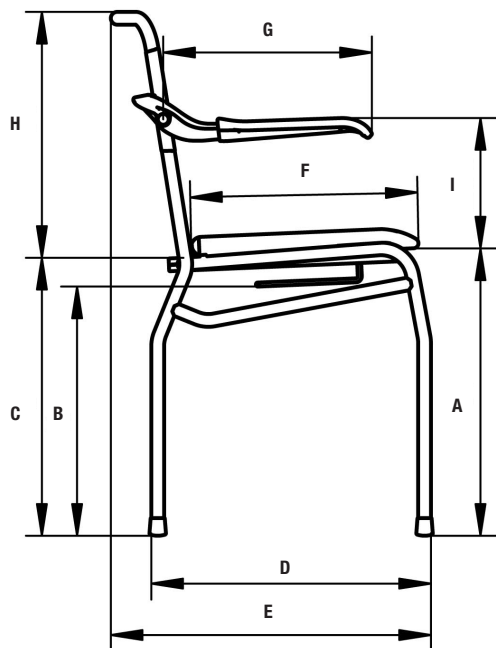

	A	B	C
LI2135.011/LI2135.012	570 mm/22.4"	495 mm/19.5"	550 mm/21.7"
LI2135.111/LI2135.121	490 mm/19.3"	415 mm/16.3"	470 mm/18.5"

	mm	inch
D	555	21.9"
E	635	25"
F	450	17.7"
G	415	16.3"
H	490	19.3"
I	250	9.8"
J	625	24.6"
K	450	17.7"

Article no:

LI2136.011 - Commode/shower chair soft seat, mobile with closed front and without footrests, 610 mm

LI2136.111 - Commode/shower chair soft seat, mobile with closed front and without footrests, 530 mm

LI2136.021 - Commode/shower chair soft seat, mobile with open front and without footrests, 610 mm



LI2136.121 - Commode/shower chair soft seat, mobile with open front and without footrests, 530 mm

LI2137.011 - Commode/shower chair soft seat, mobile with closed front, 610 mm

LI2137.111 - Commode/shower chair soft seat, mobile with closed front, 530 mm

LI2137.021 - Commode/shower chair soft seat, mobile with open front, 610 mm

LI2137.121 - Commode/shower chair soft seat, mobile with open front, 530 mm

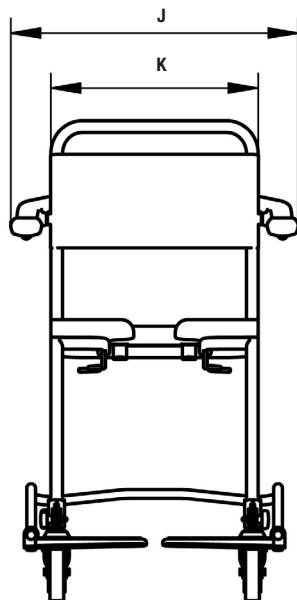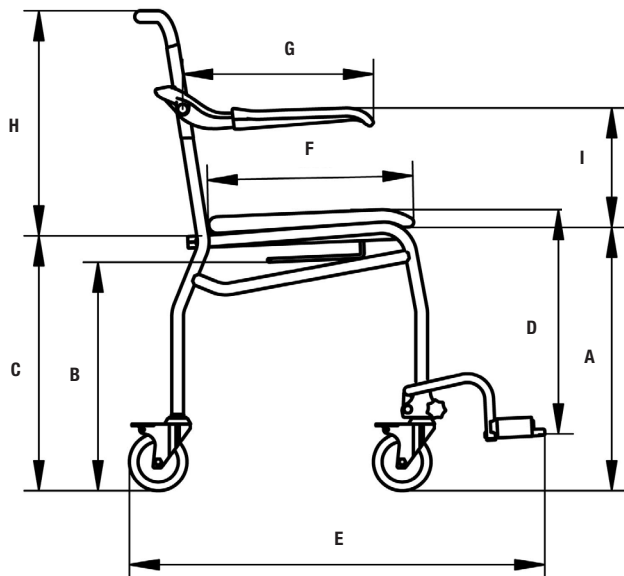

	A	B	C
LI2136.011/LI2136.021 LI2137.011/LI2137.021	570 mm/22.4"	495 mm/19.5"	550 mm/21.7"
LI2136.111/ LI2136.121 LI2137.111/ LI2137.121	490 mm/19.3"	415 mm/16.3"	470 mm/18.5"

	D
LI2137.011/LI2137.021	320-480 mm/12.6"-18.9"
LI2137.111/ LI2137.121	320-400 mm/12.6"-15.7"

	mm	inch
E	900	35.4"
F	450	17.7"
G	415	16.3"
H	490	19.3"
I	250	9.8"
J	625	24.6"
K	450	17.7"


Article no:

LI2138.011 - Commode/shower chair soft seat, self-propelled with closed front, 610 mm

LI2138.111 - Commode/shower chair soft seat, self-propelled with closed front, 530 mm

LI2138.021 - Commode/shower chair soft seat, self-propelled with open front, 610 mm

LI2138.121 - Commode/shower chair soft seat, self-propelled with open front, 530 mm

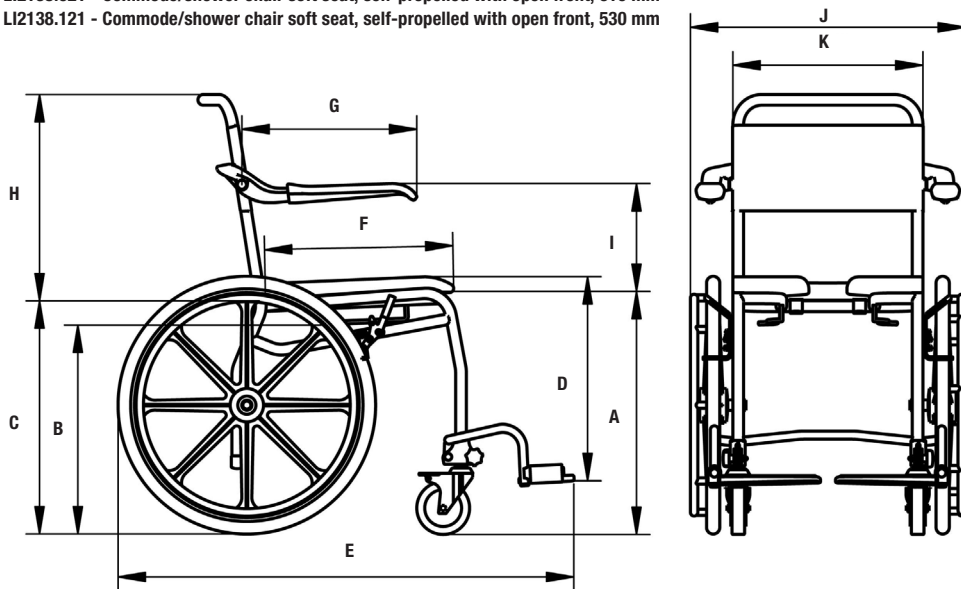



	A	B	C	D
LI2138.011/LI2138.021	570 mm/22.4"	495 mm/19.5"	550 mm/21.7"	320-480 mm/12.6"-18.9"
LI2138.111/LI2138.121	490 mm/19.3"	415 mm/16.3"	470 mm/18.5"	320-400 mm/12.6"-15.7"

	mm	inch
E	1080	42.5"
F	450	17.7"
G	415	16.3"
H	490	19.3"
I	250	9.8"
J	650	25.6"
K	450	17.7"

Article no:

LI2139.000 - Shower chair textile seat, 640 mm

LI2139.100 - Shower chair textile seat, 490 mm

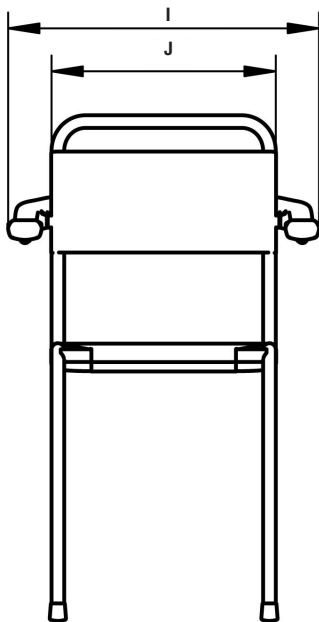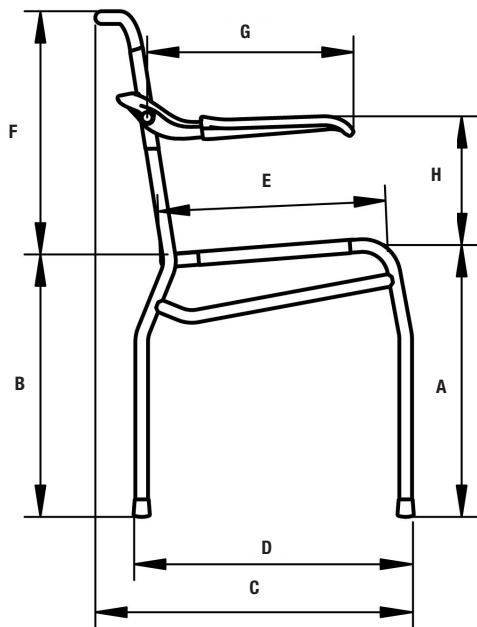

	A	B
LI2139.000	540 mm/21.3"	520 mm/20.5"
LI2139.100	490 mm/19.3"	470 mm/18.5"

	mm	inch
C	635	25"
D	555	21.9"
E	450	17.7"
F	490	19.3"
G	415	16.3"
H	250	9.8"
I	625	24.6"
J	450	17.7"



Article no:

LI2140.000 - Shower chair textile seat, mobile without footrests, 540 mm

LI2140.100 - Shower chair textile seat, mobile without footrests, 490 mm

LI2141.000 - Shower chair textile seat, mobile, 540 mm

LI2141.100 - Shower chair textile seat, mobile, 490 mm

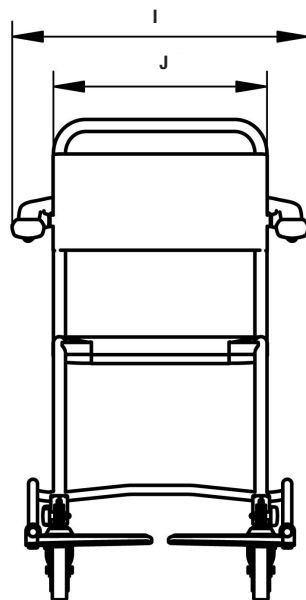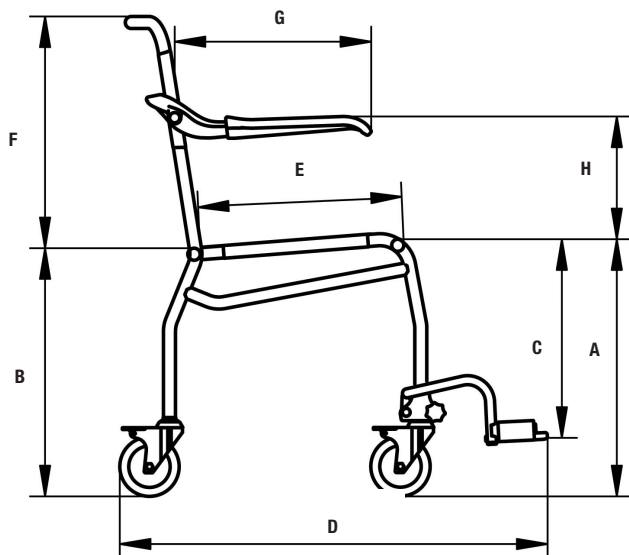


	A	B
LI2140.000/ LI2141.000	540 mm/21.3"	520 mm/20.5"
LI2140.100/ LI2141.100	490 mm/19.3"	470 mm/18.5"

	C
LI2141.000	280-410 mm/11"-16.1"
LI2141.100	280-360 mm/11"-14.2"

	mm	inch
D	900	35.4"
E	450	17.7"
F	490	19.3"
G	415	16.3"
H	250	9.8"
I	625	24.6"
J	450	17.7"

Article no:
 LI2141.108 - Swimming pool hoist chair, mobile

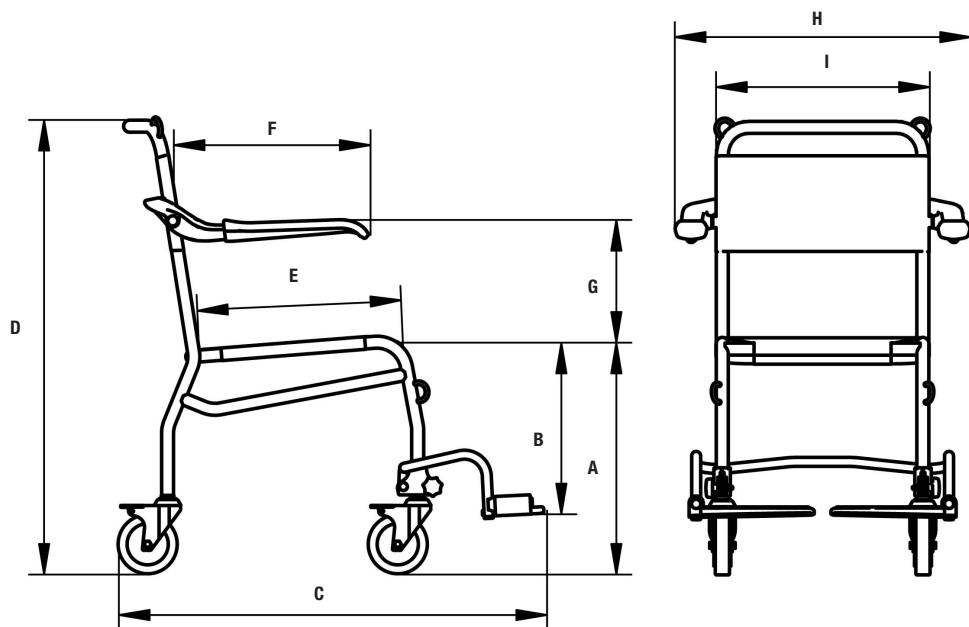


	mm	inch
A	490	19.3"
B	280-360	11"-14.2"
C	900	35.4"
D	960	37.8"
E	450	17.7"
F	415	16.3"
G	250	9.8"
H	625	24.6"
I	450	17.7"

Article no:

LI2142.000 - Shower chair textile seat, self-propelled, 540 mm

LI2142.100 - Shower chair textile seat, self-propelled, 490 mm

LI2142.108 - Swimming pool hoist chair, self-propelled

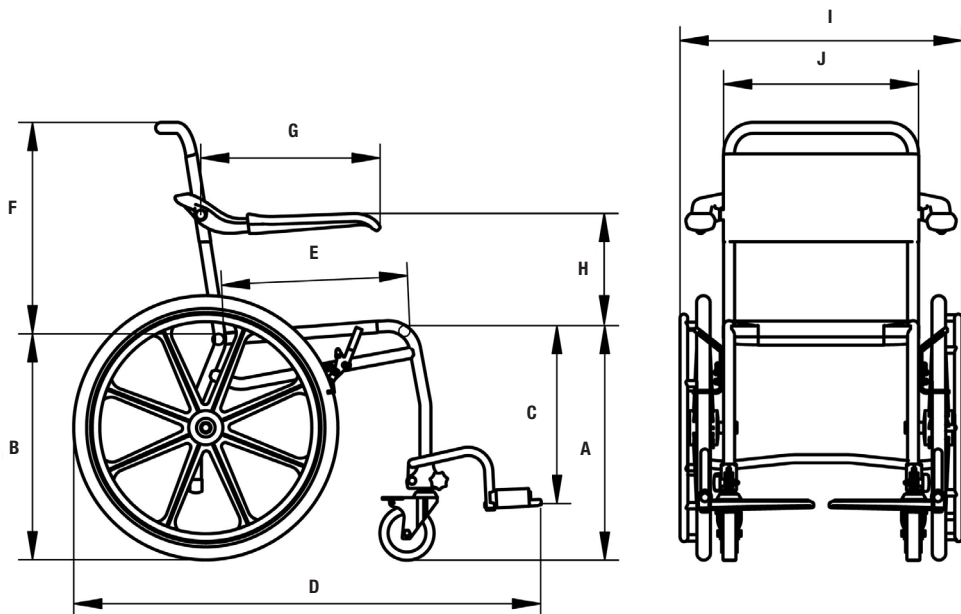

	A	B	C
LI2142.000	540 mm/21.3"	520 mm/20.5"	280-410 mm/11"-16.1"
LI2142.100/LI2142.108	490 mm/19.3"	470 mm/18.5"	280-360 mm/11"-14.2"

	mm	inch
D	1080	42.5"
E	450	17.7"
F	490	19.3"
G	415	16.3"
H	250	9.8"
I	650	25.6"
J	450	17.7"

Linido

Direct Healthcare Group's Linido product line is a wide range of high quality safety products designed to provide ergonomic support, comfort and increased independence for the user in various bathing, showering and toileting situations.

Contact your local distributor if you have any questions about the product and its use.

See www.directhealthcaregroup.com for a complete list of distributors.

Always make sure that you have the right version of the manual.

The most recent editions of manuals are available for downloading from our website, www.directhealthcaregroup.com

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Direct Healthcare Group B.V.
Weteringweg 9,
2641 KM Pijnacker, The Netherlands
Tel: +31 (0)15 369 54 40
Fax: +31 (0)15 369 71 64
www.directhealthcaregroup.com
info.nl@directhealthcaregroup.com

Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35,
SE-164 40 Kista, Sweden
Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299
www.directhealthcaregroup.com
info.se@directhealthcaregroup.com