

Max: 300kg

De AdjustmentLoops worden vooral gebruikt voor het verlengen van de lussen van de tilband; bijv., voor een positie die meer liggend of rechtop zittend is, of voor een betere balans, bijvoorbeeld bij patiënten met een halfzijdige verlamming.

SystemRoMedic omvat vier categorieën: verplaatsen, repositioneren, ondersteunen en tillen.



## Functionele inspectie

Controleer de toestand en werking van de tilband regelmatig, en altijd na wassen.

Controleer of dat het materiaal niet is versleten, beschadigd of gebleekt. Als er tekenen van slijtage zijn moet het product worden getest op sterkte en worden weggegooid als er twijfel is aan de veiligheid.



## Lees altijd de instructies


Lees de instructies voor alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmaterialen.

Kies de maat tilband zorgvuldig zodat ongemak wordt voorkomen en de patiënt niet uit de band kan glijden. Als de band te groot is bestaat het risico dat de patiënt er uit kan glijden.

Laat een patiënt die opgetild is nooit zonder toezicht.


Breng eerst de ruglussen van de tilband aan en daarna de beensteunlussen. Gebruik altijd een goedgekeurd tiljuk.

## Instructies voor het gebruik van de AdjustmentLoop

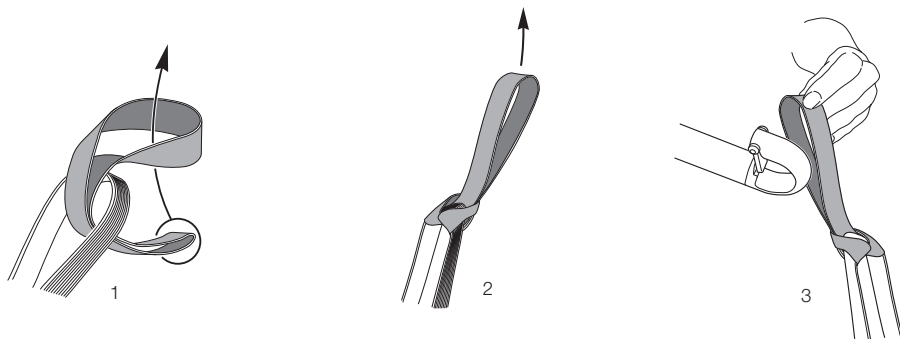

1. Haal de AdjustmentLoop door de bandlus.
2. Trek hem goed vast rond de bandlus.
3. Hang de lussen aan het tijkuk. Laat de lift omhoog gaan en stop dan om te controleren of alles naar behoren is voordat er naar de gewenste positie wordt getild.

## Alternatieve plaatsing van de AdjustmentLoop

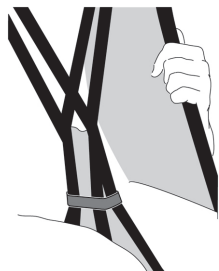

De AdjustmentLoop kan ook worden gebruikt bij de beensecties om de opening minder groot te maken zodat de patiënt niet uit de tilband kan glijden.

### Maat:



### Materiaal:

Polyester: Duurzaam materiaal met weinig wrijving.

### Onderhoud van het product:

Lees het productlabel.



Gebruik geen wasmiddel.  
Hang de band, voor een maximale levensduur, op om te drogen of droog hem bij lage temperatuur in de droger.

Neem bij vragen over product-trials, advies of informatie contact op met uw Handicarevertegenwoordiger.  
Neem, als u meer informatie nodig hebt, contact op met uw verplaatsingsspecialist of ga naar [www.handicare.com](http://www.handicare.com). Zorg dat u altijd beschikt over de meest recente versie van de handleiding. Handleidingen kunnen worden gedownload van onze website: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB  
Veddestav. 15. Box 640  
SE-175 27 Järfälla  
SWEDEN  
Tel: +46 (0)8 -557 62 200  
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

