


Maks: 570 kg



BariVest er en løftevest som er laget for gåtøring med personer som veier 180 kg eller mer. Den kan benyttes både til mobile og stasjonære løftere med firepunktsbøyle eller til BariTurn. BariVest er designet med et bakstykke, et framstykke og et smalere parti på midten for god passform ved skrittet. Den har to opphengsløkker både bak og foran samt belter i tre nivåer.

I SystemRoMedic finnes et bredt utvalg av funksjonelle, komfortable og høykvalitative løfteseler, spesielt tilpasset ulike typer av løft og for brukere med ulike behov. Løfteselene finnes i flere ulike materialer og størrelser. Alle modeller er både sikre og meget lette i bruk. Valget av modell og materiale avgjøres ut fra løftesituasjonen og brukerens behov.

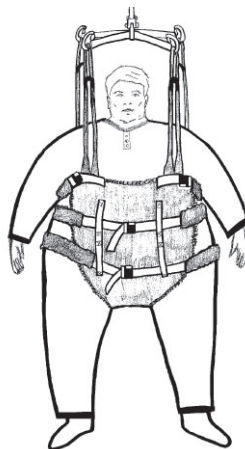

## Kontroll av funksjon

### Visuell og mekanisk inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av løfteselen. Kontroller alltid etter vask. Kontroller at sømmer og materiale er helt og skadefritt. Kontroller om materialet er utsatt for slitasje eller er blitt bleket. Belast og kontroller at spenner og håndtak holder når du drar kraftig i selen. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



## Les alltid manualen

Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.


Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

La aldri brukeren være alene under forflytningmomentet.

Unngå utglidningsrisiko eller ubehag ved å være grundig når man prøver løfteselen. Huk først på løfteselens rygggløkker på løftebøylen, huk deretter på beinløkkene. Benytt en utprøvd løftebøyle.

Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammensatte løfteenheten som er avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt din forhandler hvis du har spørsmål.

## Produktbeskrivelse av BariVest

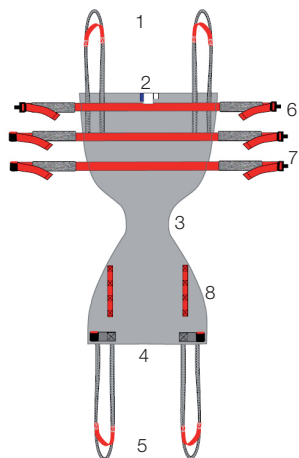

BariVest er utformet med et bakstykke, et framstykke og et smalere parti på midten for god passform ved skrittet.

Den har to opphengsløkker både bak og foran som samtlige monteres på løftebøylen/løftebøyler.

Det finnes også belter på tre nivåer.

Det øverste beltet festes med spennen på begge sider foran for enkel justering og de to nedre beltene har en spenne som festes sammen på midten foran.

### BariVest består av:

1. Bakre løfteløkker
2. Bakstykke
3. Smalt parti
4. Framstykke
5. Fremre løfteløkker
6. Øvre belte med spenne på begge sider av framstykket.
7. Tre belter med spennen på midten foran.
8. Styreløkker for de nedre beltene.

## Plassering av BariVest på brukere




### Sittende på sengekanten:

Vær nøye med at frem- og bakstykket er plassert riktig vei, produktetiketten sitter på bakstykket.

Brukeren lener seg mot den ene siden av sengen og BariVest plasseres midt under setet så langt under brukeren som mulig. Den smale delen er plassert i midten under ved skrittet.

Når BariVest er plassert korrekt, setter brukeren seg opp igjen og framstykket trekkes opp over magen så høyt som det er mulig. Kontroller at BariVest er jevn fordelt med like mye bak som foran.

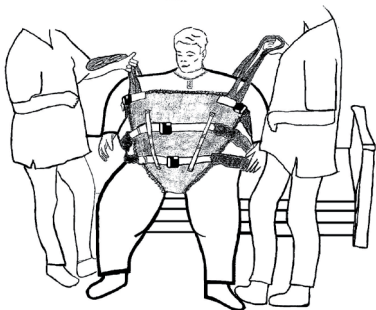


Knepp de øverste beltene først og så de to nedre beltene.

Stram til de øverste beltene slik at de gir god støtte.


Juster de nedre beltene slik at de sitter bekvemt. Samtlige belter kan behøve etterjustering når brukeren har reist seg opp.

## Oppreisning til stående

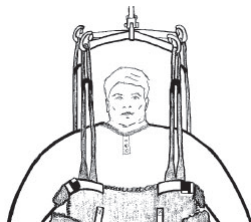

### Montering på firepunktsbøylen:

Ved oppreisning i mobilløfter eller med stasjonær løftemotor anbefales det å bruke firepunktsbøyle. Fest først de bakre løfteløkkene på løftebøylens bredeste side og deretter de fremre løfteløkkene på den smalere siden.

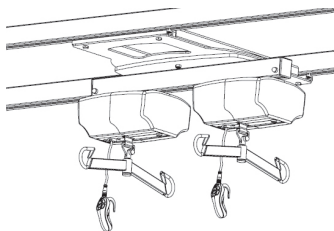


### Montering på BariTurn:

BariTurn er en dreieskive som muliggjør gåtrening med to løftemotorer. Løftevesten kan monteres på forskjellige måter, avhengig om man vil utnytte plassen i lengden eller i bredden.

Alternativ 1: Fest løfteløkkene fra bakstykket på den ene løftebøylen og deretter løfteløkkene fra framstykket på den andre løftebøylen.

Alternativ 2: Fest en løfteløkke fra framstykket og en fra bakstykket på den ene løftebøylen og deretter den andre sidens løfteløkker på den andre løftebøylen.

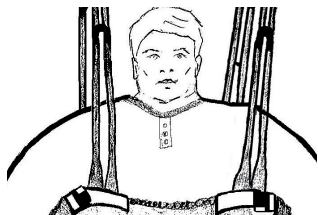

### Oppreisning:

Forbered brukeren på oppreisning, fortell hva som kommer til å skje. La aldri brukeren være alene under løftemomentet og vær oppmerksom på brukerens signaler. Start løftet. Stopp opp når samtlige løftebånd er stramme/spendt og kontroller at alt er i orden før oppreisningen fortsetter. Avbryt oppreisningen ved ubehag.

**Når brukeren har kommet opp i stående kan gjerne et gåhjelpemiddel benyttes.**

## Fjerning av BariVest



### Sittende på sengekanten

Senk ned brukeren på sengekanten og ta bort opphengsbåndene fra løftebøylen. La framstykket henge ned mellom brukerens bein. Brukeren lener seg først mot den ene siden av sengen slik at BariVest kan vikles inn under setet. Deretter lener brukeren seg til andre siden og BariVest kan trekkes bort.

Produkt	Artikkelnummer	Anbefalte Brukervekt (kg)	Vestens mål (cm)	Maxvekt
BariVest XXXL	47103010	180-300	190-280	570kg
BariVest XXXXL	47103011	250-570	230-310	570kg

**OBS!** Anbefales til firepunktsbøyle eller BariTurn.

## Tillbehør

**BariVestCover**, Beskyttelsestrekk i engangsmateriale. Non-woven, skal ikke vaskes. Kastes etter bruk.

### Vedlikeholdsråd:

Les på løfteselens merkeetikett.



Bruk ikke skyllemiddel.

Unngå torketrommel for lengre levetid.

## OBS!

Mobilisering av en person medfører alltid en risiko. Kontroller at brukerens helsetilstand tillater mobilisering. Ved minste tvil unngå mobilisering. Som medhjelper er man alltid ansvarlig for brukerens sikkerhet.

Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se [www.handicare.com](http://www.handicare.com) for en komplett distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra vår hjemmeside: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB  
Veddestav. 15. Box 640  
SE-175 27 Järfälla  
SWEDEN  
Tel: +46 (0)8-557 62 200  
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

