


ClassicHighBackSling

SystemRoMedic™



Manual - Svenska

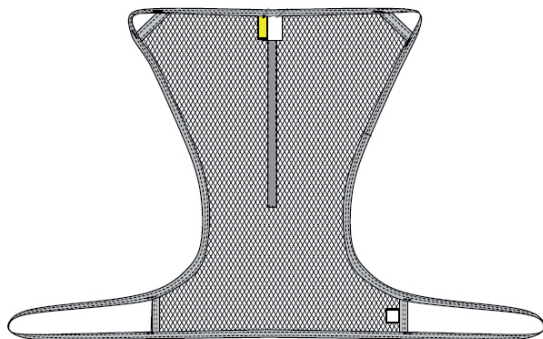

Max: 300kg

ClassicHighBackSling ger brukaren en bra sittställning och trygghetskänsla. Den är utformad för att lämnas kvar i stolen efter förflyttning vilket innebär att det är en lyftsele som man sitter på. Den ger stöd hela vägen från knävecken och upp över huvudet. ClassicHighBackSling är utformad för att tillgodose de vanligaste lyftsituationerna som från säng till rullstol etc.

I SystemRoMedic finns ett brett urval av funktionella, bekväma och högkvalitativa lyftselar anpassade för olika typer av lyft och för brukare med olika behov. Lyftselsarna finns i flera olika material och i storlekar från XXS till XXL. Alla modeller är både säkra och mycket lätta att använda och de klarar brukare upp till 300 kg. Valet av modell och material styrs av lyftsituationen och brukarens behov.



Kontroll av funktion

Visuell och mekanisk inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av lyftselen. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Belasta och kontrollera att spännen och handtag håller för kraftig belastning. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.



Läs alltid manualen

Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

Lämna inte brukaren under förflyttningsmomentet.



Undvik ugridlningrisk eller obehag genom att vara noggrann vid utprovning av lyftselen. Haka först på lyftselsens ryggöglor på lyftbygeln, haka därefter på benstödens öglor. Använd utprovad lyftbygel.

Observera att det finns en risk att brukaren kan tippa framåt då man har en lyftsele med odelade benstöd.

Det är alltid den lägsta tillåtna maxlasten på respektive produkt i den sammansatta lyftenheten som styr. Kontrollera alltid tillåten maxlast på lyft och lyfttillbehör före användning och kontakta din återförsäljare vid frågor.



Placering av ClassicHighBackSling kan endast ske när brukaren ligger

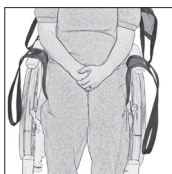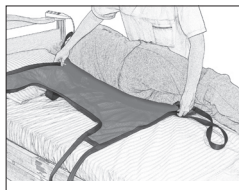

1. Vänd brukaren mot dig. Placera lyftselen så att selens mitt följer ryggraden och den nedre kanten är ca 5-10 cm ovanför brukarens knäveck. Placera lyftselens kant så långt in under brukaren som möjligt.
2. Vänd tillbaka brukaren och kontrollera att brukaren är mitt på lyftselen.
3. Hög gärna ryggstödet innan du lyfter. Börja höja lyftbygel och stanna för att kontrollera att allt är ok innan du höjer så brukaren lyfter från underlaget.
4. Lyftselen lämnas kvar i stolen.

Borttagning av ClassicHighBackSling kan endast ske liggande på säng/brits eller golv

Gör på samma sätt som vid placeringen men i omvänd ordning.

Material:

Polyesternät: Luftigt material som vid behov kan lämnas kvar under brukaren. Klarar hög tvättemperatur.

Skötselråd:

Läs på lyftselens märketikett.



Använd inte sköljmedel.
Undvik torktumling för ökad livslängd.

Storleksinformation

Lyftselar kan ofta användas till både 2- och 4-punktsupphängning. Det är viktigt att vara noggrann och säkerställa att bredden på lyftbygel passar till lyftselens storlek och brukarens behov. Använd personliga lyftselar för ökad säkerhet och hygien.

Storlek		XSOrange	S/Röd	M/Gul	L/Grön	XL/Lila
Rek.	lbs	44-88	66-132	121-187	176-265	243-309
Brukarvikt	kg	20-40	30-60	55-85	80-120	110-140
Lyftselens	inch	37,5	38,5	42	43	45
Höjd	cm	95	98	106	110	115
Lyftselens	inch	12	16	19	25,5	31,5
stussmått	cm	30	40	48	65	80

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se www.handicare.com för en komplett distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår hemsida www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com
E-mail: info@handicare.se

