



RoMedicClips används för att underlätta positionering av brukare. De är utformade så att de går att använda på alla draglakan samt de flesta lyftbyglar. RoMedicClips används i par och placeras på vardera sida om lyftbygeln.

I SystemRoMedic finns ett brett urval av funktionella, bekväma och högkvalitativa lyftselar anpassade för olika typer av lyft och för brukare med olika behov. Lyftselarna finns i flera olika material och i storlekar från XXS till XXL. Alla modeller är både säkra och mycket lätta att använda och de klarar brukare upp till 300 kg. Valet av modell och material styrs av lyftsituationen och brukarens behov.



Kontroll av funktion

Visuell och mekanisk inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av produkten. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Belasta och kontrollera att spännen och handtag håller för kraftig belastning. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.



Läs alltid manualen



Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

Lämna inte brukaren under förflyttningsmomentet.

Undvik utglidningsrisk eller obehag genom att vara noggrann vid utprovning av lyftselen. Haka först på lyftselens ryggögglor på lyftbygeln, haka därefter på benstödens ögglor. Använd utprovad lyftbygel.

Användning av RoMedicClips

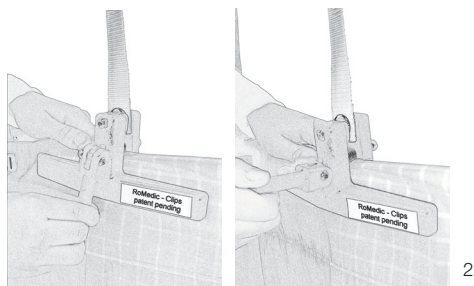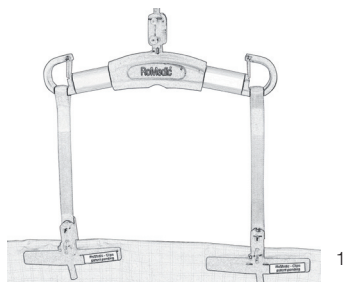

1. Placera först RoMedicClips på lyftbygelgen genom att trä upphängningsöglorna på lyftbygelns krokar. Vik draglakanet där önskad applicering av clipset skall ske.

2. Innan positioneringen träns en bit av draglakanets sida in i öppningen på clipsen. Placera clipsen så nära brukaren som möjligt ffa vid låg lyfthöjd. Nyp fast draglakanet mellan clipsen genom att dra låsspaken från öppet- till låst läge. Nypbredden mellan clipsen regleras genom att låsspaken snurras.

3. Höj lyften när brukaren är redo för positionering. Var uppmärksam under momentet och avbryt om något ej verkar vara i ordning. Avsluta positioneringen när brukaren är i önskat läge.

Skötselråd:

Vid behov, rengör RoMedicClips med varmt vatten eller tvättspirit.

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se www.handicare.com för en komplett distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår hemsida www.handicare.com

Handicare AB
Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200
SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299
SWEDEN

Internet: www.handicare.com
E-mail: info@handicare.se

