


SlingBarSpreader M

SystemRoMedic™



Manual - Svenska

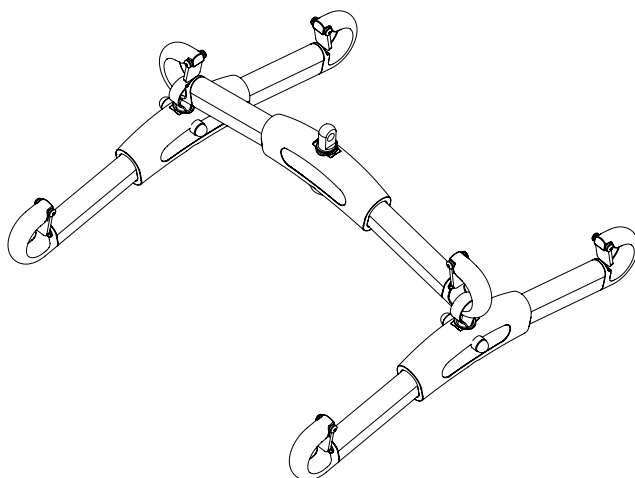

SWL 300 kg/par

SlingBarSpreader M är sidobyglar som används i kombination med en lyftbygel på stationär-, eller mobillyft. Sidobyglar används för att ge mer plats i lyftselen, speciellt bra för överviktiga samt smärtkänsliga patienter.

I Handicares produktserie SystemRoMedic ingår bland annat lyftar och lyftselar. SystemRoMedic innebär en helhetssyn på förflyttningar uppdelat i fyra kategorier: överflyttning, positionering, stöd och lyft.



Kontroll av funktion

Visuell inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av produkten. Kontrollera att materialen är hela och fria från skador. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.



Läs alltid manualen

Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

Lämna inte brukaren under förflyttningsmomentet.

Undvik urglidningsrisk eller obehag genom att vara noggrann vid utprovning av lyftselen. Haka först på lyftselens ryggöglor på lyftbygeln, haka därefter på benstödens öglor. Använd utprovad lyftbygel.

Det är alltid den lägsta tillåtna maxlasten på respektive produkt i den sammansatta lyftenheten som styr. Kontrollera alltid tillåtna maxlast på lyft och lyfttillbehör före användning och kontakta din återförsäljare vid frågor.



handicare

Produktbeskrivning av SlingBarSpreader M

SlingBarSpreader M är tillverkad i aluminium.

SlingBarSpreader M kombineras med av Handicare godkänd stationär-, eller mobillyft. Lyftkrokarna är utrustade med urkrokningskydd.

SlingBarSpreader M används alltid i par och i kombination med av Handicare godkänd lyftbygel.



Viktig information!



- SlingBarSpreader får endast användas i par.
- Upphängningsöglorna får ej vridas.
- Får ej användas som lyftbygel genom att kopplas på länken på lyftenheten.
- Placera SlingBarSpreader så att huvudsymbolerna hamnar på samma sida om lyftbygel.
- Lyftselens ryggöglor skall placeras på den lyftkrok som är markerad med huvudsymbolen.




Montering

Haka på upphängningsöglorna på lyftkroken på lyftbygel. Upprepa på andra sidan.

Obs! Kontrollera att huvudsymbolerna på SlingBarSpreader är på samma sida om lyftbygel.

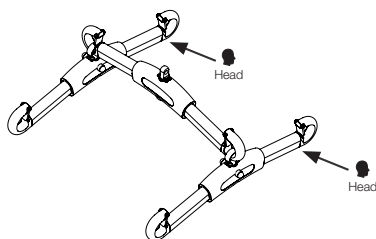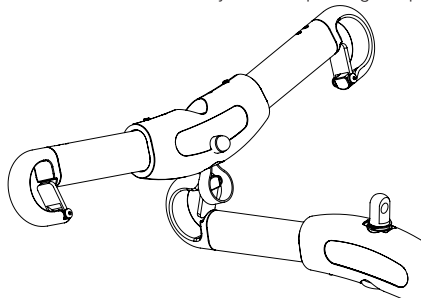

Användning

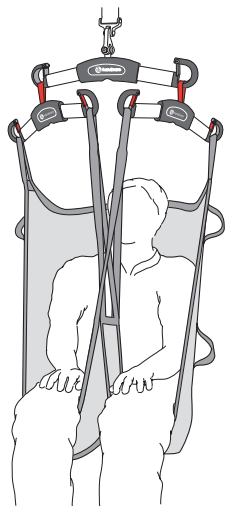

Applicera lyftselen på brukaren, se manual för aktuell lyftsele.

Placera ryggöglorna på den sida av SlingBarSpreader M som är markerad med en huvudsymbol. Bendelarna placeras i den andra änden.

Obs! Vid användning av lyftsele med 3-punkts upphängning placeras den mittersta upphängningsöglan i samma ände som ryggöglorna. De får inte placeras på lyftbygel som SlingBarSpreader M är monterad på.

Maxlast

Olika produkter i den sammansatta lyftenheten (lyft, lyftbygel, lyftsele, våg och eventuella andra lyfttillbehör) kan ha olika tillåtna maxlaster. Det är alltid den lägsta tillåtna maxlasten på respektive produkt i den sammansatta lyftenheten som styr. Kontrollera alltid tillåten maxlast på lyft och lyfttillbehör före användning och kontakta din återförsäljare vid frågor.

Rengöring

Vid behov, rengör lyftbygeln med varmt vatten eller tvättsprit. Använd inte rengöringsmedel som innehåller fenol eller klor då detta kan skada materialet.

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se www.handicare.com för en komplett distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår hemsida www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640 Tel: +46 (0)8 -557 62 200

SE-175 27 Järfälla Fax: +46 (0)8-557 62 299

SWEDEN

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se



handicare