

Maximale belasting: 300 kg/660 lbs

De AmpSling is gemakkelijk door de zorgverlener aan te brengen en geeft de patiënt een gevoel van veiligheid. De band heeft beensecties zodat de patiënt niet op de tilband zit. In plaats daarvan biedt de tilband steun vanaf het staartbeentje tot aan het hoofd en onder de benen. De AmpSling is ontworpen voor de meestvoorkomende tilsituaties, zelfs als er een voorkeur is voor een tilband zonder afzonderlijke beensecties. bijv. bij het tillen van patiënten met hoge amputaties van beide benen.

SystemRoMedic omvat vier categorieën: verplaatsen, repositioneren, ondersteunen en tillen.



Functionele inspectie

Controleer de toestand en werking van de tilband regelmatig, en altijd na wassen.

Controleer of dat het materiaal niet is versleten, beschadigd of gebleekt. Als er tekenen van slijtage zijn moet het product worden getest op sterkte en worden weggegooid als er twijfel is aan de veiligheid.



Lees altijd de instructies

Lees de instructies voor alle bij verplaatsingen gebruikte hulpmaterialen.

Kies de maat tilband zorgvuldig zodat ongemak wordt voorkomen en de patiënt niet uit de band kan glijden. Als de band te groot is bestaat het risico dat de patiënt er uit kan glijden.

Laat een patiënt die opgetild is nooit zonder toezicht.

Breng eerst de ruglussen van de tilband aan en daarna de beensteunlussen. Gebruik altijd een goedgekeurd tiljuk.

Aanbrengen van de tilband terwijl de patiënt in een rolstoel/stoel of in bed zit:



1



2

1. Houd de tilband in één hand en plaats uw andere hand in het zakje op de onderrand van de tilband. Dit gaat gemakkelijker als de patiënt voorover leunt of geholpen kan worden om iets voorover te leunen. Geleid de tilband omlaag achter de rug van de patiënt door hem langs de achterkant van de stoel/rolstoel of het bed te schuiven, idealiter tot aan het staartbeen. Het middendeel van de tilband moet de rug van de patiënt volgen.

2. Geleid de tilband omlaag tot aan de heupen van de patiënt. Doe dit door de band in de ruimte in de achterste hoeken van de rolstoel te duwen.


3. Trek de beensteunen vooruit langs de buitenkant van de dijen. Trek, terwijl u tegenover de patiënt zit, aan de onderrand van de beensteun zodat de tilband op zijn plaats rond de heupen glijdt. Lichte druk tegen de knieën van de patiënt voorkomt dat deze uit de stoel glijdt.

4. Na een controle of de beensteunen aan beide zijden even lang zijn plaatst u ze onder de dijen van de patiënt. De beide beensecties worden gewoonlijk onder de beide dijen van de patiënt aangebracht.

Voer de beensteun door de geleidelussen op de rand van de tilband. Start het heffen van het tiljuk en stop dan om te controleren of alles naar behoren is voordat de patiënt van het onderliggende oppervlak wordt getild




3

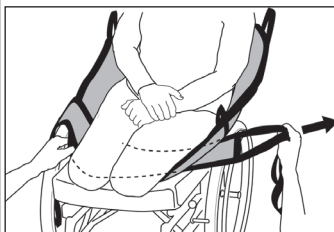

4

Verwijderen van de tilband als de patiënt zit:

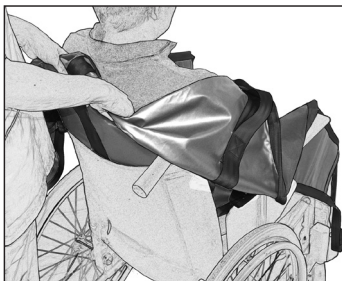

Vouw de beensteun en laat hem onder zichzelf doorglijden terwijl u hem wegtrekt aan de buitenkant van de dij.

Trek dan de tilband omhoog achter de rug van de patiënt.

Aanbrengen van de tilband terwijl de patiënt in bed, op een brancard of op de vloer ligt.



1



2

1. Draai de patiënt naar u toe.

Plaats de tilband zo dat het product-label naar het onderliggende oppervlak gekeerd is en het middendeel van de tilband de ruggengraat volgt.

De bovenrand van het achterdeel van de tilband moet op schouderhoogte zijn en de onderrand gelijk met het staartbeen. Plaats de rand van de tilband zo ver mogelijk onder de patiënt. Duw de lus van het achterdeel onder de band zodat deze bereikbaar is als u de patiënt weer op de tilband hebt gedraaid.

2. Om de band in minder stappen aan te brengen kunt u het achterdeel tegen de rug van de patiënt vouwen en de beensteunen tussen de knieën van de patiënt leggen terwijl deze naar u toe gekeerd is, en ze dan vooruit te trekken als de patiënt op de tilband ligt.


3. Draai de patiënt weer op de tilband en trek het achterdeel en de beensteunen uit. De beensteunen liggen nu overlappend onder de patiënt.

4. Voer de beensteun door de geleidelussen op de rand van de tilband. Start het heffen van het tiljuk en stop dan om te controleren of alles naar behoren is voordat de patiënt van het onderliggende oppervlak wordt getild.



4

Na toiletbezoek:

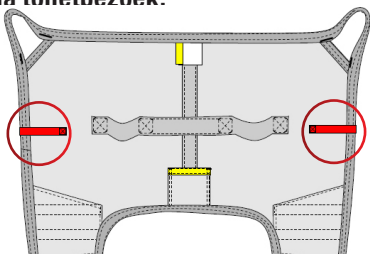

Verwijderen van de tilband terwijl de patiënt ligt.



Draai de patiënt naar u toe en vouw de tilband onder de patiënt zodat het materiaal naar u toe glijdt als u er aan trekt nadat de patiënt weer op zijn rug ligt.


Alternatieve manieren van aanbrengen van de beensteunen van de tilband:



1



2

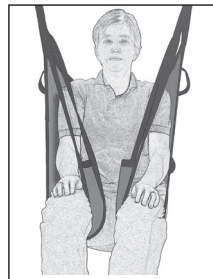

3

1. Leg de beensteunen tussen de knieën van de patiënt.

2. Draai de patiënt naar u toe en vouw de tilband onder de patiënt zodat het materiaal naar u toe glijdt als u er aan trekt nadat de patiënt weer op zijn rug ligt.

3. Voor betere toegang tot het gebied rond het perineum van de patiënt. De beensteunen kunnen desgewenst ook niet gekruisd worden. Hierbij is er echter kans dat de patiënt uit de tilband kan glijden.

Materiaal:

Polyester: Duurzaam materiaal met weinig wrijving.

Netpolyester: Luchtig, goed ventilerend materiaal dat ideaal is om onder de patiënt te laten.

Onderhoud van het product:

Lees het productlabel.



Gebruik geen wasmiddel.
Hang de band, voor een maximale levensduur, op om te drogen of droog hem bij lage temperatuur in de droger.

Maten

Tilbanden kunnen vaak worden gebruikt voor zowel 2- als 4-punts tiljucken. Het is van essentieel belang dat de breedte van het tiljuk geschikt is voor het model tilband en de status en capaciteiten van de patiënt. Als het voorkomen van infecties belangrijk is kunnen wegwerptilbanden gebruikt worden die bij slechts één patiënt worden aangebracht.

Maat		XS/oranje	S/rood	M/geel	L/groen	XL/paars	XXL/Wit
Aanbev. patiënt gewicht	lbs	40-88	77-132	110-176	154-242	220-286	264,5-397
	kg	20-40	35-60	50-80	70-110	100-130	120-180
Tilband hoogte	cm	85	90	97	100	100	100

Neem bij vragen over product-trials, advies of informatie contact op met uw Handicarevertegenwoordiger.

Neem, als u meer informatie nodig hebt, contact op met uw verplaatsingsspecialist of ga naar www.handicare.com. Zorg dat u altijd beschikt over de meest recente versie van de handleiding. Handleidingen kunnen worden gedownload van onze website: www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640
SE-175 27 Järfälla
SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com
E-mail: info@handicare.se

