

Maks belastning: 300 kg

AmpSling er en løftesele som er enkel for pleieren å applisere, samtidig som den gir brukeren trykksfølelse ved alle forflytninger. Den gir støtte hele veien fra baksiden av knærne og helt opp til over hodet. AmpSling er utformet for bruk i de vanligste løftesituasjoner der man ikke vil ha splittede benstroppe, som f.eks. der brukeren har en høy benamputasjon.

I SystemRoMedic finnes et bredt utvalg av funksjonelle, komfortable og høykvalitative løfteseler, spesielt tilpasset ulike typer av løft og for brukere med ulike behov. Løfteselene finnes i flere ulike materialer og størrelser - fra XXS till XXL. Alle modeller er både sikre og meget lette i bruk, og de kan brukes på brukere opp til 300 kg. Valget av modell og materiale avgjøres ut fra løftesituasjonen og brukerens behov.



Kontroll av funksjon

Visuell og mekanisk inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av løfteselen. Kontroller alltid etter vask. Kontroller at sømmer og materiale er helt og skadefritt. Kontroller om materialet er utsatt for slitasje eller er blitt bleket. Belast og kontroller at spenner og håndtak holder når du drar kraftig i selen. Ved tegn på slitasje skal produktet kasseres.



Les alltid manualen

Les alltid manualene for alle hjelpemidler som benyttes i en forflytning.

Oppbevar manualen tilgjengelig for brukere av produktet.

La aldri brukeren være alene under forflytningsmomentet.

Unngå utglidningsrisiko eller ubehag ved å være grundig når man prøver løfteselen. Huk først på løfteselens rygggløkker på løftebøylen, huk deretter på beinløkkene. Benytt en utprøvd løftebøyle.

Det er alltid den minste maksimumslasten på det respektive produktet i den sammensatte løfteenheten som er avgjørende. Kontroller alltid tillatt maksimumslast på løfter og løftetilbehør før bruk og kontakt din forhandler hvis du har spørsmål.

Plassering av løftesele når brukeren sitter i rullstol/stol eller seng



1



2

1. Hold løfteselen i den ene hånden og plasser den andre hånden i lommen på den nedre kanten på selen. Hvis brukeren kan bøye seg fremover gjør dette plasseringen av løfteselen enklere. Før løfteselen ned bak brukers ryggen ved å la den gli ned langs rullestolens rygg/seng. Det er optimalt om den kommer helt ned til halebenet på brukeren. Løfteselens midtlinje skal følge brukers ryggrad.


2. Vær nøye med å få løfteselen godt rundt setet på brukeren. Dette gjøres enklest ved å benytte rommet ved bakre hjørne på rullestolsetet.

3. Jobb frem stroppene langs lårenes utside. Sitt gjerne foran brukeren og trekk i den nedre kanten på benstroppene slik at løfteselen glir på plass rundt setet på brukeren. Sett ditt kne mot brukers kne slik at man unngår at brukeren glir for langt frem i rullestolen.

4. Etter at du har kontrollert at begge benstroppene er like lange på begge sider, kan du plassere dem under brukers lår. Vanligvis plasseres begge stroppene under begge lårene på brukeren. Plasser benstroppene gjennom styreløkene på løfteselens nedre kant. Hev løftebøylen forsiktig og stopp opp for å kontrollere at alt fungerer som det skal, før du løfter brukeren fra underlaget.




3

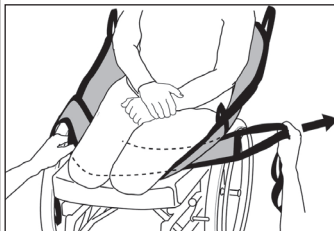

4

Fjerning av løfteselen når brukeren sitter

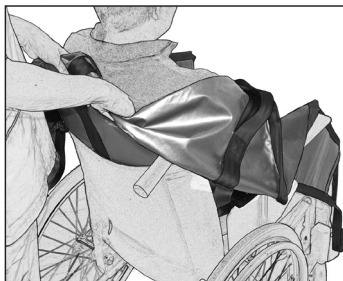


Fold benstroppen og la den gli mot seg selv når du trekker den ut på siden av låret.

Trekk løfteselen opp bak brukers ryggen.

Plassering av løfteselen når brukeren ligger i seng/benk eller gulv




1

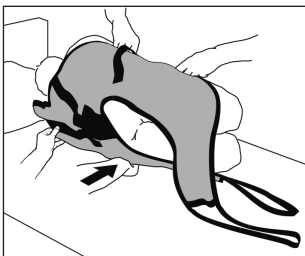

2



3

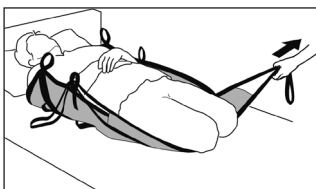


4

1. Vend brukeren mot deg. Plasser løfteselen slik at merkelappen er ned mot underlaget og midtmarkeringene følger ryggraden. Løfteselens ovre kant skal være i skulderhøyde og den nedre kanten dekker halebenet. Plasser løfteselen så langt inn under brukeren som overhode mulig. Sørg for at ryggdelen dyttes godt inn under kroppen, slik at du får tak i den på den andre siden etter at du har vendt brukeren tilbake på rygg.

2. For lettere håndtering og færre momenter kan du i sideleie krølle ryggdelen mot brukeren rygg og samtidig plassere benstroppene under brukeren ben. Da er det enklere å trekke frem selene når brukeren ligger på løfteselen.

3. Vend brukeren tilbake på løfteselen og dra frem ryggdelen og benstroppene. Benstroppene plasseres slik at de overlapper hverandre under brukeren ben.

4. Trekk benstroppene gjennom styreløkkene på løfteselens nedre kant. Hev løftebøylen forsiktig og stopp opp for å kontrollere at alt fungerer som det skal, før du løfter brukeren fra underlaget.

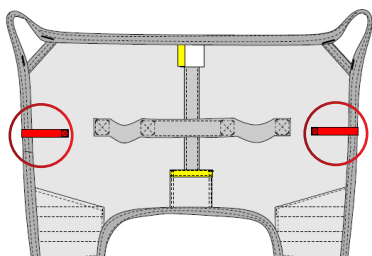

Viktig!


Plasser aldri styreløkkene på løftebøylen.

Fjerning av løfteselen når brukeren ligger



Vend brukeren mot deg og fold inn selen under brukeren, slik at stoffet glir mot seg selv og du lett kan trekke ut løfteselen under brukeren.


Alternative bruksområder for løfteselens benstropper

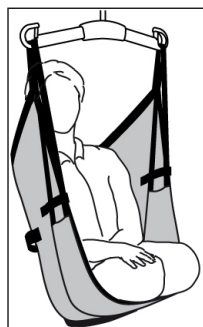

1



2

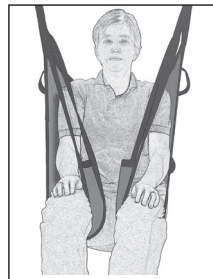

3

1. Beinløstøttene plasseres over hverandre under beina og gjennom styreløkkene ved kanten på løfteselen.
2. Benstroppene kan krysses for de festes på løftebøylen. Dette anbefales ikke på personer med amputasjoner ved kneet eller høyere opp.
3. Man kan også velge å ikke krysse benstroppene, men vær på vakt siden det da er høyere risiko for at brukeren kan gli ut av løfteselen. Dette anbefales ikke på personer med amputasjoner ved kneet eller høyere opp.

Materiale:

Polyester: Siltesterkt materiale med lav friksjon. Klarer høy vasketemperatur.

Polyesternetting: Luftig materiale som ved behov kan bli liggende under brukeren. Klarer høy vasketemperatur.

Vedlikeholdsråd:

Les på løfteselens merkeetikett.



Bruk ikke skyllemiddel.

Unngå tørketrommel for lengre levetid.

Informasjon om størrelser

Løfteseler kan ofte benyttes til både 2- og 4-punktsopphenging. Det er viktig å forsikre seg om at bredden på løftebøylen passer til løfteselens størrelse og brukerens behov.

Benytt personlige løfteseler for økte sikkerhet og hygiene.

Størrelse		XS/Oransje	S/Rød	M/Gul	L/Grønn	XL/Lilla	XXL/Hvit
Anbefalt brukervekt	lbs	40-88	77-132	110-176	154-242	220-286	264,5-397
	kg	20-40	30-60	50-80	70-110	100-130	120-180
Løfteselens Høyde	cm	85	90	97	100	100	100

Ved spørsmål om produkter og bruken av disse, kontakt din lokale distributør. Se www.handicare.com for en komplett distributørliste. Sjekk at du alltid har rett versjon av manualen tilgjengelig. De siste versjonene kan du laste ned fra vår hjemmeside: www.handicare.com

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

