

**Max: 300kg**

AmpSling är en lyftsele som är lätt att applicera för medhjälparen samtidigt som den ger brukaren trygghetskänsla. Den är utformad med bendelar vilket innebär att brukaren inte sitter på selen utan får stöd från svanskotan, upp till axlarna och under benen. AmpSling är utformad för att tillgodose de vanligaste lyftsituationerna när man ej vill ha delade bendelar, ex vid lyft av brukare med benen högt amputerade.

I SystemRoMedic finns ett brett urval av funktionella, bekväma och högkvalitativa lyftselar anpassade för olika typer av lyft och för brukare med olika behov. Lyftseldarna finns i flera olika material och i storlekar från XXS till XXL. Alla modeller är både säkra och mycket lätta att använda och de klarar brukare upp till 300 kg. Valet av modell och material styrs av lyftsituationen och brukarens behov.



## Kontroll av funktion

### Visuell och mekanisk inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av lyftselen. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Belasta och kontrollera att spännen och handtag håller för kraftig belastning. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.



## Läs alltid manualen

Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

Lämna inte brukaren under förflyttningsmomentet.

Undvik ugridligningsrisk eller obehag genom att vara noggrann vid utprovning av lyftselen. Haka först på lyftselsens ryggöglor på lyftbygel, haka därefter på benstödens öglor. Används utprovad lyftbygel.

Det är alltid den lägsta tillåtna maxlasten på respektive produkt i den sammansatta lyftenheten som styr. Kontrollera alltid tillåten maxlast på lyft och lyfttillbehör före användning och kontakta din återförsäljare vid frågor.

## Placering av lyftselen när brukaren sitter i rullstol/stol eller säng



1




2

1. Håll lyftselen med ena handen och placera den andra handen i fickan som finns vid nedre kanten på selen. Finns det möjlighet att brukaren lutar sig/lutas fram lite så underlättar detta. För ned lyftselen bakom brukarens rygg genom att glida efter ryggstödet på stolen/rullstolen eller sängen, ned till svanskotan på brukaren är optimalt. Lyftselsens mitt skall följa ryggraden på brukaren.

2. Var noggrann med att föra ner lyftselen vid stussen på brukaren, gör detta genom att föra ner selen i utrymmet vid bakre hörnen på rullstolens sits.



3

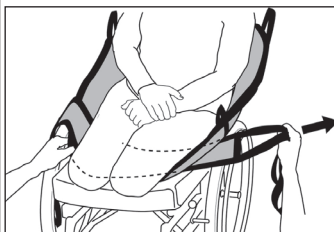

4


3. Drag fram benstöden vid lårens utsida. Sitt gärna framför och drag i den nedre kanten på benstödet så glider lyftselen på plats runt stussen. Ett lätt mothåll på brukarens knä motverkar framåtgång i stolen.

4. När du kontrollerat att benstöden är lika långa på båda sidorna kan du placera dem under brukarens lår. Vanligtvis placeras båda benstödena under båda låren på brukaren.

Placera benstödet genom styröglorna vid kanten på lyftselen.

Börja höja lyftbygeln och stanna för att kontrollera att allt är i ordning innan du höjer så brukaren lyfter från underlaget.

## Borttagning av lyftselen när brukaren sitter

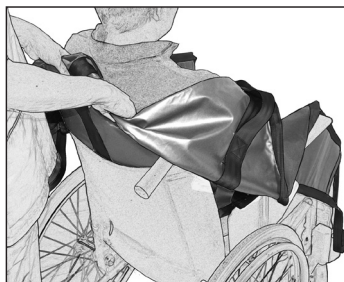


Vik benstödet och låt det glida under sig själv när du drar ut den på utsidan av låret.

Dra sedan upp lyftselen bakom brukarens rygg.

## Placering av lyftsele när brukaren ligger på säng/brits eller golv



1

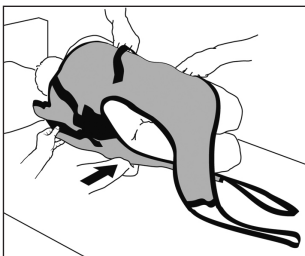

2



3




4

1. Vänd brukaren mot dig. Placera lyftselen så att märklappen är mot underlaget och mittlinjen följer ryggraden. Den övre kanten av ryggdelen på lyftselen skall vara i axelhöjd och den nedre kanten i höjd med svanskotan. Placera lyftselens kant så långt in under brukaren som möjligt. Tryck under öglan till ryggdelen så att du når den när du vänt tillbaka brukaren på lyftselen.

2. För att minska antal moment kan du vika upp ryggdelen mot brukarens rygg och placera benstöden under brukarens ben när han/hon är vänd mot dig för att sedan dra fram dem när brukaren ligger på lyftselen.

3. Vänd tillbaka brukaren på lyftselen och dra fram ryggdelen och benstödet. Benstöden ligger nu omlott under brukaren.

4. Placera benstödet genom styröglorna vid kanten på lyftselen. Börja höja lyftbygel och stanna för att kontrollera att allt är i ordning innan du höjer så brukaren lyfter från underlaget.

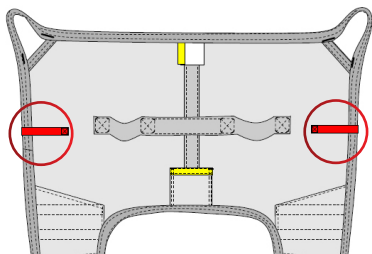

**OBS!**

Placera aldrig styröglorna på lyftbygel.

## Borttagning av lyftsele när brukaren ligger



Vänd brukaren mot dig och vik in selen under brukaren så att tyget glider mot sig självt när du drar ut den efter att du vänt tillbaka brukaren.


## Alternativa appliceringar av lyftselsens benstöd



1



2

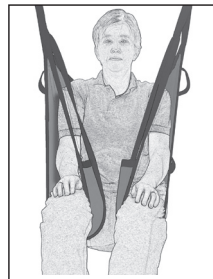

3

1. Benstöden placeras omlott under benen och genom styröglorna vid kanten på lyftselen.
2. Benstöden kan korsas innan de krokas fast på lyftbygel. Rekommenderas ej på person med benamputation vid knäled eller högre upp.
3. Man kan även välja att ej korsa benstöden detta medför dock en urglidningsrisk som man måste vara observant på. Rekommenderas ej på person med benamputation vid knäled eller högre upp.

### Material:

Polyester: Slitstarkt material med låg friktion. Klarar hög tvättemperatur.

Polyesternät: Luftigt material som vid behov kan lämnas kvar under brukaren. Klarar hög tvättemperatur.

### Skötselråd:

Läs på lyftselsens märketikett.



Använd inte sköljmedel.

Undvik torktumling för ökad livslängd.

### Storleksinformation

Lyftselar kan ofta användas till både 2- och 4-punktsupphängning. Det är viktigt att vara noggrann och säkerställa att bredden på lyftbygel passar till lyftselsens storlek och brukarens behov.

Använd personliga lyftselar för ökad säkerhet och hygien.

Storlek	XS/Orange	S/Röd	M/Gul	L/Grön	XL/Lila	XXL/Vit
Rek.						
Brukarvikt kg	20-40	35-60	50-80	70-110	100-130	120-180
Lyftselsens						
Höjd cm	85	90	97	100	100	100
Lyftselsens						
Stussmått cm	27	37	45	50	60	70

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se [www.handicare.com](http://www.handicare.com) för en komplett distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår hemsida [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640

SE-175 27 Järfälla

SWEDEN

Tel: +46 (0)8-557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

