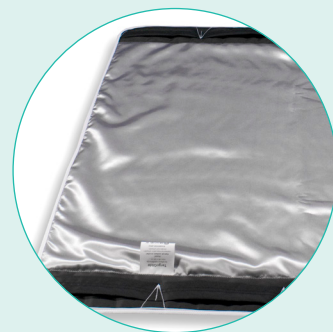
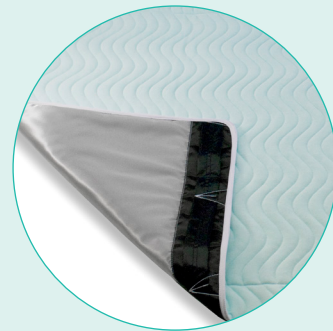




# Tergo®Glide

## Ergonominen siirtosuoja

Tergo®Glide on kahvallinen, ergonominen apuväline, joka on tarkoitettu liikuntarajoitteisten potilaiden siirtämiseen ja kääntämiseen. Tuotteeseen on integroitu inkontinenssisuoja. Käytön painoraja max. 250 kg.

### Yleiskuvaus

**Tergo®Glide** koostuu monikerroksisesta vuodesuojasta sekä alla olevista liuku- ja kahvarakenteista. Tuotteeseen on integroitu inkontinenssisuoja. Tuotteen pitkillä sivuilla on 6 kahvaa/puoli. Tergo®Gliden alapuolella oleva kangas liukuu poikittaissuuntaisesti lakanaa vasten helpottaen muun muassa käyttäjän omatoimista kääntymistä sekä hänen kääntämistään. Vuoteen pituussuuntaisesti kangas on vastaavasti kitkainen, joten Tergo®Glide jarruttaa liukumista alaspäin selkänojan ollessa kohotettuna.

### Käyttötarkoitus- ja ympäristö

Käyttötarkoitus on toimia apuvälineenä kääntämisessä, siirtämisessä ja nostamisessa potilailla, joilla liikkumismahdollisuudet ovat heikentyneet sekä makuualustan inkontinenssisuojana edellä mainituilla potilailla. Käyttöympäristöjä ovat terveydenhoidon ammattiyksiköt sekä kotikäyttö.

### Käyttäjäprofiilit ja kohdepotilaat

Tuotteen käyttäjä voi olla terveydenhuollon ammattihenkilö tai tällaisen ammattihenkilön ohjeistama maallikko.

### Koot ja paino

- Vakiokoot: 88 x 120 / 105 x 120 cm
- Painot: 815 / 980 g

Lisätietoja:



BR-D01-02-FH-1.0-02032026

