

● ● ● ● ● Junior


CAREVA BÄLTET

– kombinera efter
individuella behov!





Kombibälten
A small (10023 A) och
B small (10023 B)

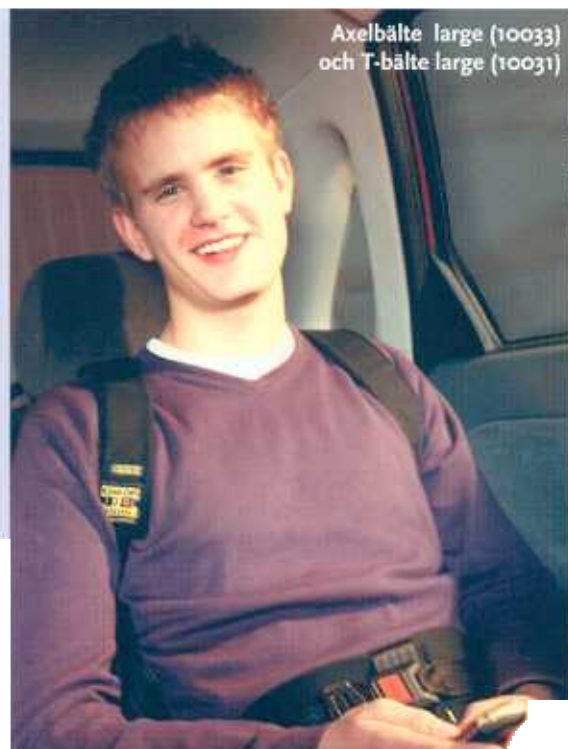

Axelbälte large (10033)
och T-bälte large (10031)



Kombibälte
B small (10023 B)

CAREVABÄLTET

med många kombinationsmöjligheter

Personer med funktionsnedsättningar behöver ofta extra stöd eller fixering för att få en bra sittställning i bilar och andra fordon. Careva bältssystem består av fixeringsbälten som kan kombineras på många olika sätt. De utgör därmed ett utmärkt komplement till det ordinarie säkerhetsbältet. Fordonets säkerhetsbälte skall dock **alltid** användas.


I specialfordon där höftbälte utgör enda säkerhetsbälte och där trepunktsbälten saknas är Carevabältet ett lämpligt komplement för att fixera överkroppen mot ryggstödet. På så sätt kan skador vid häftiga inbromsningar förhindras.

Carevabältet kan användas tillsammans med bilkudde och/eller bilbarnstol (förutsatt att denna har en öppning mellan sits och rygg).

Genom att Carevabältet kan låsas på baksidan av sätesryggen, förhindrar man att aktiva personer själva låser upp bältet under färd.

Sortiment


Careva-bälten. Fordonstestade fixeringsbälten avsedda som komplement till ordinarie säkerhetsbälten i fordon. Bältena finns i två storlekar: large och small. De kan maskintvättas i 40°. Kom ihåg att ta bort alla metallspänner för att inte skada tvättmaskinen.

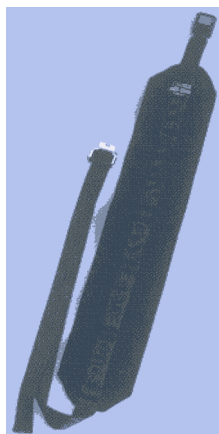

Grundbälte med
ett lås



Grundbälte med
två lås

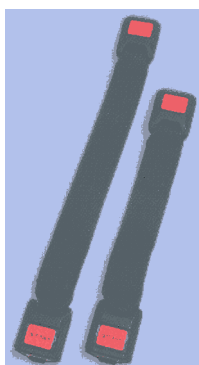


Grundbälteslås



Axelbälte



extralås finns
som tillbehör

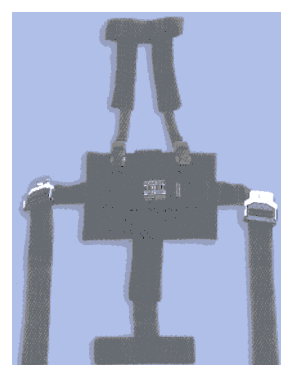

Kombibälte A small

Maximal fixering vid inbromsning


Careva bältesystem har testats i fordon på VTI – Väg- och transportforskningsinstitutet. Testerna visar att en person hålls helt fixerad vid sätet vid maximal inbromsning i 90 km/h. Testerna har utförts på krockdockor i de tre viktklasserna 22, 34 och 70 kg.



Artikellista


Grundbälte, ett lås	art nr 10185
Grundbälte, två lås	art nr 10285
Grundbälteslås	
30 cm	art nr 10030
40 cm	art nr 10040
Brösbälte	
80 cm	art nr 10080
90 cm	art nr 10090
100 cm	art nr 10100
110 cm	art nr 10110
120 cm	art nr 10120
135 cm	art nr 10135
Axelbälte	
small	art nr 10121
medium	art nr 10020
large	art nr 10033
T-bälte	
small	art nr 10022
medium	art nr 10021
large	art nr 10031
Kombibälte	
small A	art nr 10023 A
small B	art nr 10023 B
medium	art nr 10024
large	art nr 10025
Extra långt bälteslås	art nr 10150

art som standardfärg. Används också för kroppsfixering i rullstol.

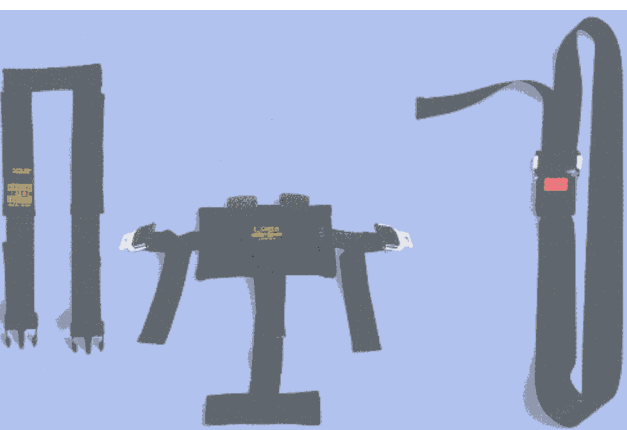

Kombibälte B small

Extra långt bälteslås

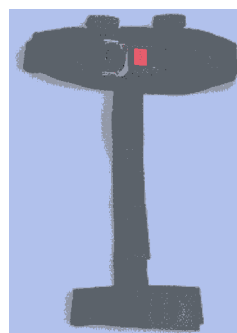

T-bälte kombi



T-bälte



Brösbälte



CAREVABÄLTET

bältssystemet med hög komfort och många kombinationsmöjligheter

●●●● Careva Systems arbetar med utveckling av bältssystem, framför allt avsedda för användning i fordon.

Många användare deltar aktivt i den ständigt pågående produktutvecklingen, vilket gör att komfort och kombinationsmöjligheter kontinuerligt förbättras. All tillverkning sker i Sverige, vilket ger oss möjligheter att enkelt och snabbt ta fram speciallösningar när det krävs.

Carevabältet utvecklades från början till funktionshindrade barn, men sortimentet har nu utökats och omfattar även bälten för vuxna.

Flera bilanpassningsföretag och hjälpmedelscentraler har Carevas bälten i sitt sortiment. Kontakta oss för ytterligare referenser, för synpunkter på produkterna eller för mer information om produkterna. Besök gärna vår hemsida www.careva.se.



Har ni ytterligare frågor eller synpunkter är ni välkomna att kontakta oss.

Adress: Theres Svenssons gata 10, 417 55 Göteborg

Tel: 031-22 28 00

Fax: 031-22 28 36

Mobil: 0703-340 300

E-post: evastina.bjork@careva.se

www.careva.se

