

GRINDFOR- HØYERE



Sengerammen Safir med integrert grind i standardhøyde (ikke ekstra høy) kan kompletteres med grindforhøyer Smart eller Bue. Ved å benytte disse kan madrassykkelsen eller kombinasjon madrass/overmadrass økes.



GRINDFORHØYERE

Sengerammen Safir med integrert grind i standard-høyde (ikke ekstra høy) kan kompletteres med grindforhøyer Smart eller Bue. Ved å benytte disse kan madrassykkelsen eller kombinasjon madrass/overmadrass økes.

Grindforhøyer "Smart"

Monteres enkelt uten verktøy i sengens hjørne.
Fell ned, koble sammen og grinden er på plass.
Enkel å slå opp/demontere når grinden ikke er i bruk.
Klarer madrassykkelse inntil ca. 25 cm.
Passer senger som er 200 eller 210 cm lange.

Grindforhøyer "Bue"

Monteres på de integrerte sidegrindenes øvre grindbom.
Monteres enkelt med umbraconøkkel.


Foruten å forhøye grinden er "Bue" et hjelpemiddel ved forflytning fra/til sengekanten. Gir brukeren et enkelt og stabilt grep.

Klarer madrassykkelse inntil ca 18 cm.
Passer senger som er 200 cm lange.
Pulverlakkert metall.

Monteres på øvre grindbom.



Grindforhøyer "Smart" er enkel å montere

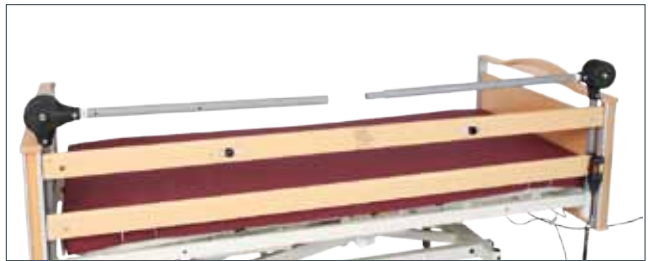

Grindforhøyer "Smart" i nedfelt posisjon



Grindforhøyer "Smart" sammenkoblet



Grindforhøyer "Bue" monteres på øvre grindbom

CE



handicare

Telefon 03250
www.handicare.no