

Seng

QVINTETT H LARGE



Seng Qvintett H Large er utstyrt med aktiv, dynamisk rygg som bidrar til å eliminere skyveeffekten på huden. Sengens fleksibilitet kombinert med et bredt tilbehørsprogram, gir brukeren mulighet til et aktivt liv, samtidig som personalet får et effektivt arbeidsteknisk hjelpemiddel.

Qvintett H er laget for å gjøre håndtering, montering og transport av sengen svært enkel, uten bruk av verktøy.

Seng Qvintett H Large er produsert i Sverige etter standardene ISO9001 og ISO14001.




handicare



QVINTETT H LARGE

Funksjon

Seng Qvintett H Large er elektrisk regulerbar i høyde. Sengeløfter og sengebunn deles enkelt uten verktøy. Foruten plan stilling kan sengebunnen, trinnløst og individuelt, stilles inn med elektriske motorer etter figurene under. Samtlige innstillinger utføres med sengens håndkontroll.

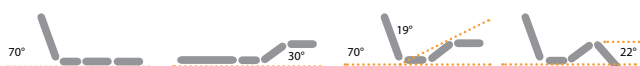

Liggeflate

Sengens liggeflate består av fjærende spiler i laminat (6 lag) med folieoverflate. Laminatspillene er hengt opp i fjærende gummihylser.

Sengebunn (*)

Sengen kan enkelt forlenges 5 cm. Den kan forlenges ytterligere ca 10 cm, men dette krever en spesiell sengebunnsforlenger.

OBS! Sengen er ikke testet i ekstra lang utførelse.

I denne størrelsen skal sengen betraktes som spesialtilpasset.

Maks. last (SWL)

Sengeløfter og sengebunn, inkl. sengeramme, kan belastes med maks. 220 kg (hvorav personvekt på 185 kg).

Hjultype

Qvintett H Large leveres standard med sentralt låsbare hjul på 10 cm. Hjulene triller lett og et av hjulene kan retningssperres. Sentrallåsen betjenes fra siden av sengens fotende.

Elektronikk og motorer

Qvintett H Large drives av et lavvoltssystem på 24V. Motorene har innebygde grenseverdier for skånsom start og stopp, beskyttelsesklasse IP X6.

Elektronikkenheten inneholder en innebygd transformator 220V/24V, samt elektronisk beskyttelse mot overlast, beskyttelsesklasse IP X6.

Ryggmotoren er kun skyvende for å eliminere klemfare under ryggstøtten.

Rengjøring

Samtlige overflater kan rengjøres med normale rengjørings- og desinfiseringsmidler.



1. Individuelt regulerbare funksjoner 2. Aktiv, dynamisk rygg med tilbakeføring av ryggstøtte 3. Sitteposisjon med fotdel under horisontallinjen 4. Fotdel med høyt leie.

SPESIFIKASJONER	105x200	120x200
Maks brukervekt	185 kg	185 kg
SWL (Safety Working Load)	220 kg	220 kg
Innermål, bredde	105 cm	120 cm
Innermål, lengde	206 cm	206 cm
Ytermål, bredde	117 cm	132 cm
Ytermål, lengde	214 cm	214 cm
Hjuldiameter, standard	100 mm	
Låsing av hjul	Sentrallås	
Overflatebehandling	Sengens metalleder er pulverlakkerte	
Lydnivå	47 dB	

SENGBUNN (*se info til venstre)

4-delt	
Ryggdel	77 cm
Setedel	20 cm
Lårdel	37 cm
Fotdel	56 cm

MADRASSMÅL

Anbefalt madrassmål	105x200 cm	120x200 cm
---------------------	------------	------------

VEKTER

Sengeløfter	56 kg	56 kg
Sengebunn (ekskl. lår- og fotdel)	49 kg	54 kg
Lår- og fotdel	11 kg	13 kg
Totalvekt	116 kg	123 kg

ARBEIDSSOMRÅDE (mål uten madrass)

Laveste nivå	34 cm
Høyeste nivå	83 cm
Frigang under løfter	ca. 17 cm



CE-merket og godkjent ihht. sengenorm EN 60601-2-52



handicare

Telefon 03250
www.handicare.no