

Gåstativ KIDWALK




Å gå er en av de vanskeligste aktivitetene å mestre, men den er også en av de mest verdifulle i forhold til fysisk og emosjonell utvikling.

Prosesen med å hjelpe et barn til å gå krever innsats og tid uavhengig av funksjonshemming. Resultatet er en frihet som hjelper barnet til å utvikle sans for rom/retning og oppfordrer barnet til å oppdage verden rundt seg.

KidWalk er det første gåstativet som er utviklet for å bevege seg sammen med barnet. Bevegelsen i gåstativet oppfordrer barnet til å begynne å gå. Samtidig har barnet armene fri til å utforske omgivelsene.

KIDWALK

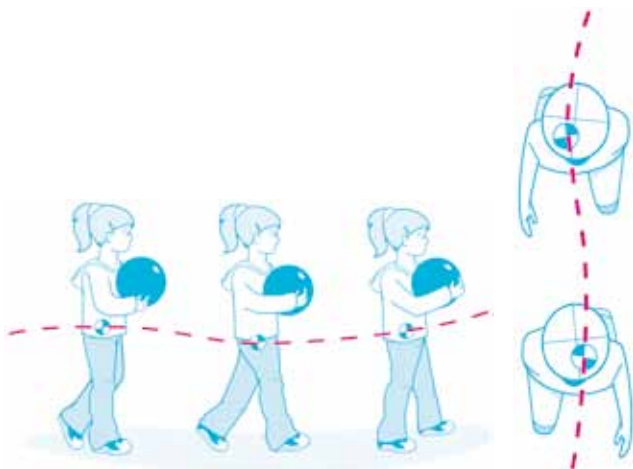

KidWalk

Gange består i hovedsak av to bevegelser – vektfordeling fra side til side og en bevegelse i vertikalplanet.

KidWalk tar hensyn til begge disse bevegelsene og gir dermed barn med funksjonshemninger det beste utgangspunktet for gange.

KidWalks tilpassing til vektfordeling gir muligheter til å jobbe med balanse og motorisk utvikling. Sentermonterte store hjul oppfordrer til rotasjon i overkroppen når barnet endrer retning.

De sentermonterte hjulene gir liten svingradius samt mulighet til å rulle over teppekanter og andre ujevnheter, ute som inne.

Det er enkelt og raskt å plassere barnet i KidWalk. KidWalk tilpasses uten bruk av verktøy og kan benyttes til barn med lette, moderate eller mer komplekse funksjonshemninger. KidWalk er tilgjengelig i to størrelser.

Standard:

- Mekanisme for sideveis vektforflytning
- Mekanisme for vertikal bevegelse
- Sete som følger barnets bevegelser
- Bekkenstøtter som senterer bekkenet automatisk
- Oppsvingbare hoftestøtter
- Enkel betjening av høydergulering
- Store sentermonterte hjul
- Svinghjul med lys
- Tippetisering
- Brystbelte

Tilgjengelig tilbehør:

- Sidestøtter
- Alternative drivhjul
- Styrehjul, små (erstatte de store hjulene)
- Hodestøtter, ulike alternativer
- Seter, ulike alternativer
- Hoftestøtter, forlenget
- Benstropper, ulike alternativer
- Svinghjul uten lys
- Retningslås

SPESIFIKASJONER

	KidWalk str. 1	KidWalk str. 2
Alder	1-7år	5-12år
Brukervekt, max	30kg	45kg
Setehøyde/skrittengde	22,5-55cm	37,5-70cm
Hoftebredde	14-23,5cm	18-29cm
Brystbredde	16,5-25,5cm	22-37cm
Høyde lyske-armhule	24,5-41cm	30-56cm
Høyde lyske-hodestøtte	35-69cm	44-79cm
Høyde understell	67,5cm	80cm
Total bredde	60cm	68,8cm
Hjul	20"	24"
Svinghjul	4"	5"
Farge	Rød	Blå



handicare

Telefon 03250
www.handicare.no