

TRYGGT I DITT EGET HEM

Dali-serien



Vårdsängar
för den digitala framtiden

Internationell utgåva

STIEGELMEYERGROUP

BURMEIER


Dali – sängserien för framtidens omvårdnad

Hemvård är grunden för vård i vårt samhälle. Det är därför som den tekniska utvecklingen av vårdhjälpmedel spelar en avgörande roll. De blir allt lättare att använda och ihopkopplingen via nätverk av digitala assistanssystem kan mildra den stress som orsakas av bristen på vårdpersonal och den sociala isoleringen hos många äldre.

Vår sängserie Dali har format hemvården i Tyskland och Europa i flera år. Nu sätter vi in kursen mot framtiden. Med digital kontroll och nätverkande via appar och det praktiska monteringsystemet Easy Click avlastar våra Dali-modeller anställda i sjukvårdsbutiker liksom vårdarna i hemsjukvården och på olika vårdinrättningar.

Dali-sängar från Burmeier ger patienter och vårdpersonal mycket komfort och man kan vara kvar i den välbekanta hemmiljön och känna sig helt säker. Fackhandeln drar nytta av den snabba installationen och den optimala hygien tack vare en validerad maskinbearbetning och ett digitalt nätverk.

Namnet Dali står för pålitliga sängar – idag och i framtiden.

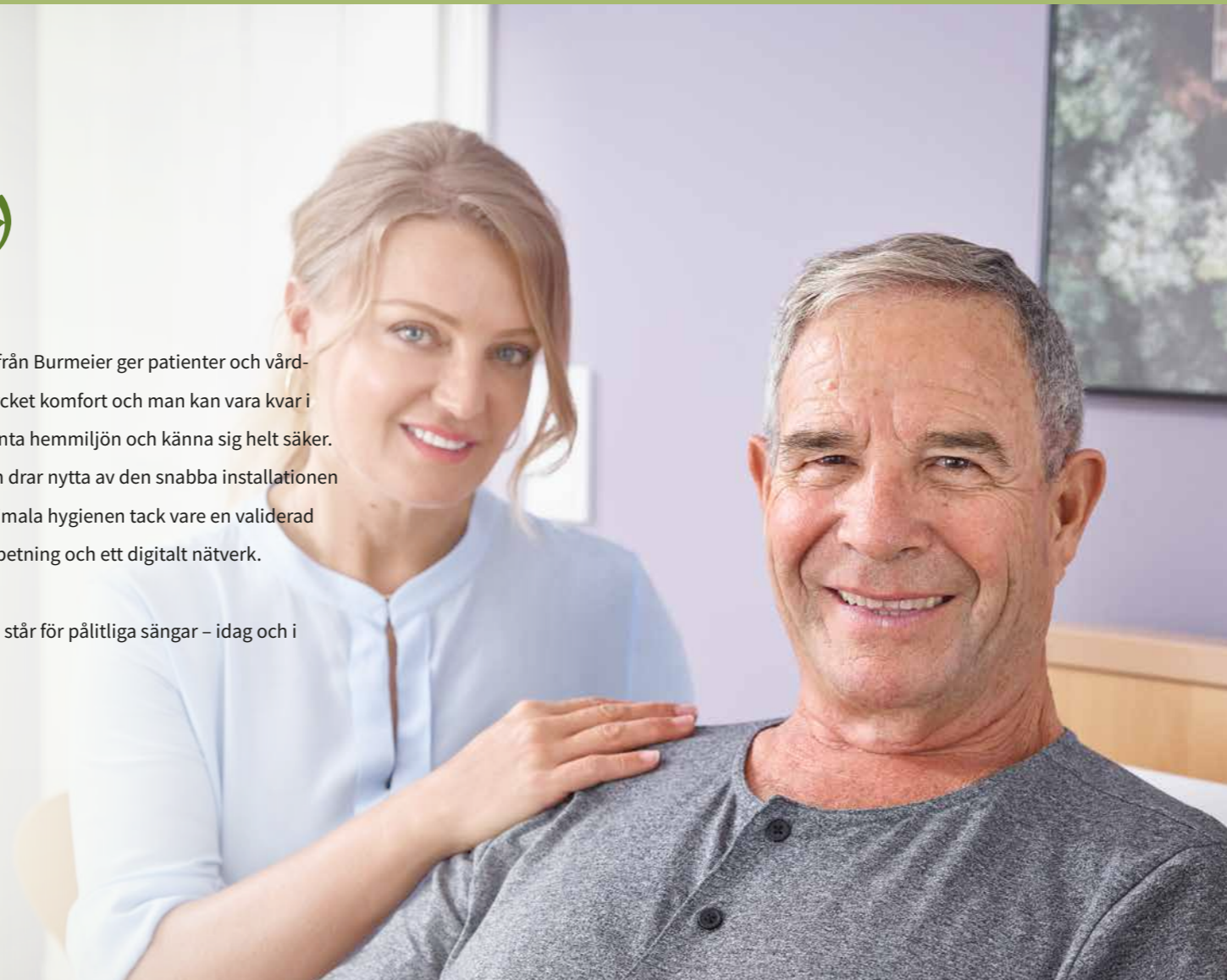

Innehåll

2	Modellvarianter
4	Dali
6	Dali wash
8	Dali low-entry
10	Dali low-econ
12	Drivsystemet Econ
13	24-volts-drivsystem
14	Systemet Easy Click
16	Trådlös handkontroll
18	Dali-Lock-app
20	Mjuk tygklädsel
21	Tillbehör
24	Tekniska data
26	Stieglmeyer-gruppen

Förstasida: Dali med mjuk tygklädsel (tillbehör till extra kostnad)

Dali



- **Höjjustering:**
40 – 80 cm
- **Ekonomisk, bekväm och säker:**
 - Installation av sideskydd på bara några sekunder med Easy Click
 - Trådlös handkontroll
 - Digital nätverksuppkoppling via appen till sängen

Sida 4

Dali wash



- **Höjjustering:**
40 – 80 cm
- **Maskintvättbar för perfekt hygien:**
 - KTL-beläggning skyddar mot korrosion
 - Skydd och avlastning för personalen i sjukvårdsbutiker och inom hemvården
 - Minskar processkostnader genom automatisering och snabb återanvändning

Sida 6

Dali low-entry



- **Höjjustering:**
23 – 63 cm
- **Låg säng som fallprofylax:**
 - Låg sänghöjd på endast 23 cm skyddar mot fallskador utan frihetsberövande åtgärder
 - Sidoskydd med Easy Click
 - Digital nätverksuppkoppling via appen till sängen

Sida 8

Dali low-econ



- **Höjjustering:**
32 – 72 cm
- **Stabil låg säng:**
 - Skyddar mot fallskador och gör det möjligt för vårdpersonalen att arbeta ergonomiskt i höfthöjd
 - Pålitligt 230-volts-drivsystem
 - Utmärkt pris/prestanda-förhållande

Sida 10



Dali

Snabb och digital



Det är tack vare sin banbrytande teknik och hållbarhet som Dali blivit Tysklands bästsäljande vårdssäng. Det är en robust säng tillverkad av material av hög kvalitet och som kräver lite underhåll.


Den fyrdelade liggytan manövreras enkelt med en **trådlös handkontroll**, som ansluts till sängen med Bluetooth. Tack vare det låga fotläget går det att som standard ställa in en hälsofrämjande **sittställning** när man exempelvis ska äta eller titta på tv. Om vårdaren vill spärra vissa lägen för patienten går det att göra det med handkontrollen eller ännu bekvämare med gratisappen Dali-Lock i telefonen.

Sidoskyddet löper längs hela sidan och snäpps enkelt på plats i de förmonterade fästena med **Easy-Click-systemet**. Det gör det betydligt enklare att montera sängen.


Starka fördelar

- Hög arbetsbelastning på 185 kg
- Bromspedal med behaglig haptik, kan också användas i tofflor och strumpor
- Trådlös handkontroll med mycket lång driftcykel och litet servicebehov för alla som använder sängen
- Snabb och enkel montering tack vare systemet Easy Click
- Underbensstödet är som tillval justerbart på alla Dali-modeller – den konstruktion (rastomat) som krävs för det finns som tillbehör till extra kostnad

Yttermått/höjdinställningsområde:

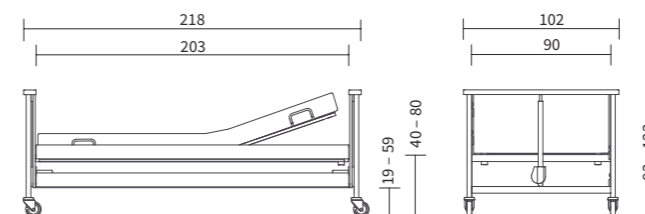

Produktegenskaper:

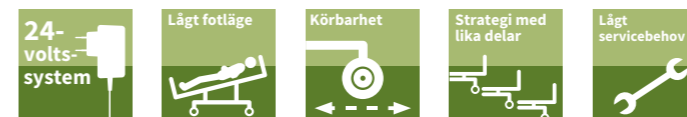

◀ Med den trådlösa handkontrollen kan patienter och vårdpersonal enkelt manövrera sängen.

▲ Den bekväma sittställningen underlättar andning och minskar aspirationsrisken vid måltider.

▼ Bromsarna kan också användas bekvämt med tofflor.

▼ Sidoskyddets brädor kan utan verktyg monteras och tas bort med Easy Click.



▲ Alla motorer kan tas bort utan verktyg. Det avtagbara, inbyggda motorskyddet förhindrar skador.



Säker hygien och kampen mot multiresistenta bakterier blir också i hemvården allt viktigare. Maskintvättbara sängar erbjuder stora fördelar här. De garanterar **idealisk rengöring och desinfektion** genom validerbara processer. Samtidigt sparar de tid och pengar eftersom personalen i sjukvårdsbutikerna inte behöver utföra den arbetskrävande och slitsamma manuella förberedelsen. Sängen är snabbare klar att användas igen och därmed undviker onödigt långa uppehåll.

Dali wash är utformad för rengöring i tvättanläggningar. Tack vare sin höga **kaplingsklass IPX6** kan sängen behandlas utan att drivsystemet behöver demonteras. Tack vare sin **KTL-beläggning** på utsidan och insidan är sängen skyddad mot korrosion. KTL står för "Katodisk dopplackering" och är en elektrokemisk lackningsprocess för maximal hållbarhet. Borrade hål säkerställer att kvarvarande vätska kan rinna ut helt efter tvättprocessen.

Starka fördelar


- Säker arbetsbelastning på 185 kg
- Sidoskydd längs hela sidan med systemet Easy Click
- Trådlös handkontroll
- Lågt fotläge ingår

Extra hög hygienstandard

Dali wash

Sängen för optimal hygien

Yttermått/höjdställningsområde:

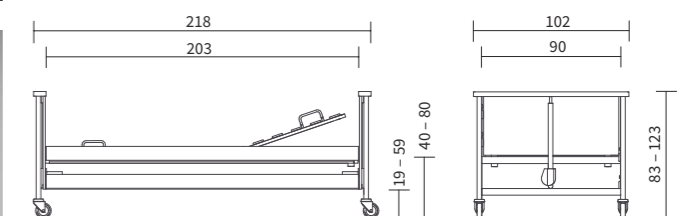

Produktegenskaper:




▲ KTL-beläggningen skyddar sängens insida och utsida mot korrosion.



▲ Hål i metallprofilerna gör att kvarvarande vätska rinner ut.



▲ Plastproppar med hål gör att restfukt kommer ut.

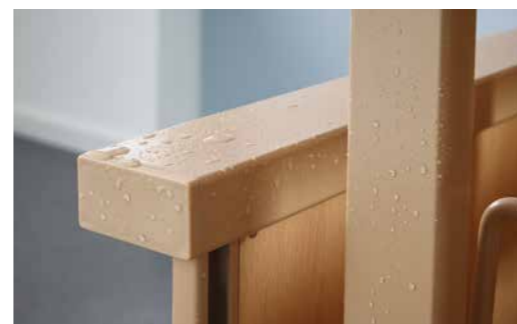

▲ Förseglade ytor är idealiska för säker och grundlig rengöring.



▲ Den fyrdelade liggytan har hygieniska metallsteg.



Låg sänghöjd på endast 23 cm som fallprofylax



Dali low-entry

Den låga sängen

Den låga höjden minskar risken ►
för fallskador.

Sidoskydd skyddar mot fall – men om de dras upp permanent kan denna frihetsberövande åtgärd minska patientens livskvalitet. Ett utmärkt alternativ är **låga sängar** som Dali low-entry. Med sitt höjdställningsområde på **23 till 63 cm** är sängen i sitt lägsta läget precis ovanför golvet. Från den låga höjden är risken för personskada vid fall mycket lägre. Det gör det lättare att välja att inte använda sidoskydd. På det sättet följer Burmeier **Werdenfelser Wegs**-filosofin för att bibehålla patientens rörlighet.


Dali low-entry har också övriga standardfördelar hos Dali-familjen som lågt fotläge, trådlös handkontroll och extra spärrning via app.



Starka fördelar

- Säker arbetsbelastning på 175 kg
- Steglös höjjustering som gör det ergonomiskt bekvämt att lägga sig och att kliva upp
- 24-voltssystem – ingen läckströmmätning under hela den förväntade livslängden och ännu längre

Ytermått/höjdställningsområde:

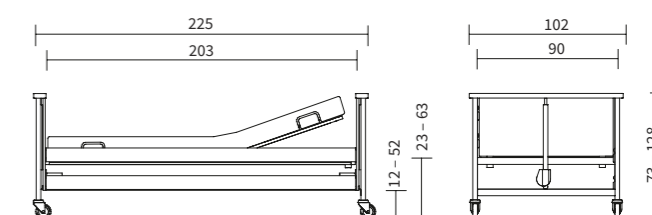

Produktegenskaper:





Fallprofylax
och arbete på
ergonomisk höjd

Dali low-econ

Den budgetvänliga, låga sängen

▲ Den låga sängen Dali low-econ kombinerar komfort med mångsidighet och en robust konstruktion.

Vår vårsäng Dali low-econ kombinerar många styrkor till ett mycket bra pris/prestanda-förhållande. Med sitt höjdställningsområde på 32 till 72 cm skyddar det låga läget patienten från fallskador. Dessutom kan också storvuxna arbeta vid sängen i **upprätt ställning**, något som **skonar ryggen**.

Liksom alla Dali-modeller i Econ-serien (se nästa avsnitt) styrs också den här sängen säkert och pålitligt av ett **230-volts-drivsystem**. Den trådbundna handkontroll har en lättanvänd och selektiv spärrfunktion.

Som tillval kan man klä in gaveln med hemtrevlig **träbeklädnad**. Med ett sådant attraktivt utseende påminner Dali low-econ om den internationellt framgångsrika modellen Arminia low från den föregående serien.

Starka fördelar

- Hög arbetsbelastning på 185 kg
- Inställbart lågt fotläge och sittställning
- Bromspedal med behaglig haptik



▲ Den selektivt spärrbara handkontrollen är ansluten till sängen med kabel.




▲ Det slitstarka 230-volts-drivsystemet styr sängen lugnt och säkert.



▲ Den fyrdelade liggytan med flexibla fjädertrålar ger hög komfort. En hälsofrämjande sittställning är som standard också möjlig.

Yttermått/höjdställningsområde:

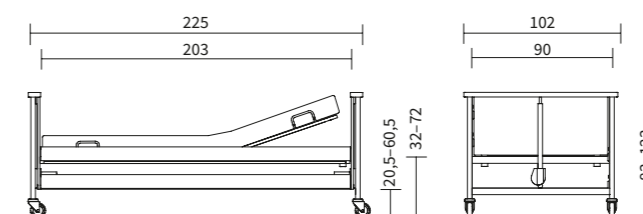

Produktegenskaper:



För modellerna:
Dali econ
Dali low-econ
Dali low-entry-econ



Econ-drivsystem



▲ Den budgetvänliga, låga sängen Dali low-econ.



▲ Den låga sängen Dali low-entry-econ för idealisk fallprofylax.



▲ Drivsystemet Econ finns för många internationella nätkontaktstyper.

De flesta sängmodeller i Dali-familjen är som standard utrustade med ett strömsnålt 24-volts-drivsystem. I vissa länder gäller emellertid sådana nätkontaktsstandarder som inte utan tillbehör kan användas med 24-voltssystemet och tillhörande funktion för transformatoromkoppling. I sådana fall är våra Econ-modeller med **alternativ drivenhet** ett attraktivt och billigt val.

Både Dali och Dali low-entry finns i varianterna **Dali econ** och **Dali low-entry-econ**. Den tredje modellen är **Dali low-econ** (se föregående sida), men där finns ingen 24-voltsversion.

Alla Econ-sängar har ett säkert, pålitligt och ekonomiskt **230-volts-drivsystem**. Med lämpliga elkontakter är dessa vårdssängar redo att användas internationellt där de behövs. **Handkontrollen** till Econ-modellerna är som vanligt ansluten till sängen med kabel. En praktisk selektiv spärrning och uppspärrning av alla justeringsfunktioner kan göras med handkontrollen. Dali-Lock-appen kan inte användas med Econ-sängarna.



▲ Econ-modellernas trådbundna handkontroll kan flexibelt monteras på sidoskyddet.



Spänningsomvandlaren SwitchMode genererar skyddsklenspänning på 24 volt direkt vid uttaget.

24-volts-drivsystem


24-volts-drivsystem från Burmeier erbjuder en optimal säkerhetsstandard för hemvård. Alla spänningsförande 230-voltskomponenter sitter utanför sängen. Ett hus med den elektroniska spänningsomvandlaren **SwitchMode** sitter direkt bakom nätkontakten. På så sätt har patienterna högsta möjliga säkerhet.

Sängen är strömlös så länge handkontrollen inte är aktiverad. Det minskar strömförbrukningen med upp till 93 procent. Att man inte behöver utföra läckströmsmätningar, certifierade av **TÜV Rheinland**, sparar in på kostnader och arbetsinsats. I princip måste en obligatorisk läckströmsmätning utföras vartannat år för vårdssängar i kommersiellt bruk. Med 24-voltssystemet förlängs den tiden så mycket att ingen mätning behövs under vårdssängens hela förväntade livslängd och längre ändå. Bruksanvisningen ger information om respektive livslängd.

Ingen läckströmsmätning krävs, inte ens vid första drifttagningen, eftersom den redan har utförts på fabrik. Det innebär att **ingen el utbildad person** behöver vara när sängen tas i drift – det sparar in ytterligare kostnader.

TRYGGT I DITT EGET HEM


Minskad strömförbrukning

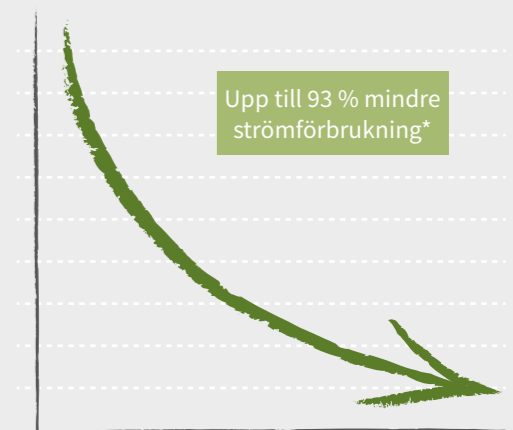

* jämfört med 230-voltssystem och cirka 5 justeringar per dag

TRYGGT I DITT EGET HEM

Starka fördelar

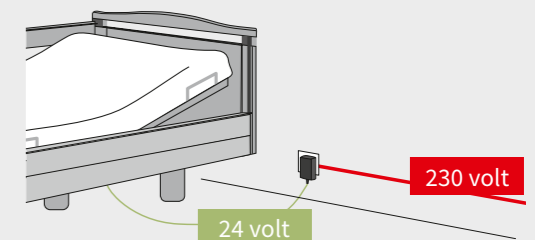

- Skyddsklenspänning från transformatorn direkt vid uttaget
- Inga 230-voltskomponenter på sängen
- Ingen läckströmsmätning efter montering under sängens hela förväntade livslängd
- Ett testcertifikat för varje säng finns att ladda ned



Systemet Easy Click

- ▲ Med Easy Click kan sidoskyddets brädor monteras och tas bort på några sekunder.

Sidoskyddet längs hela sidan i Dali-serien är lätt att använda och erbjuder mycket skydd. Nu är det ännu enklare att montera. Med systemet Easy Click kan de fyra sidoskyddsbrädorna monteras och tas bort **på några sekunder**. Samtidigt är de så säkert och stabilt fastsatta att även oroliga människor som behöver vård är skyddade hela tiden och inte kan ta bort sidoskydden av misstag.


Det finns förmonterade fästen i gavlarna och fotändarna på alla Dali-sängar. Sidoskyddsbrädorna "klickas" helt enkelt på plats för säkert fäste. Om du vill ta bort den igen, trycker du på de små **frigöringsknapparna** i fästena. Dessa knapparna sitter så att patienten inte kan ta bort sidoskyddet av misstag. Brädornas ändtor är skyddade av eleganta, antracitfärgade plastlock.

Systemet Easy Click gör det betydligt enklare för de anställda i sjukvårdsbutiken, vårdande släktingar och vårdtekniker att montera ihop sängarna – vilket **sparar mycket tid**. Dessutom kan vårdpersonalen ta bort sidoskyddet om patienten inte behöver det. En praktisk väska för transport och förvaring av brädorna finns som tillbehör.



- ▲ Sidoskyddet längs hela sidan ger ett optimalt skydd.

Lätt att montera

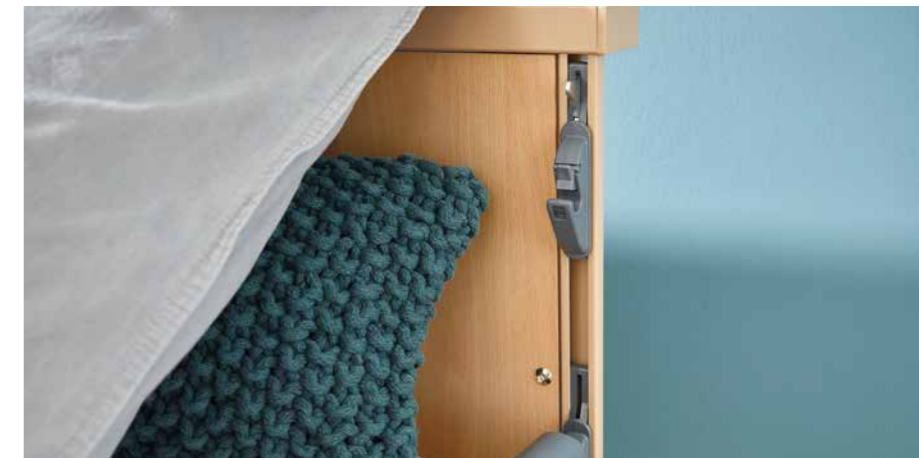

- ▲ Fästanordningen för sidoskyddet är redan förinstallerad. Det sparar mycket tid vid monteringen. Utan ditmonterade sidoskydd syns fästena knappt när de är i lägsta läget på sängen.



- ▲ När brädorna placeras diagonalt ger de den vårdbehövande en bra rumslig orientering.



Den trådlösa handkontrollen

▲ Den trådlösa, intuitiva handkontrollen är lätt att använda.

En elektriskt justerbar säng med handkontroll ger maximal komfort. Men den vanliga fastsättningen av dosan på sängen med kabel hade också sina nackdelar. Kabeln var en potentiell snubbelrisk, drog till sig damm och kunde skadas vid kollisioner. Det är därför vi har utvecklat en ny trådlös handkontroll för Dali-serien som ansluts till sängen **via Bluetooth**.

Det ger både patienter och vårdpersonal en hög grad av användar-komfort och man har alltid dosan till hands när man behöver det. Som tidigare finns handkontrollen på sin plats på sidoskyddet, så att den alltid är till hands.

Med konventionella batterier har handkontrollen en **mycket lång användningscykel** och indikerar i god tid när batteriet måste bytas ut med hjälp av en ljussignal. Batteriet kan sättas in utan verktyg med hjälp av en låsanordning på baksidan.

Som vanligt kan vårdaren individuellt spärra eller låsa upp alla justeringsalternativ för patienten hjälp av handkontrollen. För att göra det måste man sätta den bifogade magneten på kontrollpanelen och trycka på knappen för den funktion som ska spärras. Det är ännu mer bekvämt med Dali-Lock-appen.

TRYGGT I DITT EGET HEM

Trådlös användning

- Enkel användning inom och utanför sängen, ingen begränsning på grund av kabellängden
- Mycket lättförståeliga piktogram med hög kontrast underlättar användningen
- Handkontrollen kan fritt placeras på sidoskyddet
- Med en daglig användningstid på 140 sekunder räcker batteriet i två år



Ett batteribyten indikeras i god tid av en ljussignal.




▼ Standardbatteriet kan bytas ut på några sekunder.



▲ Sängens justeringsfunktioner kan spärras och låsas upp individuellt med en magnet.

Handkontrollen kan hängas ► på sidoskyddet och är alltid till hands.



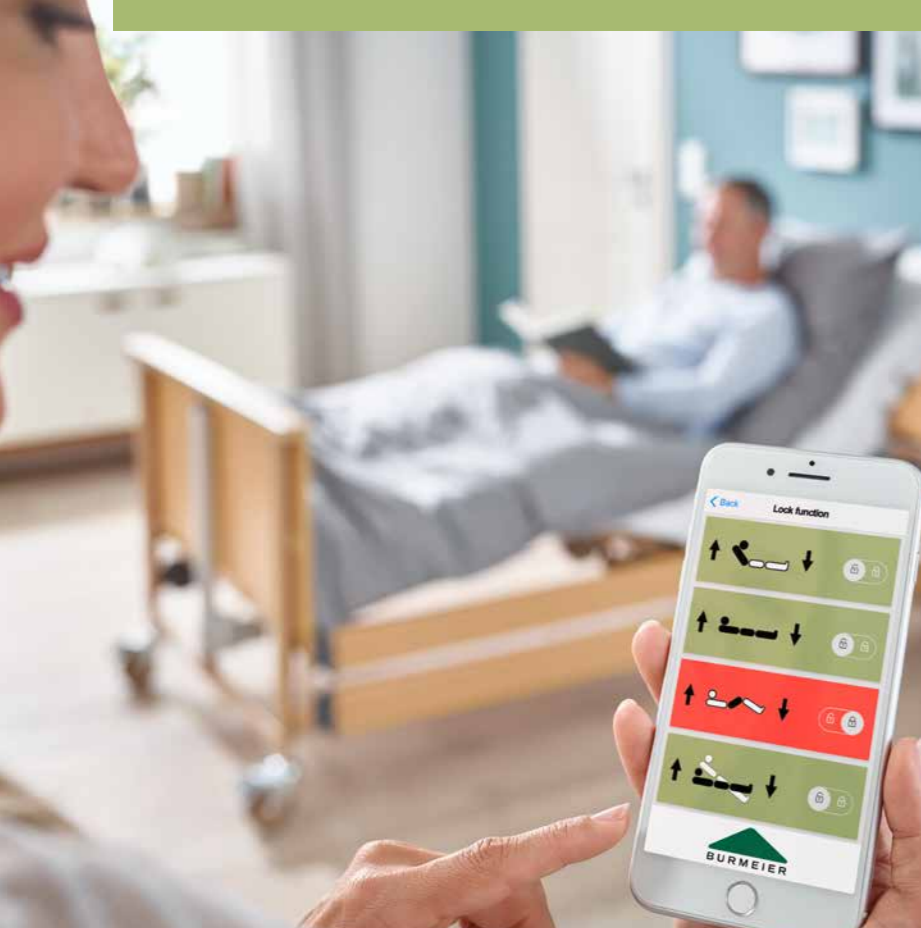

Appen hittar Dali-sängen och kopplar ihop sig med den.



Dali-Lock-appen

Digitalt utformad säkerhet

Tack vare de många justeringsalternativen för liggytan är våra Dali-sängar bekväma och flexibla. Beroende på patientens hälsotillstånd är emellertid vissa lägen inte att rekommendera. Om exempelvis den som ansvarar för omvårdnaden vill spärra det låga fotläget eller ryggstödet läge är det bara använda vår **Dali-Lock-app**. Appen finns för Android- och Apple-telefoner och är gratis att ladda ner från kända butiker. Den passar alla Dali-modeller med 24-volts-drivsystem.

Dali-Lock-appen hittar automatiskt vårdsängen och ansluter till den genom att man skannar av koden på handkontrollens baksida. Nu kan du med hjälp av enkla piktogram individuellt spärra eller låsa upp alla funktioner.

Dali-Lock-appen ingår som del i ett **omfattande digitalt nätverk** hos Burmeier. Besök vår webbplats www.burmeier.com för att få tips på nya appar och pröva den moderna sängkonfiguratorn.



TRYGGT I DITT EGET HEM

Dali-Lock-appen

- Ladda ner Dali-Lock-appen från butiken till din Android- och Apple-telefon utan kostnad.
- Starta sängsökningen. Appen hittar din Dali-säng.
- Anslut mobilen till sängen genom att skanna koden på handkontrollens baksida.
- Nu kan du individuellt spärra eller låsa upp alla ryggstödsinställningar och höjjusteringar av sängen.



Med det innovativa 24-voltssystemet och den trådlösa handkontrollen ger sängens patienterna högsta möjliga säkerhet.



Hemtrevlig elegans i "Arminia-stil"

Dalis gavel kan förses med **träbeklädnad**. Sådana högkvalitativa designelement döljer sängens drivteknik och säkerställer ett ännu mer hemtrevligt och privat utseende. I den tidigare versionen av Dali-serien kallades sängen med träbeklädnad för "Arminia". Naturligtvis kan de som använder den nya Dali-serien också njuta av "Arminia-stilen".



Mjuk tygklädsel



Tygklädseln är tillverkad av högkvalitativt material och kan **enkel** **rengöras i tvättmaskinen** hemma. Tygerna tillverkas på ett miljövänligt sätt enligt Öko-Tex-standard 100.

Hitta din favoritklädsel med hjälp av **klädselkonfiguratorn** på vår webbplats.

Man känner dig omedelbart mycket bättre i en vacker säng som matchar interiören i det egna hemmet. Med vår mjuka tygklädsel förvandlas Dali-serien till eleganta designsängar. Det är en **tygklädsel** som är lätt att sätta på gavlar och fotdelar liksom på sidoskydden. Det finns **sju attraktiva färger** att välja mellan: petroleum, mörkblå, vanilj, lavendel, bordeaux, orange och brun.



Praktiskt tillbehör

Alla sängar i Dali-serien erbjuder mycket komfort redan i grundutförandet. Men med originaltillbehör från Burmeister kan komfort, skydd, rörelseförmåga och utseende ökas avsevärt. De som använder sängarna får en **trevligare vardag** med serveringsbricka och läslampa. Tack vare enkel montering och direkt frakt blir tillbehören ett naturligt komplement.

Vänner och kännare av Dali-serien kommer att fråga om **Arminia**-modellen, som utmärktes av hemtrevlig träbeklädnad över gavlarna. Sådana träbeklädnader finns fortfarande som tillbehör.



▲ **Sängförlängningen** erbjuder storvuxna det utrymme de behöver. En sängförlängning kan också monteras i efterhand. Tillsammans med sängförlängningen finns tillhörande sidoskyddsbrädor på 220 cm.



▲ Den **påsättningsbara sidoskyddsbrädan** höjer skyddet med 18 cm.



▲ **Metallsidoskyddet** är särskilt robust och lätt att rengöra.



▲ **Läslampan** ger en angenäm belysning.


▼ Med hjälp av tillvalet **Rastomat** kan underbensstödet justeras manuellt.




▼ Sidoskyddets brädor kan lätt och enkelt transporteras och förvaras med hjälp av **bärväskan**.



▲ **Förvaringslåda** för glasögon, mobiltelefoner och den trådlösa handkontrollen kan enkelt monteras på många ställen.

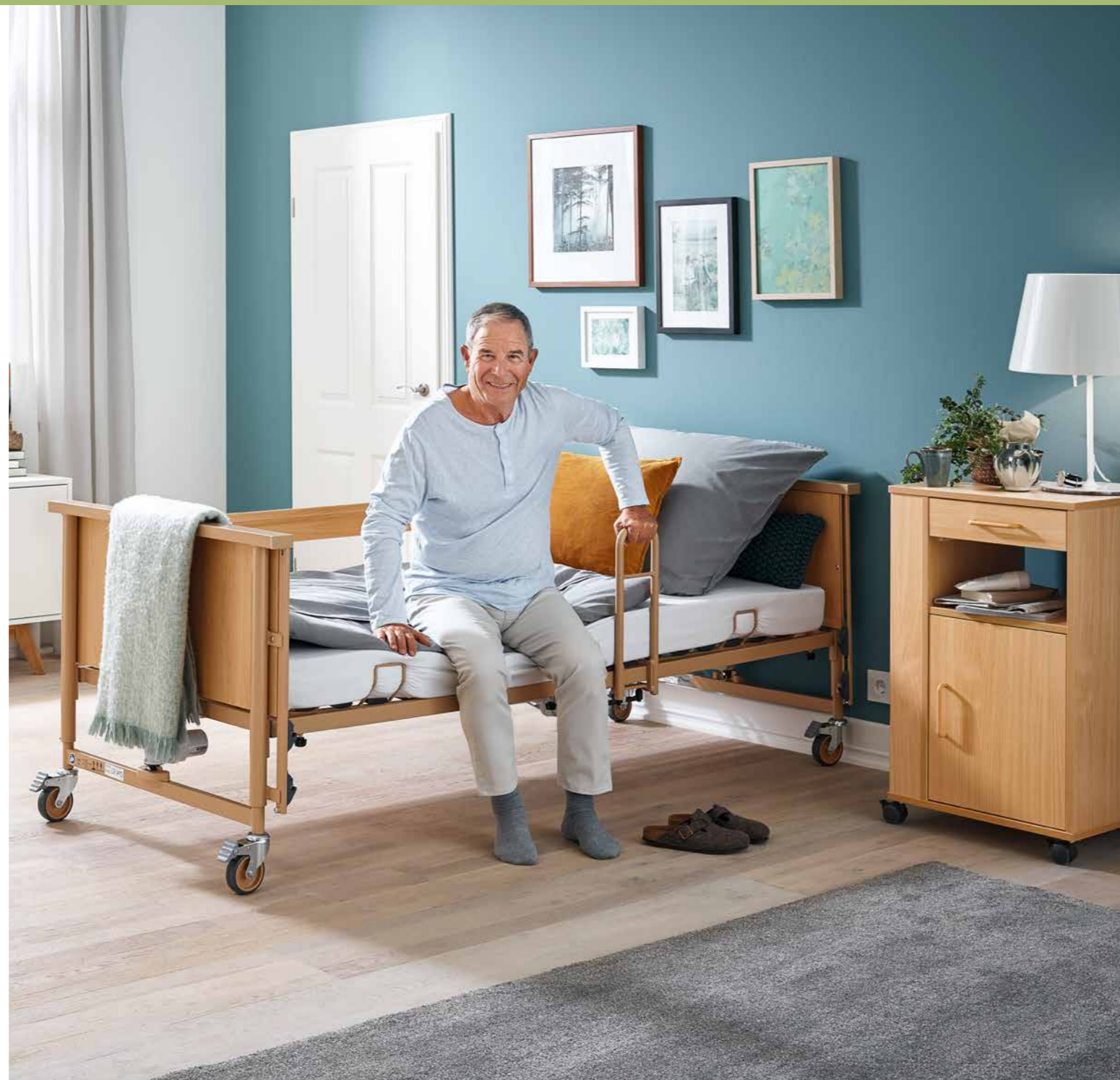

▲ **Stötfångare** skyddar sängen och väggarna mot skador.

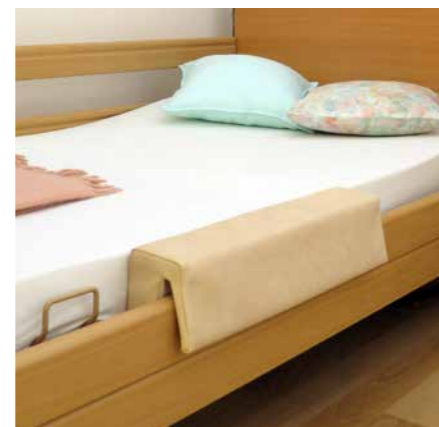

▲ **Utfyllnadskudden** kan fästas vid sidoskyddet och gör det lättare att sitta på sängkanten.



▲ Med den **golvliggande nätdelen** med inställbar utspänning kan 24-voltssystemet också användas med olika internationella kontakter och ledningar.



◀ **Uppstigningshjälpen** underlättar för patienten att på egen hand och utan ansträngning ta sig upp ur sängen.

▼ **Serveringsbrickan** placeras helt enkelt på sidoskyddets påsatta bräda.



▲ **Sängbordet Duo** är idealiskt som avställningsyta och bekväm läspulpet.

▼ Den mjuka **skumläderklädseln** skyddar patienten mot kontakt med sidoskydden och när man kliver upp ur sängen.



▲ **Sängborden** från Burmeier erbjuder gott om förvaringsutrymmen och praktiska avställningsytor för föremål och drycker. På bilden visas modellen Cherusker med ett höjdjusterbart och svängbart sängbord.



▲ Det **anpassningsbara sidoskyddet** för Dali erbjuder mycket skydd och ger tillräckligt med utrymme för patienten att lägga sig och kliva upp ur sängen.



Dali-serien -
för vilsam
sömn och en
ny livskvalitet

Utrustning och alternativ

Modellvariant	Dali	Dali wash	Dali low-entry	Dali low-econ
Liggyta	90 × 200 cm, Fyrdelad	90 × 200 cm, Fyrdelad	90 × 200 cm, Fyrdelad	90 × 200 cm, Fyrdelad
Yttermått	102 × 218 cm	102 × 218 cm	102 × 225 cm	102 × 225 cm
Höjjustering	40 – 80 cm	40 – 80 cm	23 – 63 cm	32 – 72 cm
Säker arbetsbelastning	185 kg	185 kg	175 kg	185 kg
Lågt fotläge	12°	12°	12°	12°
Trädekor	Bok natur	Bok natur	Bok natur	Bok natur
Ramfärg	Topas	Topas	Topas	Topas
Trådlös handkontroll med selektiv spärrfunktion	✓	✓	✓	-
Klar för Dali-Lock-appen	✓	✓	✓	-
Maskinbearbetning	-	✓	-	-
Fjädertråster-liggyta	✓	-	-	✓
Metall-liggyta	0	✓	✓	0
Linak 24-volts-drivsystem	✓	✓	✓	-
Golvliggande nätdel för 24-voltssystem	0	0	0	-
Econ 230-volts-drivsystem*	0	-	0	✓
Träbeklädnad för gavel	0	-	0	0
Lyftstång	✓	✓	✓	✓
Sidoskydd längs hela sidan av trä	✓	✓	✓	✓
Sidoskydd längs hela sidan av metall	0	-	0	0
Påsättningsbar bräda för sidoskydd	0	0	-	-
Anpassningsbara sidoskydd	0	-	-	0
Skumläderklädsel	0	0	0	0
Mekanisk nödlägesänkning av ryggstödet	✓	✓	✓	✓
Stötfångare	0	-	0	0
Sängförlängning på 20 cm	0	0	-	0
Läslampa	0	0	0	0
Serveringsbricka	0	0	0	0
Uppstigningshjälp	0	-	0	0
Mjuk tygklädsel för gavel	0	0	-	-
Mjuk tygklädsel för sidoskydd	0	0	0	0
Manuell justering av underbensstödet (Rastomat)	0	✓	✓	0
Utfyllnadskudde	0	0	0	0
Förvaringslåda	0	0	0	0
Bärväska för sidoskyddets brädor	0	0	0	0

✓ = ingår som standard

0 = finns som tillval

- = inte tillgänglig

* Sängar med drivsystemet Econ är utrustade med kabelansluten handkontroll. Användningen av Dali-Lock-appen är inte möjlig.

◀ Den låga sängen Dali low-entry garanterar en vilsam sömn och minskar risken för fallskador utan frihetsberövande åtgärder.

Värdebevarare Framtidsdesigner



STIEGELMEYERGROUP

Värdebevarare

Vårt företag grundades år 1900 i Herford och har varit familjeägt sedan dess. Respekt och ansvar gentemot våra kunder, anställda och partners är grunden för vårt dagliga arbete. Med utgångspunkt i dessa värden och många års erfarenhet erbjuder vi våra kunder världen över högkvalitativa produkter, lösningar och tjänster inom vård och hälsa.

Framtidsdesigner

För att hantera de snabba förändringarna inom vård och hälsa utvecklar vi alla våra produkter själva. Innovationer och visioner för framtidens vård är målet med vårt arbete. Vi står alltid i kontakt med våra kunder för att hjälpa dem i det vardagliga arbetet. Att förverkliga morgondagens trender redan idag är en framgångsrik tradition hos oss.

Vår expertis

Sjukhus

Vårdhem

Vård i hemmet

Bekväma sängar

Kontraktsmöbler

Tjänster



Stiegelmeier-gruppen är din internationella partner för sjukhus och vårdinrättningar och med varumärket Burmeier för hemsjukvård. Vi hjälper våra kunder med praktiska produkter, lösningar och tjänster som vi utvecklar fortlöpande.

- Grundades 1900 och är fortfarande familjeägt
- Över 1 100 anställda världen över
- Tillverkning av alla kärnprodukter i egna fabriker
- Produktutveckling och produktion i Tyskland
- Tjänster, utbildning och processoptimering hos kunden
- Internationella certifieringar och export till mer än 60 länder
- Distributörer i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Polen och Sydafrika

Våra varumärken





Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Ett företag i Stieglmeyer-gruppen

STIEGELMEYERGROUP

Huvudkontor/Headquarters

Deutschland / Germany
Stieglmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax +49 (0) 5221 185 - 252
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France
Stieglmeyer SAS
16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa
Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands
Stieglmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland
Stieglmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland
Stieglmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl



Hitta din kontaktperson på vår webbplats:
Find your local partner on our website:
www.stieglmeyer.com/partner

burmeier.com