


BO SÄKERT HEMMA



Regia

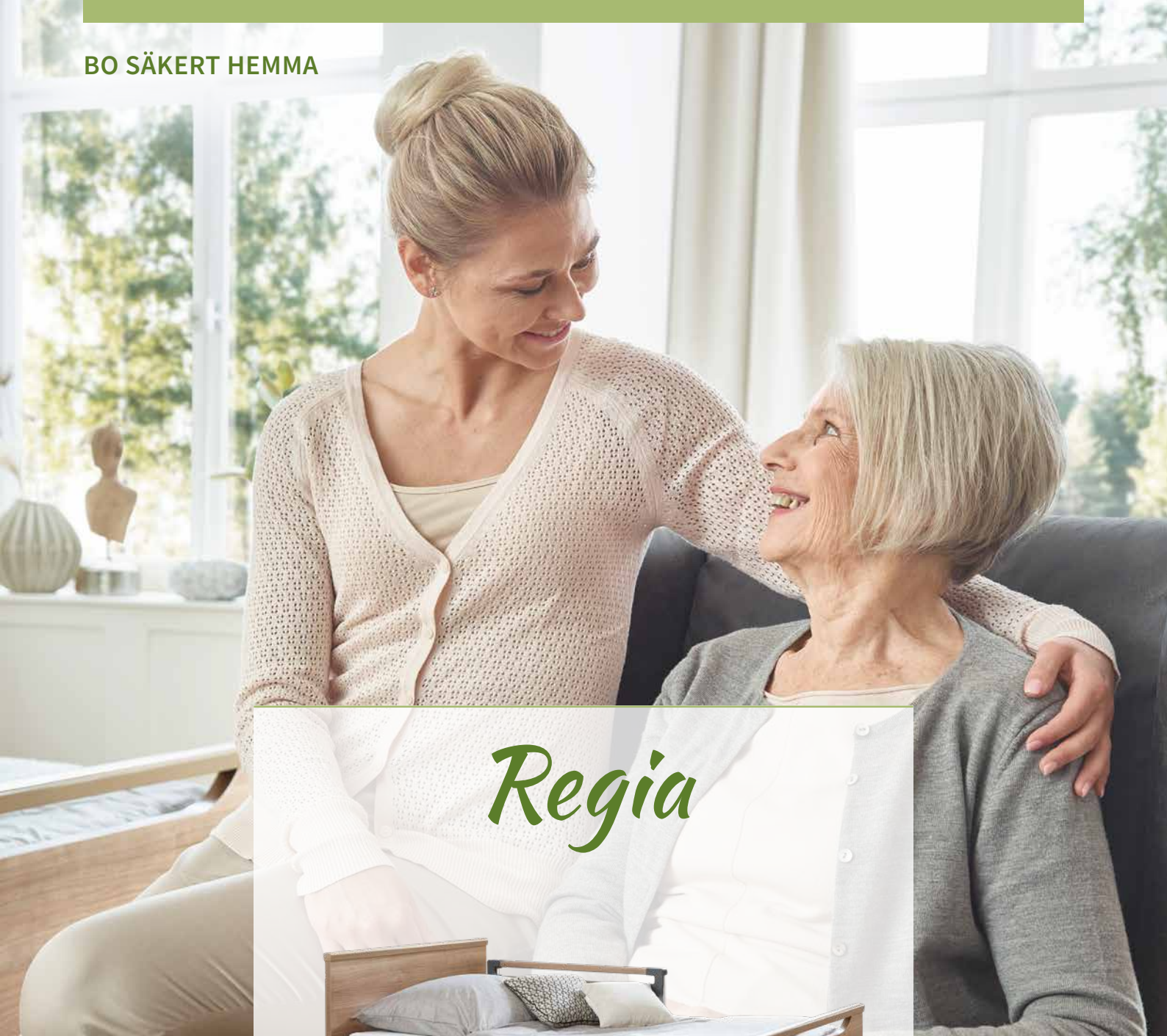

Den individuella vårdsängen
med många möjligheter

Internationell upplaga

STIEGELMEYERGROUP



BURMEIER

Regia – den låga sängen för skydd, komfort och bekvämlighet


När vårdbehövande bor hemma blir deras säng ofta medelpunkten i vardagen. Sova, måltider, tv, samtal – mycket sker i vårsängen när hälsotillståndet eller dagsformen gör det svårt att gå upp. Därför ska sängen med sin komfort och trevnad skapa en atmosfär av trygghet, främja den boendes rörlighet och avlasta de vårdande anhöriga. Vår Regia med det innovativa Easy-Switch-systemet uppfyller dessa krav på bästa möjliga sätt.

Regia vänder sig till kunder som vill ha en vårsäng med många designmöjligheter och modern teknisk support. Som låg säng med stort höjjusteringsområde främjar den fallprevention och möjliggör samtidigt en ryggvänlig vård. Det teleskopiskt delade

sidoskyddet kombinerar skydd och frihet i en optimal balans. Med hjälp av Easy-Switch-systemet går det även att klicka på och av på några sekunder. På så sätt möter sängen förändrade behov och kan lätt anpassas till nya situationer. Med dubbelsängen Regia partner kan par återigen njuta av harmoniska timmar tillsammans.

På begäran erbjuder Regia hårt stoppade gavlar och sidopaneler. Högkvalitativa tyger eller konstläder och ett stort urval av eleganta trädekorer förvandlar sängen till ett mysigt designföremål som passar alla smaker.

Titelsida: Regia med gavelkombination Primus/Primus-Low i dekoren Körsbär Havanna

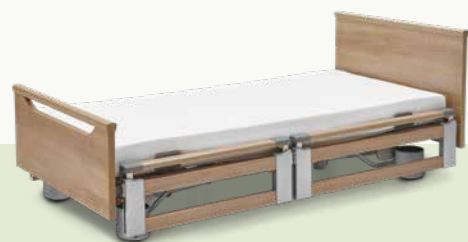

- **Stort höjjusteringsområde:**
26–80 cm

- **Hög och säker arbetsbelastning:**
225 kg

- **Individuellt anpassningsbar:**
 - Liggytans bredd 90 eller 100 cm
 - Teleskopiskt delat sidoskydd för flexibelt skydd
 - Sidoskydd, gavlar och paneler kan monteras lätt och utan verktyg med Easy Switch



Lysande tyger

Huvud- och fotdelar kan förses med hemtrevliga tyger om så önskas. Om inga komponenter av det delade sidoskyddet är konfigurerade kan också paneler i trä-, tyg- eller läderlook monteras. Sängen passar alla inredningsstilar.



Elegant konstläder

Om Regia kläs med elegant konstläder över hela sängen ser den inte längre ut som en vårsäng. Ändå kan användarna njuta av alla fördelar med de elektriska justeringarna. Sidoskydd eller komponenter med ett annat utseende kan eftermonteras när som helst. På så sätt förändras sängen efter dina behov.



Dubbelsäng Regia partner

- **Flexibel seniorsäng för par:**
 - Individuellt justerbara stöd i liggytan
 - Bekväm sittposition
 - Sänghalvorna kan enkelt separeras och åter sättas ihop
 - Attraktivt utseende

Innehåll

2 Inledning

4 Regia

5 Regia partner

7 Sidoskydd

8 Easy-Switch-system

10 Höjjustering

11 Komfortfunktioner

13 24-volts-drivningssystem

15 Madrasser

16 Tillbehör

18 Tekniska data

19 Stiegmeyer-gruppen



Den eleganta låga sängen Regia anpassar sig till alla komfort- och skyddsbehov.

Regia


En säng för höga individuella anspråk

En vårsäng med mycket komfort och säkerhet, som upprätthåller de boendes **rörlighet**, avlastar vårdare och erbjuder många hemtrevliga designmöjligheter – så kan vår Regia beskrivas. Med denna modell får både privatkunder och anspråksfulla äldreboenden en säng som flexibelt kan anpassas till växlande krav.


Som **låg säng** med ett stort höjjusteringsområde på 26 till 80 cm och delade sidoskydd som tillval skyddar Regia boende från fallskador utan åtgärder som begränsar deras frihet. Därigenom följer den filosofin **Werdenfelser Weg** att inte begränsa friheten för människor i behov av vård.

Starka fördelar

- Skötselhöjd på upp till 80 cm tillåter ett ryggvänligt arbete vid sängen
- 225 kg säker arbetsbelastning även för boende med övervikt
- Bredd på 100 cm på liggytan och sängförlängning på ca 20 cm finns som tillval
- 4-delad liggyta i metall med elektriskt inställbart högt benläge
- Selektivt låsbar handkontroll

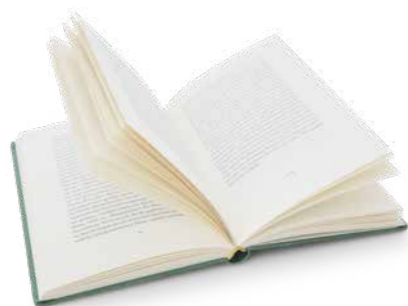

Yttermått/höjdställningsområde:

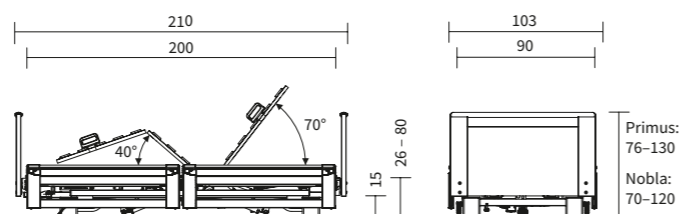

Produktegenskaper:



Elegant klädsel eller hemtrevlig trädekor, sidopaneler eller sidoskydd – på dubbelsängen Regia partner kan par välja.

Regia partner

Dubbelsängen för en tillfredsställande vardag

Tilltagande otrygghet och behov av vård i ålderdomen ställer par inför många utmaningar. Det gäller även frågan om **att dela säng**. Ofta flyttar en partner till en vårsäng, medan den andra ligger ensam i äktenskapssängen. Förtrogenhet och intimitet i förhållandet blir lidande. I det här fallet erbjuder vår dubbelsäng Regia partner en idealisk lösning.


Regia partner kombinerar de **omvårdande styrkorna** och komforten med en enkelsäng med **säkerhetsfunktioner** speciellt anpassade för par. Dessutom kan de två halvorna enkelt separeras och åter sätts ihop, om värden vid sängen kräver detta eller om partnerna under en tid vill sova i separata rum.

Starka fördelar

- Stort höjdställningsområde på 26–80 cm
- 2 liggytor à 90 x 200 cm
- Säker arbetsbelastning på 225 kg per liggyta
- Ryggstöd och benstöd på liggytorna kan justeras individuellt
- Höjjustering och lågt fotläge på sängstommen är alltid synkroniserade, så att det inte finns någon risk för att de boende kläms
- Ombyggnader och sidoskydd kan flexibelt anpassas med Easy-Switch-systemet



Yttermått/höjdställningsområde:

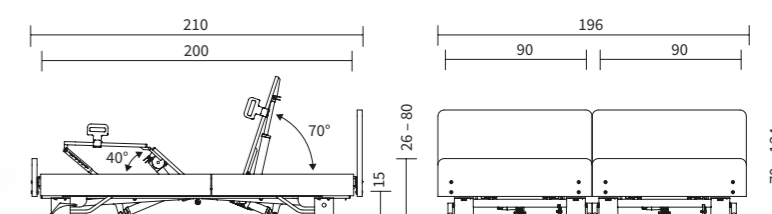

Produktegenskaper:





- ▲ Den lätta separationen av sänghalvorna underlättar vården vid sängen och städningen av rummet.

Komfort och säkerhet för par

Regia partner erbjuder sina två användare individuell komfort, samtidigt som den skyddar dem samt avlastar vårdarna. Rygg- och benstöden på båda liggytorna kan justeras **individuell** så att exempelvis en partner fortfarande kan läsa när den andra redan har somnat. Varje sänghalva har sin **egen handkontroll**.

Sängstommen å andra sidan rör sig alltid **synkront** med den stora höjdjusteringen från 26 till 80 cm och fällningen till det låga fotläget. På så sätt undviks fria utrymmen mellan liggytorna där de boende skulle kunna klämmas fast. Delade sidoskydd som tillval, som kan eftermonteras när som helst, säkerställer en skräddarsydd säkerhet.



- ▲ Varje sänghalva har som standard sin egen handkontroll.

BO SÄKERT HEMMA

Sittpositionen

Elektriskt justerbara dubbelsängar är ofta bara enkelsängar med få funktioner som står bredvid varandra. Regia partner övertygar däremot särskilt med sin fällbarhet till en bekväm sittposition. Den stöder andningen, underlättar måltider i sängen och främjar deltagande i vardagen på ögonhöjd.



- ▲ Sängstommen rör sig alltid synkront, medan liggytorna kan justeras individuellt. Därigenom uppstår till exempel en bekväm sittposition.



- ▲ Uppställningen i huvudändan till det andra läget erbjuder en idealisk balans mellan frihet och standardiserat skydd.



- ▲ I det första läget är TSG ett orienteringshjälpmedel och möjliggör oberoende i- och urstigning när det ställs upp i huvudändan.



- ▲ Brädornas diagonala uppställning ger en bra känsla av säkerhet.



- ▲ Boende som riskerar att falla ur sängen skyddas säkert vid fullständig uppställning.

Moderna sidoskydd

Regias teleskopiska delade sidoskydd (TSG) kan enkelt och utan ansträngning dras upp. Om bara halvan i huvudändan ställs upp har den vårdbehövande tillräckligt med utrymme att ta sig i och ur sängen. Du kan om så önskas endast utrusta sängen med sidoskydd i huvudändan – med en längd på 110 cm erbjuder komponenterna ett skydd i enlighet med gällande standard.

TSG kan dras ut uppåt i 2 steg. I första läget ger de den boende orientering och förblir optiskt så diskreta att sikten är fri över hela rummet. Det andra läget ger ett fullt skydd. En diagonal uppställning av brädorna är också till hjälp för en bra känsla av stöd och säkerhet. Alla delar av TSG kan också monteras och tas bort som sidopanelerna och gavlarna med några få handgrepp – det innovativa Easy-Switch-systemet gör det möjligt. Regia anpassar sig därigenom till alla behov och främjar de vårdbehövandes rörlighet.

För boende som har hög risk att falla ur sängen och vid användning av höga antidecubitusmadrasser rekommenderas att tillvalet **kontinuerligt sidoskydd (DSG)** väljs. Även det kan utan problem monteras och tas av – med Easy-Click-systemet.



- ▲ Tillvalet kontinuerligt sidoskydd (DSG) kan fästas på några sekunder med hjälp av Easy-Click-systemet.



- ▲ Med DSG får de boende som riskerar att falla ur sängen maximalt skydd (likt som på bilden).



Det patenterade systemet för anpassningsbara vårdsängar med standardenlig säkerhet


Välj Regia med teleskopiskt, delat sidoskydd eller utan sidoskydd och njut av vårt flexibla system Easy Switch. Principen för Easy Switch är lika enkel som övertygande: Delarna i sidoskyddet, gavlar och sidopanelerna kan sättas fast och tas bort **utan verktyg**. För det används lättanvända lås som enkelt snäpps på plats och som den boende inte kan öppna av misstag. Gavlar från Nobla-serien och paneler kan på begäran levereras med **klädsel i tyg eller konstläder**.

Tack vare det enkla Easy-Switch-systemet kan Regia under användningens gång enkelt utrustas med sidoskydd eller ett nytt utseende och **anpassas efter dina behov**. Detta gör den till en säng som utvecklas med dig och stöttar dig i varje fas av livet. De avtagbara sidoskydden möjliggör även snabb ombyggnad, alltid anpassade efter respektive vårdssituation. Dessutom gör de det mycket lättare att ställa upp sängen.

Modulär konstruktion och montering utan verktyg

Byt ut huvuddelar på några sekunder – om så önskas

- Hemtrevliga designvarianter, med eller utan grepplister
- Välj mellan attraktiva trädekorer, tyger och konstläder
- Gavlar och sidopaneler kan kombineras fritt

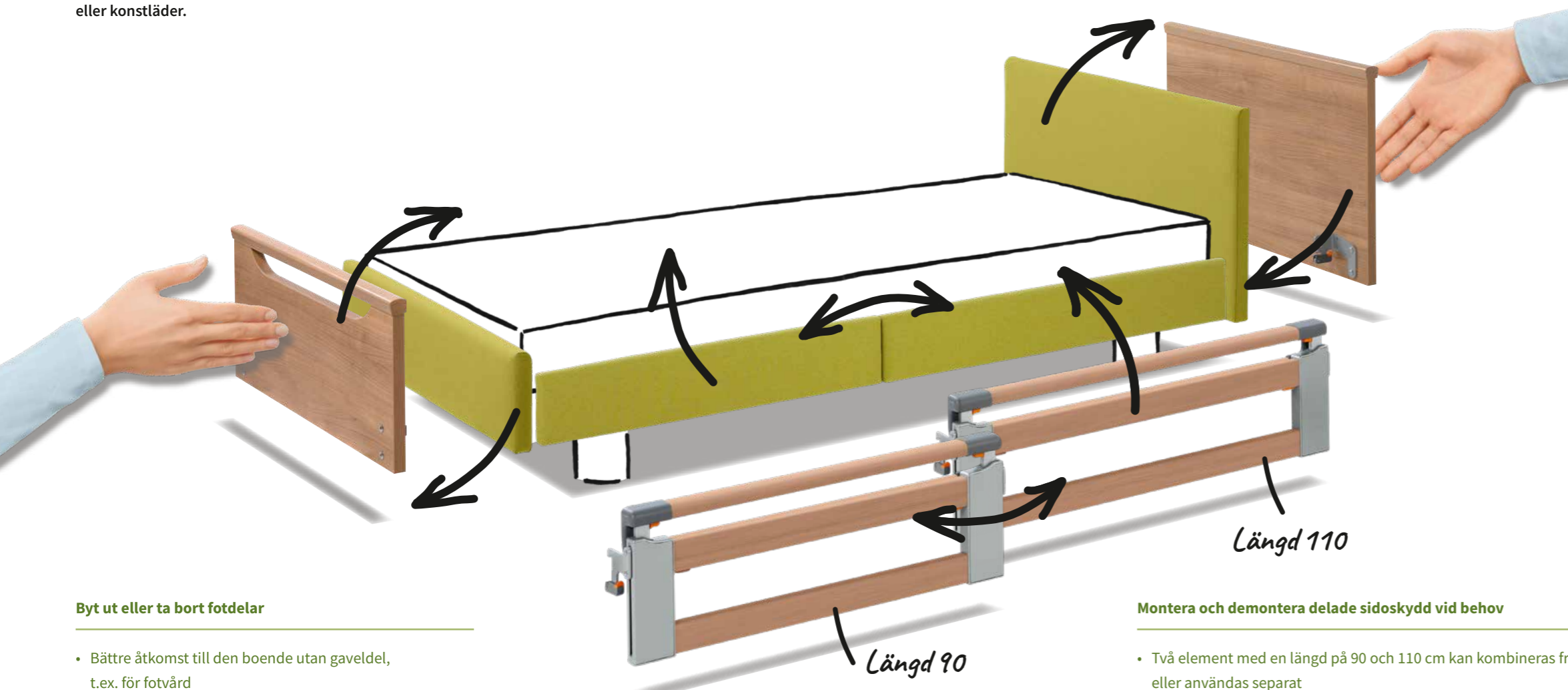

Byt ut eller ta bort fotdelar

- Bättre åtkomst till den boende utan gaveldel, t.ex. för fotvård
- Välj mellan höga fotdelar för en känsla av trygghet eller låga fotdelar för fri sikt
- Välj mellan attraktiva trädekorer, tyger och konstläder

! Sidoskydden kan kombineras fritt: 110/90 eller 90/110


Montera och demontera delade sidoskydd vid behov

- Två element med en längd på 90 och 110 cm kan kombineras fritt eller användas separat
- 110 cm i huvudändan ger sidoskydd i enlighet med gällande standard
- 90 cm i huvudändan ger en känsla av säkerhet och orientering och lämnar gott om plats för att stiga i och ur sängen

BO SÄKERT HEMMA


Mer flexibilitet och ökad säkerhet med Easy Switch

Sängar med Easy Switch uppfyller växlande skyddsbehov hos de boende och kan anpassas utseendemässigt efter personlig smak. Det flexibla sidoskyddet ger ett normenligt skydd, utan att det begränsar den vårdbehövandes rörlighet.

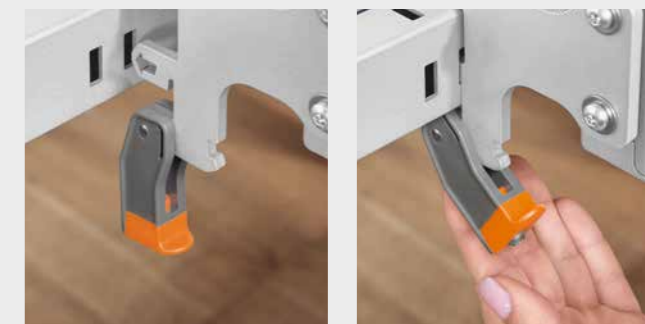

▲ Alla Easy-Switch-delar sätts i sängramen och fästes med lättanvända lås.

▲ Tryck bara på låset uppåt.

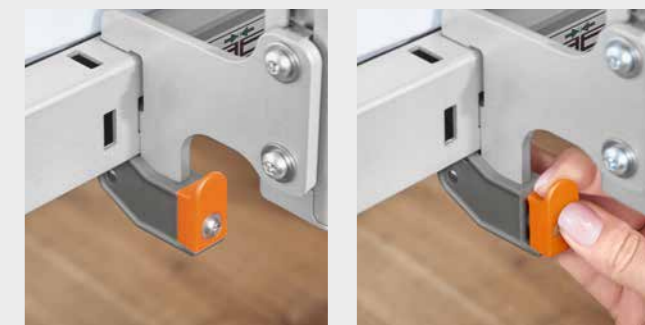

▲ Låset snäpper fast – delen är fastsatt.

▲ Dra den orange säkringen framåt och tryck ner låset för att lossa fästet igen.





Det lägsta läget på endast 26 cm skyddar mot fallskador.

Alltid på rätt höjd



▲ Det automatiska mellanstoppet vid ca 40 cm är den idealiska höjden för många för att stiga sig i och ur sängen.



▲ Den ergonomiska vårdhöjden på upp till 80 cm skonar de anhörigas ryggar.

Inom omvårdnaden utgör **låga sängar** ett viktigt bidrag till att undvika fallskador. Från en position nära marken är risken för boende endast liten, även om sidoskydden inte är uppställda. Enligt filosofin Werdenfelser Weg kan frihetsberövande åtgärder på så sätt lätt undvikas.

Med sitt **stora höjdjusteringsområde** på 26 till 80 cm uppfyller Regia alla vårdkrav. Den lägsta positionen ger den boende optimalt skydd i sängen. Med handkontrollen kan sängen justeras enkelt och intuitivt. Tack vare sin **3-stopsfunktion** stannar den automatiskt i ett mittläge på ca 40 cm – den idealiska höjden för enkel i- och urstigning. I det övre läget på upp till 80 cm erbjuder Regia vårdaren möjligheten att arbeta **ergonomiskt på höfthöjd**.

Starka fördelar

- Stort höjdjusteringsområde på ca 26–80 cm
- Steglös justering med enkel handkontroll
- En låg säng möjliggör fallprevention utan frihetsbegränsande åtgärder
- Ergonomisk vårdhöjd skyddar vårdpersonalens och anhörigas ryggar och upprätthåller deras hälsa
- Optimal i- och urstigningshöjd främjar den boendes rörlighet



I sittande ställning kan den vårdbehövande delta i vardagen på ögonhöjd.

Komfort

Njut av vardagen med en ny livslust

Tack vare sina flexibla justeringsmöjligheter erbjuder Regia många alternativ för att göra det möjligt för de boende att leva på ögonhöjd igen. Sängen kan sättas i ett **lågt fotläge** på upp till 15° med handkontrollen. I kombination med det upp till 70° justerbara ryggstödet ger den därigenom en bekväm **sittposition**. Vårdbehövande kan sätta sig upp utan ansträngning. Inget står längre i vägen för ett livligt samtal eller en mysig kväll framför tv:n. Att äta är också mycket bekvämare i sittande ställning. Samtidigt minskar risken för aspiration.

Underbensstödet kan ställas i horisontellt läge med hjälp av handkontrollen, om hälsoskäl gör att ett **högt benläge** önskas.



BO SÄKERT HEMMA

Regia movo

Om de boende inte längre kan gå upp ofta säkerställer en mobil vårdssäng en vitalare vardag. Modellvarianten Regia movo kan manövreras utan ansträngning och köras till vardagsrummet eller till terrassen.

- Stora 100 mm dubbla hjul för enkel körbarhet
- Spårrulle gör det lättare att styra sängen
- Höjdjusteringsområde 28–83 cm
- Centralt hjullås (standard på alla Regia-varianter)




Den låga sängen Regia skyddar mot fallskador, utan att begränsa friheten och komforten för de boende.



◀ Spänningsomvandlaren SwitchMode genererar en skyddsklenspänning på 24 volt direkt vid uttaget.

BO SÄKERT HEMMA

Minskad strömförbrukning

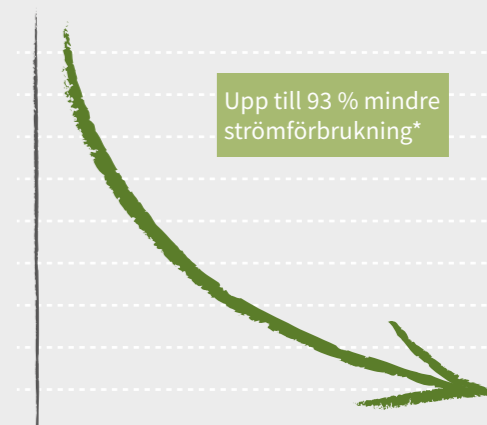

* Jämfört med 230-voltssystem vid ca 5 justeringar per dag

24-volts-drivningssystem


24-volts-drivningssystemet från Burmeier erbjuder en optimal säkerhetsstandard för hemvård. Alla spänningsförändrande 230-volts-komponenter befinner sig utanför sängen. Den elektroniska spänningsomvandlaren **SwitchMode** sitter direkt bakom nätkontakten. På så sätt har de boende högsta möjliga säkerhet.

Sängen är strömlös så länge handkontrollen inte aktiveras. Det minskar strömförbrukningen med upp till 93 %. Att man inte behöver utföra läckströmsmätningar, certifierade av **TÜV Rheinland**, sparar in ännu mer kostnader och arbete. En obligatorisk läckströmsmätning måste utföras vartannat år för vård-sängar i kommersiellt bruk. Med 24-voltssystemet förlängs den tiden så mycket att ingen ytterligare mätning behövs utöver vårdsängens förväntade livslängd. Bruksanvisningen ger information om användningsperiodens längd.

Ingen läckströmsmätning krävs, inte ens vid första drifttagningen, eftersom den redan har utförts på fabrik. Det innebär att **ingen elektriskt utbildad person** behöver vara med när sängen tas i drift – det sparar in extra kostnader.

BO SÄKERT HEMMA

Starka fördelar

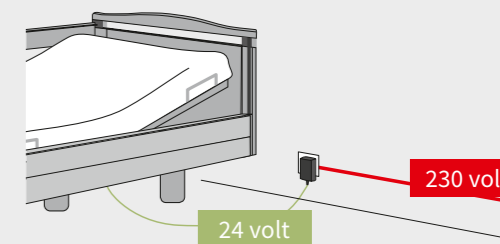

- Skyddsklenspänningen från transformatorn direkt vid uttaget
- Inga 230-volts-komponenter vid sängen
- Ingen läckströmsmätning efter uppställning utöver sängens förväntade livslängd
- Ett testcertifikat för varje säng finns att ladda ned



Stilfull och elegant – Regia övertygar med sin tidlösa design i kombination med unika tekniska fördelar.



Sky-fit-premiummadrassen (här utan överdrag) anpassar sig exakt till Regias liggyta.

Tillgänglig för
mått på liggytan:

Sky-fit
90 x 200 cm
100 x 200 cm

Comfort-fit
90 x 200 cm
100 x 200 cm

Basic-fit
90 x 200 cm
90 x 220 cm
100 x 200 cm
100 x 220 cm

Madrasser

Njut av en hälsosam sömn

Unna dig själv eller dina nära och kära ännu mer komfort genom att välja en Burmeier-madrass till din Regia. Våra vårdängsmadrasser flyttas med exakt när rygg- och lårstöden justeras, så att hälsofrämjande liggställningar uppnår sin fulla effekt. Modellerna Sky-fit och Comfort-fit är därutöver vändbara madrasser med en slät sida och en inskuren sida. Därigenom blir dessa madrasser aldrig ”för hårda” eller ”för mjuka” – de kan helt enkelt vändas och erbjuder två olika liggkänslor.



▲ Modellen Sky-fit med högkvalitativt Skytherm®-skikt.

Sky-fit – premiummodellen

- Högkvalitativ 2-lagers-madrass med 2 cm Sky-therm®-skikt och 12 cm kallskumskärna
- Snitt i kärnan säkerställer optimal anpassning till liggytan
- Båda sidorna kan användas som liggytor
- Kantzonsförstärkning för bekvämt sittande på sängkanten
- Avtagbart vändbart överdrag, ena sidan polyuretan (PU), andra sidan polyester och viskos, rengöring i vanlig tvättmaskin
- Kompressionshårdhet 5,0 kPa (kantzoner), 4,0 kPa (kärna), 2,5 kPa (ytterskikt), volymvikt 50 kg/m³ (kärna), 40 kg/m³ (ytterskikt)



▲ Modellen Comfort-fit med kantzonsförstärkning.

Comfort-fit – mellanklassen

- Den bekväma madrassen med en kärna av elastisk polyuretan-kallskum (14 cm)
- Snitt i kärnan säkerställer optimal anpassning till liggytan
- Båda sidorna kan användas som liggytor
- Kantzonsförstärkning skyddar mot utrullning
- Avtagbart vändbart överdrag, ena sidan polyuretan (PU), andra sidan polyester och viskos, rengöring i vanlig tvättmaskin
- Kompressionshårdhet 5,0 kPa (kantzoner), 4,0 kPa (kärna), volymvikt 40 kg/m³



▲ Modell Basic-fit.

Basic-fit – instegsmodellen

- Enskiktsmadrass gjord av bekväm polyuretan (12 cm)
- Vitt, avtagbart PU-överdrag, rengöring i vanlig tvättmaskin
- Kompressionshårdhet 4,5 kPa, volymvikt 40 kg/m³



▲ **Sängförlängningen** med ca 20 cm sätts enkelt in i sängramen. Matchande stoppningsdelar för att förlänga madrassen finns också.



▲ **Komfortliggytan** består av 50 rörliga fjädrar.



▲ **Sängklädeshyllan** är mycket praktisk när man bäddar sängen.



▲ **Skumläderklädsel** som stötskydd på sidoskyddet.



▲ **Läslampan** kan väljas för insättning i lyftbågehylsan eller för fastsättning på lyftbågen.



▲ **Undersängsbelysningen** är till för att ge en bättre orientering på natten och skapa ytterligare säkerhet.



▲ Med den böjbara **hållaren** befinner sig handkontrollen alltid i rätt position.



▲ Med **förlängningskabeln** på 1,40 m kan handkontrollen användas i hela rummet.




▲ **Stötfångare** skyddar sängen och rummets inredning vid förflyttning och höjdjustering.

Praktiska tillbehör

Med originaltillbehör från Burmeier kan din Regia förvandlas till en skraddarsydd drömsäng och erbjuda ännu mer komfort och skydd. Exempelvis rekommenderas en **sängförlängning** på ca 20 cm för mycket långa boende. Den sätts helt enkelt in i sängramen vid fotändan. På sängar med delat sidoskydd kan **två 110 cm långa delar** täcka den förlängda liggytan om så önskas.

Tillbehör som **skumläderklädsel** för sidoskyddet eller **undersängsbelysning** för bättre orientering på natten ökar avsevärt säkerheten för den boende. **Komfortliggytan** med sina fritt fällbara delar, **den flexibla hållaren** för handkontrollen eller **sängklädeshyllan** ger mer komfort och avlastning i vardagen.

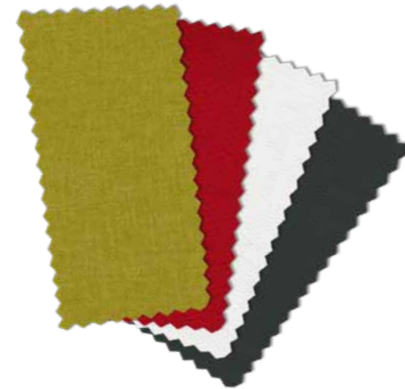

▲ **Tyger:**
Ljusgrön Tiba 6210
Röd Tiba 3210

▲ **Konstläder:**
Vit 1-1142-197
Antracit 1-1142-395

Dekorer¹⁾



▲ Körsbär Havanna



▲ Lindberg ek



▲ Bok natur



▲ Kungslönn



▲ Körsbär ädel

¹⁾ Regia partner: Bok natur och Körsbär Havanna

Gavlar²⁾



▲ Primus stängd i huvudändan, fotända med grepplister (endast trädekor)



▲ Primus i huvudändan, Primus-Low i fotändan (endast trädekor)



▲ Nobla (trädekor eller klädd, längre leveranstid)



▲ Nobla i huvudändan, Nobla mala i fotändan (trädekor eller klädd)



▲ Prinzino (endast trädekor, längre leveranstid)

²⁾ Regia partner: endast med kombinationerna Nobla eller Nobla mala, trädekor eller klädd

Utrustning och alternativ

Utförande	Regia	Regia partner
Liggyta 90 x 200 cm	✓	-
Liggyta 100 x 200 cm	0	-
Liggyta 2 x 90 x 200 cm	-	✓
Höjjustering	26-80 cm Regia movo: 28-83 cm	26-80 cm
Säker arbetsbelastning	225 kg	2 x 225 kg
4-delad liggyta i metall med utvandrande ryggstöd	✓	✓
Elektrisk höjning av underbensstödet (21 cm)	✓	✓
Lågt fotläge (15°)	✓	✓
Centrallås för fyra hjul Ø 50 mm (Regia movo: Ø 100 mm)	✓	✓
Linak-24-volts-drivningssystem	✓	-
Dewert-230-volts-drivningssystem	-	✓
Huvud- och fotdel Primus (endast trädekor)	0	-
Huvuddel Primus och fotdel Primus-Low (endast trädekor, ej tillgänglig med kontinuerligt sidoskydd DSG)	0	-
Huvud- och fotdel Prinzino (endast trädekor)	0	-
Huvud- och fotdel Nobla (trädekor eller klädd, ej tillgänglig med DSG)	0	0
Huvuddel Nobla och fotdel Nobla mala (trädekor eller klädd, ej tillgänglig med DSG)	0	0
Dekorer Körsbär Havanna, Lindberg ek, Bok natur, Kungslönn, Körsbär ädel*	0	Bok natur, Körsbär Havanna
Teleskoperbart sidoskydd (TSG) med Easy Switch		
- 2 delar 110/90 cm, kompletterande sidopaneler ingår vid behov	0	0
- 2 delar 110/110 cm, kompletterande sidopaneler ingår vid behov	0	0
- 2 delar 90/90 cm, kompletterande sidopaneler ingår vid behov	0	0
- Inget sidoskydd, 4 sidopaneler	0	0
- Klädda sidopaneler	0	0
Kontinuerligt sidoskydd (DSG) med Easy Click på båda sidor	0	-
Kontinuerligt sidoskydd (DSG) med Easy Click på en sida, kombinerat med TSG/sidopaneler	0	-
Sängförlängning (ca 20 cm)	0	0 (endast på båda sidorna)
Lyftbåge med triangelhandtag	0	0
Sängbelysning	0	-
Nödsänkning batteri	0	0
Skumläderklädsel (tillgänglig för TSG och DSG)	0	0 (endast TSG)
Läslampa	0	0
Sängklädeshylla	0	-
Stötfångare (valfritt 2 st./4 st.)	0	-
Komfortliggyta	0	0
Flexibel hållare för handkontroll	0	-
Förlängningskabel till handkontroll (1,40 m)	0	-
Trendelenburg-handkontroll (endast för vårdinrättningar)	0	-

* Körsbär ädel för gavlarna Primus och Primus-Low

✓ = ingår som standard
0 = finns som tillval

Ytterligare pris-/
konfigurationshjälp-
medel på
www.burmeier.com



Värdebevarare Framtidsdesigner

STIEGELMEYERGRUPPE

Värdebevarare

Vårt företag grundades år 1900 i Herford och har varit familjeägt sedan dess. Respekt och ansvar gentemot våra kunder, anställda och partners är grunden för vårt dagliga arbete. Med utgångspunkt i sådana värden och många års erfarenhet erbjuder vi våra kunder världen över högkvalitativa produkter, lösningar och tjänster inom vård och hälsa.

Framtidsdesigner

För att hantera de snabba förändringarna inom vård och hälsa, utvecklar vi alla våra produkter själva. Innovationer och visioner för framtidens vård är målet med vårt arbete. Vi står i ständig kontakt med våra kunder så att vi kan hjälpa dem i det vardagliga arbetet. Att förverkliga morgondagens trender redan idag är en framgångsrik tradition hos oss.

Vår expertis

Sjukhus

Vårdhem

Vård i hemmet

Bekväma sängar

Objektmöbler

Service



Stiegelmeier-gruppen är din internationella partner för sjukhus och vårdinrättningar, och med varumärket Burmeier för vård i hemmet. Vi hjälper våra kunder med praktiska produkter, lösningar och tjänster som vi utvecklar fortlöpande.

- Grundades 1900 och är fortfarande familjeägt
- Över 1 100 anställda över hela världen
- Tillverkning av alla kärnprodukter i egna fabriker
- Produktutveckling och produktion i Tyskland
- Service, utbildning och processoptimering hos kunden
- Internationella certifieringar och export till mer än 60 länder
- Distributörer i Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Polen och Sydafrika

Våra varumärken

STIEGELMEYER

BURMEIER



Burmeier GmbH & Co. KG

Industriestraße 53
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Ett företag i Stieglmeyer-gruppen

Huvudkontor/Headquarters

Deutschland/Germany

Stieglmeyer GmbH & Co. KG

Ackerstraße 42
32051 Herford
Tel: +49 (0) 5221 185 - 0
Fax: +49 (0) 5221 185 - 252
info@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.com

France

Stieglmeyer SAS

16 Avenue de l'Europe
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stieglmeyer.fr
www.stieglmeyer.fr

South Africa

Stieglmeyer Africa (PTY) Ltd

The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stieglmeyer.com
www.stieglmeyer.co.za

Nederland / Netherlands

Stieglmeyer BV

Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone +31 (0) 345 581 - 881
info@stieglmeyer.nl
www.stieglmeyer.nl

Suomi / Finland

Stieglmeyer Oy

Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stieglmeyer@stieglmeyer.fi
www.stieglmeyer.fi

Polska / Poland

Stieglmeyer Sp. z o.o.

86-212 Stolno
Grubno 63
Phone +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stieglmeyer.pl
www.stieglmeyer.pl



Hitta din kontaktperson på vår webbplats:
Find your local partner on our website:
www.stieglmeyer.com/partner

burmeier.com