

# Mercury Advance SMARTcare®

Een verandering in zorgverlening

Intelligent  
Pressure Care  
Management



- Mercury Advance SMARTcare® is een innovatieve oplossing ter voorkoming en behandeling van decubitus. Het biedt effectieve duale therapie met een enkel oppervlak door het combineren van geavanceerde, klinisch bewezen technologieën die eerder alleen beschikbaar waren in afzonderlijke hybride oppervlakken.



Klinische toepassingen/categorie  
decubitus



Ze  
er  
ho  
og  
ris  
ico

3 kleine gekartelde schuim en  
luchtcellen om de bovenrug en  
schouders te ondersteunen.

Vaste hoofdzone van  
alleen schuim.

7 grote gekartelde schuim en  
luchtcellen voor ondersteuning van  
de torso, onderrug, dij en benen.

Een unieke lage druk hielzone met  
alleen lucht laat de hielen 'zweven'  
waardoor de druk op dit zeer  
kwetsbare gebied vermindert.

De Dartex™ vochtdoorlatende, uittrekbare  
hoes heeft op hoge frequentie gelaste  
naden en een beschermende flap voor de  
rits die voldoet aan de striktste eisen op  
het gebied van infectiecontrole.

Eenvoudig leeg laten  
lopen met CPR-label.

Afhankelijk van de klinische beoordeling  
kan de wisselfunctie gebruikt worden  
met lage of hoge druk.

Een speciaal ontworpen U-kern  
helpt de druk op het hielgebied  
te minimaliseren.

Door de hoge kwaliteit CME-  
schuim gevat in de luchtcellen  
is het matras in staat  
wisselende drukverlichting in  
aangedreven modus te leveren.


In niet-aangedreven modus optimaliseert de klinisch  
bewezen luchtverplaatsingstechnologie continue de  
drukverdeling in reactie op het lichaamsgewicht en de  
beweging van de patiënt.

Bij gebruik in aangedreven/dynamische modus levert de  
Mercury Advance SMARTcare® drukverlichting door  
middel van een reeks verbonden wisselende schuim  
en luchtcellen. Niet gehinderd door een bovenlaag van  
schuim op het matras zorgt de unieke 'schuim in luchtcel'-  
constructie voor effectieve drukverlichtingstherapie.

## Een verandering in zorgverlening

Het is klinisch bewezen dat Mercury Advance SMARTcare® helpt bij het voorkomen en behandelen van decubitus. Mercury Advance SMARTcare® representeert een verandering in zorgverlening, bereikt door het aantal stappen en de tijd te verminderen die er mee gemoeid is om patiënten op het juiste ondersteuningsoppervlak te krijgen, is een betere kosteneffectieve methode en maakt het beste gebruik van middelen. Mercury Advance SMARTcare® kan eenvoudig opgeschaald worden van de statische naar de dynamische modus en weer terug indien klinisch vereist, zonder vertragingen, bijkomende administratie of transporteisen voor de patiëntoverdracht.

- Mercury Advance SMARTcare® combineert de meest innovatieve en klinisch bewezen technologieën voor drukzorg in een enkel ondersteunend oppervlak.

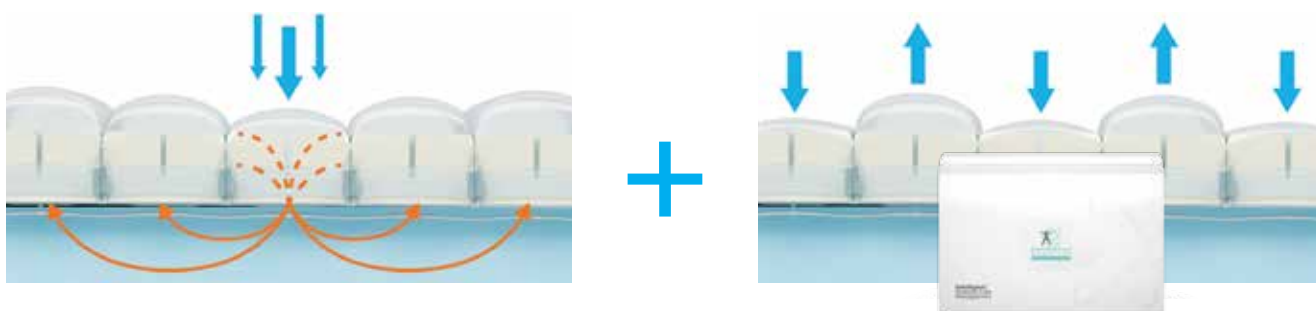

### EFFECTIEVERE, CONTINU GEOPTIMALISEERDE DRUKVERDELING

- CME-schuim en luchtcellen met strenge specificaties
- Geavanceerde luchtverplaatsingstechnologie optimaliseert continu de drukverdeling in reactie op het gewicht en beweging van de patiënt
- De unieke hielzone met 'alleen lucht' verlicht effectief de druk op dit kwetsbare gebied

### EFFECTIEVE DRUKVERLICHTINGSTHERAPIE

- Sluit eenvoudigweg de voedingseenheid aan voor de wisselfunctie
- Unieke 'schuim in luchtcel'-constructie voor effectievere therapie
- 10 minuten, 2-in-1 wisselcyclus
- Keuze uit lage of hoge instelling

Alle componenten zijn uitwisselbaar en vervangbaar waardoor de levensduur gemaximaliseerd wordt en een kosteneffectieve oplossing voor drukzorgmanagement geboden wordt.

#### Compatibiliteit met infectiecontrole/hypochlorietoplossing

De matrashoes/regeleenheid moet worden afgenomen met een juist verdunde natriumhypochlorietoplossing en warm water.

Gebruik een hypochlorietoplossing verdund tot 1.000 deeltjes per miljoen beschikbaar chloor. Gebruik voor zware bevuiling een hypochlorietoplossing verdund tot 10.000 deeltjes per miljoen beschikbaar chloor. Goed afspoelen na het schoonmaken.

#### Technische specificaties

Productcode	MAT1610079
Risicocategorie	Zeer hoog risico
Gewichtslimiet	Geen minimum gewichtslimiet. Product is beoordeeld op een capaciteit van 254 kg
Garantie	2 jaar
Afmetingen	Standaard afmeting (lengte) 198 cm x (breedte) 88 cm x (hoogte) 15 cm
Productgewicht	13,3 kg matras/1,7 kg voedingseenheid
Cyclusduur	10 minuten
Werkingsmodus	Elektronisch
Voltage	220V – 240V / 50HZ
Stroomverbruik	10W
Classificatie	Ila
Kleur	Blauw

**Intelligent®  
Pressure Care  
Management**

