

EasyBelt, hug

SystemRoMedic



EasyBelt, hug


Siirto- ja talutusvyö

SystemRoMedic™ EasyBelt, hug -siirto- ja talutusvyötä käytetään muun muassa siirtojen, seisomaannousujen, seisoma-asennon sekä kävelyn avustamiseen ja tukemiseen.

Vyötä on saatavana useina kokoina. EasyBelt hugin sisäpuoli on luistamatonta polyuretaanipinnoitettua nailonia. Materiaalin ansiosta vyötä voidaan käyttää kosteissa ympäristöissä tai tilanteissa, joihin liittyy erityisiä hygieniavaatimuksia.

Hug-muotoilu lisää käyttömukavuutta ja tukea

EasyBelt, hug -siirto- ja talutusvyö on kehitetty tukemaan käyttäjää entistä paremmin siirtotilanteissa. Vyön vaakasuuntaiset kahvat liukuvat vapaasti silmukoiden läpi, minkä ansiosta vyö ei nouse ylöspäin vaan mukautuu ja kiristyy pehmeästi käyttäjän ympärille. Hug -muotoilun ansiosta avustaja voi paremmin tukea avustettavan liikkumista, käyttämättä silti enempää voimaa.

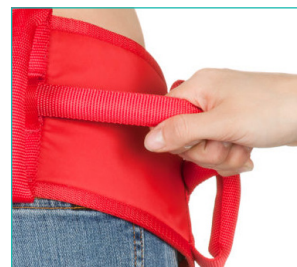


EasyBelt, hug täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen 2017/745 luokan 1 tuotteille asetetut vaatimukset.



EasyBelt, hug

SystemRoMedic

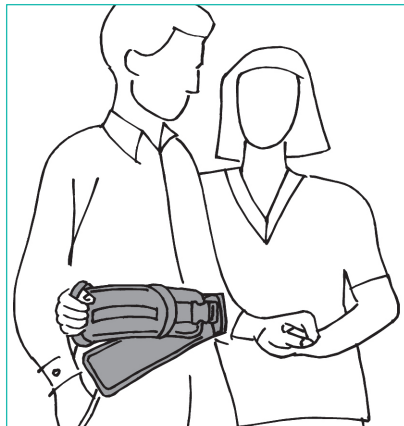

EasyBelt, hug -vyötä käytetään istuallaan tapahtuviin siirtoihin tai tukena käyttäjän seistessä tai kävellessä.

TEKNISET TIEDOT

- Ulkomateriaali: naiton
- Sisäpuolinen materiaali: kosteutta hylkivä polyuretaanipinnoitettu naiton
- EasyBelt, hug -vyötä suositellaan ympäristöihin, joihin liittyy erityisiä hygieniavaatimuksia

Tuotenumero	Nimi	Koko	Mitat	Kahvat	Max. kuormitus (SWL)
6002	EasyBelt, hug	XS	45-70 cm	3+2	170 kg
6003	EasyBelt, hug	S	60-100 cm	4+3	170 kg
6004	EasyBelt, hug	M	70-120 cm	5+4	170 kg
6005	EasyBelt, hug	L	100-160 cm	6+5	170 kg
6006	EasyBelt, hug	XL	115-175 cm	7+6	170 kg

EasyBelt, hug on helppo yhdistää moniin muihin siirron apuvälineisiimme.

Katso lisätietoja osoitteesta: www.directhealthcaregroup.com/fi.



EasyBelt, hug täyttää lääkinällisten laitteiden asetuksen 2017/745 luokan 1 tuotteille asetetut vaatimukset.

DHG
Moving Health Forward

Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35, SE-164 40 Kista, Sweden
Tel: +46 8 557 62 200
info.se@directhealthcaregroup.com
dhg-healthcare.com

MediMattress
Parempaan hoitoon
OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4 | 00550 HELSINKI
p. 0306 40 40 40
asiakaspalvelu@medimattress.fi | tilaus@medimattress.fi
www.directhealthcaregroup.com/fi