

MiniLift160EM/EE

System**RoMedic**

Kompakti koko

Vaivaton ohjattava

Kahvat mahdollistavat hyvän otteen, ja sivutuet antavat paljon vaihtoehtoja käyttäjän käsien asettamiseen

Helposti säädettävä nostovarsi

Pikaopas nostimessa

Suurikapasiteettinen akku

Pehmeä säädettävä säärätuki

Sisäänrakennettu lataustoiminto

Jalkalevy matalalla askelmakorkeudella ja luistamattomalla pinnalla

Lukittavat takapyörät

Sähköinen tai manuaalinen alustan levitys

Saatavana myös matalilla jaloilla käytettäväksi matalien sänkyjen yhteydessä

Kevyesti rullaavat, huoltovapaat pyörät normaalikorkuisilla jaloilla varustetuissa malleissa

Seisomanojanostin

SWL 160 kg


DHG
Moving Health Forward

MiniLift160EM/EE

Aktiivinen seisomaannousu luonnollisella liikemallilla

MiniLift160 on siirrettävä nostin, jonka avulla käyttäjä voidaan nostaa mahdollisimman hellävaroen istuvasta seisovaan asentoon. Oikeilla nostovarusteilla käyttäjää voidaan tukea jalkojen alta, säärien etupuoletta ja selän puolelta ja varmistaa näin turvallinen ja varma noston seisovaan asentoon. Nostimen rakenne siirtää käyttäjää eteen- ja ylöspäin täysin luonnollista liikerataa kuntouttaen samalla hänen jalkalihaksiaan ja tasapainokykyään. Tarkoitettu hoitajille, jotka voivat lukea ja ymmärtävät nostimen käyttöohjeet. Tuote on tarkoitettu sekä kotihoitoon että laitoshiitoon.

MiniLift160 -nostimesta on saatavana neljä mallia, jotka on varustettu sähköisellä (EE) tai manuaalisella (EM) alustan leveyden säädöllä sekä vakioorkokuisilla tai matalilla jaloilla matalampia sänkyjä varten. Kaikki mallit ovat kestäviä ja vakaita teräksestä valmistettuja malleja, ja ne sopivat enintään 160 kg painaville käyttäjille.

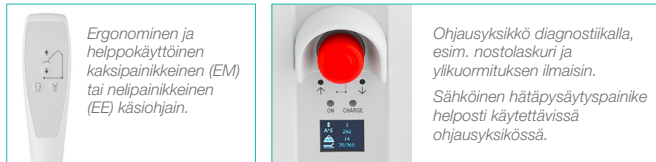

Ergonominen ja helppokäyttöinen kaksipainikkeinen (EM) tai nelpainikkeinen (EE) käsiohjin.

Ohjausyksikkö diagnostiikalla, esim. nostolaskuri ja ylikuormituksen ilmaisin. Sähköinen hätäpysäytyspainike helposti käytettävissä ohjausyksikössä.

TUOTEKUVAUS

Tuoteno.	Tuotenimi	Kuvaus
60300010	MiniLift160EM	Siirrettävä seisomanojanostin manuaalisella alustan levytyksellä
60300011	MiniLift160EM	Siirrettävä seisomanojanostin manuaalisella alustan levytyksellä, matalat jalat
60300012	MiniLift160EE	Siirrettävä seisomanojanostin sähköisellä alustan levytyksellä
60300013	MiniLift160EE	Siirrettävä seisomanojanostin sähköisellä alustan levytyksellä, matalat jalat

TEKNISET TIEDOT

Suurin sallittu potilaan paino (SWL)	160 kg
Potilaan sallittu pituusalue	1 400–2 000 mm
Materiaali	Jauhemaalattu teräs
Korkeus	980 mm
Jalasten pituus, 60300012, 60300010	919 mm
Jalasten pituus, 60300013, 60300011	924 mm
Jalasten korkeus, 60300012, 60300010	123 mm
Jalasten korkeus, 60300013, 60300011	58 mm
Pituus taitettuna	1 098 mm
Alustan leveys, ulkomitat	669–959 mm
Alustan leveys, sisämitat	531–773 mm
Paino	40,5 kg
Alustan levitys, EE	Sähköinen
Jalkalevyn korkeus käyttäjälle	59 mm
Takapyörien halkaisija	100 mm
Etupyörien halkaisija, 60300012, 60300010	100 mm
Etupyörien halkaisija, 60300013, 60300011	2 x 35 mm
Nostonopeus ilman kuormaa	35 mm sekunnissa
Hätäilasku	Manuaalinen ja sähköinen
IP-suojaluokitus	IP24



Minilift160EM/EE täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen 2017/745 luokan 1 tuotteille asetetut vaatimukset.

LISÄVARUSTEET



45500003-009



45600004-008



45690004-008

Tuoteno.	Tuotenimi	Kuvaus
45500003	ThoraxSling	Polyester, X-Small
45500004	ThoraxSling	Polyester, Small
45500006	ThoraxSling	Polyester, Medium
45500007	ThoraxSling	Polyester, Large
45500008	ThoraxSling	Polyester, X-Large
45500009	ThoraxSling	Polyester, XX-Large
45590004	ThoraxSling	Kertakäyttöinen materiaali, non-woven, Small, 5 kpl
45590006	ThoraxSling	Kertakäyttöinen materiaali, non-woven, Medium, 5 kpl
45590007	ThoraxSling	Kertakäyttöinen materiaali, non-woven, Large, 5 kpl
45590008	ThoraxSling	Kertakäyttöinen materiaali, non-woven, X-Large, 5 kpl
45600004	ThoraxSling	Istuintuella, polyesteri, Small
45600006	ThoraxSling	Istuintuella, polyesteri, Medium
45600007	ThoraxSling	Istuintuella, polyesteri, Large
45600008	ThoraxSling	Istuintuella, polyesteri, X-Large
45690004	ThoraxSling	Istuintuella, kertakäyttöinen materiaali, non-woven, Small, 5 kpl
45690006	ThoraxSling	Istuintuella, kertakäyttöinen materiaali, non-woven, Medium, 5 kpl
45690007	ThoraxSling	Istuintuella, kertakäyttöinen materiaali, non-woven, Large, 5 kpl
45690008	ThoraxSling	Istuintuella, kertakäyttöinen materiaali, non-woven, X-Large, 5 kpl
70200033	CalifStrap	Pohjehihna MiniLift160-nostimeen
70200012	SlingBarWrap MiniLift	Pehmeä, desinfioitava kaaren suojus MiniLift160-nostimeen
70200089	Hand control HB33-6	Käsiohjin, kuusi painiketta. Huollon, akun tilan ja ylikuormituksen ilmaisin MiniLift160EE-nostimiin 60300012 ja 60300013
70200029	External charger Linak	Ulkoinen laturi kaikille MiniLift-malleille ja -versioille

Muita siirrettävän Minilift-seisomanojanostimen malleja ja versioita

MiniLift-nostimesta on saatavana kaksi muuta mallia, joilla on eri nostokapasiteetit. Molemmissa on sähköinen alustan levitys ja normaalikorkuiset jalat.

Tuoteno.	Tuotenimi	Kuvaus
401100334	MiniLift200	Siirrettävä seisomanojanostin sähköisellä alustan levytyksellä, SWL 200 kg
400641434	MiniLift125	Siirrettävä seisomanojanostin sähköisellä alustan levytyksellä, SWL 125 kg

ThoraxSling

SystemRoMedic™

ThoraxSling-nostoliina on suunniteltu käytettäväksi yhdessä Handicareen SystemRoMedic™ MiniLift -seisomanojanostimien kanssa. ThoraxSling on saatavana kahtena mallina: toinen antaa tukea selän taakse (ThoraxSling) ja toinen myös lantion alle (ThoraxSling, istuintuella). Saatavana on myös useita eri materiaaleja ja kokoja.

Lisätietoja: www.directhealthcaregroup.com.

SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ on kokonaisvaltainen ratkaisu potilaiden helppoon siirtoon. Konseptin sisältämät neljä tuotealuetta täyttävät useimmat tarpeet erilaisissa siirtolaitteissa. Siirtäminen paikasta toiseen. Asennon kohentaminen samassa paikassa. Tukeminen liikkumisen helpottamiseksi. Nostaminen sekä käsin että mekaanisesti.



Moving Health Forward



Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35, SE-164 40 Kista, Sweden
Tel: +46 (0)8-557 62 200
info@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4 | 00550 HELSINKI
p. 0306 40 40 40 | www.directhealthcaregroup.com/fi
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi