

RollerSlide

SystemRoMedic

Siirtoihin
makuuasennossa

Toimii siltana tasojen välillä

Liukusuojus liukuu potilaan
alla siirron aikana



RollerSlide



RollerSlide, flexi



Liukualusta

SystemRoMedic™ RollerSlide -liukualustalla voidaan tehdä passiivisten potilaiden siirrot makuulla sängystä kuvantamisen tutkimuspöydälle tai leikkauspöydälle, suihkuvaunuun, ambulanssipaareille tai muulle vastaavalle tasolle. RollerSlide-liukualusta toimii siltana tasojen välillä ja liikkuu potilaan alla siirron aikana.

RollerSlide-liukualusta on valmistettu Direct Healthcare Groupin kehittämästä polyamidisesta ULF-liukumateriaalista (Ultra Low Friction). RollerSlidea on saatavana eri malleina ja kokoina.

DHGG
Moving Health Forward



RollerSlide

Toimii turvallisena siltana tasojen välillä

Eri tasojen korkeuserot voivat usein aiheuttaa merkittäviä haasteita potilaiden siirroissa. Joskus on myös vaikea päästä riittävän lähelle, jotta siirto onnistuisi käyttäjälle ja hoitohenkilökunnalle mahdollisimman vaivattomasti. RollerSlide, jota käytetään makuuasennossa tapahtuviin siirtoihin, tasoittaa erot alustojen välillä ja liikkuu potilaan mukana koko siirron ajan.

RollerSlide on pehmustettu liukulauta, jossa on Direct Healthcare Groupin omasta ainutlaatuisesta erittäin pienikiteisestä ULF-materiaalista (Ultra Low Friction) valmistettu liukusuojus. Liukusuojus liikkuu laudan mukana siirron aikana vähentäen kitkaa siirrettävän alla. Samalla se helpottaa siirtämistä, sillä avustajien ei tarvitse tehdä tarpeettomia nostoja. RollerSlide varmistaa myös loukkaantuneiden tai erittäin kipuherkkien henkilöiden hellävaraisen siirtämisen.

RollerSlide on helppo puhdistaa ja tarvittaessa tuotteen voi vaihtaa uuteen. RollerSlideen on saatavilla myös lisävarusteena kertakäyttöisiä päällisiä, jotka parantavat edelleen hygieniää ja vähentävät pesukustannuksia.

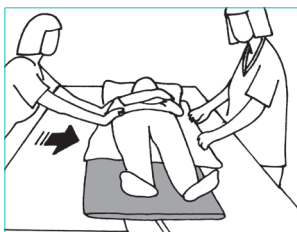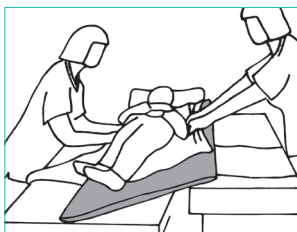

Mallivaihtoehdot

RollerSlide on saatavana kolmena eri mallina:

- **RollerSlide**
- **RollerSlide, flexi** – kevyempi ja taipuisampi malli kuin perusmalli
- **RollerSlide, light** – entistä kevyempi versio Flexistä

Kaikki kolme RollerSlide-mallia ovat saatavilla kahdessa eri pituudessa: koko kehon kattavana versiona sekä ylävaralon alueen peittävänä versiona. Koko kehon mallit taittuvat keskeltä, mikä helpottaa käsittelyä, kuljetusta ja säilytystä

RollerSlide

- Jäykkä sisälevy varmistaa vakaan siirron myös silloin, kun alustojen välillä on rako tai korkeuseroa.
- RollerSlide mahdollistaa jopa 20 cm:n rakojen ylittämisen ja tasoittaa korkeuserot.
- ULF-liukumateriaalista valmistettu liukusuojus kiertyy levyn ympäri ja mahdollistaa kevyen ja hallitun siirron.
- RollerSlide taittuu keskeltä, mikä tekee sen käsittelystä ja kuljettamisesta helppoa.
- Päädyissä kantokahvat.

RollerSlide, flexi

- RollerSlide, flexi voidaan taittaa pituussuunnassa käyttäjän tai sängyn keskilinjaa pitkin, jolloin se mukautuu vaivattomasti alustan muotoihin.
- RollerSlide, flexi ei vaadi täysin tasaista pintaa, joten se soveltuu erinomaisesti siirtoihin esimerkiksi ambulanssin paarilta tai muilta epätasaisilta alustoilta.
- Muuten RollerSlide, flexi vastaa ominaisuuksiltaan RollerSlide-perusmallia.



RollerSlide



RollerSlide, flexi

TUOTEKUVAUS

RollerSlide-liukualustaa on saatavana eri malleina ja kokoina. RollerSlide, flexi on kevyempi ja taipuisampi malli kuin RollerSlide-perusmalli. RollerSlide, light on entistä kevyempi versio flexistä. RollerSlide on valmistettu vanerista tai muovilevyystä, vaahtomuovipehmusteesta, nailonista ja polyamidisesta ULF-materiaalista (Ultra Low Friction) valmistetusta liukusuojuksesta.



RollerSlide täyttää lääkinnällisten laitteiden asetuksen 2017/745 luokan 1 tuotteille asetetut vaatimukset.

Tuotenro.	Tuotenimi	Materiaali	Koko	Paino
9145	RollerSlide	Vaneri	175 x 50 cm / taitettava	4,1 kg
9155	RollerSlide	Vaneri	85 x 50 cm	2,2 kg
9148	RollerSlide, flexi	Muovi	175 x 50 cm / taitettava	3,9 kg
9158	RollerSlide, flexi	Muovi	85 x 50 cm	2 kg
9120	RollerSlide, light	Muovi	175 x 50 cm / taitettava	2 kg
9110	RollerSlide, light	Muovi	85 x 50 cm	1,1 kg

Lisävarusteet

9136	Liukusuojus, tuotenumeroille: 9120, 9145, 9148
9156	Liukusuojus, tuotenumeroille: 9110, 9155, 9158
9138	Kertakäyttöpäällinen, 2 x 50 kpl, tuotenumeroille: 9120, 9145, 9148
9168	Kertakäyttöpäällinen, 2 x 115 kpl, tuotenumeroille: 9110, 9155, 9158,
1085	Seinäteline, EasySlide- ja RollerSlide-liukualustojen ja kertakäyttöpäällisten säilytykseen

Lisätietoja: www.directhealthcaregroup.com.

SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ on kokonaisvaltainen ratkaisu potilaiden helppoon siirtoon. Konseptin sisältämät neljä tuotealuetta täyttävät useimmat tarpeet erilaisissa siirtolanteissa. Siirtäminen paikasta toiseen. Asennon kohentaminen samassa paikassa. Tukeminen liikkumisen helpottamiseksi. Nostaminen sekä käsin että mekaanisesti.

DHG

Moving Health Forward



Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35, SE-164 40 Kista, Sweden
Tel: +46 (0)8-557 62 200
info@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4 | 00550 HELSINKI
p. 0306 40 40 40 | www.medimattress.fi
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi