

Förflyttnings- och lyfthjälpmedel som förenklar vardagen

System**RoMedic**



Fler produkter och produktuppdateringar
finns på www.directhealthcaregroup.com

**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health®

Index

FÖRFLYTTNING



GLIDSKIVOR

EasyGlide 10



GLIDMATTOR

EasySlide (för förflyttning) 10

MoveMaster 11

RollerSlide 11

POSITIONERING



GLIDSKIVOR

EasyGlide (Mini)/EasyGlide 12



GLIDMATTOR

OneWaySlide 12

AutoSlide 13



VRIDPLATTOR

TurnTableSoft 13



ÖVRIGA POSITIONERINGSHJÄLPMEDEL

SitWalk 13



GLIDMATTOR

ReadySlide 14

EasySlide/EasySlide disposable 14-15



GLIDLAKAN

Introduktion 16-17

Portföljer 18

WendyLett glidlakan 19

WendyLett 2Way draglakan 20

WendyLett 4Way gliddraglakan 21

WendyLean 22

EasyRoll glidlakan 23-25

EasyRoll 2Way draglakan 26

EasyRoll Inco 2Way glidlakan 26

EasyRoll 4Way gliddraglakan 27

EasyRoll örngott 29

EasyRoll lakansskydd 30-32

EasyRoll madrasskydd 32

PositioningCover 33

TurnSheet (tvådelat system) 34



ÖVRIGA POSITIONERINGSHJÄLPMEDEL

TopSheet 35

AntiSlip 36

FootStool/FootStoolCover 36

STÖD



UPPRESNINGSHJÄLPMEDEL

FlexiMove 38

FlexiGrip 38



VÅRDBÄLTEN

PositioningBelt 38

FlexiBelt/EasyBelt 39

ReadyBelt 39

WalkingBelt 40



TILLBEHÖR TILL VÅRDBÄLTEN

SupportStraps 40



GÅNGHJÄLPMEDEL

RoWalker400 40



VRIDPLATTOR

TurnTable 41

TurnSafe2 41



UPPRESNINGSHJÄLPMEDEL

ReTurn 42-43

QuickMove 44

MiniLift 46

ThoraxSling 47, 85

LYFT



MANUELLA LYFTHJÄLPMEDEL

LiftSeat 50

FlexiMove 50



TAKLYFTSMOTORER

RiseBasic/RiseAtlas, stationära taklyftsmotorer 52-55



SKENSYSTEM

Castor/Helena, fristående lyftställningar 56-57

MilkyWay, skensystem 58-59



MOBILA PERSONLYFTAR

Eva 60

EvaDrive 61

Carina350 62

Vega505EE 63



LYFTTILLBEHÖR

SlingBar 64

SlingBarSpreader M 64

SlingBarWrap 64

StretcherBar 65

Scales 65

BackBoardStraps 65

BariBar 66

BariTurn 66

LYFTSELAR

Välj modell/material/storlek på lyftselen	69-71
HighBackSling	72
ShellHBSling	73
FlexibleSling	74, 81
AmpHBSling	74
HygieneHBSling	75
BasicSling	76
AmpSling	77
LowBackSling	78
HygieneSling	79
HygieneLBSling	80
ClassicHBSling	81
ClassicSling	82
BariSling	82
StretcherSling	83
SafeHandlingSheet	83
PositioningSling	83
LimbSling	87
Storleksguide för lyftselar, översikt	88-91

LYFTSELAR – UPPRESNING/STÅENDE/GÅENDE

StandingVest	86
WalkingVest	86
BariVest	87

TILLBEHÖR TILL LYFTSELAR

AdjustmentLoop	92
HeadSupport	92
SoftLegSupport	92
StrapsPadding	93
NameTag	93
LoopTag	93

ÖVRIGT

Om Direct Healthcare Group	4
Ethos Education Programme	5
Hitta rätt hjälpmedel för rätt situation	6-8
BackPack	15
Säkerhetsinformation	94
Check – förbättra arbetsmiljön	95

Kombinera produkter till skräddarsydda lösningar

För att brukare med flera olika behov ska kunna få optimala lösningar kan de flesta av våra hjälpmedel kombineras med ett eller flera andra. I den här katalogen används symboler för olika situationer där hjälpmedlen kan användas. Du hittar en förklaring av symbolerna nedan.

Aktivitetssymboler

Liggande förflyttning	
Vända i sängen	
Högre upp i sängen	
Liggande till sittande	
Upp från golvet	
Stöd för gåträning	
Ståträning	
Från säng till rullstol	
Från säng till toalettstol	
Från rullstol till toalett	
Uppresning – från sittande	
Positionering i stol	
In i och ut ur bilen	
Positionering i bilen	

Om Direct Healthcare Group

Att vara vid dålig hälsa kan dramatiskt reducera våra chanser att röra oss, vilket i sin tur kan leda till ännu större hälsokomplikationer och långsammare tillfriskning.

På Direct Healthcare Group ser vi att rörelse är vitalt i vår återhämtning, rehabilitering och självständighet. Vi tror att stödjande rörlighet och självständighet är viktigt för att uppnå och upprätthålla god hälsa. Ingen förstår bättre betydelsen av rörelse och dess förhållande till både fysisk och mental hälsa än Direct Healthcare Group, särskilt när behovet av att röra sig direkt påverkar vår dagliga livskvalitet.

Genom denna förståelse och nära samarbete med sjukvårdspersonal strävar vi efter att tillhandahålla effektiva, rörelsebaserade lösningar som ökar livskvaliteten i vården och i levande miljöer.

Från effektivt förebyggande och behandling av trycksår till främjandet av trygg självständighet och undvikandet av patientfall - våra lösningar stöder vårdleverans till ett brett patientspektrum, inklusive de med komplexa, långvariga tillstånd. På Direct Healthcare Group har vi ett unikt resultatattänk när det kommer till de vårdutmaningar som förväntas i samband med minskad patientrörelse. Allt detta leder till bättre hälsoreultat, snabbare återhämtning och enklare vardag.

Utmaningen

Varje dag befinner sig vårdpersonal i situationer där de är pressade för tid, upplever personalbrist och saknar kunskap och tillgång till enkla och funktionella hjälpmedel.

Otillräckliga budgetar i kombination med ambitionen och önskan att tillhandahålla en hög vårdstandard bidrar till förekomsten av olika lastskador. Resultatet är ökad personalförbrukning och eskalerande kostnader. Att få denna negativa spiral till sitt slut kan vara svårt.

Lösningen är enkel

Direct Healthcare Groups överföringshjälpmedel baseras på enkelt, logiskt tänkande, ergonomiska principer och en design med tanke på användaren och vårdgivaren.

Enkelhet är nyckeln. Uppmärksamhet på de grundläggande principerna resulterar i användarvänliga lösningar. I själva verket är det de enkla, mest tidsbesparande enheterna som faktiskt blir vana.

Våra produkter fungerar med naturlagarna - inte emot dem. Friktion är ett exempel på en faktor som måste beaktas. Med smarta lösningar och kombinationer av speciella och funktionella material kan vi båda minska friktionen under användaren för att underlätta överföring eller ompositionering, och öka friktionen för att minimera risken för att användaren glider ur sängen.



ēthos

EDUCATION PROGRAMME



Direct Healthcare Group – mer än bara produkter

För att tekniska hjälpmedel ska kunna användas i full utsträckning måste människorna som använder våra produkter både förstå allt som en viss typ av utrustning kan åstadkomma, och ha de färdigheter som krävs för att använda den på bästa sätt i varje given situation.

Vi på Direct Healthcare Group vill att våra kunder – vårdgivare, vårdpersonal, närstående och brukare – ska få maximal användning och nytta av våra hjälpmedel och lösningar. Därför nöjer vi oss inte med innovation, design och tillverkning utan lägger också stor vikt vid att utveckla metoder och verktyg för att dela med oss av den kunskap och erfarenhet som vi får genom att skapa trygga och enkla lösningar för brukare i alla tänkbara förflyttningssituationer.



Nya färdigheter. Nya val. Bättre resultat.

Vårt mål med Ethos utbildningsprogram är att erbjuda förstklassiga kunskaper och praktisk erfarenhet av viktiga grundläggande principer och tekniker för att visa hur våra hjälpmedel kan användas på effektivast möjliga sätt som säkra användarvänliga lösningar med följande resultat:

- **Förbättrad arbetsmiljö**
förebygger och minskar arbetsskador hos medhjälparna
- **Förbättrad vårdkvalitet**
hjälp brukarna att använda så mycket av sin förmåga som möjligt för rehabilitering och större självständighet och värdighet
- **Betydande kostnadsbesparingar för vårdgivare**

Våra handledare och utbildare

Våra handledares utbildningar levereras av personer som har omfattande praktisk erfarenhet, samt teoretisk kunskap, över de ämnen som berörs under utbildningen.

Beroende på innehållet som berörs är handledarna antingen specialister från Direct Healthcare Group teamet, eller självständiga industri experter.

Hur kan jag boka en utbildning/workshop?

När du har valt en utbildning/workshop, maila ethos.se@directhealthcaregroup.com och meddela om din valda workshop samt de 2-3 datum som du föredrar. Minimum antal deltagande som krävs för att workshopen skall äga rum är 6 personer, och maximum är 12. Vi är glada att kunna erbjuda Ethos programmet utan kostnad för sjukvårdspersonal, vi ber er som arrangerar av utbildningen att arrangera en utbildningsplats med tillgång till en vård-säng. Observera att Direct Healthcare Group har rätten att lägga till, i vissa situationer, en kostnad på 900 kronor per deltagare, per workshop. För mer information ber vi er att besöka vår hemsida www.directhealthcaregroup.com

Skräddarsydda utbildningar och konsultationer från våra erfarna produktspecialister

Vårt Ethos-team har en skatt av erfarenhet och med detta skapar de utbildningspaket som är skräddarsydda för att mäta era krav, vilket innebär att vi kan erbjuda er utbildning som passar ditt teams logistiska begränsningar. För mer information om hur vårt personifierade utbildningsprogram kan hjälpa er, kontakta ethos.se@directhealthcaregroup.com.

Hitta rätt förflyttningshjälpmedel för rätt situation.

För att göra det lättare att hitta och välja rätt förflyttningshjälpmedel för rätt situation kan du använda nedanstående matris för att kombinera de viktigaste produkterna i fyra förflyttningskategorier med de 14 vanligaste aktiviteterna vid förflyttning av brukare.

Index/Matris

FÖRFLYTTNING



GLIDSKIVOR

EasyGlide

AKTIVITETER

Liggande förflyttning

Vända i sängen

Högre upp i sängen

Liggande till sittande

Upp från golvet

Stöd för gåträning

Ståträning

Från säng till rullstol

Från säng till toalettstol

Från rullstol till toalett

Uppresning – från sittande

Positionering i stol

In i och ut ur bilen

Positionering i bilen

sida



GLIDMATTOR

EasySlide (för förflyttning)

MoveMaster

RollerSlide

POSITIONERING



GLIDSKIVOR


EasyGlide (Mini)/EasyGlide



GLIDMATTOR

OneWaySlide

AutoSlide

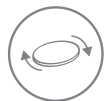

VRIDPLATTOR

TurnTableSoft



ÖVRIGA POSITIONERINGSHJÄLPMEDEL

SitWalk



GLIDMATTOR

ReadySlide

EasySlide/EasySlide disposable



GLIDLAKAN

WendyLett glidlakan

WendyLett 2Way draglakan

WendyLett 4Way gliddraglakan

WendyLean

EasyRoll glidlakan

EasyRoll 2Way draglakan

EasyRoll Inco 2Way glidlakan

EasyRoll 4Way gliddraglakan

EasyRoll örngott

EasyRoll lakansskydd

EasyRoll madrasskydd

PositioningCover

TurnSheet (tvådelat system)



ÖVRIGA POSITIONERINGSHJÄLPMEDEL

TopSheet

AntiSlip

FootStool/FootStoolCover

STÖD



Glidskivor och glidmattor



EasyGlide

För sittande förflyttning från rullstol till säng, toalett, bilsäte och många andra sittande positioner. Särskilt lämplig för att jämna ut höjdskillnader eller överbygga korta avstånd. Finns i två modeller och flera olika storlekar.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
5020	EasyGlide	60 x 33 cm, tredelad	1 st.
5050	EasyGlide	75 x 33 cm, tredelad	1 st.
5060	EasyGlide	60 x 25 cm	1 st.
5070	EasyGlide	45 x 20 cm	1 st.



EasyGlide

För liggande förflyttning från en säng till en annan.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
5000	EasyGlide, extra lång	120 x 60 cm	1 st.



EasySlide
1030



Skyddsodral

Engångsskyddsodral



WallRack

EasySlide (för förflyttning)

EasySlide (190 x 60) används främst för liggande förflyttning, till exempel mellan säng och röntgen- eller operationsbord, duschvagn, bår eller liknande. EasySlide är också ett mycket effektivt hjälpmedel för att vända brukare i sängen och på röntgen- eller operationsbord. Engångsskyddsodralen till EasySlide ger bättre hygien och mindre tvätt.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
1020	EasySlide	190 x 60 cm	1 st.
1030	EasySlide (1020 + 1051)	190 x 60 cm, komplett	1 set

Tillbehör

1051	Skyddsodral	Till 1020, 1030	1 st.
1055	Engångsskyddsodral	Till 1020, 1030	2 x 50 st.
1151	Skyddsodral	Till 1120*, 1130*	1 st.
1155	Engångsskyddsodral	Till 1120*, 1130*	2 x 90 st.
1085	WallRack	För förvaring av glidmattor och 1 st. engångsskyddsodral för EasySlide och RollerSlide	

* 1120, 1130, EasySlide 100 x 60 har utgått ur sortimentet





MoveMaster

MoveMaster är en lite annorlunda, öppen glidmatta med handtag i ena änden. Det gör det möjligt att underlätta förflyttning genom att dra brukare åt olika håll för att till exempel flytta dem längre upp i sängen. MoveMaster är särskilt lämplig att använda mot bar hud vid förflyttning till duschstol eller toalett.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
2090	MoveMaster	47 x 120 cm, 3 handtag	1 st.



RollerSlide 9145

RollerSlide

För liggande förflyttning av passiva brukare mellan säng och röntgen- eller operationsbord, duschvagn, ambulansbår och liknande. Överbryggar mellanrum och flyttar sig med brukaren under förflyttning.




RollerSlide består av en polstrad glidskiva med ett fodral av Direct Healthcare Groups unika glidmaterial ULF™ (Ultra Low Friction) som glider runt skivan under förflyttningen. RollerSlide finns i tre modeller och flera olika storlekar.



RollerSlide flexi 9148

RollerSlide, flexi är en lättare, böjlig version av RollerSlide. Kundernas favoritmodell RollerSlide, light 9120 är en lättviktsversion av RollerSlide, flexi. RollerSlide, flexi finns även i två bredare utföranden anpassade för större och tyngre brukare med kroppsvikt upp till 300 kg, beroende på avståndet mellan de underliggande ytorna.

Glidfodralet till RollerSlide är tillverkat i materialet ULF (Ultra Low Friction), som är Direct Healthcare Groups egna avancerade glidmaterial. Glidfodralet är mycket lätt att rengöra och kan bytas ut mot ett nytt vid behov. Engångsskyddsfodralen som finns att köpa som tillbehör till RollerSlide ger ännu bättre hygien och mindre tvätt.

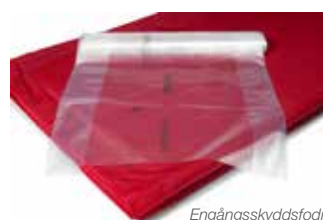

Engångsskyddsfodral

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Vikt	Antal
9145	RollerSlide	175 x 50 cm, vikbar, lång	4,1 kg	1 st.
9155	RollerSlide	85 x 50 cm, kort	2,2 kg	1 st.
9148	RollerSlide, flexi	175 x 50 cm, vikbar, lång	3,9 kg	1 st.
9158	RollerSlide, flexi	85 x 50 cm, kort	2,0 kg	1 st.
9120	RollerSlide, light	175 x 50 cm, böjlig, lång	2,0 kg	1 st.
9110	RollerSlide, light	85 x 50 cm, kort	1,1 kg	1 st.
9170	RollerSlide, flexi	175 x 60 cm, vikbar, lång	5,7 kg	1 st.
9175	RollerSlide, flexi	85 x 60 cm, kort	3,2 kg	1 st.

Tillbehör

9136	Glidfodral	Till 9120, 9145, 9148	1 st.
9156	Glidfodral	Till 9110, 9155, 9158	1 st.
9172	Glidfodral	Till 9170	1 st.
9177	Glidfodral	Till 9175	1 st.
9138	Engångsskyddsfodral, lång modell	Till 9120, 9145, 9148	2 x 50 st.
9168	Engångsskyddsfodral, kort modell	Till 9110, 9155, 9158	2 x 115 st.
1085	WallRack	För förvaring av glidmattor och engångsskyddsfodral för EasySlide och RollerSlide	1 st.



WallRack



Positionering

Glidskivor och glidmattor




EasyGlide 5045

EasyGlide (Mini)

EasyGlide används i par för att underlätta positionering längre bak i stolen. Den mindre storleken gör det lätt att placera glidskivorna under brukarens lår och säte eftersom den fördelar vikten över ytan. EasyGlide, oval kan även användas till att underlätta användning av benstöd till lyftselar med delade benstöd i sittande position. Glidskivorna är också bra till att hjälpa brukare att lägga sig i sängen. EasyGlide-skivorna är avtorkningsbara och lätta att rengöra.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
5045	EasyGlide, oval	45 x 20 cm	2 st.

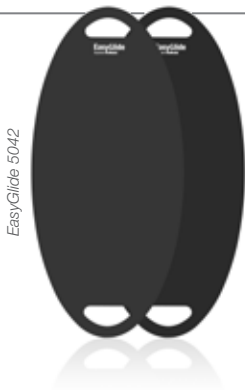

EasyGlide 5042

EasyGlide

För liggende förflyttning från en säng till en annan men även för positionering högre upp i sängen och för placering av lyftselen bakom brukarens ryggstöd, (rull)stol eller på golvet.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
5040	EasyGlide, oval	85 x 39 cm	1 st.
5042	EasyGlide, oval	85 x 39 cm	2 st.



OneWaySlide 2075



OneWaySlide 2069

OneWaySlide

OneWaySlide har många funktioner, varav den främsta ger bättre sittställning i stol eller rullstol. Glidmattan underlättar rörelse bakåt men glider inte framåt, vilket gör det lättare för brukaren att inta och stanna i en bekvämare ställning i stolen. Finns även i en rörformig variant utan handtag för mer aktiva brukare.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
2074	OneWaySlide	110 x 30 cm, 6 handtag	1 st.
2075	OneWaySlide	130 x 40 cm, 6 handtag	1 st.
2076	OneWaySlide	130 x 45 cm, 6 handtag	1 st.
2077	OneWaySlide	130 x 55 cm, 6 handtag	1 st.
2069	OneWaySlide, rörformig	50 x 40 cm	1 st.
2070	OneWaySlide, rörformig	50 x 45 cm	1 st.



Glidskivor och glidmattor



AutoSlide

Gör det lättare att komma i och ur bilen eftersom brukaren lättare kan vrida och röra sig i sidled. Sittdynorna är stadigt fästa vid bilsätets rygg så att brukaren inte kan glida framåt.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
8100	AutoSlide	46 x 46 cm	1 st.



Vridplattor



TurnTableSoft 5086

TurnTableSoft

TurnTableSoft gör det lättare att vända sig när man sitter ner. TurnTableSoft består av två runda skivor med ett friktions-reducerande material på insidan som gör att skivorna kan rotera smidigt över varandra.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
5086	TurnTableSoft	Ø 45 cm	1 st.
5087	TurnTableSoft	Ø 40 cm	1 st.



Övriga positioneringshjälpmedel



SitWalk 6080

SitWalk

Hjälpmedlet har fått sitt namn efter hur man förflyttar brukaren bakåt i stolen till en bekvämare sittställning, genom att luta brukaren i sidled och hjälpa till med att flytta en skinka i taget.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
6080	SitWalk	140 x 13 cm, 8 handtag	1 st.



Positionering

Glidskivor och glidmattor



ReadySlide

ReadySlide är en tunn, rörformig, böjlig och mycket användarvänlig glidmatta som underlättar olika typer av positionering i sängen och påtagning av lyftselar.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
11240	ReadySlide	50 x 60 cm, polyamid	1 st.
11250	ReadySlide	70 x 70 cm, polyamid	1 st.
11230	ReadySlide	110 x 70 cm, polyamid	1 st.
11235	ReadySlide	110 x 90 cm, polyamid, extra bred	1 st.
11236	ReadySlide	110 x 110 cm, polyamid	1 st.
11210	ReadySlide	195 x 70 cm, polyamid	1 st.
11215	ReadySlide	195 x 70 cm, polyamid, med handtag	1 st.
11241	ReadySlide	130 x 90 cm, polyamid	1 st.



EasySlide
2010



EasySlide
2015



EasySlide
1220



EasySlide 1470



EasySlide 1420



Engångs-
skyddsfodral

EasySlide

EasySlide (50 x 60), (50 x 70) och (25 x 60) är utmärkta hjälpmedel vid vändning i sängen och för att flytta brukare högre upp i sängen eller från säng till rullstol. EasySlide är ett litet, praktiskt hjälpmedel som främjar aktivering. För medhjälparens del bidrar EasySlide till färre assisterade positioneringar och onödiga lyft, vilket skonar både rygg och axlar.



EasySlide (100 x 70) är främst avsedd för brukare med lättare vårdbehov som behöver kunna vända och förflytta sig i sängen. Den fungerar bäst på en sträv yta. EasySlide minskar friktionen på axlar och höfter, vilket i sin tur minskar risken för trycksår. Tack vare dessa funktioner är EasySlide mycket skonsam att använda för brukare som lider av värk, men också för medhjälparen.



EasySlide (140 x 90 cm) är avsedd för normalviktiga brukare med begränsad till mycket liten förmåga att själva medverka vid vändningar. Dessa brukare är ofta permanent sängbundna och därför är det viktigt att förebygga trycksår.



EasySlide (200 x 90 cm) har extra polstring för att ytterligare förebygga risken för trycksår. Polstringen fördelar trycket över hela kroppen och minskar därmed tryck och friktion samt risken för skjuv vid de särskilt känsliga tryckpunkterna: axlar, höfter, huvud och hälar.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
2010	EasySlide	50 x 60 cm, polyester	1 st.
2020	EasySlide	50 x 60 cm, mikrofiber	1 st.
2021	EasySlide	50 x 70 cm, mikrofiber	1 st.
2015	EasySlide	25 x 60 cm, polyester	1 st.
1220	EasySlide	100 x 70 cm, mikrofiber	1 st.
1420	EasySlide	140 x 90 cm, 2 fästband för sängen, mikrofiber	1 st.
1470	EasySlide	200 x 90 cm, 4 fästband för sängen, mikrofiber	1 st.

Tillbehör

2051	Skyddsfodral	Till 2010, 2020, 2030, polyester	1 st.
2055	Engångsskyddsfodral	Till 2010, 2020, 2030, plast	100 st.
1085	WallRack	För förvaring av glidmattor och engångsskyddsfodral till EasySlide och RollerSlide	1 st.



WallRack





EasySlide, disposable

EasySlide, disposable är en tunn, böjlig och mycket användarvänlig glidmatta för korttidsanvändning. EasySlide, disposable kan användas för att underlätta vändningar och positionering högre upp i sängen och för positionsjustering i sittande ställning.

EasySlide, disposable kan även användas för att lyfta brukarens ben i och ur sängen, hjälpa till med på- och avklädning och underlätta användning av lyftsele. EasySlide, disposable är en otroligt mångsidig glidmatta som gör många vanliga förflyttningar, även tunga sådana, betydligt lättare för både brukare och medhjälpare. Glidmattan är tillverkad av miljövänlig polyetylenplast (PE) och levereras som en praktisk och hygienisk rulle med upp till 60 individuella EasySlide-mattor för korttidsanvändning.



EasySlide,
disposable, 2040

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
2040	EasySlide, disposable	50 cm x 70 cm	2 x 60 st.



Utprovningssväska/BackPack

BackPack

Vår BackPack-väska kan fyllas med olika praktiska hjälpmedel för positionering och förflyttning.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
952	BackPack	Utprovningssväska/BackPack, mörkgrå	1 st.



Exempel på produkter att lägga i väskan:



EasyGlide (5040/5042)



EasyGlide (5045)



ReadySlide (11230)




FootStool (8090 + 8091)

EasyBelt, hug (6004)




Lakansguide


Välj rätt glidzon på lakanet utifrån brukarens behov.

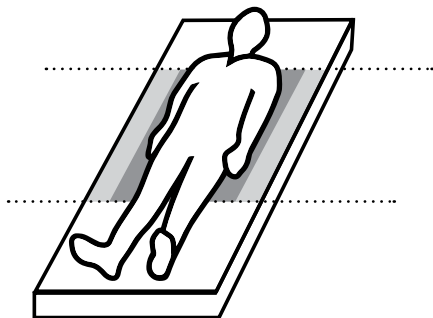

Glidzon Höft: För mer aktiva/lättare brukare som bara behöver glidfunktionen vid höften.

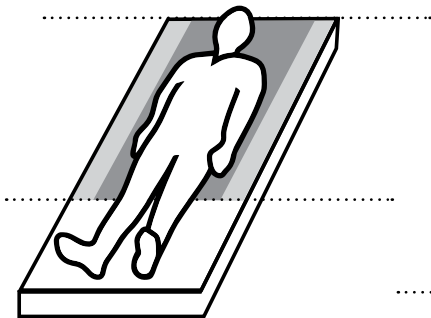


Glidzon Huvud-höft: För mindre aktiva/tyngre brukare som behöver glidfunktionen från höften och uppåt.

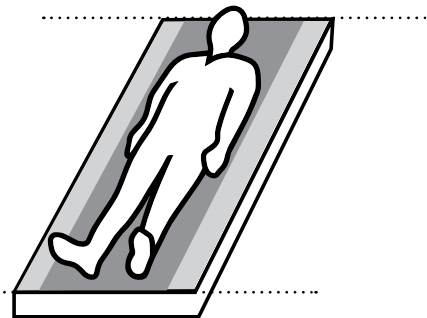

Glidzon Huvud-fot: För brukare som är passiva/har stora vårdbehov och där glidfunktion behövs under hela kroppen.

Välj rätt glidlakan utifrån sängens bredd.

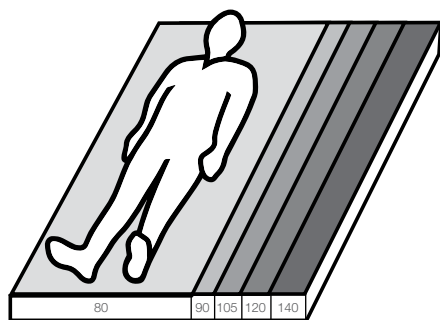

Sängbredd

Måtten på madrassen är viktiga att ta hänsyn till för att optimera lakanets glidyta och stimulera brukaren till aktivitet. För våra draglakan och gliddraglakan finns ingen rekommenderad madrassbredd.

Hitta rätt funktion.



Inkontinensskydd

Inkontinensskyddet är ett tvättbart inkontinenslakan som placeras ovanpå ett vanligt lakan och/eller andra sängkläder. Inkontinensskyddet finns med eller utan glidyta på undersidan. Materialet är högabsorberande och fördelar vätska över en större yta.



Handtag

Vissa gliddraglakan är också utrustade med handtag som kan kopplas till personlyftar. Detta underlättar positionering, intimhygien och att fästa selar.



Resår


Glidlakan med den här symbolen fästs över madrassen med en resår. Andra lakan har delar som ska stoppas in under madrassen.

Skötselinstruktioner


Tänk på skötselinstruktionerna när du väljer produkt.



Välj rätt kombinationer.

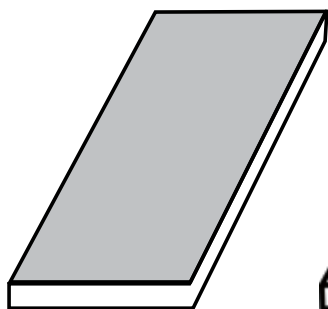


Madrassöverdrag med spärrskikt. Placeras ovanpå madrassen.

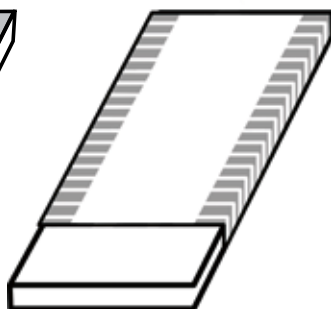

Glidlakan
Satin på mittdelen och non-slip-material på sidodelarna. Glidrörelsen ska ske i mönsterriktningen.



Glidlakan + draglakan
Underlättar vändning och minskar värmen från satinen i glidlakanet. Glidrörelsen ska ske i mönsterriktningen.

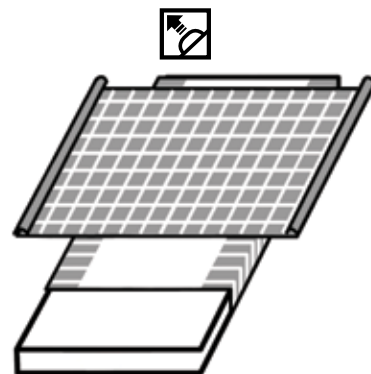

Glidlakan + gliddraglakan
Båda lakanen har glidytor på över- och undersidan. Glidrörelsen ska ske i mönsterriktningen.


Så används kombinationerna:



För patienter som kan vända sig själva kan det ofta räcka med ett glidlakan som ger bättre glid i de zoner där det behövs.



En kombination av ett glidlakan och ett draglakan används när brukaren är mindre aktiv/tyngre och har större vårdbehov.

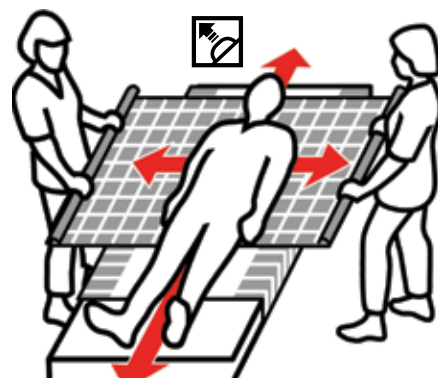

En kombination av ett glidlakan och ett gliddraglakan används när brukaren är passiv/tyngre och har större vårdbehov. Denna kombination används ofta tillsammans med en personlyft, för att sköta hygien och för att fästa en sele.

Hitta rätt lakan.

Exempel från produktförteckningen:

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt
1661	WendyLett	120	120	120	95	Grå-/vitrandigt	glidlakan	Eventuell information
↑ Artikelnummer	↑ Produktnamn	↑ Lakanet är lämpligt för denna sängbredd	↑ Mått (längd och bredd)		↑ Zon/glidyta	↑ Produkts färg	↑ Produktfunktion	↑ Övrig info
								↑ Särskilda egenskaper ↑ Lakan + glidzon på madrassen ↑ Repetition av artikelnummer ↑ Art. nr 1661

Positionering

Glidmattor och glidlakan

WendyLett-portföljen



WendyLett
Glidlakan
sida 19



WendyLett 2Way
Draglakan
sida 20




WendyLett 4Way
Gliddraglakan
sida 21

+



WendyLett Inco-serien
WendyLett 4Way, Inco
Gliddraglakan
sida 21

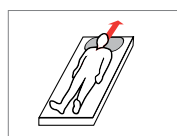

WendyLean
örngott
sida 22

EasyRoll-portföljen



EasyRoll
Glidlakan
sida 23–25

+



EasyRoll
Glidlakan, Inco
sida 24



EasyRoll 2Way
Draglakan
sida 26

+



EasyRoll Inco 2Way
Glidlakan
sida 26




EasyRoll 4Way
Gliddraglakan
sida 27


+



EasyRoll 4Way
Gliddraglakan, Inco
sida 27

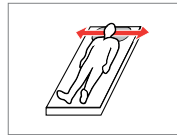

EasyRoll örngott
sida 29

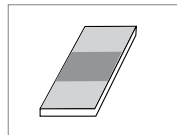

EasyRoll lakansskydd
och madrasskydd
sida 30-32



WendyLett-produkterna är våra patentskyddade, högkvalitativa system som är framtagna för att underlätta förflyttning högre upp i sängen, vändningar och mindre positionsjusteringar i sängen.

Tillsammans utgör Direct Healthcare Groups tre WendyLett-lakan ett väl genomtänkt system av glid- och draglakan som kompletterar varandra och bidrar till att förenkla vardagen för både brukare, vårdpersonal och närstående vårdare.

WendyLett glidlakan

WendyLett är ett glidlakan i satin. Glidrörelsen sker i sidled, i samma riktning som ränderna. WendyLett är till för brukare som har svårt att vända sig i sängen. WendyLett har en slät mittdel vilket innebär att det krävs mycket lite kraft för att vända sig. Brukaren kan lätt glida i sidled, men hejdas av non-slip-materialet på sidorna för att inte ramla ur sängen. Materialet hindrar

också brukaren från att glida nedåt i sängen. När WendyLett-lakanet inte används kan det vikas in runt madrassen som ett vanligt lakan, med den släta delen i mitten av sängen. För brukare som behöver mer hjälp kan WendyLett kombineras med draglakanet WendyLett 2Way eller glidraglakanet WendyLett 4Way. WendyLett finns i flera olika utföranden och storlekar.



Produktöversikt WendyLett glidlakan

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Lakan	Lakanets längd	Glidzon
1609	WendyLett	80–90	100	200	60	Vitt	glidlakan		Art. nr 1609		
1614	WendyLett	80–90	140	200	60	Vitt	glidlakan		Art. nr 1614		
1629	WendyLett	80–90	100	200	60	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1629		
1634	WendyLett	80–90	140	200	60	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1634		
1641	WendyLett	90	200	90	70	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1641		
1639	WendyLett	105	200	200	70	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1639		
1651	WendyLett	105	200	105	80	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1651		
1667	WendyLett	120	100	220	100	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1667		
1668	WendyLett	120	140	220	100	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1668		
1669	WendyLett	120	200	220	100	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1669		
1661	WendyLett	120	200	120	95	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1661		
1671	WendyLett	140	200	140	110	Grå-/vitrandigt	glidlakan		Art. nr 1671		
1681	WendyLett	-	200	365	70	Grå-/vitrandigt	glidlakan	Extra brett för att möjliggöra valfri placering av glidytan	Art. nr 1681		

Material: Polyester, bomull, satin

Skötselinstruktioner: Använd inte sköljmedel. Undvik torktumling för att ge materialet maximal livslängd.



CE Medicinteknisk produkt av klass 1



Positionering

Glidmattor och glidlakan

WendyLett 2Way draglakan

WendyLett 2Way är ett draglakan tillverkat i ett material som är anpassat för WendyLett-glidlakan. Glidrörelsen sker i sidled, i samma riktning som ränderna, vilket innebär att brukaren inte glider nedåt i sängen.

WendyLett 2Way placeras ovanpå WendyLett-glidlakanet. Kombinationen gör det enkelt för medhjälparen att vända brukaren i sidled.

WendyLett 2Way finns i flera olika utföranden och storlekar.



Produktöversikt WendyLett 2Way draglakan

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt
1620	WendyLett 2Way	-	90	180	-	Vitt	Draglakan	Art. nr 1620
1631	WendyLett 2Way	-	100	200	-	Grå-/vitrandigt	Draglakan	Art. nr 1631
1636	WendyLett 2Way	-	140	200	-	Grå-/vitrandigt	Draglakan	Art. nr 1636

Material: Polyester, bomull, satin

Skötselinstruktioner: Använd inte sköljmedel. Undvik torktumling för att ge materialet maximal livslängd.



CE Medicinteknisk produkt av klass 1



Våra WendyLett-produkter

- Tunt, högkvalitativt tyg som andas
- Lämpliga för brukare som löper risk att utveckla trycksår
- Tydliga mönster visar glidriktningen





WendyLett 4Way gliddraglakan

WendyLett 4Way är ett gliddraglakan som kan kombineras med ett WendyLett-glidlakan för att underlätta glidrörelser både i sidled och uppåt/ nedåt i sängen, som rutmönstret visar. WendyLett 4Way placeras ovanpå WendyLett-glidlakanet.

Kombinationen möjliggör positionering i fyra riktningar och underlättar där-

med vändning i sängen, förflyttning högre upp i sängen och mindre positionsjusteringar i sängen, även för stora, tunga eller helt passiva brukare. WendyLett 4Way finns i många olika utföranden och storlekar.

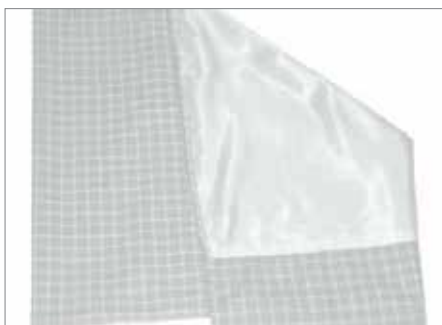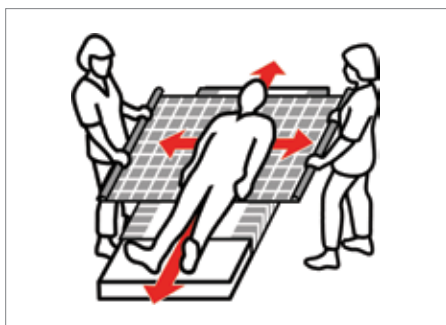

Produktöversikt WendyLett 4Way gliddraglakan

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Glidriktning
1657	WendyLett 4Way	-	140	190	-	Grå-/vitrutigt	Gliddraglakan	2 x 7 handtag	Art. nr 1657
1637	WendyLett 4Way	-	140	200	-	Grå-/vitrutigt	Gliddraglakan		Art. nr 1637
1647	WendyLett 4Way	-	200	200	-	Grå-/vitrutigt	Gliddraglakan		Art. nr 1647
1652	WendyLett 4Way	-	140	260	-	Grå-/vitrutigt	Gliddraglakan	Bredare madrass	Art. nr 1652

Material: Polyester, bomull, satin

Skötselinstruktioner: Använd inte sköljmedel. Undvik torktumling för att ge materialet maximal livslängd.

60-90°C
140-194°F



CE Medicinteknisk produkt av klass 1



Produktöversikt WendyLett 4Way Inco gliddraglakan

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Glidriktning
1648	WendyLett 4Way, Inco	-	75	200	-	Grå-/vitrutigt	Gliddraglakan	2 x 7 handtag	Art. nr 1648
1649	WendyLett 4Way, Inco	-	140	120	-	Grått	Gliddraglakan		Art. nr 1649

Material: Polyester, bomull, satin

Skötselinstruktioner: Använd inte sköljmedel. Undvik torktumling för att ge materialet maximal livslängd.

60-90°C
140-194°F



CE Medicinteknisk produkt av klass 1



WendyLett 4Way med handtag, art. nr 1657


Positionering

Glidmattor och glidlakan

WendyLean örngott

De patentskyddade, självindragande handtagen är inte de enda finesserna med det här örngottet, men de är mycket praktiska när du ska hjälpa en brukare att förflytta sig högre upp i sängen eller sätta sig upp på sängkanten.

Undersidan på örngottet är gjord av glatt satin vilket gör det lätt att både lägga kudden till rätta och att dra in kudden under axlarna för att resa upp brukarens överkropp. Ränderna visar i vilken riktning glidningen underlättas.

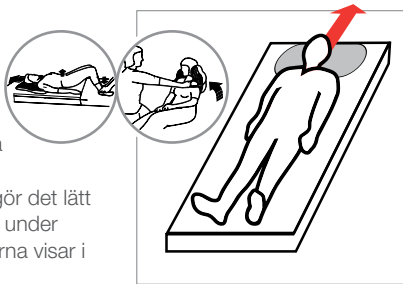

- Glatt satin med självindragande handtag

Produktöversikt WendyLean örngott

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Glidriktning
1680	WendyLean	-	50	60	-	Grå-/vitrandigt	Örngott	2 handtag	

Material: Ovensida: Polyester/bomull. Baksida: Bomull/polyester. Undersida: Satin

Skötselinstruktioner: Använd inte sköljmedel. Droptorka eller turla på låg värme för att ge produkten maximal livslängd.




Medicinteknisk produkt av klass 1



EasyRoll glidlakan Vitt

Det ekonomiska alternativet till vårt WendyLett-system. Skillnaden är att EasyRoll är ofodrat och består av en glidyta som laminerats på ett lakan. EasyRoll-systemet finns i flera olika utföranden och storlekar med olika funktioner som är anpassade för att hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för dina behov.

- **Markerings-sömmar som underlättar placering av lakanet**

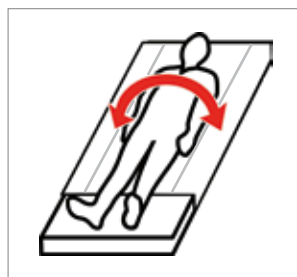

Produktöversikt EasyRoll glidlakan/vitt

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Lakan	Lakanets längd	Glidzon
41801PS	EasyRoll glidlakan	80	100	180	60	Vitt	glidlakan	Art. nr 41801PS			
41802PS	EasyRoll glidlakan	80	140	180	60	Vitt	glidlakan	Art. nr 41802PS			
41803PS	EasyRoll glidlakan	80	200	180	60	Vitt	glidlakan	Art. nr 41803PS			
41901PS	EasyRoll glidlakan	90	100	200	60	Vitt	glidlakan	Art. nr 41901PS			
41902PS	EasyRoll glidlakan	90	140	200	60	Vitt	glidlakan	Art. nr 41902PS			
41903PS	EasyRoll glidlakan	90	200	200	60	Vitt	glidlakan	Art. nr 41903PS			
411051PS	EasyRoll glidlakan	105	100	215	75	Vitt	glidlakan	Art. nr 411051PS			
411052PS	EasyRoll glidlakan	105	140	215	75	Vitt	glidlakan	Art. nr 411052PS			
411053PS	EasyRoll glidlakan	105	200	215	75	Vitt	glidlakan	Art. nr 411053PS			
411201PS	EasyRoll glidlakan	120	100	230	90	Vitt	glidlakan	Art. nr 411201PS			
411202PS	EasyRoll glidlakan	120	140	230	90	Vitt	glidlakan	Art. nr 411202PS			
411203PS	EasyRoll glidlakan	120	200	220	90	Vitt	glidlakan	Art. nr 411203PS			

Material: Sidodelar: Bomull/polyester. Glidytor: Duchesse (polyester)

Skötselinstruktioner: Använd inte sköljmedel. Undvik torktumling för att ge materialet maximal livslängd.



CE Medicinteknisk produkt av klass 1





Positionering

Glidmattor och glidlakan

EasyRoll glidlakan Vit-/blårandigt

Det ekonomiska alternativet till vårt WendyLett-system. Skillnaden är att EasyRoll är ofodrat och består av en glidytta som laminerats på ett lakan. EasyRoll-systemet finns i flera olika utföranden och storlekar med olika funktioner som är anpassade för att hjälpa dig att hitta den bästa lösningen för dina behov.

- **Markerings-sömmar som underlättar placering av lakanet**

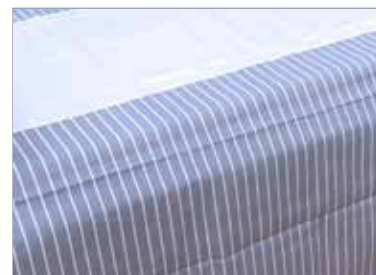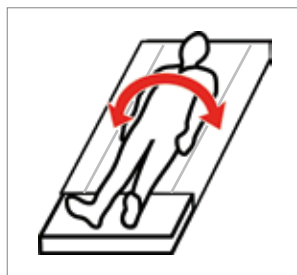

Produktöversikt EasyRoll glidlakan/vit-/blårandigt

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Lakan	Lakanets längd	Glidzon
418011	EasyRoll glidlakan	80	100	180	50	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 418011		
418021	EasyRoll glidlakan	80	140	180	50	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 418021		
418031R	EasyRoll glidlakan	80	200	180	60	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 418031R		
419011	EasyRoll glidlakan	90	100	190	60	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 419011		
419021	EasyRoll glidlakan	90	140	190	60	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 419021		
419031	EasyRoll glidlakan	90	200	190	60	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 419031		
419031R	EasyRoll glidlakan	90	200	90	70	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 419031R		
4110511	EasyRoll glidlakan	105	100	205	75	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 4110511		
4110521	EasyRoll glidlakan	105	140	205	75	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 4110521		
4110531	EasyRoll glidlakan	105	200	205	75	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 4110531		
4110531R	EasyRoll glidlakan	105	200	105	85	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 4110531R		
4112011	EasyRoll glidlakan	120	100	220	90	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 4112011		
4112021	EasyRoll glidlakan	120	140	220	90	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 4112021		
4112031	EasyRoll glidlakan	120	200	220	90	Vit-/blårandigt	glidlakan		Art. nr 4112031		

Material: Sidodelar: Bomull/polyester. Glidytter: Duchesse (polyester)

Skötselinstruktioner: Använd inte sköljmedel. Undvik torktumling för att ge materialet maximal livslängd.



CE Medicinteknisk produkt av klass 1



EasyRoll glidlakan med AntiSlip-kant

EasyRoll glidlakan med AntiSlip-kant har bromsytur vid sidan av glidytan, förstärkta med silikon för att förhindra att brukaren glider ur sängen.

Glidlakanet träs på över madrassen och resåren håller fast lakanet runt madrassen. Lakanet är lämpligt för brukare med nedsatt rörlighet och/eller svår värk eftersom det ger ett bra stöd vid vändning om personen ligger direkt på lakanet. Alternativt kan EasyRoll användas i kombination med ett draglakan eller gliddraglakan som ett tekniskt hjälpmedel för vårdpersonal som ska vända eller flytta brukare i sängen.



Produktöversikt EasyRoll glidlakan med AntiSlip-kant

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Lakan	Lakanets längd	Glidzon
51901FAH	EasyRoll glidlakan med AntiSlip-kant	90	100	180	50	Vit-/blårandigt	glidlakan	Bromsyta av silikon	Art. nr 51901FAH		
51902FAH	EasyRoll glidlakan med AntiSlip-kant	90	140	180	50	Vit-/blårandigt	glidlakan	Bromsyta av silikon	Art. nr 51902FAH		
519031RAH	EasyRoll glidlakan med AntiSlip-kant	90	200	90	70	Vitt	glidlakan	Bromsyta av silikon	Art. nr 519031RAH		


Material: Sidodelar: Bomull/polyester. Glidytor: Duchesse (polyester)

Skötselinstruktioner: Använd inte sköljmedel. Undvik torktumling för att ge materialet maximal livslängd.



EasyRoll glidlakan med spärrskikt

EasyRoll glidlakan med spärrskikt läggs på sängen som ett vanligt lakan och kanterna viks in under madrassen för att hålla fast lakanet. Glidlakan med spärrskikt används när det finns risk för läckage. Spärrskiktet är vätsketätt och förhindrar att vätska tränger igenom till övriga sängkläder eller madrassen. De röda markeringsränderna gör det lätt att kontrollera att glidlakanet är korrekt placerat.

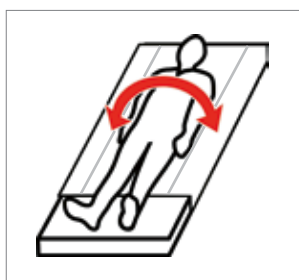

Produktöversikt EasyRoll glidlakan med spärrskikt

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Glidriktning	Lakan	Glidzon
42901PS	EasyRoll glidlakan med spärrskikt	90	100	200	60	Vitt/blått	Glidlakan med spärrskikt				
42902PS	EasyRoll glidlakan med spärrskikt	90	140	200	60	Vitt/blått	Glidlakan med spärrskikt				

Material: Polyester. Spärrskikt: PU. Absorptionsmaterial: Polyester.

Skötselinstruktioner: Tvättas före första användningstillfället. Tål ej kemtvätt. Använd inte blekmedel. Använd inte sköljmedel. Undvik torktumling för att ge materialet maximal livslängd.



Positionering

Glidmattor och glidlakan

EasyRoll 2Way Draglakan

EasyRoll 2Way draglakan används i kombination med EasyRoll glidlakan. Draglakanet placeras direkt ovanpå glidlakanet, och brukaren ligger på draglakanet. En kombination av glidlakan och draglakan underlättar när man ska vända en brukare i sängen. Genom att gipa tag i draglakanet och dra i det kan brukaren enkelt flyttas till önskad position.



Produktöversikt EasyRoll 2Way draglakan

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt
2101S	EasyRoll 2Way draglakan	-	140	200	-	Blå-/vitrandigt	Draglakan	Markeringsränderna visar dragriktningen Art. nr 2101S

Material: Duchesse, bomull/polyester

Skötselinstruktioner: Tvättas före första användningstillfället. Torkas vid max 70 °C.




Medicinteknisk produkt av klass 1



EasyRoll Inco 2Way glidlakan

EasyRoll Inco 2Way glidlakan är ett absorberande inkontinensunderlägg med ett spärrskikt som förhindrar läckage. Dessutom har produktens undersida en lågfriktionsbeläggning (glidtyg) som gör det lätt att glida i sängen. Det underlättar för medhjälparen att vända patienten.

EasyRoll Inco 2Way glidlakan har tre handtag på vardera sidan för att ge bästa möjliga grepp vid sidledes förflyttning av patienter.

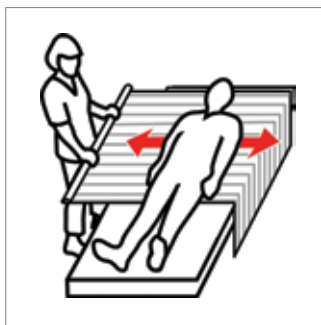

• Den här produkten används utan glidlakan under

Produktöversikt EasyRoll Inco 2Way glidlakan

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt
10991	EasyRoll Inco 2Way	-	90	185	-	Vitt/rött	glidlakan	2 x 3 handtag Art. nr 10991

Material: Duchesse Spärrskikt: PU Absorptionsmaterial: Polyester/rayon

Skötselinstruktioner: Tvättas före första användningstillfället. Torkas vid max 70 °C.



Medicinteknisk produkt av klass 1



EasyRoll 4Way Gliddraglakan

Det här gliddraglakanet placeras direkt ovanpå ett glidlakan, med glidytorna mot varandra.

EasyRoll gliddraglakan är ett tekniskt hjälpmedel för vårdpersonal som underlättar vändningar och positionsjustering av brukare i sängen. När brukaren ska vändas ska gliddraglakanet lossas från madrassen. Medhjälparen tar tag i gliddraglakanet vid brukarens höft och axel och ser till att fylla händerna med tyg. Sedan arbetar medhjälparen med raka handleder och tyngdöverföring för att luta sig bakåt. Om man är två som hjälps åt kan den andra hjälpa till genom att trycka nedåt vid skuldra och höft på motsatt sida och skjuta på. Detta gör att brukaren vänds. När vändningen är klar stoppas gliddraglakanet in på båda sidor av madrassen.



Produktöversikt EasyRoll 4Way gliddraglakan

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Glidriktning
4011S	EasyRoll 4way gliddraglakan	-	140	210	-	Vitt/blått	Gliddraglakan	Art. nr 4011S	
4011L	EasyRoll 4way gliddraglakan	-	200	200	-	Vitt/blått	Gliddraglakan	Art. nr 4011L	
4011S1	EasyRoll 4Way gliddraglakan	-	150	200	-	Vit-/blårandigt	Gliddraglakan	Art. nr 4011S1	
4111T	EasyRoll 4Way gliddraglakan	-	140	115	-	Vitt/blått	Gliddraglakan 2 x 9 handtag (med underliggande bäddfilkar)	Art. nr 4111T	
4111LT	EasyRoll 4way gliddraglakan	-	200	115	-	Vitt/blått	Gliddraglakan 2 x 13 handtag (med underliggande bäddfilkar)	Art. nr 4111LT	

Material: Duchesse, bomull/polyester

Skötselinstruktioner: Använd inte sköljmedel. Tvättas före första användningstillfället. Torkas vid max 70 °C.



CE Medicinteknisk produkt av klass 1



Produktöversikt EasyRoll 4Way gliddraglakan, Inco

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Glidriktning
10992-5	EasyRoll 4Way gliddraglakan, Inco	-	140	200	-	Vitt/rött	Gliddraglakan 2 x 5 handtag	Art. nr 10992-5	

Material: Duchesse. Spärrskikt: PU. Absorptionsmaterial: Polyesterrayon

Skötselinstruktioner: Använd inte sköljmedel. Tvättas före första användningstillfället. Torkas vid max 70 °C.



CE Medicinteknisk produkt av klass 1





EasyRoll örngott

EasyRoll örngott (4303) med glidyta har låg friktion i sidled vilket ger ökad rörlighet för nacke och axlar. Det minskar även friktionen på bakhuvudet och öronen. EasyRoll örngott med spärrskikt (4304) har ett spärrskikt på insidan som skyddar från smuts och väta samtidigt som det fungerar som en kvalsterbarriär. Skyddet förstärks genom att örngottet försluts med en dragkedja. Detta örngott har ingen glidfunktion.



Produktöversikt EasyRoll örngott

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Glidriktning
4303	EasyRoll glidörngott	-	50	60	-	Vitt	Örngott	Glidyta med låg friktion	Art. nr 4303
4304	EasyRoll örngott med spärrskikt	-	50	60	-	Vitt	Örngott	Spärrskikt	Art. nr 4304

Material: 4303: Glidyta: Duchesse (100 % polyester). Baksida: Bomull/polyester. 4304: Spärrskikt: Polyuretan. Yta: Bomullsjersey.

Skötselinstruktioner: Använd inte sköljmedel.

Tvättas före första användningstillfället. Torkas vid max 70 °C.



CE Medicinteknisk produkt av klass 1




Positionering

Lakansskydd och madrassskydd

EasyRoll lakansskydd med bäddflikar

EasyRoll lakansskydd används som ett absorberande skydd i sängen när brukaren är inkontinent. Skyddet absorberar cirka 1–2 liter/m² och har ett laminerat spärrskikt som förhindrar att vätska sipprar igenom till övriga sängkläder. Lakansskyddet är kraftigt och lämpar sig väl att använda vid vändning och positionsjustering av patienter i sängen. När brukaren ska flyttas bör medhjälparen ta tag i själva absorptionsdelen av skyddet, eftersom sidodelarna inte är lämpliga att dra i. När lakansskyddet används tillsammans med ett glidlakan får man en utmärkt kombination av hjälpmedel för inkontinens och positionsjustering.

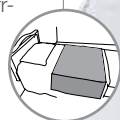

Produktöversikt EasyRoll lakansskydd med bäddflikar

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Spärrskikt
80011B	EasyRoll lakansskydd	80–90	80	180	-	Vitt/ljusgrönt	Lakansskydd med bäddflikar		Art. nr 80011B
80011P	EasyRoll lakansskydd	80–90	80	180	-	Vitt/ljusgrönt	Lakansskydd med bäddflikar		Art. nr 80011P
80011-1	EasyRoll lakansskydd	80–90	85	180	-	Vitt/ljusgrönt	Lakansskydd med bäddflikar		Art. nr 80011-1
80011PL	EasyRoll lakansskydd	80–90	90	210	-	Vitt/ljusgrönt	Lakansskydd med bäddflikar		Art. nr 80011PL
80011PS	EasyRoll lakansskydd	90	70	190	-	Vitt/ljusgrönt	Lakansskydd med bäddflikar		Art. nr 80011PS

Material:

80011B: Bäddyta: Bomull/polyester, spärrskikt: PU, absorptionsmaterial: Polyester.

80011P: Bäddyta: Polyester, spärrskikt: PU, absorptionsmaterial: Polyester

80011-1: Bäddyta: Bomull/polyester, spärrskikt: PU, absorptionsmaterial: Polyester.

80011PL: Bäddyta: Polyester, spärrskikt: PU, absorptionsmaterial: Polyester

80011PS: Bäddyta: Duchesse, bomull/polyester, spärrskikt: PU, absorptionsmaterial: Polyester/rayon.

Skötselinstruktioner: Kan torktumlas vid 70 °C. Tål ej kemtvätt. Använd inte blekmedel. Använd inte sköljmedel.

60–90°C
140–194°F



CE Medicinteknisk produkt av klass 1



EasyRoll lakansskydd med bäddflikar /extra skydd

EasyRoll lakansskydd används som ett absorberande skydd i sängen när brukaren är inkontinent. Den här modellen har en extra stark absorptionsfunktion. Lakansskyddet är kraftigt och lämpar sig väl att använda vid vändning eller positionsjustering av patienter i sängen. När det används tillsammans med ett glidlakan får man en utmärkt kombination av hjälpmedel för inkontinens och positionsjustering.



Produktöversikt EasyRoll lakansskydd med bäddflikar/extra skydd

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Spärskikt
80019	EasyRoll lakansskydd	90	120	180	-	Vitt/ljusgrönt	Lakansskydd med bäddflikar		Art. nr 80019
80018	EasyRoll lakansskydd	90	150	180	-	Vitt/ljusgrönt	Lakansskydd med bäddflikar		Art. nr 80018

Material: Bäddyta av bomull/polyester. Absorptionsyta av polyester/rayon. Spärskikt av polyuretan.

Skötselinstruktioner: Kan torktumlas vid 70 °C. Tål ej kemtvätt. Använd inte blekmedel.

Använd inte sköljmedel.



EasyRoll lakansskydd utan bäddflikar

Lakansskydd används som ett absorberande skydd i sängen när brukaren är inkontinent. Skyddet absorberar cirka 1–2 liter/m² och har ett laminerat spärskikt som förhindrar att vätska sipprar igenom till övriga sängkläder. Lakansskyddet är kraftigt och lämpar sig väl att använda vid vändning och positionsjustering av patienter i sängen. När brukaren ska flyttas bör medhjälparen ta tag i själva absorptionsdelen eftersom sidodelarna inte är lämpliga att dra i.

När skyddet används tillsammans med ett glidlakan får man en utmärkt kombination av hjälpmedel för inkontinens och positionsjustering. Tack vare lakansskyddets höga absorptionsförmåga får brukaren en bättre torrhetsskänsla eftersom produktens maximala absorption sällan behöver utnyttjas.



Produktöversikt EasyRoll lakansskydd utan bäddflikar

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt	Spärskikt
80017-1	EasyRoll lakansskydd	80–90	85	90	-	Vitt/ljusgrönt	Lakansskydd utan bäddflikar		Art. nr 80017-1

Material: Polyester. Spärskikt: PU. Absorptionsmaterial: polyester.

Skötselinstruktioner: Kan torktumlas vid 70 °C. Tål ej kemtvätt. Använd inte blekmedel.

Använd inte sköljmedel.




Positionering

Lakansskydd och madrassskydd

EasyRoll lakansskydd med glidlakan

EasyRoll lakansskydd med glidlakan används på samma sätt som EasyRoll lakansskydd, men har även ergonomiska sidodelar och används som skydd i sängen för inkontinenta brukare och som hjälpmedel vid positionsjustering. Skyddet absorberar cirka 1–2 liter/m² och har ett laminerat spärrskikt som förhindrar att vätska sipprar igenom till övriga sängkläder. Lakansskyddet är kraftigt och lämpar sig väl att använda vid vändning eller positionsjustering av patienter i sängen. Glidyta på undersidan ger en utmärkt kombination av hjälpmedel för inkontinens och positionsjustering.

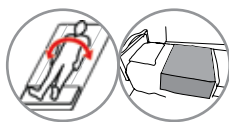

Produktöversikt EasyRoll lakansskydd med glidlakan

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt
80010P	EasyRoll lakansskydd med glidlakan	80–90	80	180	-	Vitt	Lakansskydd med bäddfilkar och glidyta på undersidan	Spärrskikt Art. nr 80010P

Material: Bäddyta av polyester. Absorptionsyta av polyester/rayon. Spärrskikt av polyuretan. Glidyta av duchesse.

Skötselinstruktioner: Kan torktumlas vid 70 °C. Tål ej kemtvätt. Använd inte blekmedel. Använd inte sköljmedel.



EasyRoll madrassskydd

Madrassskyddet skyddar din madrass från väta vid till exempel inkontinens, samt från kvalster, och kan även fungera som ett allmänt skydd för madrassen/madrassöverdraget.

Madrassskyddet har ett spärrskikt på undersidan som förhindrar att vätska sipprar igenom och som även fungerar som en kvalsterbarriär.



Produktöversikt EasyRoll madrassskydd

Art. nr	Produktnamn	Passar till madrass (cm)	Längd (cm)	Bredd (cm)	Glidyta (cm)	Färg	Funktion	Övrigt
90.200J01	EasyRoll madrassskydd	90	200	90	-	Vitt	Madrassöverdrag	Art. nr 90.200J01
105.200J01	EasyRoll madrassskydd	105	200	105	-	Vitt	Madrassöverdrag	Art. nr 105.200J01
120.200J01	EasyRoll madrassskydd	120	200	120	-	Vitt	Madrassöverdrag	Art. nr 120.200J01

Material: Bäddyta av bomullsjersey. Spärrskikt av polyuretan.

Skötselinstruktioner: Kan torktumlas vid 70 °C. Tål ej kemtvätt. Använd inte blekmedel. Använd inte sköljmedel.





PositioningCover

PositioningCover är ett formsyttt madrassöverdrag som används under ett vanligt lakan för förflyttning i sängen. PositioningCover kan användas med alla typer av madrasser och i situationer där det finns särskilda behov av rörlighet i sängen, till exempel för sängbundna brukare på intensivvårdsavdelningar.

PositioningCover är tillverkat i Direct Healthcare Groups eget unika glidmaterial ULFTM (Ultra Low Friction). Genom att minska friktionen under brukaren gör materialet det enkelt och säkert att vända och flytta brukaren i sängen med liten ansträngning och utan att det krävs några lyft. Det är bekvämt för brukaren och skonsamt för medhjälpens rygg och axlar.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
1596	PositioningCover	200 x 90 cm, formsytt med dragsko	1 st.
1596S	PositioningCover	200 x 90 cm, madrassöverdrag med elastiskt band	1 st.





TurnSheet (tvådelat system)

En smärtekänslig brukare med stora och frekventa vårdbehov kan vara en utmaning för vårdpersonalen. Med TurnSheet (210 x 150 cm) krävs liten styrka för att vända brukaren, och inga onödiga lyft behövs.

Den här produkten används både på sjukhus och inom hemvården.

Den ligger permanent i sängen och täcker alla tryckpunkter för att effektivt förebygga att trycksår uppstår.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
1592	TurnSheet	210 x 150 cm	1 st.
1588	TurnSheet	200 x 150 cm, med spännen	1 st.
1597	TurnSheet	200 x 160 cm, tvådelat	1 st.
1589	TurnSheet	200 x 240 cm, för extra tunga brukare	1 st.

Art. nr	Madrassöverdrag	Beskrivning	Antal
1593	Madrassöverdrag	Till 1592, 1590, 1597 och TopSheet 1510, 1515, 1511, längd 200 cm, passar till sängar på 90 cm	1 st.
1587	Madrassöverdrag	Till 1588, 1586, längd 200 cm, passar till sängar på 90 cm	1 st.
1594	Madrassöverdrag	Till 1592, 1589 och TopSheet 1510, 1515, längd 200 cm, passar till sängar på 105 cm	1 st.
1595	Madrassöverdrag	Till 1592 and 1589, längd 200 cm, passar till sängar på 120 cm	1 st.





TopSheet 1520



TopSheet 1515

TopSheet

TopSheet används till inkontinenta, sängbundna brukare som behöver vändas ofta. TopSheet är också utmärkt när man behöver hålla en tung brukare i sidoläge, till exempel för att hjälpa till med personlig hygien eller lägga om sår.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
1515	TopSheet (komplett set)	155 x 140 cm, ULF* på undersidan	1 st.
1510	TopSheet (komplett set)	200 x 160 cm, ULF* på undersidan	1 st.
1520	TopSheet (komplett set)	144 x 140 cm	1 st.

**) ULF: Ultra Low Friction*

Art. nr	Extra nederdelar	Beskrivning	Antal
1514	Nederdel till TopSheet 1515	85 x 140 cm	1 st.
1519	Nederdel till TopSheet 1520	80 x 140 cm	1 st.
1509	Nederdel till TopSheet 1510	140 x 160 cm	1 st.



Positionering

Övriga positioneringshjälpmedel



AntiSlip

AntiSlip är praktiskt när man behöver ett bra grepp för att kunna flytta sig högre upp i sängen. Den kan också användas som bromsande yta mellan glidmaterialen i många av våra glidprodukter.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
8040	AntiSlip	45 x 38 cm	1 st.
8045	AntiSlip	45 x 38 cm	10 st.



FootStool 8090



FootStool 8095

FootStool

FootStool används för att placera brukarens knän i ett upphöjt läge för enklare och säkrare förflyttning i sittande ställning. FootStool ger också ett bra stöd under brukarens fötter vid toalettbesök eller positionsjustering längre bak på en stol eller i rullstol.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
8090	FootStool	32 x 38 x 10 cm	1 st.
8095	FootStool	32 x 38 x 5 cm	1 st.

Designskydd: RCD-67533-1



FootStoolCover

FootStoolCover är ett avtorkningsbart överdrag avsett för Direct Healthcare Groups FootStool. Materialet tål att torkas av vilket ger optimal hygien. Överdraget har ett handtag som underlättar transport av FootStool och som även kan användas som hängare när FootStool inte används.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
8091	FootStoolCover	Avtorkningsbart överdrag till FootStool Art. nr 8090	1 st.
8096	FootStoolCover	Avtorkningsbart överdrag till FootStool Art. nr 8095	1 st.

Designskydd: RCD-67533-1





Uppresningshjälpmedel



FlexiMove 3030

FlexiMove

FlexiMove har flera olika användningsområden. Det kan bland annat användas som stöd när man ska hjälpa någon upp ur sängen eller ur en stol, för förflyttning högre upp i sängen eller till och från en rullstol – då ofta på en glidskiva.

FlexiMove finns i två utföranden med olika material på insidan.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
3012	FlexiMove	20 x 60 cm, nylon	1 st.
3030	FlexiMove	20 x 60 cm, polyestersammet	1 st.



FlexiGrip

FlexiGrip har en ergonomisk design som ger bättre komfort för händer och hud. Det är en perfekt lösning för brukare som har fysiska svårigheter att komma upp ur sängen.

Steg för steg får brukaren gradvis dra sig upp från liggande till sittande ställning.

FlexiGrip kan även användas som hjälpmedel vid förflyttning från rullstol till säng.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
6090	FlexiGrip	175 x 9 cm, 8 handtag	1 st.

Tillbehör

6091	Förlängningsband	120 cm, till FlexiGrip	1 st.
------	------------------	------------------------	-------



Vårdbälten



PositioningBelt

PositioningBelt används som stöd i olika förflyttningssituationer. Insidan av bältet är fodrad med nylon, vilket gör det lätt att tvätta eller sprita av. Bältets mjuka insida känns behaglig mot huden. Båda materialen har AntiSlip-funktion.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
9007S	PositioningBelt	20 x 70 cm (B x L)	1 st.
9007L	PositioningBelt	17 x 120 cm (B x L)	1 st.
9007XL	PositioningBelt	17 x 240 cm (B x L)	1 st.





FlexiBelt/EasyBelt

FlexiBelt och EasyBelt används för uppresning och för förflyttning från rullstol till säng, toalett eller bil. FlexiBelt har en mjuk insida av polyestersammet som gör bältet mycket bekvämt att ha på sig. EasyBelt har en invändig AntiSlip-yta av PU-belagd nylon och kan därför användas i fuktiga miljöer eller när det finns särskilda hygienkrav. FlexiBelt, hug och EasyBelt, hug är nya "kramande" versioner av Direct Healthcare Groups klassiska vårdbälten. FlexiBelt, hug och EasyBelt, hug har en ny patentskyddad* design med horisontella handtag som glider fritt i öglor så att bältet "kramar" brukaren istället för att glida upp under förflyttning. Med FlexiBelt, hug och EasyBelt, hug kan medhjälparen ge brukaren ännu mer stöd utan att behöva anstränga sig mer. Den nya versionen av bältet gör faktiskt hela jobbet själv.



FlexiBelt, hug



EasyBelt, hug

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
6072	FlexiBelt, hug	XS, 45–70 cm, 3 + 2 flyttbara handtag	1 st.
6073	FlexiBelt, hug	S, 60–100 cm, 4 + 3 flyttbara handtag	1 st.
6074	FlexiBelt, hug	M, 70–120 cm, 5 + 4 flyttbara handtag	1 st.
6075	FlexiBelt, hug	L, 100–160 cm, 6 + 5 flyttbara handtag	1 st.
6076	FlexiBelt, hug	XL, 115–175 cm, 7 + 6 flyttbara handtag	1 st.
6002	EasyBelt, hug	XS, 45–70 cm, 3 + 2 flyttbara handtag	1 st.
6003	EasyBelt, hug	S, 60–100 cm, 4 + 3 flyttbara handtag	1 st.
6004	EasyBelt, hug	M, 70–120 cm, 5 + 4 flyttbara handtag	1 st.
6005	EasyBelt, hug	L, 100–160 cm, 6 + 5 flyttbara handtag	1 st.
6006	EasyBelt, hug	XL, 115–175 cm, 7 + 6 flyttbara handtag	1 st.

Tillbehör

6061	SupportStraps	Tillbehör till vårdbälten	1 par
------	---------------	---------------------------	-------

*) Patent: SE-536273, EP-2611409, patentsökt: JP-2013-527040



ReadyBelt

ReadyBelt är ett vårdbälte som är utformat för att ge brukaren stöd och hjälp vid rörlighetsträning och i olika förflyttnings-situationer. För medhjälparen är ReadyBelt ett perfekt sätt att ge brukaren stöd vid till exempel rörlighetsträning eller toalettbesök.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
16023	ReadyBelt	Small, 105 x 10 cm, 7 handtag	1 st.
16024	ReadyBelt	Medium, 120 x 10 cm, 9 handtag	1 st.
16025	ReadyBelt	Large, 140 x 10 cm, 11 handtag	1 st.



Vårdbälten



WalkingBelt

WalkingBelt används för att ge stöd till barn med nedsatt styrka och stabilitet vid gåträning. WalkingBelt ger stöd runt bålen och hålls på plats med polstrade grenband. Längden på de två polstrade handtagen kan anpassas till en bekväm arbetsställning för medhjälparen som går tätt bakom barnet och håller i handtagen för extra stöd och stabilitet under gåträningen.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
6041	WalkingBelt	XXS, 60 cm	1 st.
6042	WalkingBelt	XS, 70 cm	1 st.




Stödtilbehör



SupportStraps

SupportStraps är ett tillbehör med flera funktioner som ger extra stöd och trygghet för brukare under stå- och gåträning och förflyttning med hjälp av Direct Healthcare Groups vårdbälten, uppresningshjälpmedel och förflyttningsplattformar. SupportStraps kan användas som:

- grenband till EasyBelt/FlexiBelt och ReadyBelt
- bål-/sidostöd när QuickMove används tillsammans med EasyBelt/FlexiBelt/FlexiMove
- sidostöd när ReTurn används tillsammans med ReTurnBelt

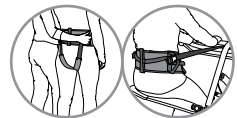

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
6061	SupportStraps	Tillbehör till vårdbälten	1 par



Gånghjälpmedel



RoWalker400

RoWalker400 är ett unikt, ergonomiskt utformat gånghjälpmedel för tidig mobilisering, specifikt avsedd för postoperativa kardio-, torax- och abdominalpatienter. RoWalker400 ger säkert stöd under gå- och ståträning. Flera justeringsmöjligheter för att garantera perfekt passform för varje brukare och inbyggda sittdynor för bekväm vila. RoWalker400 har även plats för syrgas, dräneringspåsar och droppställningar.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
20101010	RoWalker400	Gånghjälpmedel för tidig mobilisering	1 st.
Tillbehör			
70200059	OxygenTankHolder	Hållare för syrgastub, höger, komplett med låshandtag	1 st
70200060	OxygenTankHolder	Hållare för syrgastub, vänster, komplett med låshandtag	1 st



Hållare för syrgasbehållare





TurnTable 5085

TurnTable

TurnTable kan användas för sittande förflyttning mellan rullstol och säng, toalett, stol eller fåtölj. För extra säkerhet kan TurnTable användas tillsammans med FlexiBelt/EasyBelt.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
5085	TurnTable	Ø 38 cm, max 135 kg	1 st.



TurnSafe2

TurnSafe2 är ett ergonomiskt och användarvänligt hjälpmedel för uppresning och förflyttning med vridning. TurnSafe2 aktiverar och stödjer brukare med nedsatt balans och styrka i benen under förflyttning från säng till rullstol eller från rullstol till toalett. TurnSafe2 har en stor fotplatta med AntiSlip-yta, justerbar höjd och underbensstöd som kan justeras i både höjd- och sidled. Tillsammans med de stabila och greppvänliga handtagen gör dessa funktioner att brukaren kan delta aktivt i uppresning och förflyttning.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
20201010	TurnSafe2	Max 150 kg	1 st.

Tillbehör

7215	Polstring till benstöd	Till TurnSafe2 och ReTurn 7400, 7500, 7500i	1 par
------	------------------------	---	-------



Polstring till benstöd



PantLock

PantLock fästs runt låret för att förhindra att byxorna glider ner för långt, till exempel vid toalettbesök. Det gör det lättare att nå ner och dra upp byxorna efteråt. PantLock har kardborrband som dras genom en metallögla och därefter fästs ihop.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
8055	PantLock	One size	1 st.



Uppresningshjälpmedel

ReTurn

ReTurn är ett användarvänligt och otroligt praktiskt hjälpmedel för uppresning och kan även användas vid rehabilitering. ReTurn möjliggör trygg och aktiv uppresning och förflyttning till och från säng, rullstol eller toalett. ReTurn kan också användas för att underlätta positionsjustering längre bak på en stol eller i rullstol. För medhjälparen ger ReTurn möjlighet till enkla förflyttningar utan tunga lyft.



För brukare som fortfarande har ett visst mått av styrka i behåll stimulerar ReTurn det naturliga rörelsemönstret vid uppresning, samtidigt som den stärker musklerna och funktionsförmågan. Detta gör den till ett idealiskt hjälpmedel på en rehab-enhet och en brukare som använder ReTurn i hemmet kan oftast bo kvar hemma längre med assistans av bara en medhjälpare. ReTurn finns i tre modeller som alla har en unik, patentskyddad* design som gör den enkel att manövrera, även med tyngre brukare och i trånga utrymmen. Hjälpmedlet är också lätt att montera och ta isär för att underlätta transport och förvaring.



- **ReTurn7500i** har en uppresningsstege i standardhöjd och är lämplig för de flesta vuxna brukare (maxvikt 150 kg). Uppresningsstegen (patentsökt**) på ReTurn7500i har en öppning där man snabbt och enkelt kan fästa ett ReTurnBelt.
- **ReTurn7400** har en låg uppresningsstege som passar utmärkt för kortare vuxna och barn (maxvikt 150 kg). Den fungerar också mycket bra i särskilda vårdssituationer, till exempel på en röntgenavdelning.
- **ReTurn7600** är avsedd för brukare med en maxvikt på 205 kg. Denna modell har därför en bredare basplatta som ger större utrymme för större och tyngre brukare.

ReTurn7600 har även underbensstöd som är anpassade för dessa brukare samt en uppresningsstege som är både högre och bredare än uppresningsstegen på ReTurn7500i och ReTurn7400.

ReTurn7500i och ReTurn7400 har samma stabila basplatta, som gör det möjligt att byta mellan en uppresningsstege i standardhöjd och en lägre stege för att täcka in fler behov och få mesta möjliga nytta av produkten.

*) Patent: SE-0300528-7

**) patentsökt: EP-12868688-8, US-14/378658

Designskydd: RCD-529631-1 (ReTurn7500/7500ii/7400/7600)

Uppresningshjälpmedel



ReTurnBelt



SupportStraps



HeelStrap



Polstring till benstöd, 7215, 7216



Väska

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
7500i	ReTurn7500i	Förflyttningsplattform, komplett med uppresningsstege i standardhöjd, med en öppning för att fästa ReTurnBelt	1 st.
7400	ReTurn7400	Förflyttningsplattform, komplett med låg uppresningsstege	1 st.
7600	ReTurn7600	Förflyttningsplattform, komplett med bred uppresningsstege	1 st.

Tillbehör

6031--6038	ReTurnBelt***	Storlek XXS-XXXL, till ReTurn med artikelnummer 7100****, 7500, 7500i, 7400, 7600	1 st.
6061	SupportStraps	Tillbehör till vårdbälten	1 par
7250	HeelStrap	Till ReTurn7500 med serienummer från 373317697500500001 och till ReTurn7400 med serienummer från 373317697400500001	1 st.
7215	Polstring till benstöd	Till ReTurn mer artikelnummer 7100****, 7500, 7500i, 7400 (standardutrustning till 7500i) och till TurnSafe	1 par
7216	Polstring till benstöd	Till ReTurn med artikelnummer 7600	1 par
954	Väska	Till ReTurn med artikelnummer 7500, 7500i, 7400	1 st.

***) Patent: SE-0401517-8,

****) Utgått ur sortimentet



Uppresningshjälpmedel



QuickMove

QuickMove är ett säkert och användarvänligt hjälpmedel för uppresning och förflyttning av brukare med nedsatt balans och styrka i benen. Med utgångspunkt från naturliga rörelsemönster ger QuickMove stöd vid uppresning genom att utnyttja brukarens egen styrka och sedan förflytta brukaren sittande eller stående från säng till stol eller rullstol, eller till och från toaletten. Brukaren behöver ha ståfunktion och viss styrka i armarna för att kunna delta aktivt i uppresningen och förflyttningen. BackSupport är ett tillbehör som kan användas som bål-/sidostöd till QuickMove. Det ger extra stabilitet och trygghet för brukaren vid förflyttning med QuickMove.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
400801334	QuickMove	SWL 170 kg	1 st.

Tillbehör

70200037	BackSupport	Bål-/sidostöd till QuickMove	1 st.
----------	-------------	------------------------------	-------








MiniLift

MiniLift är en mobil uppresningslyft som är avsedd för att på ett så skonsamt sätt som möjligt hjälpa brukaren att resa sig från sittande till stående. När den används i kombination med rätt tillbehör får brukaren stöd under fötterna, stöd för knäna och underbenen samt bakom ryggen. MiniLift finns i flera olika modeller för brukare med maxvikt från 125 kg till 200 kg. Bygeln till MiniLift200 kan försees med ett mjukt skydd, SlingBarWrap MiniLift, vilket ibland kan behövas för brukare med okontrollerade rörelser. SlingBarWrap MiniLift fästs med kardborrband och är lätt att ta bort och tvätta.

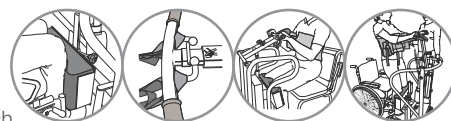

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
401100334	MiniLift200	SWL 200 kg	1 st.
60300012	MiniLift160EE	Max 160 kg, elektrisk benbreddning	1 st.
400641436	MiniLift160 Classic	Max 160 kg	1 st.
400641437	MiniLift160 Classic med låga ben	Max 160 kg	1 st.
400641434	MiniLift125	SWL 125 kg	1 st.
400641435	MiniLift 125 med låga ben	Max 125 kg, frigång under säng 58 mm	1 st.

Tillbehör

Se sida 91	ThoraxSling	Uppresningsväst	
70200012	SlingBarWrap MiniLift	Till MiniLift200 och MiniLift160	1 st.
70200033	CalfStrap	Till MiniLift200 från serienummer 200001277, till MiniLift160 och till MiniLift125 från serienummer 125001653	1 st.
70200029	Extern laddare Linak	Till MiniLift200/MiniLift160/MiniLift125	1 st.



MiniLift200 och ThoraxSling med sätesstöd



MiniLift160 och ThoraxSling, avtorkningsbar



MiniLift125 och ThoraxSling



ThoraxSling

För uppresning och ståträning i kombination med MiniLift200/160/125

Tillsammans med MiniLift ger ThoraxSling en mycket skonsam och behaglig uppresning. Lyftarmens rörelse gör att draget hamnar bekvämt vid ländryggen och att lyftselen inte dras upp under armarna. Mer information finns i avsnitten om MiniLift och ThoraxSling.







Manuella lyfthjälpmedel



LiftSeat 4005



LiftSeat
4006, 4007

LiftSeat

LiftSeat är avsedd att användas för manuella lyft i sittande ställning. Ett vanligt användningsområde är lyft till eller från en flygplansstol eller ett säte i en buss. LiftSeat finns i två modeller: en hel modell och en med delade benstöd för enklare påtagning. Båda modellerna ger brukaren stöd under benen och från svanskotan upp till axlarna. Båda modellerna är enkla att förvara och ta med på resor.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
4005	LiftSeat	SWL 120 kg	1 st.
4006	LiftSeat, delade benstöd	Small/Medium, max 150 kg	1 st.
4007	LiftSeat, delade benstöd	Large/X-Large, max 150 kg	1 st.



FlexiMove 4012



FlexiMove 4016

FlexiMove

Med FlexiMove behöver man lyfta ytterst lite. Den är främst avsedd för förflyttning högre upp i sängen, vändningar och förflyttning i sidled. I sådana situationer är det lättare att dra än att lyfta eftersom undersidan är glatt och glider lätt i sängen. När lyft inte går att undvika kan FlexiMove användas för både sittande och liggande förflyttning. FlexiMove finns i två storlekar, båda för brukare med en maxvikt på 150 kg.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
4012	FlexiMove	112 x 53 cm, 4 handtag	1 st.
4016	FlexiMove	152 x 53 cm, 6 handtag	1 st.







RiseBasic

RiseBasic är en modern och elegant stationär taklyftsmotor med många funktioner som ger maximal komfort och säkerhet under lyft, både för brukaren och medhjälparen. När den används tillsammans med rätt lyfttillbehör ger RiseBasic säkra, bekväma och individanpassade lyft av brukare i samband med sittande eller horisontell förflyttning till och från säng, rullstol eller toalett.

RiseBasic har ett stort lyftområde och möjlighet till både mycket låga och mycket höga lyft, vilket gör den till en utmärkt lösning även för lyft från golvet och för gå- och ståträning. RiseBasic kan även användas för bekväm förflyttning av brukare från ett rum till ett annat.



RiseBasic finns i två modeller: **RiseBasic300M**, med en lyftkapacitet på 138 kg, och **RiseBasic440M**, med en lyftkapacitet på 200 kg. Båda RiseBasic-modellerna levereras med handkontroll och laddare. Lyftbygel beställs separat.


Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
50100039	RiseBasic300M	SWL 138 kg	1 st
50100040	RiseBasic440M	SWL 200 kg	1 st
Tillbehör			
70200062	In-rail/end point charging	Skenladdning/ändladdning, två alternativ för laddning	1 set
70200066	Switch manoeuvring	Växlestyrning, för styrning av karusellväxlar med hjälp av handkontrollen	1 set
70200048	Software for diagnostics	Mjukvara för diagnostik, för alla modeller av RiseBasic	1 set
50400048	Parking Placard	Parkeringstavla, för bekväm förvaring av lyftbyglar, manualer och lyftselar	1 st
70200001	SlingBar S	Lyftbygel, 35 cm	1 st
70200002	SlingBar M	Lyftbygel, 45 cm	1 st
70200003	SlingBar L	Lyftbygel, 60 cm	1 st
70200042	SlingBarSpreader M	Sidobyglar för SlingBar S/M/L	1 st



Modell / Specialversion	RiseBasic300M	RiseBasic440M	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem	RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, high humidity	RiseAtlas450T	RiseAtlas625M, med QuickTrolleySystem	RiseAtlas625T
Artikelnummer	50100039	50100040	50100057	50100051	50100058	50100059	50100060
Safe working load:	138 kg	200 kg	205 kg	205 kg	205 kg	285 kg	285 kg
Förflyttning längs skenan:	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Åkmotor	Manuell	Åkmotor
Material, chassi:	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Material, kåpa:	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast	Flamsäker ABS-plast
Mått, längd x bredd x höjd:	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm	26,6 x 15,1 x 15,6 cm
Vikt:	6,8 kg	6,8 kg	7,2 kg	7,3 kg	7,5 kg	7,3 kg	7,5 kg
Hastighet vid förflyttning, längs skenan, utan belastning:	-	-	-	-	14 cm / sek	-	14 cm / sek
Hastighet vid förflyttning, längs skenan, med belastning:	-	-	-	-	12 cm / sek	-	12 cm / sek
Handkontroll:	Elektrisk, 4 knappar	Elektrisk, 4 knappar	Elektrisk, 4 knappar	Elektrisk, 4 knappar	Elektrisk, 6 knappar	Elektrisk, 4 knappar	Elektrisk, 6 knappar
Lyftintervall:	200 cm	200 cm	240 cm	240 cm	240 cm	240 cm	240 cm
Lyft hastighet, utan belastning:	3,0 cm / sek	3,0 cm / sek	5,0 cm / sek	5,0 cm / sek	5,0 cm / sek	5,0 cm / sek	5,0 cm / sek
Lyft hastighet, med belastning:	2,0 cm / sek	2,0 cm / sek	3,9 cm / sek	3,9 cm / sek	3,9 cm / sek	3,9 cm / sek	3,9 cm / sek
Ljudnivå, med belastning:	51 dB(A)	51 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)	55 dB(A)
Effektiv styrning av lyftband:	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Nödsänkning:	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell	Elektrisk och manuell
Nödstopp:	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell
Nattbelysning:	-	-	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Batteri:	2 x 12V 2,9 Ah	2 x 12V 2,9 Ah	NIMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NIMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NIMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NIMH 24V 3,2 Ah/768Wh	NIMH 24V 3,2 Ah/768Wh
Handkontrollsladdning:	Standard	Standard	Standard	Nej	Standard	Standard	Standard
Skenladdning:	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, standard	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör
Åndladdning:	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, standard	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör	Valfri, tillbehör
Skyddsklass, lyftmotor:	IP20	IP20	IP20	IPX4	IP20	IP20	IP20
Skyddsklass, handkontroll:	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4

Alla modeller och specialversioner av RiseBasic och RiseAtlas uppfyller kraven i direktivet om medicintekniska produkter i klass 1 (MD93/42/EEG).

Taklyftar

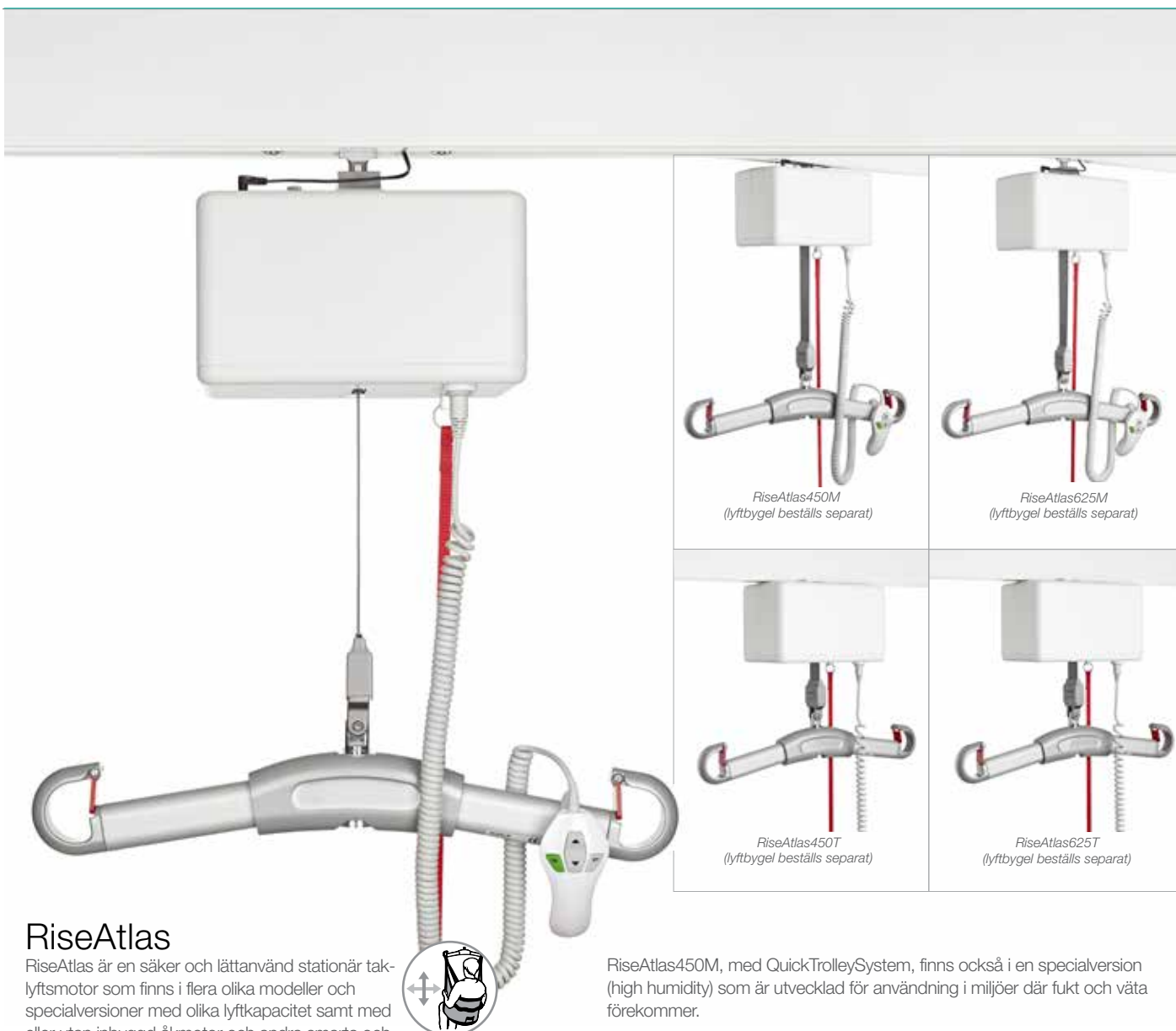

RiseAtlas

RiseAtlas är en säker och lättanvänd stationär taklyftsmotor som finns i flera olika modeller och specialversioner med olika lyftkapacitet samt med eller utan inbyggd åkmotor och andra smarta och praktiska egenskaper och funktioner. Vilken modell som är rätt beror på behovet av lyftkapacitet, vilka miljöer och situationer taklyftsmotorn ska användas i samt, givetvis, vilka behov brukarna har.

RiseAtlas450 har en lyftkapacitet på upp till 205 kg medan **RiseAtlas625** har en lyftkapacitet på upp till 285 kg.

Både RiseAtlas450 och RiseAtlas625 finns med olika lösningar för förflyttning längs skenan. RiseAtlas450M och RiseAtlas625M förflyttas manuellt längs skenan, medan RiseAtlas450T och RiseAtlas 625T har inbyggd åkmotor och därmed motordriven förflyttning längs skenan.

RiseAtlas450M och RiseAtlas625M är båda utrustade med Direct Healthcare Groups unika QuickTrolleySystem. Dessa modeller har en snabbkopplad åkvagn som gör det möjligt att enkelt och behändigt ta ner taklyftsmotorn från skenan för enklare service. Med QuickTrolleySystem är det dessutom möjligt att flytta taklyftsmotorn mellan olika skensystem i olika rum.

RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, finns också i en specialversion (high humidity) som är utvecklad för användning i miljöer där fukt och vata förekommer.

Alla modeller av RiseAtlas, utom specialversionen för high humidity, har enkel och bekväm handkontrollsladdning som standard. Specialversionen har, som standard, en unik laddningslösning med en åkvagn för två alternativa laddningsmetoder (skenladdning/ändladdning). Som tillval kan RiseAtlas taklyftsmotorer med handkontrollsladdning också utrustas med denna laddningslösning (skenladdning/ändladdning).

Tillsammans med korrekt utprovade lyfttillbehör erbjuder RiseAtlas trygga, bekväma och individuellt anpassade lyft av brukare i samband med sittande eller liggande förflyttningar till och från säng, rullstol eller toalett. RiseAtlas har ett stort lyftområde och erbjuder möjlighet till både mycket låga och mycket höga lyft, vilket gör den till en utmärkt lösning också för lyft från golv samt för gå- och ståträning. RiseAtlas kan också användas för smidiga förflyttningar av brukare från ett rum till ett annat.

Alla modeller och specialversioner av RiseAtlas levereras utrustade med handkontroll och laddare. Lyftbygel beställs separat.



Parking Placard



Cover to charger



SlingBarSpreader

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning	Enhet
50100057	RiseAtlas450M	Med QuickTrolleySystem, SWL 205 kg	1 st
50100051	RiseAtlas450M	Med QuickTrolleySystem, high humidity, SWL 205 kg	1 st
50100058	RiseAtlas450T	SWL 205 kg	1 st
50100059	RiseAtlas625M	Med QuickTrolleySystem, SWL 285 kg	1 st
50100060	RiseAtlas625T	SWL 285 kg	1 st
Tillbehör			
70200046	QuickTrolley450	Snabbkopplad åkvagn, för 50100057, 50100051	1 set
70200051	QuickTrolley450 70 mm	Snabbkopplad åkvagn, sänker taklyftsmotorn med 70 mm, ombyggnadssats för 50100057, 50100051	1 set
70200062	In-rail/end point charging	Skenladdning/ändladdning, två alternativ för laddning, för 50100057, 50100058, 50100059, 50100060	1 set
70200065	IR remote controlling	För trådlös manövrering, för 50100057, 50100059	1 set
70200047	9V battery and cable	Batteri och kabel, för nödsänkning, för 50100057, 50100058, 50100052, 50100059, 50100060, 50100053	1 set
70200048	Software for diagnostics	Mjukvara för diagnostik, för alla modeller och specialversioner av RiseAtlas	1 set
50400066	Cover to charger	Kåpa för laddare, för alla modeller och specialversioner av RiseAtlas	1 st
50400048	Parking Placard	Parkeringstavla, för bekväm förvaring av lyftbyglar, manualer och lyftselar	1 st
70200001	SlingBar S	Lyftbygel, 35 cm	1 st
70200002	SlingBar M	Lyftbygel, 45 cm	1 st
70200003	SlingBar L	Lyftbygel, 60 cm	1 st
70200042	SlingBarSpreader M	Sidobyglar för SlingBar S/M/L	1 par





Castor visas här med skena och extra låsvred. Båda säljs separat.



Låsved

Castor

Castor är en säker, högpresterande och bärbar fristående lyftställning som, tillsammans med en skena och en taklyftsmotor, fungerar som ett stationärt personlyftsystem. Castor är tillverkad i aluminium, vilket gör den lätt i förhållande till den höga belastningskapaciteten på 300 kg. Modellen är både kompakt och diskret, samtidigt som Castor är en av marknadens mest robusta fristående lyftställningar. Castor är perfekt för enstaka lyftbehov på en specifik plats, eller när det inte är möjligt att installera ett permanent skensystem i taket.



Skenorna beställs separat, vilket innebär att du kan välja längd på skenan och därmed anpassa lyftställningens bredd och lyftområde så att det passar optimalt med lyftbehoven i olika miljöer. Skenorna finns i längder från 2 till 5 meter.

Med hjälp av låsvred på stödbenen kan Castor enkelt höjjusteras i sju olika lägen för att anpassa lyftställningens höjd och lyftintervallet efter den aktuella situationen och behovet.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
50300004	Castor	Bärbar lyftställning, utan skena, vit, max 300 kg	1 set
50400264	Skena 64-2000	200 cm	1 st.
50400269	Skena 64-3000	300 cm	1 st.
50400285	Skena 120-4000	400 cm	1 st.
50400290	Skena 120-5000	500 cm	1 st.

Tillbehör

50300006	Låsved	Quick release, till Castor	4 st.
50400180	BariTurn	Vridbar åkvagn (360°) för två taklyftsmotorer	1 st.



Helena

Helena är en säker och högpresterande fristående lyftställning med en traverssskena. Tillsammans med en taklyftsmotor fungerar Helena som ett stationärt (x-y) personlyftsystem. Traverssskenan är monterad i traversåkvagnar och kan förflyttas i sidled i fasta skenor längs med hela lyftställningens bredd. Detta gör att taklyftsmotorn kan flyttas i alla riktningar och användas var som helst i lyftområdet.



Helena är tillverkad i aluminium, vilket gör lyftställningen lätt i förhållande till den höga lyftkapaciteten på 285 kg. Modellen är både kompakt och diskret samtidigt som Helena är en av marknadens mest robusta fristående lyftställningar. Helena är perfekt för enstaka lyftbehov på en specifik plats, eller när det inte är möjligt att installera ett permanent skensystem i taket.

Helena finns i tre modeller med olika mått som ger olika stora lyftområden. Alla Helena-modeller levereras kompletta och klara att montera och använda. De kan användas tillsammans med alla taklyftsmotorer från Direct Healthcare Group.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
50300009	Helena 3 x 3	Fristående lyftställning med traverssskena, komplett, total bredd x längd: 3157 x 3104 mm, SWL 285 kg	1 set
50300010	Helena 4 x 3	Fristående lyftställning med traverssskena, komplett, total bredd x längd: 4157 x 3104 mm, SWL 285 kg	1 set
50300011	Helena 5 x 4	Fristående lyftställning med traverssskena, komplett, total bredd x längd: 5157 x 4104 mm, SWL 285 kg	1 set



Helena 3x3

MilkyWay skensystem - obegränsade möjligheter

En stationär lyftlösning som består av en taklyftsmotor monterad på ett permanent installerat skensystem eller på en fristående travers/ställning. Milkyway är en ergonomisk favorit och ett perfekt koncept som eliminerar manuella lyft och ger vårdpersonalen en säker och bekväm miljö för förflyttning och hantering.

Ett fast installerat personlyftssystem finns alltid på plats när det behövs, och traversalternativet kräver ett minimum av golvyta och är lätt att manövrera om det behöver flyttas. Med ett brett urval av skenor i olika storlek, längd och konfigurationer kan båda systemen täcka in ett stort lyftområde och erbjuda möjlighet till både mycket låga och mycket höga lyft.

Då är ett permanent installerat skensystem den rätta lösningen:

Varje MilkyWay-skensystem är individuellt utformat i nära samarbete med kunden för att garantera anpassning till de specifika omständigheterna och behoven. Tillsammans med valfri taklyftsmotor och lämpliga lyfttillbehör ger MilkyWay obegränsade möjligheter för design och anpassning av den perfekta stationära lyftlösningen för alla miljöer, rum och lyftbehov.

Lätt att installera

MilkyWay ger stor flexibilitet och kan anpassas till de flesta miljöer. Systemet är mycket lätt att installera och det finns en modell och en lösning för de allra flesta situationer, både i nybyggen och i lokaler som ska funktionsanpassas.

Skensystemet MilkyWay måste alltid installeras av kompetent och behörig personal i enlighet med anvisningarna från Direct Healthcare Group. MilkyWay är utformat för att uppfylla de högsta säkerhetskraven i MDD och ISOEN 10535.



Ett stilrent och ekonomiskt system

Takfästen och pendlar

MilkyWay erbjuder flera olika möjligheter för installation i taket. Beroende på faktorer som takhöjd, material och konstruktion kan du välja mellan takfästen och/eller olika pendlar med justerbar höjd. Med stor flexibilitet och ett brett utbud av komponenter och fästen inklusive skenor och sidostödda pendlar kan MilkyWay installeras i de flesta tak, inklusive höga utrymmen och i de flesta byggmaterial och konstruktioner.



Väggfästen

På samma sätt erbjuder MilkyWay också olika alternativ för väggmontering av fribärande skensystem. Även här är urvalet av fästen beroende av väggkonstruktion och material, liksom av den vikt systemet ska bära.



Skenor och åkvagnar

MilkyWay erbjuder flera olika möjligheter med raka skenor och skenkurvor för att bygga den totallösning som behövs, liksom åkvagnar som kan användas tillsammans med RiseAtlas-serien eller med taklyftar från andra leverantörer. Alla skenor och skenkurvor är förberedda för skenladdning. För den som vill ha ett elegantare utseende erbjuder MilkyWay dessutom möjligheten att montera en infälld takskena, något som är mycket populärt i moderna byggnader.



Strömförsörjning

MilkyWay kan installeras med inbyggd skenladdning som ger konstant strömförsörjning (24 V DC). Det innebär att taklyftsmotorn hela tiden kan förses med ström var som helst i skensystemet, vilket gör att man slipper ha en laddstation. Naturligtvis finns också möjligheten att installera MilkyWay med en eller flera laddstationer på förvalda ställen i skensystemet.



Växlar

Växlar används till att koppla samman enskilda skenor eller skensystem med varandra, vilket gör att taklyftsmotorn kan förflyttas inom hela systemet för ökad räckvidd, flexibilitet och användarvänlighet.

I MilkyWay-serien finns spårväxlar, karusellväxlar och skenväxlar för alla typer av skensystem.



Mobila lyftar

Eva

Eva är en mångsidig mobil personlyft för alla lyftsituationer och för brukare med olika behov. Tillsammans med Direct Healthcare Groups funktionella och användarvänliga lyfttillbehör är Eva ett utmärkt val för lyft i samband med förflyttning till och från säng, stol eller golv samt för horisontella lyft och gåträning. Eva finns i flera modeller och utföranden med olika lyftkapacitet och med elektrisk benbreddning (EE). Eva finns även i specialversioner med låga ben för låga sängar. Alla modeller och utföranden av Eva levereras kompletta och klara för användning. De är utrustade med en stabil lyftbygel med säkra urkrokningskydd och en handkontroll. Alla utföranden av Eva400 och Eva450 är utrustade med en lyftbygel i standardbredd (SlingBar M, 450 mm) som passar de flesta brukare och lyftsituationer. Alla utföranden av Eva600 är utrustade med en bredare lyftbygel (SlingBar L, 600 mm) som ger en öppnare lyftsele och ökat utrymme, vilket passar bra för större och tyngre brukare.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
60100002	Eva450EE	Max 205 kg, aluminium, hjulstorlek Ø 100 mm	1 st.
60100006	Eva450EE	Med låga ben, Max 205 kg, aluminium, hjulstorlek fram 2 x Ø 35 mm, bak Ø 100 mm	1 st.
60100003	Eva600EE	Max 270 kg, aluminium, hjulstorlek Ø 100 mm	1 st.
60100010	Eva600EE	Med låga ben, Max 270 kg, aluminium, hjulstorlek fram 2 x Ø 35 mm, bak Ø 100 mm	1 st.

Tillbehör

70200029	Extern laddare Linak	För Eva450/Eva600	1 st.
----------	----------------------	-------------------	-------



*Eva450EE,
med elektrisk benbreddning,
för brukare med maxvikt 205 kg.*



*Eva450EE,
med låga ben, med elektrisk
benbreddning, för brukare med
maxvikt 205 kg.*



*Eva600EE,
med elektrisk benbreddning,
för brukare med maxvikt 270 kg.*



*Eva600EE,
med låga ben, med elektrisk
benbreddning, för brukare med
maxvikt 270 kg.*

EvaDrive

EvaDrive är en motordriven mobil personlyft som gör att det krävs betydligt mindre kraft för att manövrera lyften med patienten i. EvaDrive kan köras med minimal ansträngning, även i trånga utrymmen. Tack vare det intuitiva handtaget är den lika enkel att styra som en vanlig kundvagn. EvaDrive går att svänga, backa och köra framåt med ett lätt tryck på handtaget i önskad riktning. EvaDrive vet vart du vill åka – och tar dig dit! EvaDrive finns i två versioner: Eva450Drive och Eva600Drive.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
60900002	Eva450Drive	Max 205 kg, aluminium, hjulstorlek fram 2 x Ø 100 mm, bak 2 x Ø 203 mm	1 st.
60900003	Eva600Drive	Max 270 kg, aluminium, hjulstorlek fram 2 x Ø 100 mm, bak 2 x Ø 203 mm	1 st.
Tillbehör			
60900022	Litiumbatteri	For EvaDrive	1 st.



Eva450Drive, för brukare med maxvikt 205 kg.
Finns även som: Eva600Drive för brukare med maxvikt 270 kg.



Det tryckkänsliga och ergonomiska handtaget är utrustat med belastningsceller som känner av varje rörelse du gör. Tryck lätt på handtaget så kör EvaDrive framåt. Dra lätt i handtaget så backar EvaDrive. Handtaget känner av varje rörelse du vill göra och EvaDrive kan styras i valfri riktning med bara fingertopparna. Handtaget är ergonomiskt och justerbart i höjdlöd. Dessutom finns en säkerhetsbrytare som förhindrar oönskade rörelser.



Bakhjulen kan vridas i alla vinklar med hjälp av knapparna på kontrollpanelen. EvaDrive kan enkelt köras in i mycket trånga utrymmen tack vare hjulens sidorörelser.



Det kraftfulla litiumbatteriet räcker ett helt arbetspass. Ladda batteriet när EvaDrive inte används så är lyften driftklar och redo för nästa arbetspass. Batteriet är avtagbart och kan bytas ut vid behov.




Carina350

Carina350 är en hopfällbar, mobil personlyft som är anpassad för säkra och enkla lyft av brukare med en maxvikt på 165 kg. Carina350 finns i tre olika utföranden, med manuell eller elektrisk benbreddning och med standardhöjd eller låga ben. Alla utföranden är robusta och stabila och klarar de flesta lyftsituationer och behov. Samtliga modeller av Carina350 levereras kompletta och klara att använda. De är utrustade med handkontroll och en lyftbygel i standardbredd (SlingBar M, 45 cm).



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
60600011	Carina350EM	Mobil personlyft med manuell benbreddning, stål, hjulstorlek Ø 100 mm	1 st.
60600012	Carina350EML	Mobil personlyft med manuell benbreddning, stål, låga ben hjulstorlek fram Ø 35 mm, bak 100 mm	1 st.
60600009	Carina350EE	Mobil personlyft med elektrisk benbreddning, stål, hjulstorlek Ø 100 mm	1 st.

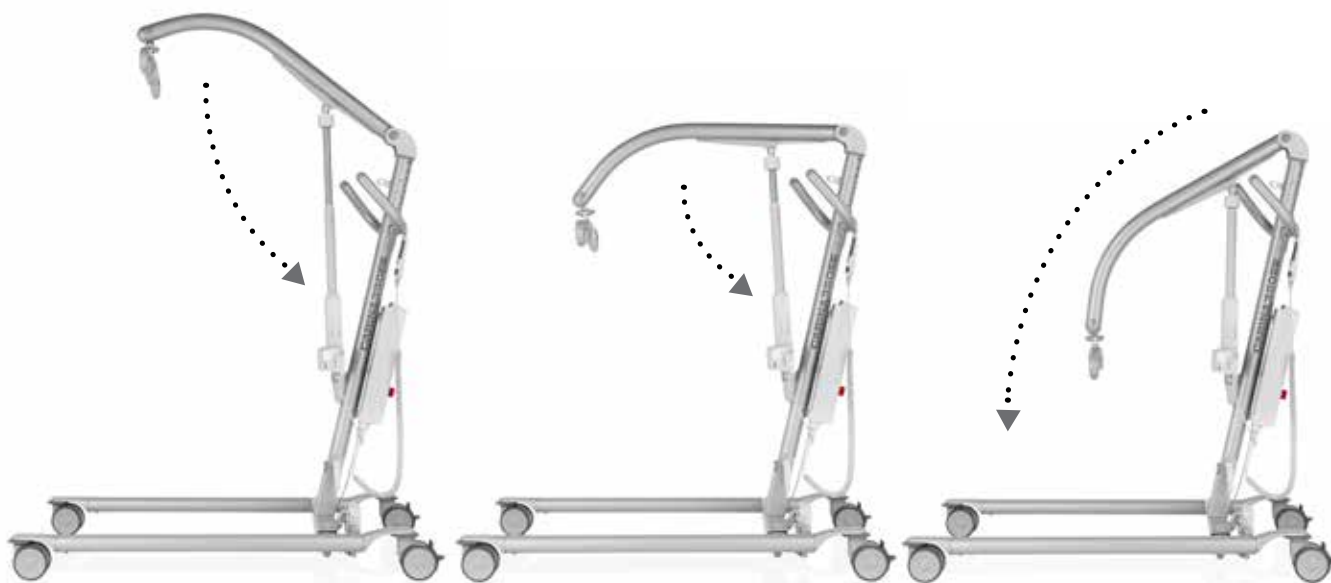

Carina350EM, med låga ben,
art.nr. 60600012




Carina350EE, hopfäld



Vega505EE

Vega är en mobil personlyft som är anpassad för säkra lyft av brukare med en maxvikt på 230 kg. Vega har en unik design med en lyftarm som både kan höjas upp till nästan upprättstående och sänkas hela vägen ner till golvet. Den är också relativt smal och kompakt, med mått som är anpassade för situationer och lokaler där utrymmet är begränsat. Trots den praktiska storleken erbjuder Vega en ovanligt hög lyfthöjd, och det totala lyftintervallet är också mycket stort. Vega505EE levereras komplett och klar att använda. Den är utrustad med handkontroll och en lyftbygel i standardbredd (SlingBar M, 45 cm).

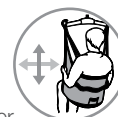

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
60600003	Vega505EE	Max 230 kg, stål, underhållsfria hjul, Ø 100 mm	1 st.
Tillbehör			
70200042	SlingBarSpreader M	Sidobyglar till SlingBar S /M /L	1 par



Lyfttillbehör



SlingBar

SlingBar är en tvåpunktsbygel i aluminium som finns i olika bredder. Lyftbyglarna har säkra urkrokningskydd som förhindrar att lyftbanden/öglorna kryper ur lyftbygeln.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
70200001	SlingBar S	35 cm, max 300 kg	1 st.
70200002	SlingBar M	45 cm, max 300 kg	1 st.
70200003	SlingBar L	60 cm, max 300 kg	1 st.



SlingBarSpreader M, monterad på SlingBar M.

SlingBarSpreader M

Sidobyglar till SlingBarSpreader M kan användas som tillbehör för att få mer utrymme i en tvåpunktsbygel. SlingBarSpreader M öppnar upp lyftselen och ger en mer tillbakalutad ställning. SlingBarSpreader M säljs i par och kan användas tillsammans med alla SlingBar-modeller.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
70200042	SlingBarSpreader M	Sidobyglar till SlingBar S/M/L	1 par



SlingBarWrap

SlingBar kan förses med ett mjukt skydd, SlingBarWrap, vilket ibland kan behövas för brukare med okontrollerade rörelser. Skyddet fästs med kardborrband och är lätt att ta bort och tvätta.



SlingBarWrap MiniLift

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
70200009	SlingBarWrap	Till SlingBar S/M/L	1 st.
70200012	SlingBarWrap MiniLift	Till MiniLift200	1 st.





StretcherBar

StretcherBar är en lyftbygel som används tillsammans med StretcherSling för horisontella lyft med stationära eller mobila personlyftar. StretcherBar har tio upphängningspunkter, fem på vardera sidan av brukaren, vilket ger ett jämnt stöd för hela kroppen. Bredden på lyftselen är lätt att justera genom att dra ut eller skjuta in upphängningskrokarna.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
70200006	StretcherBar	10 point, max 300 kg	1 st.




StretcherBar används i kombination med StretcherSling




Scales

Charder MHS2500 används tillsammans med stationära eller mobila personlyftar för att väga brukare.

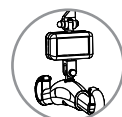

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
70100002	Charder MHS2500	Max 300 kg	1 st.
70100003	Charder MHS2500	Max 400 kg	1 st.

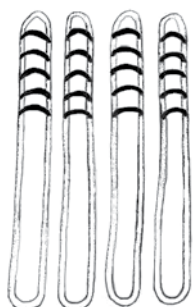


BackBoardStraps

BackBoardStraps är utformade för att användas i kombination med Ferno Scoop Stretcher 065 EXL för att möjliggöra mekaniska lyft med en manuell bår inom akutsjukvård. BackBoardStraps består av fyra fristående lyftband med sex alternativa lyftöglor på ena sidan av varje band för att bårerna ska kunna balanseras under lyftet. BackBoardStraps öglas fast i handtagshålen (två på vardera sidan) och fästs sedan i lyftbygelns krokar. SWL 160 kg.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
49482000	BackBoardStraps	Till Ferno Scoop Stretcher 065 EXL	4 st.



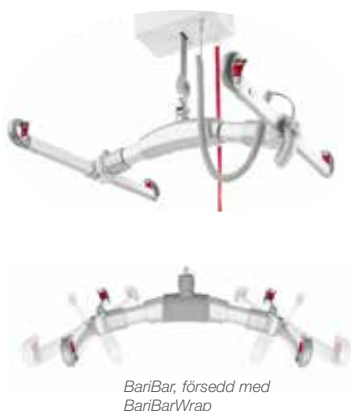

BariBar

BariBar är en fyrapunktsbygel i aluminium/stål som tillsammans med en korrekt utprovad lyftsele och en taklyftsmotor godkänd av Direct Healthcare Group används till att lyfta brukare med en maxvikt på 454 kg. BariBar öppnar upp lyftselen och ger större utrymme och en mer tillbakalutad sittställning, vilket passar bra för större och tyngre och/eller smärtekänsliga brukare. BariBar är mycket lätt att använda.

Den inbyggda justeringsfunktionen anpassar automatiskt lyftbygeln till varje brukare för optimal komfort. Säkra urkrokningskydd förhindrar att lyftbanden/öglorna kryper ur lyftbygeln. BariBar levereras komplett och försedd med BariBarWrap, ett avtorkningsbart skydd som ger säker hantering av fyrapunktsbygeln.




Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
70200072	BariBar	Fyrapunktsbygel för godkända taklyftsmotorer, SWL 454 kg	1 st.



BariTurn

BariTurn är en vridbar åkvagn (360°) för två taklyftsmotorer. BariTurn används i kombination med ett permanent installerat skensystem av typen MilkyWay för att lyfta mycket stora och tunga brukare, till exempel vid sittande eller horisontell förflyttning. BariTurn är också ett utmärkt hjälpmedel för stå- och gåträning med mycket tunga brukare.

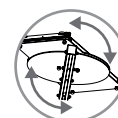

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
50400180	BariTurn	SWL 500 kg	1 st.







Att tänka på när du väljer storlek och material på lyftselen.

Storlek

Lyftselen är för liten

- om brukarens ansikte är för nära lyftbygeln
- om benstöden skär in i grenen
- om lyftselen ser trång ut eller upplevs trång

Lyftselen är för stor

- om brukarens stuss glider ut för mycket i den nedre öppningen
- om benstöden glider fram mot brukarens knäveck

Material

Polyester

- Slitstarkt och lättskött
- Låg friktion
- Klarar hög tvättemperatur

Polyesternät

- Flexibelt och luftigt
- Transporterar även fukt genom maskorna
- Klarar hög tvättemperatur
- Kan lämnas kvar under brukaren

Plastat nät


- Tar inte åt sig vatten, passar för lyft i samband med bad
- Kan desinficeras med spritlösning

Engångsmaterial

- Stadig och slitstark non-woven eller polyester
- Kasserar efter användning istället för att tvättas
- Förhindrar spridning av t ex multiresistenta bakterier

Viktiga detaljer


Direct Healthcare Group har ett heltäckande sortiment av funktionella och bekväma lyftselar med säker konstruktion och många praktiska detaljer. Läs alltid manualen innan du använder lyftselen och glöm inte bort att utföra regelbundna funktionstester. Läs mer om detta på www.directhealthcaregroup.com

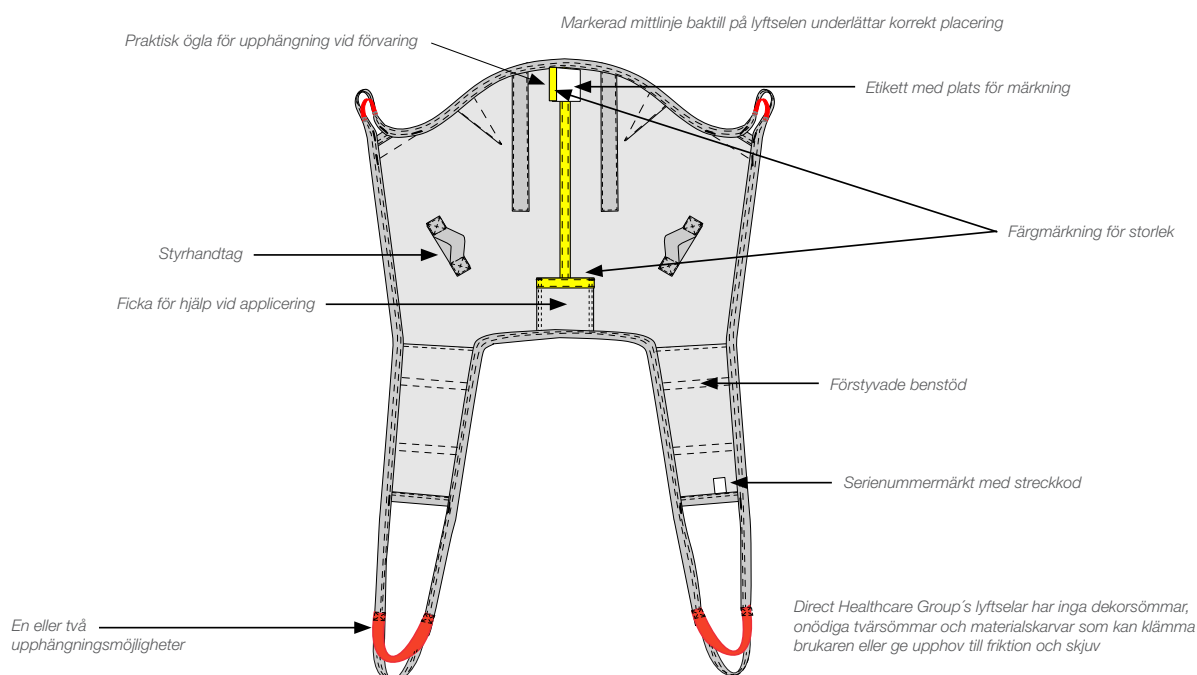

Våra lyftselar

SupportScale

Mer aktivering

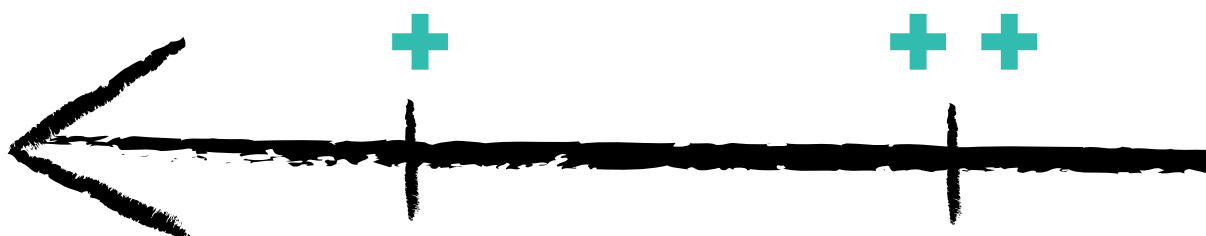

Det ska vara lätt att välja rätt!

Vi vet att det ibland kan verka komplicerat att välja rätt lyftsela. Och ju fler modeller, storlekar och material som finns att välja mellan, desto mer komplicerat verkar det förstås.

Direct Healthcare Group erbjuder ett heltäckande sortiment av lyftselar för alla förflyttningssituationer och brukare.

Samtidigt, för att underlätta valet, har vi begränsat antalet modeller att välja mellan.

Vi har också utvecklat ett verktyg, SupportScale, för att gradera våra lyftselar för sittande lyft i fyra nivåer baserat på vilken funktion de ger brukaren.

Mer aktivering

Ju lägre rygg lyftselen har, desto mer möjlighet till aktivering och medverkan ger den brukaren. Lyftselar med delade benstöd låter också brukaren medverka mer vid applicering och borttagning.

Mer stöd

Ju högre rygg lyftselen har, desto mer stöd ger den brukaren. Lyftselar med odelade benstöd ger också mer stöd och de tar mer hänsyn till brukarens funktionsnivå och status, till exempel mycket låg tonus, smärtkänslighet och andra faktorer som kan försvåra ett lyft.

ger mer




Aktivera brukaren även i lyftsituationer

Direct Healthcare Group både förutsätter och främjar ett samspel mellan brukare och medhjälpare. Det som är bra för den ene är också bra för den andre. Vår filosofi går ut på att brukaren alltid ska medverka efter förmåga i sin egen förflyttning. Det gäller att använda krafterna rätt; att skona medhjälparens kropp och samtidigt tillvarata och stärka de funktioner som brukaren har, även i en lyftsituation. Med utgångspunkt både i brukarens behov av stöd och i hans möjlighet till aktivitet och medverkan kan Direct Healthcare Group's SupportScale visa vilka lyftselsmodeller som ger brukaren mest säkerhet och trygghet utan att ta över där brukaren kan själv.

SupportScale	Delade benstöd	Odelade benstöd
Låg rygg	+	++
Axelhög rygg	++	+++
Hög rygg	+++	++++

Brukarens funktionsnivå och status avgör behovet av stöd och andra funktioner hos en lyftsela och därmed även valet av selmodell.

Graderingen från 1+ (mer aktivering) till 4++++ (mer stöd) visar vilken funktion olika lyftselar för sittande lyft ger brukaren

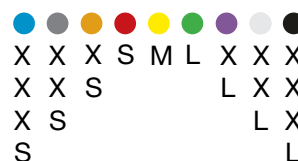

Väletablerat färgkodningssystem

Vi använder ett internationellt färgkodningssystem med olika färger för olika storlekar, för att underlätta valet av storlek.

Färgmarkeringen är fäst på lyftselen i form av ett färgat band som också fungerar som en ögla som kan användas för att hänga selen. På så sätt kan du enkelt hitta rätt storlek.

Lyftselar

Delade benstöd/hög rygg



HighBackSling

**Standardmodell för brukare som behöver mycket stöd**

HighBackSling är utformad för de vanligaste lyftsituationerna, till exempel sittande förflyttning mellan säng och rullstol, och när brukaren behöver extra stöd för huvudet. HighBackSling kan också användas för säkra och bekväma lyft från liggande ställning på golvet. Denna standardmodell passar de flesta brukare. Den höga ryggen ger brukaren stöd från svanskotan upp över huvudet och under benen. HighBackSling finns i flera olika material, utföranden och storlekar för brukare med en maxvikt på 300 kg.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
40800002	HighBackSling	Polyester, XX-Small	1 st.
40800003	HighBackSling	Polyester, X-Small	1 st.
40800004	HighBackSling	Polyester, Small	1 st.
40800006	HighBackSling	Polyester, Medium	1 st.
40800007	HighBackSling	Polyester, Large	1 st.
40800008	HighBackSling	Polyester, X-Large	1 st.
40800009	HighBackSling	Polyester, XX-Large	1 st.
40820002	HighBackSling	Polyesternät, XX-Small	1 st.
40820003	HighBackSling	Polyesternät, X-Small	1 st.
40820004	HighBackSling	Polyesternät, Small	1 st.
40820006	HighBackSling	Polyesternät, Medium	1 st.
40820007	HighBackSling	Polyesternät, Large	1 st.
40820008	HighBackSling	Polyesternät, X-Large	1 st.
40820009	HighBackSling	Polyesternät, XX-Large	1 st.
40822002	HighBackSling	Polyesternät, utan förstärkning, XX-Small	1 st.
40822003	HighBackSling	Polyesternät, utan förstärkning, X-Small	1 st.
40822004	HighBackSling	Polyesternät, utan förstärkning, Small	1 st.
40822006	HighBackSling	Polyesternät, utan förstärkning, Medium	1 st.
40822007	HighBackSling	Polyesternät, utan förstärkning, Large	1 st.
40822008	HighBackSling	Polyesternät, utan förstärkning, X-Large	1 st.
40822009	HighBackSling	Polyesternät, utan förstärkning, XX-Large	1 st.
40852002	HighBackSling	Plastat nät, XX-Small	1 st.
40852003	HighBackSling	Plastat nät, X-Small	1 st.
40852004	HighBackSling	Plastat nät, Small	1 st.
40852006	HighBackSling	Plastat nät, Medium	1 st.
40852007	HighBackSling	Plastat nät, Large	1 st.
40852008	HighBackSling	Plastat nät, X-Large	1 st.
40852009	HighBackSling	Plastat nät, XX-Large	1 st.
40890004	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven, Small	5 st
40890006	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven, Medium	5 st
40890007	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven, Large	5 st
40890008	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven, X-Large	5 st
40890009	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven, XX-Large	5 st





ShellHBSling

Unik skålförm med justerbart huvudstöd

ShellHBSling är utformad för de vanligaste lyftsituationerna, till exempel sittande förflyttning mellan säng och rullstol, och när brukaren behöver extra stöd för huvudet. ShellHBSling kan också användas för säkra och bekväma lyft från liggande ställning på golvet. Den skålförmade lyftselen följer kroppen och ger en upprätt sittställning som enkelt kan regleras med hjälp av alternativa lyftöglor. Det justerbara huvudstödet ger varje brukare perfekt stöd för huvudet. Den höga ryggen ger brukaren stöd från svanskotan upp över huvudet och under benen. ShellHBSling finns i flera storlekar, alla för brukare med en maxvikt på 300 kg.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
40700002	ShellHBSling	Polyester, XX-Small	1 st.
40700003	ShellHBSling	Polyester, X-Small	1 st.
40700004	ShellHBSling	Polyester, Small	1 st.
40700006	ShellHBSling	Polyester, Medium	1 st.
40700007	ShellHBSling	Polyester, Large	1 st.
40700008	ShellHBSling	Polyester, X-Large	1 st.
40700009	ShellHBSling	Polyester, XX-Large	1 st.



Lyftselar

Delade benstöd/hög rygg



FlexibleSling



Följsamt stöd för brukare med felställningar

FlexibleSling är en lyftsela för brukare som behöver mycket stöd, samtidigt som selen på ett flexibelt sätt följer kroppens konturer så att brukaren känner sig trygg. FlexibleSling är utformad för de vanligaste lyftsituationerna, till exempel sittande förflyttning mellan säng och rullstol, och särskilt för brukare som har felställningar eller behöver extra stöd för huvudet. FlexibleSling kan också användas för säkra och bekväma lyft från liggande ställning på golvet. Den höga ryggen ger brukaren stöd från svanskotan upp över huvudet och under benen. FlexibleSling finns i två utföranden och flera storlekar, alla för brukare med en maxvikt på 300 kg. FlexibleSling finns även med odelade benstöd samt med odelade benstöd och hygienöppning (sidan 81).

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
42520002	FlexibleSling	Polyesternät, XX-Small	1 st.
42520003	FlexibleSling	Polyesternät, X-Small	1 st.
42520004	FlexibleSling	Polyesternät, Small	1 st.
42520006	FlexibleSling	Polyesternät, Medium	1 st.
42520007	FlexibleSling	Polyesternät, Large	1 st.
42520008	FlexibleSling	Polyesternät, X-Large	1 st.
42522002	FlexibleSling	Polyesternät, utan förstärkning, XX-Small	1 st.
42522003	FlexibleSling	Polyesternät, utan förstärkning, X-Small	1 st.
42522004	FlexibleSling	Polyesternät, utan förstärkning, Small	1 st.
42522006	FlexibleSling	Polyesternät, utan förstärkning, Medium	1 st.
42522007	FlexibleSling	Polyesternät, utan förstärkning, Large	1 st.
42522008	FlexibleSling	Polyesternät, utan förstärkning, X-Large	1 st.



AmpHBSling



För brukare med höga benamputationer och stort stödbehov

AmpHBSling är utformad för de vanligaste lyftsituationerna, till exempel sittande förflyttning mellan säng och rullstol – även när en lyftsela utan delade benstöd skulle vara att föredra, till exempel vid lyft av brukare med dubbla, höga benamputationer. Den höga ryggen ger brukaren stöd från svanskotan upp över huvudet och under benen. AmpHBSling finns i flera storlekar, alla för brukare med en maxvikt på 300 kg.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
42800004	AmpHBSling	Polyester, Small	1 st.
42800006	AmpHBSling	Polyester, Medium	1 st.
42800007	AmpHBSling	Polyester, Large	1 st.
42800008	AmpHBSling	Polyester, X-Large	1 st.





HygieneHBSling

För toalettbesök och för brukare som behöver mycket stöd

HygieneHBSling är en lyftsela som är lätt att ta på och som underlättar för medhjälparen att klä av/på brukaren i samband med toalettbesök. HygieneHBSling är utformad för brukare som behöver mycket stöd, även för huvudet. Den höga ryggen ger brukaren stöd bakom ryggen, upp bakom huvudet, runt överkroppen och under benen. HygieneHBSling finns i flera storlekar, alla för brukare med en maxvikt på 300 kg.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
43704002	HygieneHBSling	Polyester, XX-Small	1 st.
43704003	HygieneHBSling	Polyester, X-Small	1 st.
43704004	HygieneHBSling	Polyester, Small	1 st.
43704006	HygieneHBSling	Polyester, Medium	1 st.
43704007	HygieneHBSling	Polyester, Large	1 st.
43704008	HygieneHBSling	Polyester, X-Large	1 st.
43704009	HygieneHBSling	Polyester, XX-Large	1 st.



Lyftselar

Delade benstöd/Axelhög rygg



BasicSling



Standardmodell för brukare med god huvudstabilitet

BasicSling är utformad för de vanligaste lyftsituationerna, till exempel sittande förflyttning mellan säng och rullstol, och när patienten har dålig bålstabilitet men god huvudstabilitet. Den här standardmodellen passar de flesta brukare med god huvudstabilitet. Den axelhöga ryggen ger brukaren stöd från svanskotan upp till axlarna och under benen. BasicSling finns i flera olika material, utföranden och storlekar, alla för brukare med en maxvikt på 300 kg.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
40500002	BasicSling	Polyester, XX-Small	1 st.
40500003	BasicSling	Polyester, X-Small	1 st.
40500004	BasicSling	Polyester, Small	1 st.
40500006	BasicSling	Polyester, Medium	1 st.
40500007	BasicSling	Polyester, Large	1 st.
40500008	BasicSling	Polyester, X-Large	1 st.
40500009	BasicSling	Polyester, XX-Large	1 st.
40520002	BasicSling	Polyesternät, XX-Small	1 st.
40520003	BasicSling	Polyesternät, X-Small	1 st.
40520004	BasicSling	Polyesternät, Small	1 st.
40520006	BasicSling	Polyesternät, Medium	1 st.
40520007	BasicSling	Polyesternät, Large	1 st.
40520008	BasicSling	Polyesternät, X-Large	1 st.
40520009	BasicSling	Polyesternät, XX-Large	1 st.
40522002	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning, XX-Small	1 st.
40522003	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning, X-Small	1 st.
40522004	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning, Small	1 st.
40522006	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning, Medium	1 st.
40522007	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning, Large	1 st.
40522008	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning, X-Large	1 st.
40522009	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning, XX-Large	1 st.





AmpSling



För brukare med höga benamputationer

AmpSling är utformad för de vanligaste lyftsituationerna, till exempel sittande förflyttning mellan säng och rullstol – även när en lyftsele utan delade benstöd skulle vara att föredra, till exempel vid lyft av brukare med dubbla, höga benamputationer. Den axelhöga ryggen ger brukaren stöd från svanskotan upp till axlarna och under benen. AmpSling finns i olika material och flera storlekar, alla för brukare med en maxvikt på 300 kg.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
42700003	AmpSling	Polyester, X-Small	1 st.
42700004	AmpSling	Polyester, Small	1 st.
42700006	AmpSling	Polyester, Medium	1 st.
42700007	AmpSling	Polyester, Large	1 st.
42700008	AmpSling	Polyester, X-Large	1 st.
42700009	AmpSling	Polyester, XX-Large	1 st.
42720003	AmpSling	Polyesternät, X-Small	1 st.
42720004	AmpSling	Polyesternät, Small	1 st.
42720006	AmpSling	Polyesternät, Medium	1 st.
42720007	AmpSling	Polyesternät, Large	1 st.
42720008	AmpSling	Polyesternät, X-Large	1 st.
42720009	AmpSling	Polyesternät, XX-Large	1 st.



Lyftselar

Delade benstöd/låg rygg



LowBackSling



Standardmodell för mer aktiva brukare

LowBackSling är utformad för de vanligaste lyftsituationerna, till exempel sittande förflyttning mellan säng och rullstol, och när brukaren har bålstabilitet. Den här standardmodellen passar de flesta brukare med bålstabilitet. Den låga ryggen ger brukaren stöd från svanskotan upp till armhålor och under benen. LowBackSling finns i flera material och storlekar, alla för brukare med en maxvikt på 300 kg.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
40200002	LowBackSling	Polyester, XX-Small	1 st.
40200003	LowBackSling	Polyester, X-Small	1 st.
40200004	LowBackSling	Polyester, Small	1 st.
40200006	LowBackSling	Polyester, Medium	1 st.
40200007	LowBackSling	Polyester, Large	1 st.
40200008	LowBackSling	Polyester, X-Large	1 st.
40200009	LowBackSling	Polyester, XX-Large	1 st.
40220002	LowBackSling	Polyesternät, XX-Small	1 st.
40220003	LowBackSling	Polyesternät, X-Small	1 st.
40220004	LowBackSling	Polyesternät, Small	1 st.
40220006	LowBackSling	Polyesternät, Medium	1 st.
40220007	LowBackSling	Polyesternät, Large	1 st.
40220008	LowBackSling	Polyesternät, X-Large	1 st.
40220009	LowBackSling	Polyesternät, XX-Large	1 st.





HygieneSling



För toalettbesök – tre utföranden för mer aktiva brukare

HygieneSling är en lyftsle som är lätt att ta på och gör det enklare för medhjälparen att klä av och på brukaren i samband med toalettbesök. HygieneSling är avsedd för brukare med tillräcklig muskeltonus. Den låga ryggen ger brukaren stöd bakom ryggen, upp till armhålorna och under benen. HygieneSling finns i två utföranden: med bälte och extra ryggstöd, samt i flera storlekar, alla för brukare med en maxvikt på 300 kg.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
43504002	HygieneSling	Polyester, med bälte, XX-Small	1 st.
43504003	HygieneSling	Polyester, med bälte, X-Small	1 st.
43504004	HygieneSling	Polyester, med bälte, Small	1 st.
43504006	HygieneSling	Polyester, med bälte, Medium	1 st.
43504007	HygieneSling	Polyester, med bälte, Large	1 st.
43504008	HygieneSling	Polyester, med bälte, X-Large	1 st.
43504009	HygieneSling	Polyester, med bälte, XX-Large	1 st.
43904003	HygieneSling	Polyester, extra ryggstöd, X-Small	1 st.
43904004	HygieneSling	Polyester, extra ryggstöd, Small	1 st.
43904006	HygieneSling	Polyester, extra ryggstöd, Medium	1 st.
43904007	HygieneSling	Polyester, extra ryggstöd, Large	1 st.
43904008	HygieneSling	Polyester, extra ryggstöd, X-Large	1 st.





HygieneLBSling

För toalettbesök – extra stöd för brukare med god huvud- och bålstabilitet

HygieneLBSling är en lyftsela som är lätt att ta på och som underlättar för medhjälparen att klä av/på brukaren i samband med toalettbesök. HygieneLBSling är avsedd för brukare med god huvud- och bålstabilitet och tillräcklig muskeltonus. Den låga ryggen ger brukaren stöd bakom ryggen, upp till armhålorna, runt överkroppen och under benen. HygieneLBSling finns i flera storlekar, alla för brukare med en maxvikt på 300 kg.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
43804002	HygieneLBSling	Polyester, XX-Small	1 st.
43804003	HygieneLBSling	Polyester, X-Small	1 st.
43804004	HygieneLBSling	Polyester, Small	1 st.
43804006	HygieneLBSling	Polyester, Medium	1 st.
43804007	HygieneLBSling	Polyester, Large	1 st.
43804008	HygieneLBSling	Polyester, X-Large	1 st.
43804009	HygieneLBSling	Polyester, XX-Large	1 st.





FlexibleSling, undivided med hygienöppning

FlexibleSling, undivided

++++

Skonsam och flexibel med maximalt stöd

FlexibleSling, undivided är en lyftsela för brukare som behöver mycket stöd, samtidigt som selen på ett flexibelt sätt följer kroppens konturer så att brukaren känner sig trygg. FlexibleSling, undivided är utformad för de vanligaste lyftsituationerna, till exempel sittande förflyttning mellan säng och rullstol, och särskilt för brukare som har felställningar eller behöver extra stöd för huvudet. Den höga ryggen ger brukaren stöd från svanskotan upp över huvudet och under benen. FlexibleSling, undivided finns även med hygienöppning. Denna variant är avsedd att underlätta lyft i samband med toalettbesök, särskilt för brukare som har felställningar och som behöver extra stöd för huvudet. Båda varianterna av FlexibleSling, undivided finns i flera storlekar, alla för brukare med en maxvikt på 300 kg. FlexibleSling finns även med delade benstöd (sidan 74).

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
42521003	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, X-Small	1 st.
42521004	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, Small	1 st.
42521006	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, Medium	1 st.
42521007	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, Large	1 st.
42521008	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, X-Large	1 st.
42521403	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, med hygienöppning, X-Small	1 st.
42521404	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, med hygienöppning, Small	1 st.
42521406	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, med hygienöppning, Medium	1 st.
42521407	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, med hygienöppning, Large	1 st.
42521408	FlexibleSling, undivided	Polyesternät, med hygienöppning, X-Large	1 st.



ClassicHBSling

++++

Skonsam för brukare som behöver mycket stöd

ClassicHBSling passar brukare som behöver extra stöd för huvudet och ger en säker och bekväm sittställning så att brukaren kan känna sig trygg. ClassicHBSling är utformad för de vanligaste lyftsituationerna, till exempel sittande förflyttning mellan säng och rullstol, och passar även för brukare med höga benamputationer. Den höga ryggen ger brukaren stöd hela vägen från knävecken upp över huvudet. ClassicHBSling finns i flera storlekar, alla för brukare med en maxvikt på 300 kg.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
41522003	ClassicHBSling	Polyesternät, X-Small	1 st.
41522004	ClassicHBSling	Polyesternät, Small	1 st.
41522006	ClassicHBSling	Polyesternät, Medium	1 st.
41522007	ClassicHBSling	Polyesternät, Large	1 st.
41522008	ClassicHBSling	Polyesternät, X-Large	1 st.



Lyftselar

Odelade benstöd/axelhög rygg



ClassicSling

+++

Skonsamt stöd för brukare med god huvudstabilitet

ClassicSling ger en säker och bekväm sittställning så att brukaren kan känna sig trygg. ClassicSling är utformad för de vanligaste lyftsituationerna, till exempel sittande förflyttning mellan säng och rullstol, och passar även för brukare med höga benamputationer. Den axelhöga ryggen ger brukaren stöd från svanskotan upp till axlarna och under benen. ClassicSling finns i flera storlekar, alla för brukare med en maxvikt på 300 kg.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
41222003	ClassicSling	Polyesternät, X-Small	1 st.
41222004	ClassicSling	Polyesternät, Small	1 st.
41222006	ClassicSling	Polyesternät, Medium	1 st.
41222007	ClassicSling	Polyesternät, Large	1 st.
41222008	ClassicSling	Polyesternät, X-Large	1 st.



BariSling

+++

För tunga och mycket tunga brukare – över 200 kg

BariSling är en lyftsele som är avsedd för att lyfta brukare som väger 200 kg eller mer. Den kan användas i kombination med både mobila och stationära personlyftar, med en fyrpunktsbygel eller med BariTurn. BariSling har sex upphängningspunkter, två på ryggen och fyra under benen, för att fördela trycket säkert och bekvämt. Den axelhöga ryggen ger brukaren stöd från knävecken upp till axlarna och under benen. BariSling finns i polyester och i två storlekar för brukare med en maxvikt på 570 kg.


Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
47001010	BariSling	Polyester, XXX-Large	1 st.
47001011	BariSling	Polyester, XXXX-Large	1 st.






StretcherSling

StretcherSling är en lyftsele som används i kombination med mobila personlyftar eller stationära lyftsystém och Direct Healthcare Groups StretcherBar, en specialdesignad lyftbygel för horisontella lyft och förflyttningar av brukare i liggande ställning. StretcherSling har tio upphängningspunkter, fem på vardera sida av brukaren, vilket ger ett jämnt fördelat stöd under hela kroppen. StretcherSling finns i polyester och i en storlek, alla för brukare med en maxvikt på 300 kg.

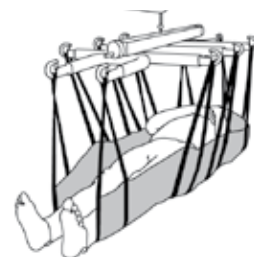

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
46502007	StretcherSling	Polyester, one size	1 st.

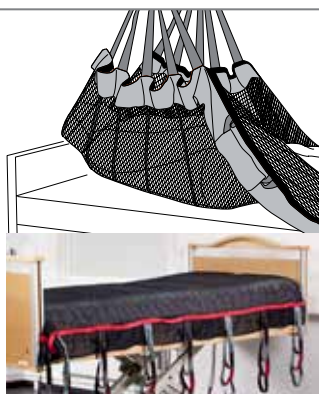

SafeHandlingSheet

SafeHandlingSheet är ett lakan som används för horisontella lyft eller positionering av brukare i sängen, utan att utsätta medhjälparen för onödig påfrestning. SafeHandlingSheet används i kombination med mobila personlyftar eller stationära lyftsystém och en tvåpunktsbygel. SafeHandlingSheet finns i polyesternät och passar olika brukare och situationer.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
47522007	SafeHandlingSheet	Polyesternät, Large, max 300 kg	1 st.
47542007	SafeHandlingSheet	Polyesternät/WendyLett 4Way, Large, max 300 kg	1 st.



PositioningSling

PositioningSling är ett lakan som används för horisontella lyft eller positionering av brukare i sängen utan att utsätta medhjälparen för onödig påfrestning. PositioningSling används i kombination med mobila personlyftar eller stationära lyftsystém och en tvåpunktsbygel.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
547810	PositioningSling	Polyester, engångs, max 454 kg	10 st.







ThoraxSling

ThoraxSling

ThoraxSling är en specialanpassad uppresningsväst som används i kombination med Direct Healthcare Groups uppresningslyftar MiniLift200, MiniLift160 och MiniLift125. Den är lätt för medhjälparen att ta på, samtidigt som den gör att brukaren kan känna sig trygg under uppresning och ståträning. ThoraxSling underlättar även toalettbesök. ThoraxSling finns i två modeller: en som ger stöd bakom ryggen (ThoraxSling) och en som även ger stöd under sätet (ThoraxSling med sättestöd) samt i olika material och storlekar. Båda modellerna av ThoraxSling finns i hållbar och lättskött polyester. ThoraxSling i polyester är avsedd för brukare med en maxvikt på 300 kg

ThoraxSling,
med sättestöd

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
45500003	ThoraxSling	Polyester, X-Small	1 st.
45500004	ThoraxSling	Polyester, Small	1 st.
45500006	ThoraxSling	Polyester, Medium	1 st.
45500007	ThoraxSling	Polyester, Large	1 st.
45500008	ThoraxSling	Polyester, X-Large	1 st.
45500009	ThoraxSling	Polyester, XX-Large	1 st.
45600004	ThoraxSling	Med sättestöd, polyester, Small	1 st.
45600006	ThoraxSling	Med sättestöd, polyester, Medium	1 st.
45600007	ThoraxSling	Med sättestöd, polyester, Large	1 st.
45600008	ThoraxSling	Med sättestöd, polyester, X-Large	1 st.



Lyftselar

Uppresning/stående/gående



StandingVest

StandingVest är en lyftväst som är särskilt utformad för lyft i samband med ståträning när brukaren använder ett ståskal. StandingVest ger stöd i grenen, runt överkroppen och hela vägen upp bakom huvudet. Västen hålls på plats av ett grenband. StandingVest finns i olika storlekar, alla för brukare med en maxvikt på 300 kg.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
44503003	StandingVest	Polyester, X-Small	1 st.
44503004	StandingVest	Polyester, Small	1 st.
44503006	StandingVest	Polyester, Medium	1 st.
44503007	StandingVest	Polyester, Large	1 st.
44503008	StandingVest	Polyester, X-Large	1 st.



WalkingVest

WalkingVest är en väst avsedd för uppresning och ståträning med hjälp av en mobil eller stationär personlyft. WalkingVest ger stöd i grenen och hålls på plats med polstrade grenband. WalkingVest finns i olika storlekar, alla för brukare med en maxvikt på 300 kg.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
44200002	WalkingVest	Polyester, XX-Small	1 st.
44200003	WalkingVest	Polyester, X-Small	1 st.
44200004	WalkingVest	Polyester, Small	1 st.
44200006	WalkingVest	Polyester, Medium	1 st.
44200007	WalkingVest	Polyester, Large	1 st.
44200008	WalkingVest	Polyester, X-Large	1 st.
44200009	WalkingVest	Polyester, XX-Large	1 st.





BariVest

För aktivering av mycket stora och tunga brukare

BariVest är en väst som är avsedd för uppresning och stå- och gåträning med brukare som väger 180 kg eller mer. Den kan användas i kombination med både mobila och stationära personlyftar, med en fyrpunktsbygel eller med BariTurn. BariVest består av ett bakstycke, ett framstycke och ett smalare parti på mitten för god passform i grenen. Den har två upphängningsöglor både framtill och baktill samt bälten i tre nivåer. BariVest finns i olika storlekar, alla för brukare med en maxvikt på 570 kg.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
47103010	BariVest	Polyester, XXX-Large	1 st.
47103011	BariVest	Polyester, XXXX-Large	1 st.



LimbSling

LimbSling är avsedd för att enkelt och bekvämt hjälpa till med att lyfta brukarens armar eller ben, till exempel för att komma åt bättre vid behandlingar eller omläggning av sår. LimbSling är mycket praktisk för stora och tunga brukare. Ta på LimbSling genom att placera den under den kroppsdel som ska lyftas och fästa bandens öglor i lyftbygeln. LimbSling finns i en storlek.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
49200006	LimbSling	Polyester, max 300 kg	1 st.



Storleksguide för lyftselar.

Delade benstöd/hög ryg



Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens bygghöjd
40800002	HighBackSling	Polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40800003	HighBackSling	Polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40800004	HighBackSling	Polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40800006	HighBackSling	Polyester	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40800007	HighBackSling	Polyester	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40800008	HighBackSling	Polyester	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40800009	HighBackSling	Polyester	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40820002	HighBackSling	Polyesternät	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40820003	HighBackSling	Polyesternät	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40820004	HighBackSling	Polyesternät	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40820006	HighBackSling	Polyesternät	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40820007	HighBackSling	Polyesternät	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40820008	HighBackSling	Polyesternät	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40820009	HighBackSling	Polyesternät	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40822002	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40822003	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40822004	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40822006	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40822007	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40822008	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40822009	HighBackSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40852002	HighBackSling	Plastat nät	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40852003	HighBackSling	Plastat nät	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40852004	HighBackSling	Plastat nät	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40852006	HighBackSling	Plastat nät	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40852007	HighBackSling	Plastat nät	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40852008	HighBackSling	Plastat nät	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40852009	HighBackSling	Plastat nät	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40892004	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven	200 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40892006	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven	200 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40892007	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven	200 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40892008	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven	200 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40892009	HighBackSling	Engångsmaterial, non-woven	300 kg	XXL	150-250 kg	70 cm	102 cm
40700002	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	17 cm	80 cm
40700003	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40700004	ShellHBSling	Polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	94 cm
40700006	ShellHBSling	Polyester	300 kg	M	50-90 kg	40 cm	97 cm
40700007	ShellHBSling	Polyester	300 kg	L	80-120 kg	45 cm	98 cm
40700008	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XL	110-160 kg	55 cm	100 cm
40700009	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XXL	150-210 kg	65 cm	100 cm
42520002	FlexibleSling	Polyesternät	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42520003	FlexibleSling	Polyesternät	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42520004	FlexibleSling	Polyesternät	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42520006	FlexibleSling	Polyesternät	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42520007	FlexibleSling	Polyesternät	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42520008	FlexibleSling	Polyesternät	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42522002	FlexibleSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42522003	FlexibleSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42522004	FlexibleSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42522006	FlexibleSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42522007	FlexibleSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42522008	FlexibleSling	Polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42800004	AmpHBSling	Polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42800006	AmpHBSling	Polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42800007	AmpHBSling	Polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42800008	AmpHBSling	Polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm



Delade benstöd/axelhög rygg



Art. nr	Produktnamn	Material/Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens totalhöjd
40500002	BasicSling	Polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40500003	BasicSling	Polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40500004	BasicSling	Polyester	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40500006	BasicSling	Polyester	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40500007	BasicSling	Polyester	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40500008	BasicSling	Polyester	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40500009	BasicSling	Polyester	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40520002	BasicSling	Polyesternät	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40520003	BasicSling	Polyesternät	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40520004	BasicSling	Polyesternät	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40520006	BasicSling	Polyesternät	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40520007	BasicSling	Polyesternät	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40520008	BasicSling	Polyesternät	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40520009	BasicSling	Polyesternät	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40522002	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40522003	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40522004	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40522006	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40522007	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40522008	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40522009	BasicSling	Polyesternät, utan förstärkning	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
42700003	AmpSling	Polyester	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42700004	AmpSling	Polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42700006	AmpSling	Polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42700007	AmpSling	Polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42700008	AmpSling	Polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42700009	AmpSling	Polyester	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm
42720003	AmpSling	Polyesternät	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42720004	AmpSling	Polyesternät	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42720006	AmpSling	Polyesternät	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42720007	AmpSling	Polyesternät	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42720008	AmpSling	Polyesternät	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42720009	AmpSling	Polyesternät	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm

Delade benstöd/låg rygg






Art. nr	Produktnamn	Material	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens totalhöjd
40200002	LowBackSling	Polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40200003	LowBackSling	Polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40200004	LowBackSling	Polyester	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40200006	LowBackSling	Polyester	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40200007	LowBackSling	Polyester	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40200008	LowBackSling	Polyester	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40200009	LowBackSling	Polyester	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40220002	LowBackSling	Polyesternät	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40220003	LowBackSling	Polyesternät	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40220004	LowBackSling	Polyesternät	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40220006	LowBackSling	Polyesternät	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40220007	LowBackSling	Polyesternät	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40220008	LowBackSling	Polyesternät	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40220009	LowBackSling	Polyesternät	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm

**OBS!**

En utprovning måste alltid göras för att fastställa vilken modell, storlek och material som är lämpligast för en enskild brukare. Storleksguidens mått och rekommendationer är endast ett stöd för att underlätta valet.

Lyftselens stussmått ger en indikation om hur bred brukaren kan vara från höft till höft (trochantermått). Brukarens trochantermått ska vara inom +/- 10 cm från lyftselens stussmått. Lyftvästens bredd ger en indikation om vilken omkrets brukarens bäl ska ha. Brukarens bäl ska ha en omkrets inom +/- 10 cm från lyftvästens bredd.

Lyftselen är för stor om brukarens stuss glider ut för mycket i den nedre öppningen eller om benstöden glider fram mot brukarens knäveck. Lyftselen är för liten om brukarens ansikte är för nära lyftbygeln, om benstöden skär in i grenen eller om lyftselen ser trång ut eller upplevs trång.

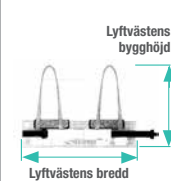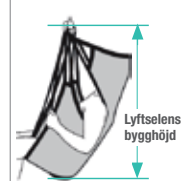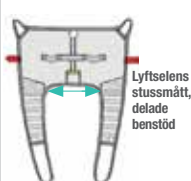

Odelade benstöd/hög och axelhög rygg



Art. nr	Produktnamn	Material	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens totalhöjd
42521003	FlexibleSling, odelad	Polyesternät	300 kg	XS	20–40 kg	75 cm	80 cm
42521004	FlexibleSling, odelad	Polyesternät	300 kg	S	30–70 kg	85 cm	85 cm
42521006	FlexibleSling, odelad	Polyesternät	300 kg	M	60–90 kg	94 cm	93 cm
42521007	FlexibleSling, odelad	Polyesternät	300 kg	L	80–130 kg	105 cm	96 cm
42521008	FlexibleSling, odelad	Polyesternät	300 kg	XL	110–180 kg	98 cm	
41522003	ClassicHBSling	Polyesternät	300 kg	XS	20–40 kg	30 cm	95 cm
41522004	ClassicHBSling	Polyesternät	300 kg	S	30–60 kg	40 cm	98 cm
41522006	ClassicHBSling	Polyesternät	300 kg	M	55–85 kg	48 cm	106 cm
41522007	ClassicHBSling	Polyesternät	300 kg	L	80–120 kg	65 cm	110 cm
41522008	ClassicHBSling	Polyesternät	300 kg	XL	110–140 kg	80 cm	115 cm
41222003	ClassicSling	Polyesternät	300 kg	XS	20–40 kg	30 cm	80 cm
41222004	ClassicSling	Polyesternät	300 kg	S	30–60 kg	38 cm	90 cm
41222006	ClassicSling	Polyesternät	300 kg	M	55–85 kg	46 cm	95 cm
41222007	ClassicSling	Polyesternät	300 kg	L	80–120 kg	63 cm	98 cm
41222008	ClassicSling	Polyesternät	300 kg	XL	110–140 kg	80 cm	100 cm
47001010	BariSling	Polyester	570 kg	XXXL	200–350 kg	-	-
47001011	BariSling	Polyester	570 kg	XXXXL	250–570 kg	-	-

Till och från toaletten/hög och axelhög rygg



Art. nr	Produktnamn	Material	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens totalhöjd
43704002	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XXS	10–30 kg	25 cm	92 cm
43704003	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XS	25–45 kg	28 cm	92 cm
43704004	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	S	40–60 kg	30 cm	96 cm
43704006	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	M	55–80 kg	35 cm	102 cm
43704007	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	L	75–110 kg	41 cm	102 cm
43704008	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XL	90–130 kg	46 cm	104 cm
43704009	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XXL	120–170 kg	60 cm	104 cm
42521403	FlexibleSling, odelad*	Polyesternät	300 kg	XS	20–40 kg	75 cm	80 cm
42521404	FlexibleSling, odelad*	Polyesternät	300 kg	S	30–70 kg	85 cm	85 cm
42521406	FlexibleSling, odelad*	Polyesternät	300 kg	M	60–90 kg	94 cm	93 cm
42521407	FlexibleSling, odelad*	Polyesternät	300 kg	L	80–130 kg	105 cm	96 cm
42521408	FlexibleSling, odelad*	Polyesternät	300 kg	XL	110–180 kg	115 cm	98 cm

*) med hygienöppning

Till och från toaletten/låg rygg




Art. nr	Produktnamn	Material/Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens totalhöjd
43504002	HygieneSling	Polyester, med bälte	300 kg	XXS	10–30 kg	25 cm	50 cm
43504003	HygieneSling	Polyester, med bälte	300 kg	XS	25–45 kg	35 cm	65 cm
43504004	HygieneSling	Polyester, med bälte	300 kg	S	40–60 kg	48 cm	75 cm
43504006	HygieneSling	Polyester, med bälte	300 kg	M	55–85 kg	55 cm	87 cm
43504007	HygieneSling	Polyester, med bälte	300 kg	L	75–100 kg	60 cm	93 cm
43504008	HygieneSling	Polyester, med bälte	300 kg	XL	90–130 kg	80 cm	95 cm
43504009	HygieneSling	Polyester, med bälte	300 kg	XXL	120–170 kg	90 cm	95 cm
43904003	HygieneSling	Polyester, extra ryggstöd	300 kg	XS	25–45 kg	35 cm	65 cm
43904004	HygieneSling	Polyester, extra ryggstöd	300 kg	S	40–60 kg	48 cm	75 cm
43904006	HygieneSling	Polyester, extra ryggstöd	300 kg	M	55–85 kg	55 cm	87 cm
43904007	HygieneSling	Polyester, extra ryggstöd	300 kg	L	75–100 kg	60 cm	93 cm
43904008	HygieneSling	Polyester, extra ryggstöd	300 kg	XL	90–130 kg	80 cm	95 cm
43804002	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	XXS	10–30 kg	25 cm	92 cm
43804003	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	XS	25–45 kg	28 cm	92 cm
43804004	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	S	40–60 kg	30 cm	96 cm
43804006	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	M	55–80 kg	35 cm	102 cm
43804007	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	L	75–110 kg	41 cm	102 cm
43804008	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	XL	90–130 kg	46 cm	104 cm
43804009	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	XXL	120–170 kg	60 cm	104 cm

Horisontella lyft/vändningar



Art. nr	Produktnamn	Material/Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Längd	Bredd
46502007	StretcherSling	Polyester	300 kg	one size	50–200 kg	180 cm	86 cm
46592007	StretcherSling	Engångs, non-woven	300 kg	one size	50–200 kg	180 cm	86 cm
47522007	SafeHandlingSheet	Polyesternät	300 kg	L	50–300 kg	240 cm	115 cm
47542007	SafeHandlingSheet	Polyesternät/WL4W	300 kg	L	50–300 kg	240 cm	115 cm
47502008	SafeHandlingSheet	Polyester	400 kg	XL	50–400 kg	240 cm	115 cm
47502009	SafeHandlingSheet	Polyester, med förstärkning	570 kg	XXL	50–570 kg	240 cm	130 cm
547810	PositioningSling	Engångs, non-woven, polyester	454 kg	one size	50–400 kg	198 cm	132 cm

Uppresning/stående med MiniLift

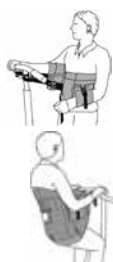

Art. nr	Produktnamn	Material/Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftvästens bredd
45500003	ThoraxSling	Polyester	300 kg	XS	20–50 kg	85 cm
45500004	ThoraxSling	Polyester	300 kg	S	30–60 kg	94 cm
45500006	ThoraxSling	Polyester	300 kg	M	50–80 kg	104 cm
45500007	ThoraxSling	Polyester	300 kg	L	70–110 kg	124 cm
45500008	ThoraxSling	Polyester	300 kg	XL	100–150 kg	146 cm
45500009	ThoraxSling	Polyester	300 kg	XXL	140–200 kg	170 cm
45600004	ThoraxSling	Polyester, med sätesstöd	300 kg	S	30–60 kg	94 cm
45600006	ThoraxSling	Polyester, med sätesstöd	300 kg	M	50–80 kg	104 cm
45600007	ThoraxSling	Polyester, med sätesstöd	300 kg	L	70–110 kg	124 cm
45600008	ThoraxSling	Polyester, med sätesstöd	300 kg	XL	100–150 kg	146 cm


Stående/gående



Art No.	Produktnamn	Material	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftvästens bredd	Lyftvästens totalhöjd
44503003	StandingVest	Polyester	300 kg	XS	15–40 kg	82 cm	68 cm
44503004	StandingVest	Polyester	300 kg	S	20–50 kg	96 cm	73 cm
44503006	StandingVest	Polyester	300 kg	M	40–60 kg	110 cm	73 cm
44503007	StandingVest	Polyester	300 kg	L	50–80 kg	122 cm	73 cm
44503008	StandingVest	Polyester	300 kg	XL	70–100 kg	130 cm	73 cm



44200002	WalkingVest	Polyester	300 kg	XXS	15–40 kg	60 cm	67 cm
44200003	WalkingVest	Polyester	300 kg	XS	25–50 kg	70 cm	68 cm
44200004	WalkingVest	Polyester	300 kg	S	40–60 kg	82 cm	68 cm
44200006	WalkingVest	Polyester	300 kg	M	55–80 kg	96 cm	73 cm
44200007	WalkingVest	Polyester	300 kg	L	75–100 kg	110 cm	73 cm
44200008	WalkingVest	Polyester	300 kg	XL	90–110 kg	122 cm	73 cm
44200009	WalkingVest	Polyester	300 kg	XXL	100–130 kg	142 cm	75 cm

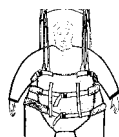

47103010	BariVest	Polyester	570 kg	XXXL	180–300 kg	190–280 cm	-
47103011	BariVest	Polyester	570 kg	XXXXL	250–570 kg	230–310 cm	-

Lyftselar

Tillbehör



AdjustmentLoop

AdjustmentLoop är ett förlängningsband som främst används för att förlänga lyftsels lyftband till önskad längd, exempelvis för att möjliggöra en liggande ställning eller en mer upprätt sittställning, alternativt för att uppnå bättre balans, till exempel för brukare med halvsidesförlamning. AdjustmentLoop finns i två längder, båda för brukare med en maxvikt på 300 kg.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
49182006	AdjustmentLoop	18 cm, ger en förlängning på cirka 12 cm	1 par
49182007	AdjustmentLoop	28 cm, ger en förlängning på cirka 22 cm	1 par



HeadSupport

HeadSupport är ett tillbehör till lyftselar utan huvudstöd. HeadSupport placeras runt brukarens huvud och fästs sedan i lyftbygels krokar för att ge extra stöd för huvudet. HeadSupport har tre alternativa öglor på varje sida för att det ska gå att välja lämplig längd. Vi rekommenderar att man gör en analys av olika modeller av lyftselar för att bedöma om det finns behov av en sele med stöd för huvudet. Maxvikt: 300 kg.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
49302000	HeadSupport	Polyester, one size	1 st.



SoftLegSupport

Tryckkänsliga brukare kan ibland behöva extra mjuka benstöd. SoftLegSupports är polstrade överdrag som kan träs på bendelarna på lyftselar med delade benstöd. SoftLegSupports säljs i par och är lätta för medhjälparen att ta på.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
49373003	SoftLegSupport	X-Small	1 par
49373006	SoftLegSupport	Small/Medium	1 par
49373007	SoftLegSupport	Large/X-Large	1 par





StrapsPadding

StrapsPadding är polstrade bandöverdrag som kan användas som extra polstring på lyftbanden till lyftselen för att minska trycket på brukare som upplever obehag. StrapsPadding kan placeras på många olika sätt för att öka komforten, till exempel för brukare med en starkt lutande sittställning och/eller okontrollerade rörelser. Överdragen fästs med kardborrband och är mycket lätta att ta på, flytta eller ta av för rengöring. StrapsPadding kan användas som tillbehör till alla lyftselar med delade benstöd.



Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
49373300	StrapsPadding	Polstrade överdrag till lyftband	2 st.



NameTag

NameTag är en märklapp som enkelt kan fästas på, tas bort från och flyttas mellan produkter. Märklappen sitter säkert och tål tvätt upp till 90 °C.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
49700001	NameTag	Märklapp i textil med vävd text	10 st.



LoopTag

LoopTag är ett tillbehör till lyftselar som används för att enkelt och tillfälligt märka de lyftöglor som ska användas för en specifik brukare. LoopTag finns bara i orange och säljs i paket om fyra stycken.

Art. nr	Produktnamn	Beskrivning	Antal
49982000	LoopTag	Tillbehör till lyftselar	4 st.

Säkerhetsinformation om förflyttnings- och hjälpmedel.



Visuell inspektion

Kontrollera att material och sömmar är hela och fria från skador. Kontrollera om materialen är nötta och slitna eller blekta.



Mekanisk belastning

Belasta spännen och handtag och kontrollera att de håller för kraftig belastning.



Stabilitetstest

Böj försiktigt i skivan och kontrollera att den både har spänst och känns fast.



Friktionstest

Låg friktion - Kontrollera att ytan är glatt och glider lätt.

Jämför med ny produkt!

Hög friktion - Kontrollera att ytan är sträv och bromsar effektivt.

Jämför med ny produkt!


Funktionstesta dina förflyttningshjälpmedel regelbundet!

Även förflyttningshjälpmedel åldras. Gör regelbundna funktions- och säkerhetstester! När ett hjälpmedel inte uppfyller ställda krav skall det omedelbart tas ur bruk.

Hjälpmedel med handtag och band




Kontrollera säkerheten!

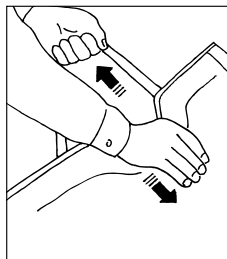

Hjälpmedel med låsspännen




Kontrollera säkerheten!

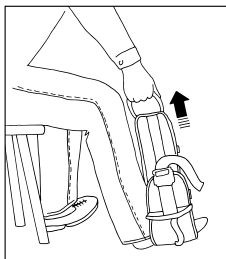

Hjälpmedel med förstövning




Kontrollera säkerheten!

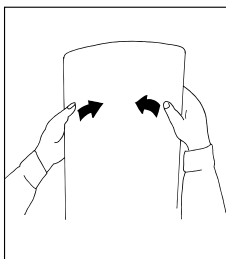

Hjälpmedel med låg eller hög friktion




Kontrollera säkerheten!

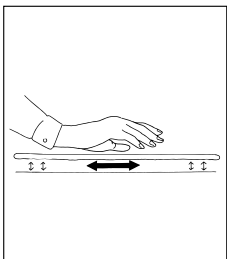

Hjälpmedel med lyftöglor



Kontrollera säkerheten!

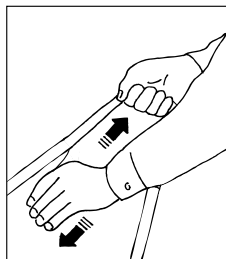

Mer information

Besök gärna vår hemsida för att ladda hem all dokumentation och för att läsa mer om hur våra produkter fungerar och ska underhållas. På vår hemsida finns också filmer och instruktioner som visar hur du använder produkterna. Glöm inte att läsa bruksanvisningen!

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

www.directhealthcaregroup.com

Vi hjälper er att förbättra arbetsmiljön.

CHECK

Check är Direct Healthcare Groups verktyg för systematisk förbättring av arbetsmiljön genom kartläggning, utvärdering och kvalitetssäkring av arbetsmetoder, utbildning och hjälpmedel för förflyttning av brukare. Det är också en del av Direct Healthcare Groups unika helhetskoncept för enkla förflyttningar.

Kartlägg och utvärdera era förflyttningar och identifiera risksituationerna

Check hjälper er att göra en grundlig genomgång och utvärdering av verksamheten med avseende på förflyttningar. Syftet med detta är att kvalitetssäkra arbetsmetoderna liksom den relevanta utbildning och de förflyttningshjälpmedel som finns tillgängliga för att förbättra arbetsmiljön och främja god ergonomi och omvårdnad. Det är också en möjlighet för arbetsplatsen att minska kostnaderna för både belastningsskador och trycksår.

Check ger information om hur förflyttningar görs idag, vilka hjälpmedel som används, vilken utbildning personalen har inom området och hur belastande personalen upplever förflyttningarna. Med utgångspunkt i resultatet av er egen kartläggning och utvärdering kan ni själva identifiera de risksituationer som förekommer, göra en riskbedömning och upprätta en handlingsplan med olika förbättringsåtgärder.

Riskbedömningen kan med fördel göras i samarbete med fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, förflyttningsinstruktör eller personal från företagshälsovården. Glöm inte att utvärdera effekten av era insatser genom att göra en ny Check efter lämplig tidsperiod. Uppföljning bör sedan göras regelbundet. Gör det till en god vana att alltid göra en Check när rutiner ändras, om det inträffar ett tillbud eller om någon signalerar att det förekommer riskfyllda förflyttningar av brukare.

Arbetsgivarens ansvar

Arbetsmiljölagen är tydlig när det gäller arbetsgivarens ansvar. Men samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare är ett måste för en fungerande arbetsmiljöverksamhet. Check är ett stöd för er systematiska arbetsmiljöverksamhet. Med Check blir det också lättare för er att uppfylla Arbetsmiljöverkets krav på dokumentation av riskbedömning och handlingsplan.



Checka av arbetsplatsen

Check är ett verktyg för kartläggning, utvärdering och översyn av situationen på er arbetsplats. Syftet med Check är att förbättra arbetsmiljön när det gäller förflyttning av brukare.

Mer information

Kontakta er lokala Direct Healthcare Group-partner. Vi kan även hjälpa er med att göra en Check på hela eller delar av er arbetsplats, analysera resultaten och ta fram ett utrustningsförslag för just er arbetsplats. Alla kontaktuppgifter finns på vår webbplats www.directhealthcaregroup.com.

Beställ här!

Telefon: 08-557 62 200

Fax: 08-557 62 299

E-mail:
info.se@directhealthcaregroup.com

E-mail order:
order.se@directhealthcaregroup.com

SystemRoMedic™

Över 30 år i enkelhetens tjänst

SystemRoMedic är Direct Healthcare Groups unika koncept för enkla förflyttningar som utgör marknadens bredaste och mest kompletta sortiment av smarta, användarvänliga och säkra hjälpmedel för alla typer av patientförflyttningar och behov av manuell hantering. Filosofin bakom vårt koncept går ut på att förebygga och minska arbetsskador samtidigt som brukarna får ökad självständighet och värdighet. Genom en unik kombination av utbildning och ett komplett sortiment av effektiva förflyttningshjälpmedel erbjuder vi förbättringar av både arbetsmiljön och vårdkvaliteten och skapar samtidigt möjligheter till betydande kostnadsbesparingar. I mer än 30 år har vi utvecklat SystemRoMedic för att erbjuda enkla lösningar för strålande resultat och en enklare vardag för både brukare och vårdpersonal.

Direct Healthcare Group erbjuder lösningar och stöd för att öka oberoendet hos funktionshindrade och äldre samt för att underlätta arbetet för deras medhjälpare.

Direct Healthcare Group-koncernen är ett av Europas ledande hjälpmedelsföretag med egna tillverknings- och säljföretag i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland, Nederländerna, Storbritannien, Frankrike, Kina, Kanada och USA. Direct Healthcare Groups produkter distribueras också av partner och återförsäljare i mer än 40 länder över hela världen. Vårt breda sortiment av kvalitetsprodukter omfattar ett komplett system av hjälpmedel för enkla förflyttningar och badrumsprodukter.

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Torshamnsgatan 35
164 40 Kista, Sweden
Tel: +46 (0)8 557 62 200
Fax: +46 (0)8 557 62 299
www.directhealthcaregroup.com
info.se@directhealthcaregroup.com