

Raizer® II

Chaise de levage

80
ascenseurs
par charge

Raizer II est un simple fauteuil élévateur mobile à piles qui aide une personne tombée à se relever presque debout en seulement 30 secondes. Raizer peut être facilement assemblé et utilisé uniquement par une seule personne et ne nécessite aucun effort physique en dehors d'une main de soutien. La conception du Raizer le rend facile à assembler et à utiliser, et assure un nettoyage facile.

Principales caractéristiques




Pratique et ergonomique à transporter

- Transport efficace
- Toutes les pièces sont fournies dans deux sacs pratiques
- Les pieds, le dossier et les autres pièces sont positionnés intuitivement dans un sac facile à transporter car leur position dans le sac reflète la séquence d'assemblage
- L'ensemble est transporté séparément dans une housse de protection avec une poignée souple, conçue de manière ergonomique pour s'assurer qu'il est porté près du corps
- Les deux sacs peuvent également être transportés sur un chariot (accessoire en option) avec suffisamment d'espace pour placer les sacs côte à côte

DHG
Moving Health Forward

Raizer® II

Chaise de levage

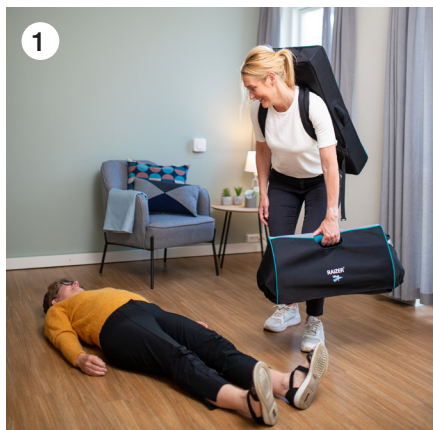

Spécifications techniques

Maquette	Raizer II
Capacité de levage	Max. 150kg
Temps de levage	20-30 secondes
Poids	Siège: 8.5kg Soutien des jambes et du dos: 4.5kg Totale: 13kg
Nombre de levées à pleine charge	40 at max. charger Approx. 80 with an average load
Temps de charge	Jusqu'à 6 heures
Chargement d'une batterie vide	10-15 min = 1 lift
Chargeurs	Chargeur USB et chargeur 15W pour prise de courant standard