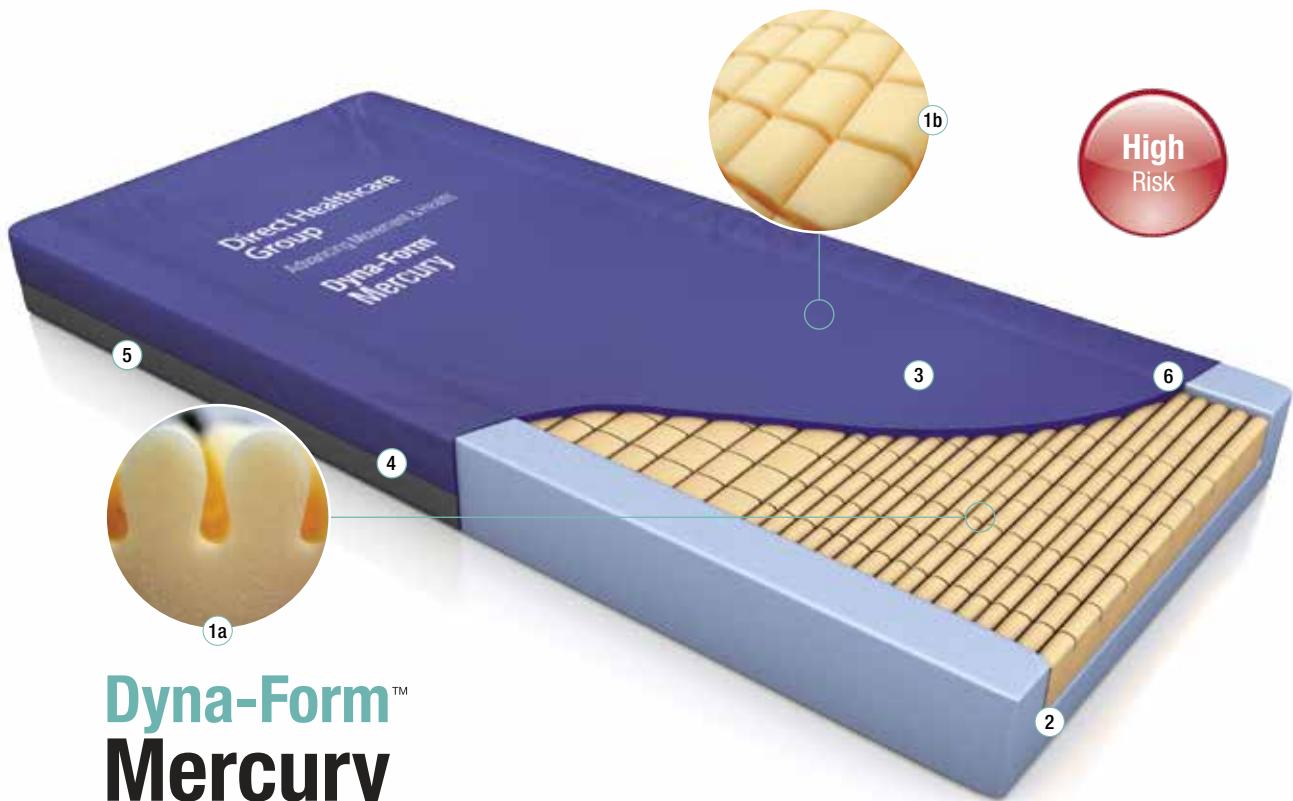




Dyna-FormTM Mercury

Dyna-Form[®] Mercury -madrassen är särskilt utformad för att förebygga och reducera trycksår. Den här produkten består av en specialtillverkad, profilerad skumblandning av högkvalitativt CME-skum (Combustion Modified Ether) och tillhandahåller inte bara de bästa egenskaperna för tryckfördelning utan även god komfort och lång produktlivslängd. Konstruktionen med sidoväggar möjliggör stabilitet vid förflyttning av patienten. Mercury-madrassen levereras komplett med ett tvådelat överdrag. Madrassöverdraget består av en tålig, multielastiskt och ånggenomtränglig överdel samt en härdad undersida av polyuretan. Överdragets material bidrar till en hög hygienisk standard för användning i moderna sjukhus-, omvårdnads- och hemvårdsmiljöer. Även tillgänglig med Pro-FormanceTM resistent överdrag.

Egenskaper

Fördelar

- | | | |
|-------|--|---|
| 1a 1b | Profilerat skum (med avrinningskanal) | Smalare profilerat skum för hälar och bredare profilerat skum sakralt |
| 2 | Bas och sidväggar av högkvalitativt CME-skum | Förhindrar att patienten når botten och underlättar patientförflyttning |
| 3 | Stretchigt, ångpermeabelt tyg (impregnerat med svampdödande medel) | Minskar skjuv- och friktionskrafter, samtidigt som det är infektionsförebyggande |
| 4 | Högfrekvenssvetsat överdrag | Förhindrar att vätska tränger in och hjälper dekontamineringsprocesser (kan tvättas i upp till 95 °C) |
| 5 | Härdad PU / halkfri bas | Ger en robust skyddande yta mot hydrolys / genomslag |
| 6 | Helt utbytbara delar | Leder till kostnadsbesparingar |

Tekniska specifikationer

Produktkod	MAT01
Risikategori	Hög Risk/kategori 2*
Viktgräns	254 kg
Garanti	8 år skum / 4 år överdrag
Dimensioner	MAT01006866 (200 cm x 80 cm x 15 cm) MAT01001782 (200 cm x 85 cm x 15 cm) MAT01002716 (200 cm x 90 cm x 15 cm) Olika storlekar finns tillgängliga på begäran
Skumdensitet	Blå 38–40 kg/m ³ Nominell hårdhet – 200 Newton Rosa 38–40 kg/m ³ Nominell hårdhet – 120 Newton
Fatigue klass	Väldigt hög
Flamsäkerhet	BS7177; 2008 (Crib 5 sammansättning)
Vikt	11 kg
Färg	Blå
Kompatibel med hypokloritlösning	1 000 ppm utspädd eller 0,1 % (eller för att användas tillsammans med gällande riktlinjer för vårdhygien)

*Se bifogad klinisk dokumentation