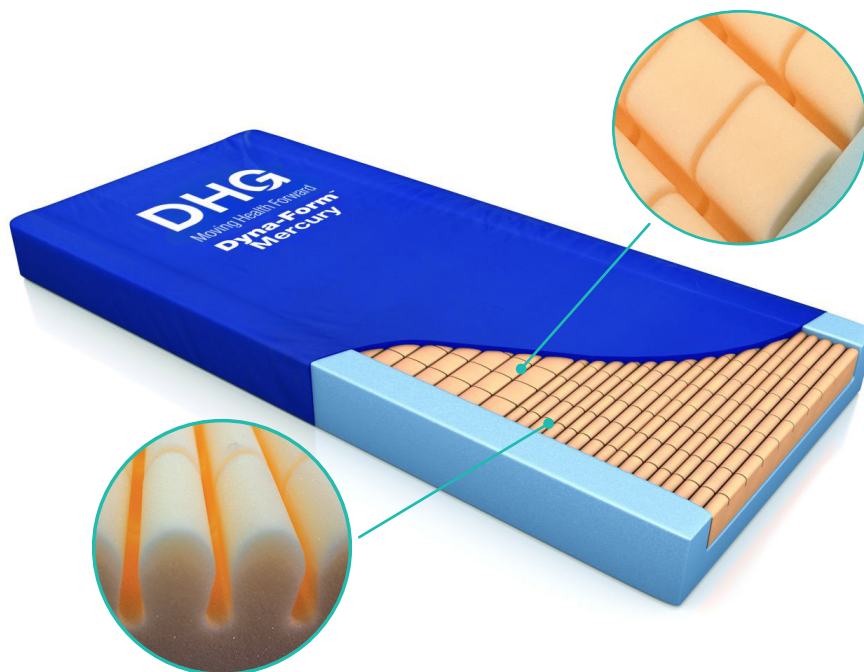




Dyna-Form™ Mercury Safety 7

Dyna-Form® Mercury Safety 7 är en tryckfördelande profilerad skummadrass med hög brandstandard, för personer med hög risk att utveckla trycksår, kategori 1 och 2.

Den är helt förseglad och konstruerad för att tåla både planerade och oväntade påfrestningar, vilket gör den särskilt lämplig för miljöer med utmanande beteenden – till exempel inom psykiatrisk vård, stödboenden och säkra enheter.

Överdraget är fastsytt (ej avtagbart), utan dragkedjor eller hårda kanter, vilket minskar risken för självskada eller skador på vårdpersonal. Dessutom uppfyller hela madrassen höga brandkrav, vilket gör den säker i miljöer där det finns ökad brandrisk.

Egenskaper	Fördelar	Tekniska Specifikationer
Profilerat skum Smalare profilerat skum för hälar. Bredare profilerat skum sakralt.	Flexibla profiler följer kroppens form, fördelar trycket jämnt och minskar tryck och friktion	Riskkategori Hög risk. Sårkategori 1 och 2
Stabil sarg av högkvalitativt CME-skum	Ger stöd för patienten och underlättar patientförflyttning vid evakuering	Max brukarvikt 254 kg
Ej avtagbart, helt förseglat överdrag testat för Crib 7 brandstandard	Minimerar risker för patienter och personal i utmanande vårdmiljöer	Garanti 8 år skum / 4 år överdrag
Tvättbart högfrekvenssvetsat överdrag utan dragkedjor eller vassa kanter	Utformat för enkel vård och säkerhet samtidigt som det förhindrar vätskeinträngning och underlättar dekontaminering	Produktkod/storlekar MAT07008321, 200 cm x 80 cm x 15 cm MAT07000619, 200 cm x 85 cm x 15 cm MAT07001808, 200 cm x 90 cm x 15 cm Andra storlekar finns tillgängliga på begäran.
Helt utbytbara delar	Leder till kostnadsbesparingar	Skumdensitet/Nominell hårdhet Blå 38-40 kg/m3, Nominell hårdhet 200 N Rosa 38-40 kg/m3, Nominell hårdhet 120 N
		Brand BS 7177 (Crib 7)
		Vikt 11 kg
		Färg överdrag Blå
		Rengöring Tvätta i högst 80°C, Torktumla på låg temperatur Vid behov rekommenderas en 1 000 ppm (0,1 %) natriumhypokloritlösning

Dyna-Form-Mercury Safety 7-produktblad-SE-01-202504