

DYNA-FORM MERCURY ADVANCE

Dyna-Form® Mercury Advance er en trykafastende madras, der er velegnet til brugere, der er i meget høj risiko for at udvikle tryksårsskader. Dette unikke system sikrer en høj patientkomfort og giver mulighed for at opgradere fra en statisk til en dynamisk madras, hvis behovet opstår. På tilsvarende måde kan madrassen nedgraderes i takt med, at brugerens helbred bliver bedre. Disse funktioner gør madrassen specielt velegnet til brug i hjemmeplejen eller i forbindelse med palliativ behandling.

De medicinske fordele ved systemet er ligeledes relevante i et moderne hospitalsmiljø. Muligheden for at op- eller nedgradere madrassen medfører endvidere en forenklet logistik og færre omkostninger til rengøring og desinficering.

En maksimal brugervægt på 254 kg betyder, at produktet lever op til de moderne udfordringer, der følger med tungere brugere.

Alle komponenter kan udskiftes og erstattes, hvilket maksimerer produktets levetid og reducerer de miljømæssige konsekvenser.



Hybridmadras - en kombination af luft og skum

MADRASBETRÆKKET er forsynet med håndtag, der letter håndteringen af Mercury Advance samt en vandtæt lynlås

Den **UNIKKE KOMBINATION** af luft- og skumceller sikrer en effektiv indsats mod vævsskader


MERCURY ADVANCE kan anvendes til brugere der er i "meget høj risiko" for at udvikle tryk og shear-relaterede vævsskader

MERCURY ADVANCE madrassen fungerer med og uden pumpe

Den faste **SKUMRAMME** sikrer god stabilitet, når brugeren sidder på kanten af madrassen

MERCURY ADVANCE er 15 cm høj og 2 meter lang

MADRASPUMPEN er yderst støjsvag og indstiller selv efter brugers vægt

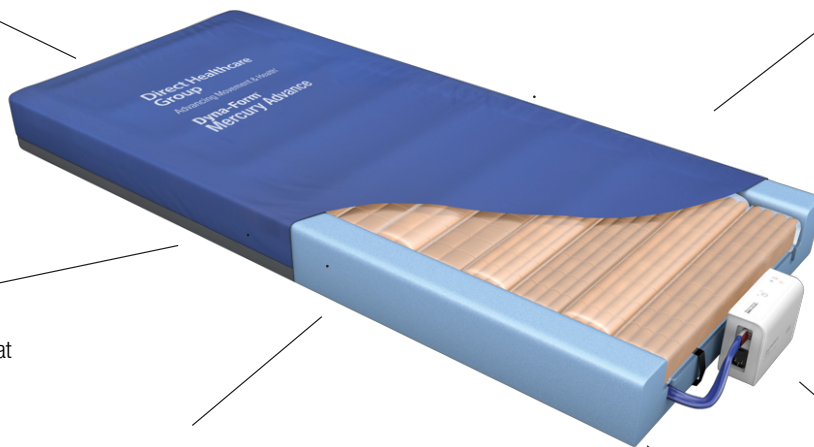

Tekniske specifikationer

Model	Mercury Advance MAT1210001
Max brugervægt	254 kg
Egenvægt	11 kg
Risikogruppe	Høj risiko
Hårdhed	Blå skum; 200 Newton, Pink skum; 120 Newton
Garanti	8 år på skum, 4 år på betræk

Madrassen fås i fem forskellige bredder; 80 cm, 83 cm, 85 cm, 88 cm, 105 cm