


Dyna-Form® Mercury

Dyna-Form® Mercury madrassen er specielt designet til brugere, der anses for at have stor risiko for at udvikle tryksår. Dette produkt, der består af en speciel "kastelleret udskæring" og blandinger af forbrændingsmodificeret etherskum (CME) i fineste kvalitet, giver ikke kun de bedste egenskaber for trykomfordeling, men fantastisk patientkomfort og produktlevetid.

Sidevæggens konstruktion muliggør primær stabilitet med henblik på patientoverførsel. Med et holdbart, multi-stretch, dampgennemtrængeligt betræk og en hærdet polyurethanbund leverer Mercury madrassen et vigtigt bidrag til infektionskontrol og standarder for vævslevedygtighed i et moderne hospitals-, pleje- eller hjemmeplejemiljø.

Fås også i Pro-Formance™ betræk, der ikke kan gennemtrænges.

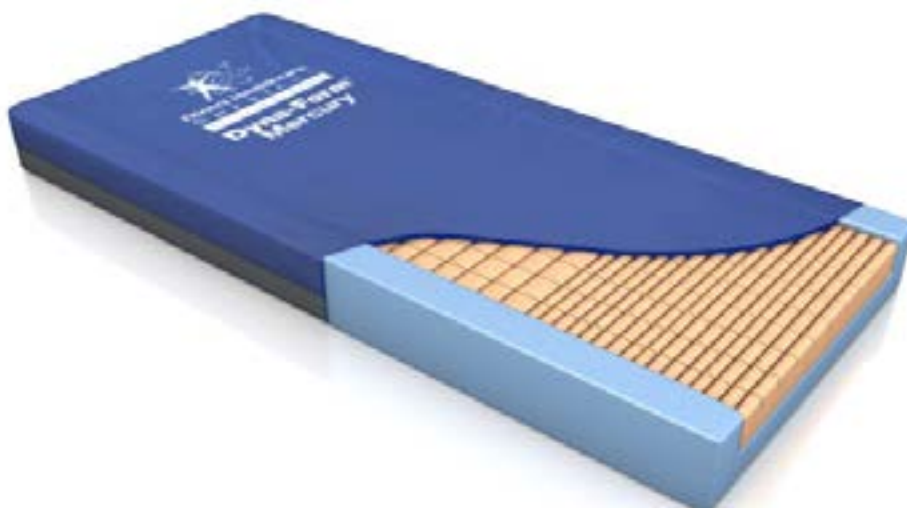

Tekniske Specifikationer

Produktkode: MAT0110224 (200x85x15cm),
MAT0110222 (200x80x15cm)

Risikokategori: Høj risiko

Vægtgrænse: 254 kg

Dimensioner: (200x85x15 cm og 200x80x15 cm. Fås i variable størrelser efter anmodning.

Produktvikt: Ca 11 kg

Skumdensitet: Blå 40 kg/m³ – nominel hårdhed 200 Newton / Pink 40 kg/m³ – nominel hårdhed 120 Newton

Træthedsklasse: Meget svær

Brandmodstandsdygtighed: BS7177 (Crib 5-komposit)

Madrasvægt: 11 kg

Farve: Blå

Garanti: 8 år skum/4 år betræk

Infektionskontrol/kompatibel med hypochloritopløsning: 1.000 ppm fortyndet eller 0,1 % (eller til brug sammen med lokale retningslinjer for infektionskontrol)