

MANUELLE RULLESTOLER



**Oppdatert fra
12. mai 2014**

Prisforhandlede produkter

OM HANDICARE

Handicare AS er en av Norges største leverandører av tekniske hjelpemidler til eldre og funksjonshemmede. Produktområdet er bredt og vi leverer løsninger for både barn, unge og voksne til bruk hjemme eller på institusjon. Sortimentet baseres på egenproduserte produkter og agenturprodukter fra anerkjente leverandører.



Landsdekkende salgs- og serviceorganisasjon

Vi er opptatt av å være en solid partner for våre kunder. Dette gjør vi gjennom lokal tilstedeværelse med dyktige medarbeidere som kan gi god service. Er du usikker på hvilket produkt du skal velge eller hvordan du kan få mest mulig ut av de forskjellige løsningene, kan vi hjelpe deg. Har du behov for service og reparasjoner av produktene, kan vi hjelpe deg. Ønsker du kurs og opplæring i temaer relatert til forflytning og transport av personer, kan vi hjelpe deg.

Ta kontakt med din lokale representant eller vårt kundesenter på telefon 03250.

En lettere hverdag

Vi tilbyr løsninger som gir økt selvstendighet for eldre og funksjonshemmede, samt bedre vilkår for de som bistår dem. Med andre ord en lettere hverdag!



1. VALG



Smal rullestol for brukere som kjører mye/ ”går seg fram“

- Triller svært godt
- Enkel tilpassing, fleksibel
- Smal totalbredde
- Stort tilbehørsprogram

Impera er en rullestol som har svært gode trilleegenskaper og egner seg derfor spesielt godt til personer som har behov for en lettkjørt rullestol. Impera egner seg godt til å kjøre med en fot og en arm. Impera er konstruert for å tåle røff bruk og er kjent for å bevare stabilitet og trilleegenskaper over tid.

Impera har justerbar setedybde, rygg høyde og legg lengde. Det er derfor lett å tilpasse rullestolen til brukers mål.

Imperas lave vekt og smale mål gjør stolen enkel å manøvrere. Totalbredden er kun setebredde +17 cm. Sammenslått er stolen kun 27 cm. Det gjør stolen enkel å frakte med seg.

Impera har et komplett tilbehørsprogram som inkluderer alternative rygger, ulike drivhjul og drivringer, enarmsdrift, cambring etc.

IMPERA SHORT

Impera leveres også i en utgave med kortere setedybde for ungdom og mindre voksne.



SPESIFIKASJONER

Setebredde	33, 36, 39 cm (Impera Short) 36, 39, 42, 45 og 48 cm
Setedybde	33-40 cm (Impera Short) 40-45 cm
Setehøyde foran	39-51 cm
Rygg høyde	35-45 cm
Totalbredde	Setebredde +17 cm
Totalbredde sammenslått	27 cm
Maks brukervekt	120 kg

IMPERA S

POST 4 – Aktiv sammenleggbar ramme med faste benstøtter

Impera S er en smal rullestol med faste benstøtter og har ellers de samme gode egenskapene som Impera.





Lett allroundrullestol for den som sitter i kort eller lang tid og kjører selv

- Enkel og rask tilpassing av sitte- og kjørestilling
- Vinkeljusterbar benstøtte 70°, 80° og 90°
- Oppfellbare armlener
- Stort tilbehørsprogram



Exigo 20 er en allsidig rullestol. Exigo 20 er god å sitte i og egner seg for personer som sitter lenge og/eller ofte i rullestol. Exigo 20 har gode innstillingsmuligheter for sittestilling og kjørestilling. Rullestolen har svært gode kjøreegenskaper både for brukere som skal trille rullestolen selv og for ledsager.

Vinkeljusterbar benstøtte gir unike muligheter til å oppnå optimal sittestilling. Oppfellbare armlener forenkler forflytning ut og inn av stolen, samt gjør det enklere å komme godt inntil f.eks. bord.

Exigo 20 har et stort tilbehørsprogram for ytterligere tilpassing av sitte- og kjørestilling, samt generell bruk av rullestolen. Tilbehørsprogrammet inkluderer blant annet alternative rygger, ulike drivhjul og drivringer, ledsagerbrems og bord.

Exigo 20 er en videreføring av markedets mest solgte rullestol de siste årene, Legend 2 Basic.

SPESIFIKASJONER

Setebredde	36, 39, 42, 45, 48, 51 cm
Setedybde	39-44 cm
Setehøyde	36-51 cm
Rygghøyde	42-45 cm
Armlenehøyde	22-27 cm
Total bredde	Setebredde + 18 cm
Total lengde	97 cm
Maks brukervekt	140 kg



Presise tilpasninger for den som sitter lenge og kjører selv

- **One-Tool system** – raske, enkle og presise tilpasninger
- **Vinkeljusterbar benstøtte** 70°, 80° og 90°
- **Ekstra tykt ryggoverdrag**
- **Stort tilbehørsprogram**

Exigo 30 kombinerer de beste kjøreegenskapene og en optimal sittestilling. Ved hjelp av One-Tool systemet gjøres innstillingene på stolen raskt og enkelt ved hjelp av ett verktøy. Mange innstillinger er i tillegg trinnløse og gir en svært presis tilpassing.

Vinkeljusterbar benstøtte gir unike muligheter til å oppnå optimal sittestilling. Med sine mange innstillingsmuligheter og et ekstra tykt ryggoverdrag gir Exigo 30 svært god sittekomfort. I tillegg gir innstillingsmulighetene de beste forutsetninger for å stille inn stolen for optimal kjørestilling, både for brukere som skal kjøre selv og for ledsager.

Exigo 30 har et stort tilbehørsprogram for ytterligere tilpassing av sitte- og kjørestilling, samt generell bruk av rullestolen. Tilbehørsprogrammet inkluderer blant annet alternative rygger, ulike drivhjul og drivringer, ledsagerbrems og bord.

Exigo 30 er en videreføring av den velkjente rullestolen Legend 2.



SPESIFIKASJONER

Setebredde	36, 39, 42, 45, 48, 51 cm 54, 57, 60 cm (Exigo 30 X)
Setedybde	36-45 cm 42-51 cm (Exigo 30 X)
Setehøyde	36-54 cm 44-52 cm (Exigo 30 X)
Rygg høyde	35-45 cm
Totalbredde	Setebredde + 18 cm
Maks brukervekt	140 kg 160 kg (Exigo 30 X)

EXIGO 30 X

Exigo 30 leveres også i en versjon for brukere med behov for ekstra setebredde.


 ENESTE VALG

Lett å trille og gode muligheter for stillings- endring for den som sitter lenge og kjører selv

- Aktivitet og hvile i samme rullestol
- Unik setefunksjon for stillingsendring og selvstendig aktivitet
- Triller svært lett og er lett å manøvrere
- Individuelt vinkel- og dybdejusterbare benstøtter
- Tryggere og enklere forflytning

Emineo gir mulighet for aktivitet og hvile i en og samme rullestol. Emineo er derfor det smarteste valget for brukere som sitter jevnlig og lenge i rullestol.

Emineo er en multifunksjonell rullestol som kan konfigureres til den enkelte brukers behov. Emineo kan settes opp med minimalt av tilpasninger og utstyr for å være en komfortabel og lett kjørt allround rullestol med mulighet for stillingsendring. I den andre enden av skalaen kan Emineo tilpasses ved hjelp av tilbehør for å gi en komfortabel og lett manøvrerbar rullestol med god støtte for brukere som ellers ville havnet i en tyngre komfortrullestol.

Emineo har en unik setetilt som gir bruker mulighet for viktig stillingsendring i løpet av dagen. Å endre stilling i løpet av dagen er svært viktig for komfort, funksjon og fysikk. Tilthendelen er plassert under armlenet for enkel betjening av bruker selv. Dersom tiltfunksjoen skal betjenes av ledsager vil plasseringen av tilthendelen gi trygghet og kontakt

mellom ledsager og bruker. Tilthendelen kan monteres på kjørebøylen dersom det er ønskelig at denne plasseres utenfor brukers rekkevidde.

Emineo triller svært lett og er enkel å manøvrere, enten for bruker selv eller for ledsager. Setetiltfunksjonen påvirker ikke tippepunktet på rullestolen. Dette bidrar til gode kjøreegenskaper og stabilitet uavhengig av bruk av setetiltfunksjonen.

Vinkeljusterbare benstøtter gir unike muligheter til å oppnå optimal sittestilling. Emineos benstøtter er i tillegg individuelt dybdejusterbare.



Emineo triller svært lett og er enkel å manøvrere både for bruker selv og for ledsager.

Emineo bidrar til tryggere og enklere forflytning ved at føttene kan plasseres direkte på gulvet. Dette kan også være gunstig i spisesituasjonen. I og med at Emineo kan oppnå en svært lav setehøyde, er rullestolen også velegnet til å ta seg fram ved hjelp av bena.

Emineo har et stort tilbehørsprogram for ytterligere tilpasning av sitte- og kjørestilling, samt generell bruk av rullestolen. Emineo er kollisjonstestet og godkjent i henhold til ISO 7176-19. Festepunkter er tydelig merket.

SPESIFIKASJONER

Setebredde	36, 39, 42, 45, 48, 51 cm
Setedybde	39-45 cm (34-40 cm for sb 36 cm)
Setehøyde	36-50 cm
Rygg høyde	50-60 cm
Ryggvinkel	90°-110°
Ryggvinkel (ved ryggregulering)	90°-120°
Setetilt	0°-16°
Armlene høyde	23-33 cm
Total bredde	Setebredde + 23 cm
Maks brukervekt	140 kg



Emineo kan tilpasses på en rekke ulike måter, blant annet muligheter for en komplett hvilestilling.

BRIX 1.123

Smal setebredde for de minste barna som kjører selv

- Setebredde fra 18 cm
- Ekstra bred fotplate
- Innstilling av setevinkel og sittehøyde
- Triller lett og er lett å manøvrere, også for ledsager
- Unik bremseløsning

Brix er en stol med mange smarte detaljer. Med en setebredde som starter på 18 cm er dette rullestolen for de minste, samtidig som den kan følge barnet gjennom barneårene.

En hel, bred fotplate gir muligheter for variert og stabil fotplassering.

Brix har mange innstillingsmuligheter for god funksjonalitet og sittestilling. Justering av setevinkel og sittehøyde i forhold til drivhjulene, gir de beste forutsetninger for å kjøre stolen selv. Det finnes en god kjørebøyle for ledsager som tilbehør.

Bremsene er ikke i veien for barns aktive bruk av rullestolen.

Brix er robust og tåler barns harde bruk. Rullestolen leveres med svært gode hjul for allround bruk og har et stort tilbehørsprogram.



SPESIFIKASJONER

Setebredde	18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 cm
Setedybde	18-28 cm, 22-32 cm, 26-36 cm
Rygg høyde	22-36 cm i 2 cm intervaller
Setehøyde	36-50 cm
Brukervekt	40 kg

PROGEO EXELLE JUNIOR

God sittestilling for barn som sitter lenge i rullestol

- Abduksjonsfront
- Innstilling av setevinkel og sittehøyde
- Gode tilpasningsmuligheter for sittestilling og kjøreegenskaper
- Kompakt og enkel å frakte med seg

Progeo Exelle Junior har en abduisert front som gir god plass til bena. Den abduiserte fronten gjør det også enklere for barn å forflytte seg inn og ut av stolen på egenhånd.

Progeo Exelle Junior har mange innstillingsmuligheter. En nærmest trinnløs plassering av drivhjul gir svært gode muligheter for å tilpasse setevinkel og sittehøyde slik at brukeren oppnår optimale kjøreegenskaper. Et stort intervall på legglengdejustering og rygg høydejustering bidrar til at stolen kan tilpasses etter hvert som barnet vokser.

Progeo Exelle Junior er 27 cm bred sammenslått. Sammen med den avrundede rammen blir stolen liten og kompakt å frakte med seg.

Rullestolen har et bredt utvalg tilbehør for ytterligere tilpassing av sittestilling og kjøreegenskaper, samt praktisk bruk.



SPESIFIKASJONER

Setebredde	27, 30, 33, 36 cm
Setedybde	30-43 cm
Rygg høyde	24-47 cm
Setehøyde	36-62 cm
Brukervekt	120 kg

POST 12 - Aktiv fastramme (barn)

POST 13 - Sammenleggbar ramme (barn)

IMPERA KID

Kompakt rullestol for enkel manøvrering og transport

- Nytt design og nye funksjoner
- Avtagbare, vinkeljusterbare benstøtter
- Små ytre mål
- Unik kjørebøyle

Impera Kid framstår i ny drakt med nye og bedre løsninger. Impera Kid leveres med abduksjonsfront eller rett front. Abduksjonsfront gir bedre plass til plassering av føttene. Den rette fronten gir en noe nettere rullestol.

Nye, avtagbare benstøtter kan vinkeljusteres 70°, 80° og 90° for optimal fotplassering. Dette er viktig for å oppnå en god sittestilling. Utsvingbare, avtagbare benstøtter gir barnet de beste muligheter til å forflytte seg inn og ut av stolen på egenhånd.

Impera Kid er kompakt og de ytre målene er små. Med avtagbare benstøtter blir stolen svært kompakt for transport.

En kjørebøyle som kan sitte på selv om stolen legges sammen er tilgjengelig som tilbehør. En rekke andre tilbehør for tilpassing av sittestilling og kjøreegenskaper er også tilgjengelig.

POST 13 - Sammeleggbare ramme (barn)



SPESIFIKASJONER

Setebredde	27, 30, 33 cm
Setedybde	27-33 cm
Rygg høyde	30-40 cm
Setehøyde	43-50 cm
Brukervekt	50 kg

CIRRUS 4K

Solid rullestol for barn med nedsatt stabilitet og muskelstyrke

- Sleidesete for enklere forflytning
- Armlene følger ryggen
- Tilrettelagt for ulike rygg- og seteløsninger
- Breddejusterbar

Cirrus 4 K gir svært god støtte til små og store barn. Setet støtter hele kroppen enten man sitter oppreist eller hviler i stolen.

Cirrus 4 K har et sleidesete som gir en unik hjelp når barnet skal forflyttes inn og ut av rullestolen.

Armlenet følger ryggens bevegelse og gir god støtte uavhengig av ryggvinkel.

Cirrus 4 K tilpasses enkelt individuelle behov og har alle funksjoner man krever av en rullestol barnet skal sitte lenge i. Alternative rygger og seteløsninger er tilgjengelig som tilbehør. Cirrus 4 K er breddejusterbar slik at barnet kan bruke stolen over lang tid og med ulik bekleddning.

Solide og velfungerende løsninger gir en enkel og trygg hverdag for både barn og omsorgspersoner.

POST 14 - Rullestol med tilt (barn)



SPESIFIKASJONER

Setebredde	33-38 cm
Setedybde	34-40 cm
Rygg høyde	43-54 cm
Setehøyde	37-47 cm
Brukervekt	100 kg

KOMPLETTERENDE PRODUKTER

MaTRx rygg

- Lett i vekt
- Stort utvalg størrelser
- Ulike utforminger tilpasset ulike behov
- Stabil rygg som monteres mellom ryggørene
- Ventilerende trekk

MaTRx rygg gir bedre stabilitet og sittekomfort i både aktive, allround og komfort rullestoler.

Ryggen festes enkelt til alle merker rullestoler ved at ryggskallet festes til ryggørene.

MaTRx bidrar til at personer som sitter i rullestol kan opprettholde en bedre sittestilling over tid.



StarLock sittepute

- Stabil pute med luft som trykkavlastende middel
- Enkel i bruk og lynrask å tilpasse
- Stort utvalg av størrelser, ulike høyder (opptil 13 cm høy)
- Lav vekt

StarLock er eneste luftpute som lykkes å kombinere maksimal stabilitet og optimal trykkfordeling.

StarLock velges av de som sitter lenge i rullestolen. Enkel låsemekanisme stenger av hver enkelt celle i puten slik at luften ikke kan forflytte seg og formen blir stabil. Forflytting til og fra puten blir enklere, støtten og stabiliteten bedre og sittekomforten i en klasse for seg selv. StarLock gir den enkelte bedre forutsetning for både aktivitet og hvile i rullestol.



Kjøreskinner for manuelle rullestoler

- Enkle å håndtere
- Teleskopiske

De teleskopiske skinnene er enkle å håndtere og er laget med en transportsikring slik at skinnedelene ikke glir fra hverandre.

Til hverdags støter man på mange hindringer som krever forskjellige løsninger og skinnelengder. Med de teleskopiske skinnene bestemmer du selv lengde etter behov.




AeroLight Xtra kjørerampe

- Stabil, enkel og trygg i bruk
- Tåler høy brukervekt
- Alternative lengder
- Lav egenvekt, sammenleggbar og enkel å ta med seg

Kjøreramper fungerer godt i mange sammenhenger og kan være en tilstrekkelig løsning for mange.

Velg type og lengde etter behov. Kjørerampens viktigste egenskap er at den skal være trygg og stabil i bruk, både for ledsager og rullestolbruker.

Handicare har et stort utvalg prisforhandlede kjøreramper for enkel og trygg bruk i bil, trapper eller andre høydeforskjeller.

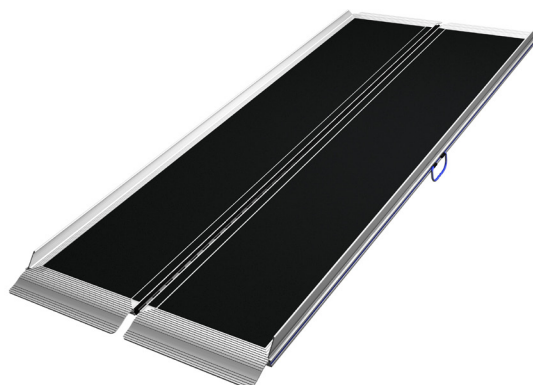

EasyGlide forflytningsbrett

- Enklere sideveis forflytning
- Trygg løsning
- Lett å frakte med seg


EasyGlide gjør sideveis forflytning til og fra rullestol enklere og tryggere. Antisklitape på undersiden sikrer at forflytningsbrettet blir liggende støtt. Den bøyelige utformingen og den glatte overflaten reduserer friksjon og gjør forflytningen til en lek.



TurnTable

- Enkel stående forflytning
- Roterer lett

TurnTable benyttes til å gjøre stående forflytninger enklere – til og fra rullestol, seng, toalett osv. Mange har nok kraft til å støtte seg på bena, men ikke ork til å flytte på føttene. I disse tilfellene er TurnTable et godt hjelpemiddel.

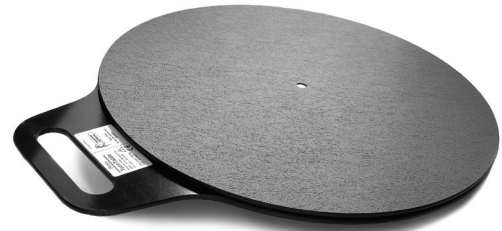

ReTurn 7500

- Trygg og aktiv forflytning
- Ruller lett
- Reduserer belastningen på medhjelper

ReTurn 7500 gir en trygg og aktiv forflytning når brukeren kan reise seg opp og forflyttes til seng, rullestol eller toalett. For medhjelperen er den enkel i bruk og helt uten tunge løftemoment. ReTurn 7500 ruller lett, også med tunge brukere.

ReTurn 7500 kan brukes i kombinasjon med ReTurnBelt for å gi bruker ytterligere støtte.



OneWaySlide

- Lettere inn i rullestolen
- Reduserer belastningen på medhjelper
- To ulike modeller

OneWaySlide benyttes for å forbedre sitteposisjonen i rullestol.

OneWaySlide bremses fremover og glir bakover, noe som gjør det svært enkelt å hjelpe brukeren lengre inn i stolen.

OneWaySlide har en vattert overflate og er meget god å sitte på.



Post 4 - Aktiv sammenleggbare ramme med faste beinstøtter

Produktnavn	HMS art.nr.	Lev.art.nr.	Setebredde	Setedybde	Maks brukervekt
Impera S	019452	3110001	36 cm	40-45 cm	120 kg
Impera S	019453	3110002	39 cm	40-45 cm	120 kg
Impera S	019454	3110003	42 cm	40-45 cm	120 kg
Impera S	019455	3110004	45 cm	40-45 cm	120 kg
Impera S	019484	3110005	48 cm	40-45 cm	120 kg



Impera S

Post 5 - Aktiv sammenleggbare ramme med avtakbare beinstøtter

Produktnavn	HMS art.nr.	Lev.art.nr.	Setebredde	Setedybde	Maks brukervekt
Impera	186867	3120011	36 cm	40-45 cm	120 kg
Impera	186868	3120012	39 cm	40-45 cm	120 kg
Impera	186869	3120013	42 cm	40-45 cm	120 kg
Impera	186870	3120014	45 cm	40-45 cm	120 kg
Impera	186871	3120015	48 cm	40-45 cm	120 kg

Impera Short	186872	3160011	33 cm	33-40 cm	120 kg
Impera Short	186873	3160012	36 cm	33-40 cm	120 kg
Impera Short	186874	3160013	39 cm	33-40 cm	120 kg



Impera/Impera Short

Post 6 - Allround sammenleggbare ramme

Produktnavn	HMS art.nr.	Lev.art.nr.	Setebredde	Setedybde	Maks brukervekt
Exigo 20	186877	3340236	36 cm	39-44 cm	140 kg
Exigo 20	186878	3340239	39 cm	39-44 cm	140 kg
Exigo 20	186879	3340242	42 cm	39-44 cm	140 kg
Exigo 20	186880	3340245	45 cm	39-44 cm	140 kg
Exigo 20	186881	3340248	48 cm	39-44 cm	140 kg
Exigo 20	186882	3340251	51 cm	39-44 cm	140 kg

Exigo 30	023108	3310036	36 cm	36-45 cm	140 kg
Exigo 30	023114	3320036	36 cm	42-51 cm	140 kg
Exigo 30	023109	3310039	39 cm	36-45 cm	140 kg
Exigo 30	023116	3320039	39 cm	42-51 cm	140 kg
Exigo 30	023110	3310042	42 cm	36-45 cm	140 kg
Exigo 30	023115	3320042	42 cm	42-51 cm	140 kg
Exigo 30	023111	3310045	45 cm	36-45 cm	140 kg
Exigo 30	023117	3320045	45 cm	42-51 cm	140 kg
Exigo 30	023112	3310048	48 cm	36-45 cm	140 kg
Exigo 30	023118	3320048	48 cm	42-51 cm	140 kg
Exigo 30	023113	3310051	51 cm	36-45 cm	140 kg
Exigo 30	023119	3320051	51 cm	42-51 cm	140 kg

Exigo 30 X	154700	3320054	54 cm	42-51 cm	160 kg
Exigo 30 X	186875	3320057	57 cm	42-51 cm	160 kg
Exigo 30 X	186876	3320060	60 cm	42-51 cm	160 kg



Exigo 20



Exigo 30



Exigo 30 X

Allround fastramme med tilt

Produktnavn	HMS art.nr.	Lev.art.nr.	Setebredde	Setedybde	Maks brukervekt
Emineo	199853	3410036	36 cm	34-40 cm	140 kg
Emineo	025283	3410039	39 cm	39-45 cm	140 kg
Emineo	154707	3410042	42 cm	39-45 cm	140 kg
Emineo	025284	3410045	45 cm	39-45 cm	140 kg
Emineo	154708	3410048	48 cm	39-45 cm	140 kg
Emineo	025285	3410051	51 cm	39-45 cm	140 kg



Emineo

Post 12 - Aktiv fastramme stol (barn)

Produktnavn	HMS art.nr.	Lev.art.nr.	Setebredde	Setedybde	Maks brukervekt
Brix 1.123	186915	BMINI18	18 cm	18-28 cm	40 kg
Brix 1.123	186916	BMINI20	20 cm	18-28 cm	40 kg
Brix 1.123	186917	BMINI22	22 cm	18-28 cm	40 kg
Brix 1.123	186921	BMIDI22	22 cm	22-32 cm	40 kg
Brix 1.123	186918	BMINI24	24 cm	18-28 cm	40 kg
Brix 1.123	186922	BMIDI24	24 cm	22-32 cm	40 kg
Brix 1.123	186919	BMINI26	26 cm	18-28 cm	40 kg
Brix 1.123	186923	BMIDI26	26 cm	22-32 cm	40 kg
Brix 1.123	186927	BMAXI26	26 cm	26-36 cm	40 kg
Brix 1.123	186920	BMINI28	28 cm	18-28 cm	40 kg
Brix 1.123	186924	BMIDI28	28 cm	22-32 cm	40 kg
Brix 1.123	186928	BMAXI28	28 cm	26-36 cm	40 kg
Brix 1.123	186925	BMIDI30	30 cm	22-32 cm	40 kg
Brix 1.123	186929	BMAXI30	30 cm	26-36 cm	40 kg
Brix 1.123	186926	BMIDI32	32 cm	22-32 cm	40 kg
Brix 1.123	186930	BMAXI32	32 cm	26-36 cm	40 kg
Brix 1.123	186931	BMAXI34	34 cm	26-36 cm	40 kg
Brix 1.123	186932	BMAXI36	36 cm	26-36 cm	40 kg



Brix 1.123

Post 13 - Sammenleggbar rullestol (barn)

Produktnavn	HMS art.nr.	Lev.art.nr.	Setebredde	Setedybde	Maks brukervekt
Progeo Exelle Junior	186895	959132730	27 cm	30-33 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186896	959132733	27 cm	33-36 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186897	959132735	27 cm	35-38 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186898	959132738	27 cm	38-41 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186899	959132740	27 cm	40-43 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186900	959133030	30 cm	30-33 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186901	959133033	30 cm	33-36 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186902	959133035	30 cm	35-38 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186903	959133038	30 cm	38-41 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186904	959133040	30 cm	40-43 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186905	959133330	33 cm	30-33 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186906	959133333	33 cm	33-36 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186907	959133335	33 cm	35-38 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186908	959133338	33 cm	38-41 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186909	959133340	33 cm	40-43 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186910	959133630	36 cm	30-33 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186911	959133633	36 cm	33-36 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186912	959133635	36 cm	35-38 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186913	959133638	36 cm	38-41 cm	120 kg
Progeo Exelle Junior	186914	959133640	36 cm	40-43 cm	120 kg



Progeo Exelle Junior

Post 13 - Sammenleggbare rullestol (barn) forts.

Produktnavn	HMS art.nr.	Lev.art.nr.	Setebredde	Setedybde	Maks brukervekt
Impera Kid abduksjon	186889	3130020	27 cm	27-33 cm	50 kg
Impera Kid	186892	3130010	27 cm	27-33 cm	50 kg
Impera Kid abduksjon	186890	3130021	30 cm	27-33 cm	50 kg
Impera Kid	186893	3130011	30 cm	27-33 cm	50 kg
Impera Kid abduksjon	186891	3130022	33 cm	27-33 cm	50 kg
Impera Kid	186894	3130012	33 cm	27-33 cm	50 kg



Impera Kid

Post 14 - Rullestol med tilt (barn)

Produktnavn	HMS art.nr.	Lev.art.nr.	Setebredde	Setedybde	Maks brukervekt
Cirrus 4 K	186888	E606077	33-38 cm	32-43 cm	100 kg



Cirrus 4 K

FINN RIKTIG RULLESTOL

Manuell rullestol skal alltid søkes på grunnlag av en grundig kartlegging av brukers behov i dag og i framtiden. Dette sikrer den mest funksjonelle løsningen for bruker over tid.

Riktig post basert på brukerbeskrivelse



<p>Noe nedsatt gangfunksjon, rullestol over lengre avstander</p> <p>Kjøre noe selv, ofte kjørt av ledsager</p> <p>Sitter kort tid</p> <p>Ofte selvstendig forflytning</p> <p>Transportere rullestolen, f.eks. i bil</p> <p>Tilbehør: kun vinkelregulerbar benstøtte og hoftebelte</p>	<p>Svært ulik grad av funksjonsnedsettelse</p> <p>Gangfunksjon, rullestol ved lengre avstander - større funksjonsnedsettelse, rullestol med stor grad av støtte</p> <p>Mange sitter lenge</p> <p>Kjøre selv eller av ledsager</p> <p>Transportere rullestolen, f.eks. i bil</p> <p>Tilbehør: fullt sortiment</p>	<p>Aktiv og selvstendig</p> <p>Kjøre mye selv, sitte lenge</p> <p>Ofte selvstendig forflytning</p> <p>Noen "går seg frem"</p> <p>Legge sammen rullestolen for transport</p> <p>Tilbehør: fullt sortiment</p>	<p>Svært ulik grad av funksjonsnedsettelse</p> <p>Gangfunksjon, rullestol ved lengre avstander - større funksjonsnedsettelse, rullestol med stor grad av støtte</p> <p>Mange sitter lenge</p> <p>Variasjon i sittestillingen, kunne hvile i rullestolen</p> <p>Kjøre selv eller hjelp til all kjøring</p> <p>Tilbehør: fullt sortiment</p>
Bestillingsordningen	Allround-rullestol	Aktiv-rullestol	Allround fastramme rullestol med tilt
Post 10	Post 6	Post 5	



EXIGO



IMPERA



EMINEO

Riktig produkt basert på behov

Ofte/lenge	Komfort rullestol	Emineo	Emineo	Emineo
	Emineo	Emineo	Emineo	Impera
	Emineo	Emineo	Emineo	Impera
	Emineo	Emineo	Impera	Impera
Sitte	Emineo	Emineo	Impera	Impera
	Emineo	Emineo	Impera	Impera
	Exigo	Exigo	Exigo	Exigo
Lite/sjelden	Exigo	Exigo	Exigo	Exigo
	Exigo	Exigo	Exigo	Exigo
	Exigo	Exigo	Exigo	Exigo
	Bestillingsordningen	Exigo	Exigo	Exigo

Av og til
Av ledsager

Kjøre

Ofte
Selv
Lett



handicare

Telefon 03250
www.handicare.no