

Eva450EE

SystemRoMedic

SWL 205 kg



Stark, säker och lättmanövrerad
– med elektrisk benbreddning

Eva450EE är en mångsidig mobil personlyft för alla lyftsituationer och för brukare som väger upp till 205 kg. Tillsammans med Direct Healthcare Groups enkla och funktionella SystemRoMedic™ lyfttillbehör är Eva450EE rätt lösning för lyft i samband med förflyttning till och från golv, stol eller säng samt för horisontella lyft och vid gåträning.




**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health®

Eva450EE

- Stark och stabil, SWL 205 kg
- Aluminium ger låg vikt – enkel att manövrera
- Masten justerbar i tre höjdlägen – stort lyftintervall
- Körhandtag med justerbar höjd – bekväma och ergonomiska arbetsställningar
- Stabil lyftbygel i aluminium och med säkra urkrokningskydd
- Lyftbygeln är av standardbredd – passar de flesta brukare och lyftsituationer
- Inkapslade dubbelhjul – lättrullade och underhållsfria
- Elektrisk benbreddning
- Elektrisk nödstoppknapp lättillgängligt placerad på kontrollboxen
- Elektrisk och manuell nödsänkning
- Batteri med hög kapacitet och lång drifttid
- Inbyggd laddning
- Quick guide på lyften
- Många tillbehör för säkra, enkla och individuellt anpassade lyft av brukare

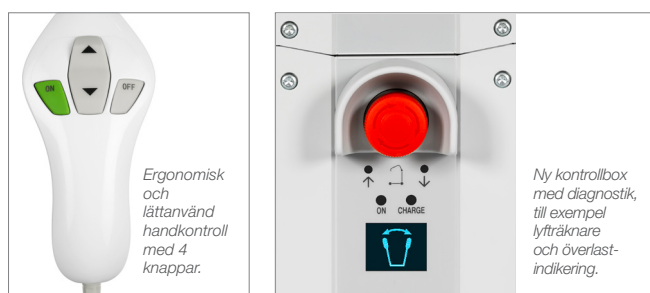

PRODUKTSPECIFIKATION

Eva450EE _____ Art. nr. 60100002

Mobil lyft med elektrisk benbreddning, komplett med lyftbygel, SlingBar M, och handkontroll.

TEKNISK INFORMATION

Safe working load (SWL) _____	205 kg /450 lbs
Material _____	Aluminium
Total höjd _____	1330-2020 mm
Benlängd _____	1300 mm
Bredd underrede, yttermått _____	685-980 mm
Bredd underrede, inermått _____	585-880 mm
Benbreddning _____	Elektrisk
Total vikt _____	34 kg
Hjul, diameter _____	100 mm
Lyftintervall _____	500-1790 mm
Lyfthastighet, utan belastning _____	34 mm/s
Nödsänkning _____	Manuell och elektrisk
Batterikapacitet _____	2,9 Ah
Material, lyftbygel _____	Aluminium
Lyftbygel, bredd _____	450 mm
Skyddsklass _____	IPX4



Eva450EE uppfyller kraven för klass 1-produkter i Medicintekniska Direktivet (MDD93/42/EEG).

Fler modeller och varianter av Eva mobila lyftar

Eva mobila lyftar finns flera modeller och varianter med olika lyftkapacitet samt med elektrisk eller manuell benbreddning. Eva finns även i specialversioner med låga ben för användning med lägre sängar.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning
60100001	Eva400EE	Mobil lyft med elektrisk benbreddning, SWL 180 kg
60100006	Eva450EE	Mobil lyft med elektrisk benbreddning, låga ben, SWL 205 kg
60100003	Eva600EE	Mobil lyft med elektrisk benbreddning, SWL 270 kg
60100010	Eva600EE	Mobil lyft med elektrisk benbreddning, låga ben, SWL 270 kg

Besök gärna www.directhealthcaregroup.com för mer information.

TILLBEHÖR

För att skapa optimala lösningar för brukare med olika behov kan Eva450EE användas i kombination med lyftselar och många andra smarta och funktionella lyfttillbehör i Direct Healthcare Groups SystemRoMedic™ lyfts Sortiment.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning
80100010	AmbulationArm _____	Armstöd, för alla modeller och varianter av Eva mobila lyftar
70200001	SlingBar S _____	Tvåpunktsbygel i aluminium, 35 cm
70200003	SlingBar L _____	Tvåpunktsbygel i aluminium, 60 cm
70200042	SlingBarSpreader M _____	Sidobyglar för SlingBar S/M/L
70200006	StretcherBar _____	För horisontella lyft
70200017	Sling bar RFL X4 _____	Fyrpunktsbygel i stål
70100002	Charder MHS2500 _____	Våg, SWL 300 kg
70100003	Charder MHS2500 _____	Våg, SWL 400 kg
70200101	QuickLink _____	För enkla byten av lyftbygel
70200089	Hand control HB33-6 _____	Handkontroll med 6 knappar. Med service-, batteristatus- samt överlastindikering

SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista
Tel: 08-557 62 200 • Fax: 08-557 62 299
www.directhealthcaregroup.com
info.se@directhealthcaregroup.com