

# Eva600EE, med lave bein

SystemRoMedic

Maks. last 270 kg



Sterk, sikker og lett å manøvrere  
– med elektrisk utvidelse av understellet og lave bein

Eva600EE er en allsidig mobil pasientløfter for alle løftesituasjoner og for brukere som veier opptil 270 kg. Når Eva600EE brukes med Direct Healthcare Groups funksjonelle og brukervennlige SystemRoMedic™ løftetilbehør, er den det rette valget for løfting i forbindelse med forflytninger til og fra gulvet, stolen eller sengen, samt for horisontal løfting og gåtøring. Denne varianten av Eva600EE har lave bein og er spesielt godt egnet for bruk med lavere senger.




**Direct Healthcare  
Group**

Advancing Movement & Health®

# Eva600EE, med lave bein

- Ekstra sterk og stabil, maks. last 270 kg
- Aluminium for lav vekt – enkel å manøvrere
- Masten kan justeres til tre høydeposisjoner – stor løfterekkevidde
- Høydejusterbare håndtak – komfortable og ergonomiske arbeidsstillinger
- Stabil løftebøyle i aluminium med pålitelige sikkerhetslåser
- Breidere løftebøyle gir en åpnere løftesele – ideell for større brukere
- Spesialversjon med lave bein for bruk med lavere senger
- Elektrisk utvidelse av understell
- Innkapslede tvillinghjul – ruller lett, lite vedlikehold
- Doble forhjul med en diameter på 35 mm
- Elektrisk nødstopp lett tilgjengelig på kontrollenheten
- Elektrisk og manuell nødsenkning
- BHøykapasitetsbatteri med lang driftstid
- Innebygd lading
- Quick guide på heisen
- Mange tilbehør for sikker, enkel og individuelt tilpassbar løfting av brukere

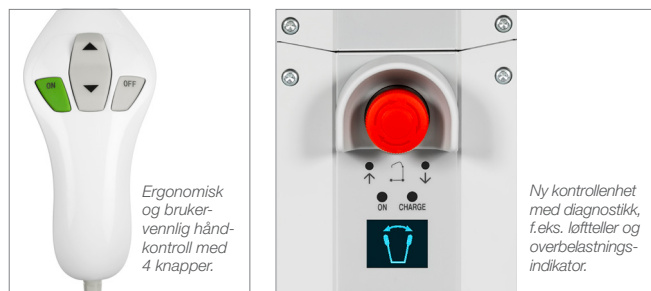

## PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Eva600EE \_\_\_\_\_ Art. nr. 60100010

Mobil løfter med elektrisk utvidelse av understell og lave bein, komplett med SlingBar L og en håndkontroll.

## TEKNISK INFORMASJON

Maks. last	_____	270 kg
Materiale	_____	Aluminium
Total høyde	_____	1330-2020 mm
Understellets lengde	_____	1400 mm
Understellets bredde, utvendige dimensjoner	_____	750-1150 mm
Understellets bredde, innvendige dimensjoner	_____	670-1180 mm
Understellsutvidelse	_____	Elektrisk
Total vekt	_____	39 kg
Bakre hjul, diameter	_____	100 mm
Fremre hjul, diameter	_____	2 x 35 mm
Løfterekkevidde	_____	500-1810 mm
Løfthastighet uten last	_____	34 mm/s
Nødsenkning	_____	Manuell og elektrisk
Batterikapasitet	_____	2,9 Ah
Materiale, løftebøyle	_____	Aluminium
Løftebøylens bredde	_____	600 mm
Beskyttelsesklasse	_____	IPX4

**CE** Eva600EE overholder kravene i direktivet om medisinsk utstyr for klasse 1-produkter (MDD 93/42/E0F).

### Andre modeller og varianter av Eva mobile løftere

Eva mobile løftere er tilgjengelige i flere modeller og varianter med ulik løftekapasitet og med elektrisk justering av understellets bredde. De er også tilgjengelige i spesialversjoner med lave bein for bruk med lavere senger.

Art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse
60100001	Eva400EE	Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, maks. last 180 kg
61000002	Eva450EE	Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, maks. last 205 kg
60100006	Eva450EE	Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, lave bein, maks. last 205 kg
60100003	Eva600EE	Mobil løfter med elektrisk understellsutvidelse, maks. last 270 kg

Vennligst besøk [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) for mer informasjon.

## SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ er en helhetsløsning for enkle forflytninger. I konseptet inngår det fire produktområder som dekker de aller fleste behov i ulike forflytningssituasjoner.

**Overflytting**, mellom to enheter. **Posisjonering**, innenfor samme enhet.

**Støtte**, ved mobilisering. **Løft**, manuelle og mekaniske.

## TILBEHØR

For å skape optimale løsninger for brukere med ulike behov kan Eva600EE brukes i kombinasjon med løfteseler og mange andre smarte og funksjonelle løftetilbehør i Direct Healthcare Groups SystemRoMedic™-utvalg av løfteprodukter.

Art.nr.	Produktnavn	Beskrivelse
80100010	AmbulationArm _____	Armlene, for alle modeller og varianter av Eva mobile løftere
70200001	SlingBar S _____	Topunkts løftebøyle i aluminium, 35 cm
70200002	SlingBar M _____	Topunkts løftebøyle i aluminium, 45 cm
70200042	SlingBarSpreader M _____	Sidestenger for SlingBar S/M/L
70200006	StretcherBar _____	For horisontal løfting
70200017	Sling bar RFL X4 _____	Firepunkts seleoverligger i stål
70100002	Charder MHS2500 _____	Vekt, maks. last 300 kg
70100003	Charder MHS2500 _____	Vekt, maks. last 400 kg
70200101	QuickLink _____	For enkel bytting av løftebøyer
70200089	Hand control HB33-6 _____	6 knapper, med indikatorer for service, batteristatus og overbelastning

# Direct Healthcare Group

## Advancing Movement & Health®

Kjellstad Næringspark  
St Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda  
T +47 21 01 44 70

[www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) • [info.no@directhealthcaregroup.com](mailto:info.no@directhealthcaregroup.com)