

Eva600EE, med låga ben

SystemRoMedic

SWL 270 kg



Stark, säker och lättmanövrerad
– med elektrisk benbreddning och låga ben

Eva600EE är en mångsidig mobil personlyft för alla lyftsituationer, speciellt för tyngre brukare som väger upp till 270 kg.

Tillsammans med Direct Healthcare Groups enkla och funktionella SystemRoMedic™ lyfttillbehör är Eva600EE rätt lösning för lyft i samband med förflyttning till och från golv, stol eller säng samt för horisontella lyft och vid gåträning. Denna variant av Eva600EE har låga ben och är speciellt lämplig för användning med lägre sängar.



**Direct Healthcare
Group**


Advancing Movement & Health®

Eva600EE, med låga ben

- Extra stark och stabil, SWL 270 kg
- Aluminium ger låg vikt – enkel att manövrera
- Masten justerbar i tre höjdlägen – stort lyftintervall
- Körhandtag med justerbar höjd – bekväma och ergonomiska arbetsställningar
- Stabil lyftbygel i aluminium och med säkra urkrokningskydd
- Den bredare lyftbygeln ger en öppnare lyftsele - passar bra för stora brukare
- Specialversion med låga ben för användning med lägre sängar
- Elektrisk benbreddning
- Inkapslade dubbelhjul bak till – lättrollade och underhållsfria
- Dubbla framhjul med en diameter på 35 mm
- Elektrisk nödstoppknapp lättillgängligt placerad på kontrollboxen
- Elektrisk och manuell nödsänkning
- Batteri med hög kapacitet och lång drifttid
- Inbyggd laddning
- Quick guide på lyften
- Många tillbehör för säkra, enkla och individuellt anpassade lyft



Ergonomisk och lättanvänd handkontroll med 4 knappar.

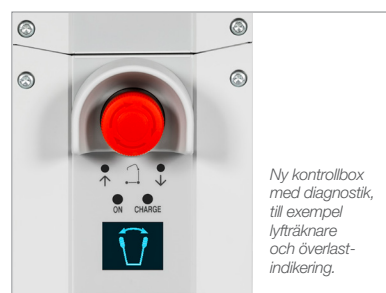

Ny kontrollbox med diagnostik, till exempel lyftvärkare och överlastindikering.

PRODUKTSPECIFIKATION

Eva600EE _____ Art. nr. 60100010

Mobil lyft med elektrisk benbreddning och låga ben, komplett med lyftbygel, SlingBar L, och handkontroll.

TEKNISK INFORMATION

Safe working load (SWL) _____ 270 kg
Material _____ Aluminium
Total höjd _____ 1330-2020 mm
Benlängd _____ 1400 mm
Bredd underrede, yttermått _____ 750-1150 mm
Bredd underrede, inermått _____ 670-1180 mm
Benbreddning _____ Elektrisk
Total vikt _____ 39 kg
Hjul bak, diameter _____ 100 mm
Hjul fram, diameter _____ 2 x 35 mm
Lyftintervall _____ 500-1810 mm
Lyfthastighet, utan belastning _____ 34 mm/s
Nödsänkning _____ Manuell och elektrisk
Batterikapacitet _____ 2,9 Ah
Material, lyftbygel _____ Aluminium
Lyftbygel, bredd _____ 600 mm
Skyddsklass _____ IPX4



Eva600EE uppfyller kraven för klass 1-produkter i Medicintekniska Direktivet (MDD93/42/EEG).

Fler modeller och varianter av Eva mobila lyftar

Eva mobila lyftar finns flera modeller och varianter med olika lyftkapacitet samt med elektrisk eller manuell benbreddning. Eva finns även i specialversioner med låga ben för användning med lägre sängar.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning
60100001	Eva400EE	Mobil lyft med elektrisk benbreddning, SWL 180 kg
60100011	Eva400EM	Mobil lyft med manuell benbreddning, SWL 180 kg
61000002	Eva450EE	Mobil lyft med elektrisk benbreddning, SWL 180 kg
60100006	Eva450EE	Mobil lyft med elektrisk benbreddning, låga ben, SWL 205 kg
60100007	Eva450EM	Mobil lyft med manuell benbreddning, låga ben, SWL 205 kg
60100003	Eva600EE	Mobil lyft med elektrisk benbreddning, SWL 270 kg

Besök gärna www.directhealthcaregroup.com för mer information.

SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.

TILLBEHÖR

För att skapa optimala lösningar för brukare med olika behov kan Eva600EE användas i kombination med lyftselar och många andra smarta och funktionella lyfttillbehör i Direct Healthcare Groups SystemRoMedic™ lyfts Sortiment.

Art. nr.	Produktnamn	Beskrivning
80100010	AmbulationArm _____	Armstöd, för alla modeller och varianter av Eva mobila lyftar
70200001	SlingBar S _____	Tvåpunktsbygel i aluminium, 35 cm
70200002	SlingBar M _____	Tvåpunktsbygel i aluminium, 45 cm
70200042	SlingBarSpreader M _____	Sidobyglar för SlingBar S/M/L
70200006	StretcherBar _____	För horisontella lyft
70200017	Sling bar RFL X4 _____	Fyrpunktsbygel i stål
70100002	Charder MHS2500 _____	Våg, SWL 300 kg
70100003	Charder MHS2500 _____	Våg, SWL 400 kg
70200101	QuickLink _____	För enkla byten av lyftbygel
70200089	Hand control HB33-6 _____	Handkontroll med 6 knappar. Med service-, batteristatus- samt överlastindikering

Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista
Tel: 08-557 62 200 • Fax: 08-557 62 299
www.directhealthcaregroup.com
info.se@directhealthcaregroup.com