


# RiseBasic

SystemRoMedic

To modeller

Kompakt format og  
ekstremt lav vekt

Maksimal komfort  
og trygghet

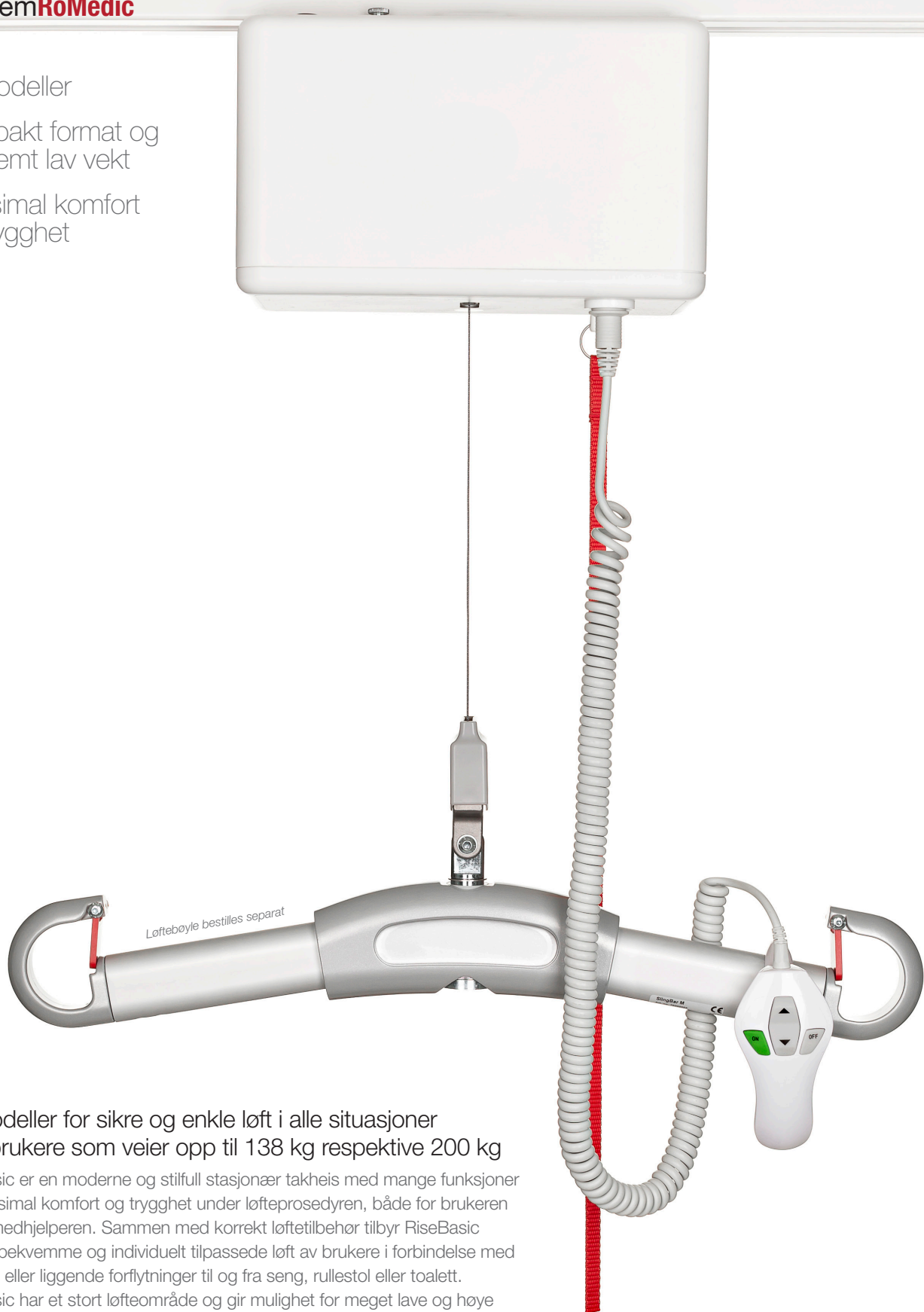

To modeller for sikre og enkle løft i alle situasjoner  
- for brukere som veier opp til 138 kg respektive 200 kg

RiseBasic er en moderne og stilfull stasjonær takheis med mange funksjoner for maksimal komfort og trygghet under løfteprosedyren, både for brukeren og for medhjelperen. Sammen med korrekt løftetilbehør tilbyr RiseBasic trygge, bekvemme og individuelt tilpassede løft av brukere i forbindelse med sittende eller liggende forflytninger til og fra seng, rullestol eller toalett.

RiseBasic har et stort løfteområde og gir mulighet for meget lave og høye løft, hvilket gjør den til en utmerket løsning for løft fra gulv, men også til gå- og ståtrening. RiseBasic kan også benyttes til smidige forflytninger av brukere fra et rom til et annet.

RiseBasic er oppsiktsvekkende liten og har ekstremt lav vekt. Den perfekte størrelsen gir mange praktiske fordeler. Med det moderne og elegante designet av takheisen bidrar den til å skape profesjonelle og funksjonelle omsorgsmiljøer med en harmonisk og menneskelig atmosfære.

**Direct Healthcare**  
**Group**

Advancing Movement & Health®

# For alle skinneresystemer, i alle miljøer og i alle typer rom

RiseBasic finnes i to modeller; RiseBasic300M med løftekapasitet på 138 kg og RiseBasic440M med løftekapasitet på 200 kg. Begge modellene flyttes manuelt langs skinnen (M står for manual/manuell) og kan benyttes sammen med alle typer av skinner, både i fastinstallerte skinneresystemer (enkle skinneresystemer med eller uten svinger og veksler, eller skinneresystemer med full romdekning) og i bærbare, frittstående løftesystemer.

Som tilvalg kan RiseBasic leveres med elektrisk vekselstyring for økt bruker-vennlighet. Med dette tilbehøret kan medhjelperen styre karusellvekslere i skinneresystemet ved hjelp av håndkontrollen.

RiseBasic fungerer like bra i alle miljøer. Den kan brukes i alle typer rom der det er behov for å løfte og forflytte brukere fra en plass til en annen. I små rom der utfordringen er lite plass og armleng og bruken av en mobil løfter er vanskelig, vil RiseBasic være en perfekt løsning.

## Komfort og trygghet

RiseBasic er stillestående, har myke bevegelser og mange sikkerhetsfunksjoner for maksimal komfort og trygghet under løfteprosedyren, både for brukeren og for medhjelperen.

## Lading via håndkontrollen

RiseBasic har enkel og bekvem lademåte for håndkontrollen som standard. Ladestasjonen for takheismotoren er integrert i en liten, diskret holder og oppbevaringsplass for håndkontrollen. Holderen med ladestasjon monteres enkelt på veggen, i nærheten av takheisens ladestasjon.

Lading av takheisen starter automatisk med en gang håndkontrollen har blitt "parkert" i holderen/ladestasjonen og pågår helt til håndkontrollen tas ut av holderen igjen. Denne løsningen gjør at håndkontrollen alltid oppbevares på samme sted og er lett tilgjengelig, samtidig som takheismotoren alltid er oppladet og klar til bruk.

Som tilvalg kan RiseBasic leveres med en unik ladeløsning med en kjøremotor for to alternative lademetoder. Med dette tilbehøret kan takheismotorene stilles inn på enten lading i en spesiell ladestasjon på utvalgt plass i skinneresystemet, eller på kontinuerlig skinnelading. Innstillingen for lading kan enkelt endres etter behov.

## Ergonomisk håndkontroll


RiseBasic er meget enkel å betjene. Dette gjør det mulig for medhjelperen å være nær brukeren under hele løfteprosedyren og resulterer i en sikker, trygg og komfortabel forflytning.

Tydelig merkede og intuitiv plasserte knapper gjør manøvreringen enkel. Det gode ergonomiske grepet ligger godt i hånden og knappene for På/Av, Opp/Ned eller bevegelse i skinnen (for modeller med kjøremotor) nås via et enkelt tommelektrykk.

På/Av-knappen gir en fin mulighet til å slå av RiseBasic når den ikke benyttes og reduserer muligheten for uautorisert bruk av motoren.

Håndkontrollen har en spesiell kontakt som gjør det enkelt å tilkoble, ta ut eller bytte uten verktøy. Kontakten og innfestningen i takheismotoren minsker også risikoen for at håndkontrollen deaktiveres på grunn av dårlig kontakt.



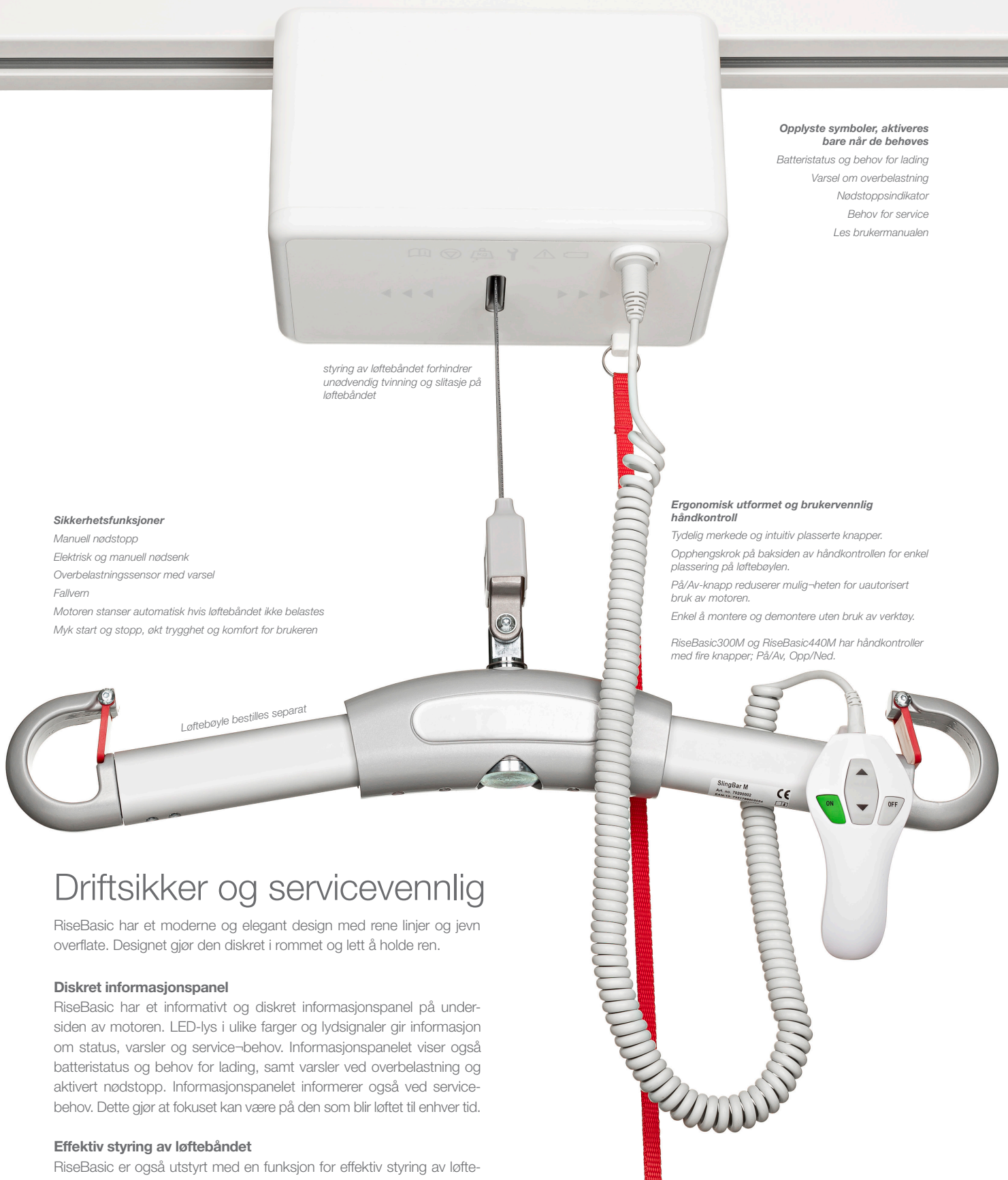

#### Opplyste symboler, aktiveres bare når de behøves

Batteristatus og behov for lading

Varsel om overbelastning

Nødstoppsindikator

Behov for service

Les brukermanualen

styring av løftebåndet forhindrer unødvendig tvinning og slitasje på løftebåndet

#### Sikkerhetsfunksjoner

Manuell nødstop

Elektrisk og manuell nødsenk

Overbelastningsensor med varsel

Fallvern

Motoren stanser automatisk hvis løftebåndet ikke belastes

Myk start og stopp, økt trygghet og komfort for brukeren

#### Ergonomisk utformet og brukervennlig håndkontroll

Tydlig merkede og intuitiv plasserte knapper.

Opphengskrok på baksiden av håndkontrollen for enkel plassering på løfteboylen.

På/Av-knapp reduserer mulig-heten for uautorisert bruk av motoren.

Enkel å montere og demontere uten bruk av verktøy.

RiseBasic300M og RiseBasic440M har håndkontroller med fire knapper; På/Av, Opp/Ned.

Løfteboyle bestilles separat

## Driftsikker og servicevennlig

RiseBasic har et moderne og elegant design med rene linjer og jevn overflate. Designet gjør den diskret i rommet og lett å holde ren.

#### Diskret informasjonspanel

RiseBasic har et informativt og diskret informasjonspanel på undersiden av motoren. LED-lys i ulike farger og lydsignaler gir informasjon om status, varsler og service-behov. Informasjonspanelet viser også batteristatus og behov for lading, samt varsler ved overbelastning og aktivert nødstop. Informasjonspanelet informerer også ved service-behov. Dette gjør at fokuset kan være på den som blir løftet til enhver tid.

#### Effektiv styring av løftebåndet

RiseBasic er også utstyrt med en funksjon for effektiv styring av løftebåndet. Denne unike funksjonen hindrer unødvendig tvinning av løftebåndet samtidig som den minimerer slitasje og forlenger løftebåndets levetid. Totalt sett sparer denne funksjonen deg for både tid, penger og bekymringer.

#### Innebygget batteri med høy kapasitet og lang levetid

RiseBasic er utstyrt med et innebygget, miljøvennlig NiMH-batteri med høy kapasitet. Batteriet gir mange timers bruk før det trenger å lades opp igjen. For å spare batteriet og ytterligere redusere behovet for lading, samt også sikre at takheismotoren alltid er fulladet, slukkes RiseBasic automatisk av seg selv etter fire minutter uten aktivitet.


#### Servicevennlig

RiseBasic veier bare 6,8 kg. Den lave vekten er en stor fordel både under montering av takheismotoren i skinnesystemet og når den skal tas ned for service. RiseBasic er også meget servicevennlige. Generelt krever service og delebytte ytterst få verktøy, i noen tilfeller ingen.

#### Diagnostikk

En spesiell software finnes som tilbehør og gjør det mulig, via en PC, å få tilgang til ytterligere informasjon om takheismotoren, f. eks. antall driftstimer og utførte løft, antall overbelastninger, statistikk på utført service etc.

# RiseBasic

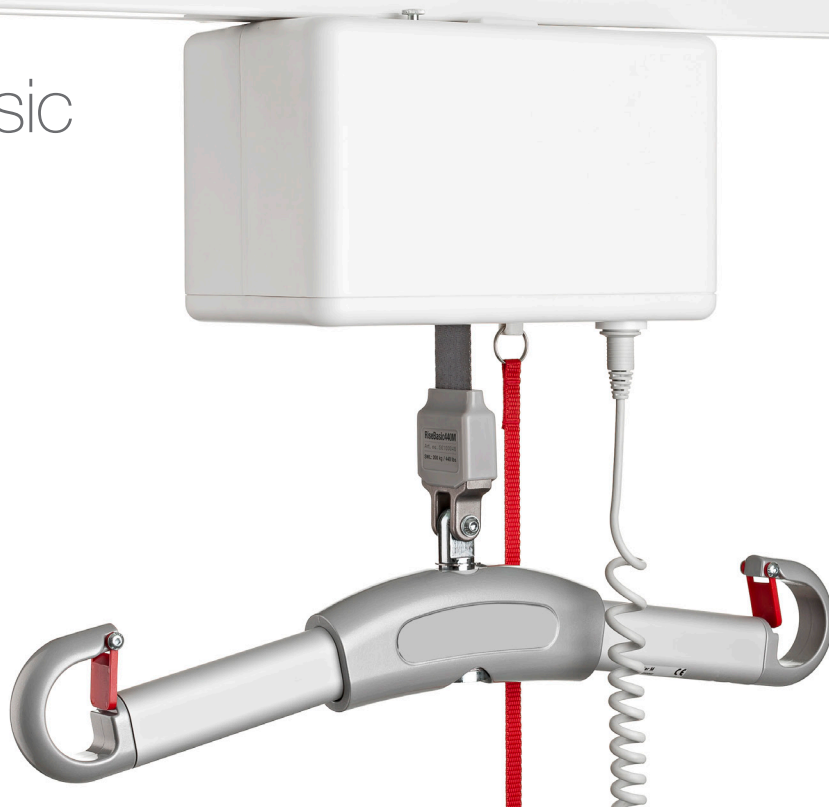

## PRODUKTSPEKIFIKASJONER

Art. nr.	Produkt
50100039	RiseBasic300M
50100040	RiseBasic440M

Alle modeller av RiseBasic leveres med håndkontroll og lader.  
Løftebøyle bestilles separat.

## TILBEHØR

Art. nr.	Produkt	Beskrivelse
70200075	QuickTrolleyUniversal 360	Hjulsett med hurtigkobling, vridbar 360 grader
70200062	In-rail/end point charging	Skinnelading/endelading
70200066	Switch manoeuvring	Vekselstyring, for styring av karusellvekslere i skinnesystemet ved hjelp av håndkontrollen
70200048	Software for diagnostics	Software for diagnostikk
50400048	Parking Placard	Parkeringstavle for bekvem oppbevaring av løftebøyer, manualer og løfteseler
50400332	Parking Placard BariBar	Parkeringstavle for oppbevaring av BariBar og løfteseil.
70200071	SlingBar XS	Løftebøyle, 250 mm
70200001	SlingBar S	Løftebøyle, 350 mm
70200002	SlingBar M	Løftebøyle, 450 mm
70200003	SlingBar L	Løftebøyle, 600 mm
70200042	SlingBarSpreader M	Sidebøyer for SlingBar S/M/L
70200072	BariBar	Firepunkts løftebøyle for takheismotor SWL 454 kg
70200017	Sling bar RFL X4	Firepunkts løftebøyle SWL 300 kg
70200053-		
70200058	Lift strap extension	Forlengelsesbånd, 6 lengder: 370 – 970 mm

## TEKNISK INFORMASJON

Maks brukervekt, RiseBasic300M:	138 kg
Maks brukervekt, RiseBasic440M:	200 kg
Materiale, chassis:	Aluminium
Materiale, deksel:	Brannhemmende ABS-plast
Fysisk utvendige mål, lengde x bredde x høyde:	266 x 151 x 156 mm
Egenvekt:	6,8 kg
Fremdrift langs skinnen:	Manuell
Håndkontroll:	Elektrisk, 4 knapper
Løftehøyde:	2400 mm
Løftehastighet, uten vekt:	30 mm per sek
Løftehastighet, med vekt:	20 mm per sek
Lydnivå, med vekt:	51 dB(A)
Effektiv styring av løftebånd:	Standard
Nødsenk:	Elektrisk og manuell
Nødstop:	Manuell
Batterier:	2 x 12V 2,9Ah
Håndkontrollslading:	Standard
Konstant skinnelading:	Valgfritt, tilbehør
Ladestasjon i skinne:	Valgfritt, tilbehør
IP-klasse, løftemotor:	IP20
IP-klasse, håndkontroll:	IPX4



**CE** RiseBasic oppfyller kravene til medisinsk utstyr, klasse 1-produkter 93/42/EEC.

Besøk [www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) for å få mer informasjon.

## SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ er en helhetsløsning for enkle forflytninger. I konseptet inngår det fire produktområder som dekker de aller fleste behov i ulike forflytningssituasjoner.

**Overflytting**, mellom to enheter. **Posisjonering**, innenfor samme enhet.

**Støtte**, ved mobilisering. **Loft**, manuelle og mekaniske.

# Direct Healthcare Group

## Advancing Movement & Health®

Kjellstad Næringspark  
St Hallvards vei 3, 3414 Lierstranda  
T +47 21 01 44 70

[www.directhealthcaregroup.com](http://www.directhealthcaregroup.com) • [info.no@directhealthcaregroup.com](mailto:info.no@directhealthcaregroup.com)