


QuickLink®

SystemRoMedic™

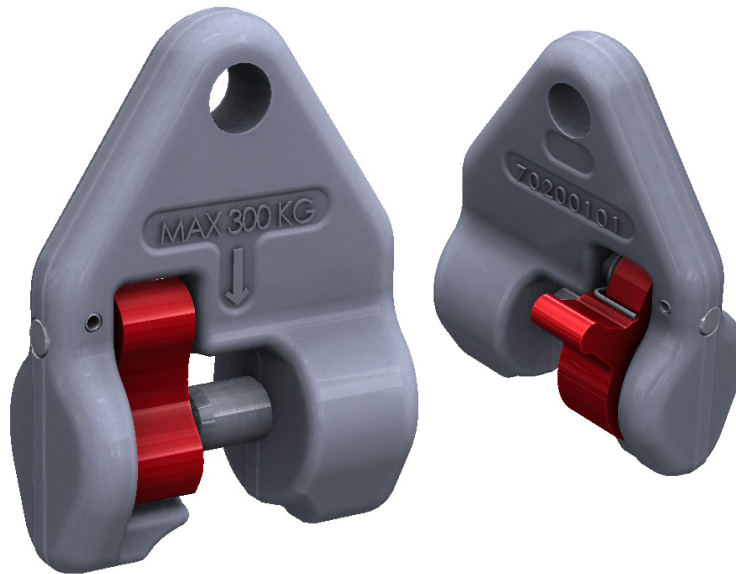

Makkelijk in gebruik en veelzijdig

QuickLink® biedt een gebruiksvriendelijke en veelzijdige oplossing voor het snel wisselen van tiljucken en bijbehorende accessoires op mobiele en plafondliften. Het veerbelaste treklijpje opent het systeem en sluit het veilig zodra het tiljuk of accessoire op zijn plaats zit, om een veilige verbinding te garanderen.

Hoorbare en voelbare feedback

Een hoorbare klik en voelbare feedback over de veersluiting geeft de gebruiker een duidelijke indicatie dat het tiljuk of accessoire veilig is bevestigd.

Robuust en verzekerd ontwerp

Het robuuste ontwerp en materiaal geeft de gebruiker het vertrouwen dat de gehesen gebruiker veilig is. Een maximaal gebruikersgewicht van 300 kg / 660 lbs biedt een groot tilvermogen voor gebruik bij een breed scala aan patiënten. Testen volgens ISO 10535: 2006 bieden de zekerheid dat QuickLink® een bewezen ontwerp is.

Technische informatie

Artikel naam	QuickLink®
Artikel nummer	70200101
Maximaal gebruikersgewicht	300kg / 660lbs
Materiaal	Gesmeed staal van hoge kwaliteit
Gewicht	Ongeveer. 420g
Testnorm	ISO 10535:2006
Verwachte levensduur	Minimaal 20.000 liften (ca. 5 liften / dag gedurende 10 jaar)
Dimensies	60 x 82 x 30mm
Hoogte beïnvloedt de hefhoogte	50mm
Compatibiliteit, liften	Vega, Carina, Eva, EvaDrive, RiseBasic, RiseAtlas
Compatibiliteit, slingbars	SlingBar S, M, L 4-point SlingBar StretchBar
Compatibiliteit, accessoires	Charder scale

**Direct Healthcare
Group**

Advancing Movement & Health™

Weteringweg 5-9
2641 KM Pijnacker
The Netherlands
T: +31 (0)15 369 54 40
www.directhealthcaregroup.com
info.nl@directhealthcaregroup.com