



# TR 2000/3000

## Duschvagnar

Hygiene Equipment  
Designed for People

### Underlättar både duschning och överflyttning för vårdgivare

TR standard duschvagnar är unika med sin sidomonterade lyftpelare, vilket möjliggör att liggyta med madrass kan komma in längre över sängen för en kortare och enklare överflyttning av patienten. Tillgänglig både i hydrauliskt och batteridrivet utförande samt i 3 olika längder.

CE



Registrerad hos  
Läkemedelsverket, Sverige, som en  
MD Klass 1 produkt,  
MDD 93/42EEC.



Duschvagnen underlättar dels vid hämtning av patient i säng för att göra en så enkel och säker överflyttning som möjligt samt vid transport och duschning av patient med sin rakstyrning, låsning av hjul, steglöst reglerbara höjdjustering och tiltning. Ingen förutbestämd huvudsida och med sina dubbla avlopp och flyttbar huvudkudde elimineras risken för att behöva backa ut och vända vagnen innan patient överflyttning.



TR EQUIPMENT



# TR 2000/3000

## Duschvagnar

Hygiene Equipment  
Designed for People

### EGENSKAPER

- Duschvagnen kan även användas som skötbord, akut-, omklädnings- eller transportvagn.
- Tillgänglig både som hydragisk eller batteridrivna i 3 olika längder.
- Levereras med madrass, kudde och 1 m avloppsslang som standard.
- Unik sidmonterad lyftpelare möjliggör att duschvagnens liggyta med madrass kan köras in längre över sängen vilket medför att kortare och enklare överflyttning av patienten.
- Dubbla avlopp och flyttbar huvudkudde för enklare överflyttning från sängen, oavsett vad patienten har sitt huvud.
- Fot kontrollerad höjdjustering av arbetshöjden ger vårdgivaren båda händerna fria för behandling av patient.
- Steglös reglering av liggyta som enkelt kan tippas åt båda hållen (4 grader) för god vattenavrinning samt "Trendelenburg" position för patienter i shock. Mekanisk tilt med hjälp av gasfjädrar.
- Levereras som standard med två låsningsbara hjul och 2 hjul med rakstyrning för enkel hantering och patientförflyttning.
- Sidogrindar kan fällas in för att göra duschvagn smalare vid passage i trånga utrymmen.
- Ren enkel konstruktion för snabb och enkel rengöring.
- Till TR3000 medföljer även batteriladdare.



TR 3000 Batteridrivna - Baksida av chassi



Färg alternativ på madrass och kuddar



TR 2000 Hydraulisk - Baksida av chassi



TR 2000 Hydraulisk - med förhöjningssats  
TR 3000 Batteridrivna - med förhöjningssats

### Specifikation



<b>Längd alternativ</b>	1600/1900/2100 mm
<b>Bredd</b>	705 mm
<b>Höjd</b>	625-925 mm som standard 685-985 mm med förhöjningsskit
<b>Max patientvikt</b>	150 kg
<b>Chassi</b>	Pulverlackerat rostfritt och förzinkat stål
<b>Hjul</b>	Två bromsbara hjul och två hjul med rakstyrning
<b>Höjdjustering</b>	Fot kontrollerad höjdjustering
<b>Madrass, Kudde</b>	Flamsäker vävburen madrass och kudde - Grå (Standard)/Gul eller blå (Option)
<b>Batteri (TR 3000)</b>	Laddningsbart, 24 V, 2 x 7Ah

### Hydrauliska modeller

TR 2000	Standard	L = 1900 mm
TR 2000 - S	Barn	L = 1600 mm
TR 2000 - L	Extra Lång	L = 2100 mm


### Batteridrivna modeller

TR 3000	Standard	L = 1900 mm
TR 3000 - S	Barn	L = 1600 mm
TR 3000 - L	Extra Lång	L = 2100 mm

### Tillbehör/Optioner

- 15 alt. 30 graders kilkudde
- Förhöjningssats för överflyttning från mobillyft, ger en frigång på 135 mm höjer duschvagn med 60 mm.
- Alla modeller kan levereras med blå eller gul kudde madrass och kudde.
- Lackerade rostfria sidogrindar
- Längre avloppsslang 2,5 m, samt hållare för droppställning

### Dimensioner (mm)

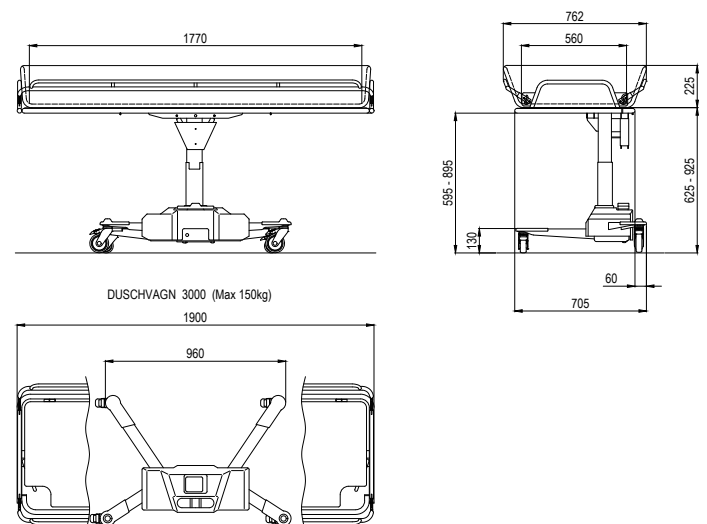

### Head office

TR Equipment AB, Sweden  
Phone: +46 140 38 50 60  
info@trequipment.se  
www.trequipment.com

### DISTRIBUTÖR SVERIGE

Gate Rehab Development AB,  
Tel: 0371-318 00  
info@gaterd.se  
www.gaterd.se



TR EQUIPMENT