



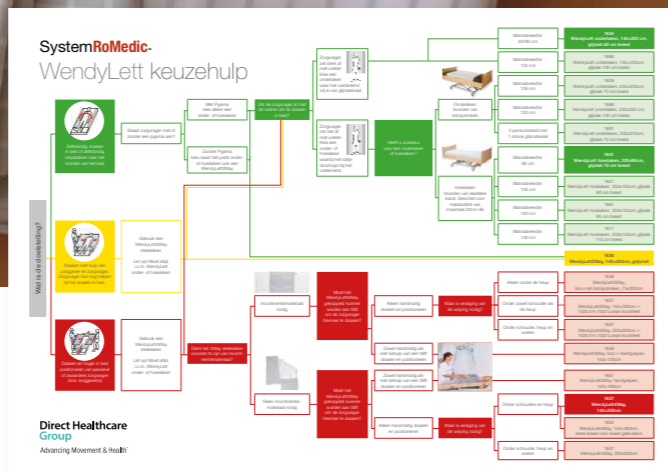

WendyLett  
Glijlakens

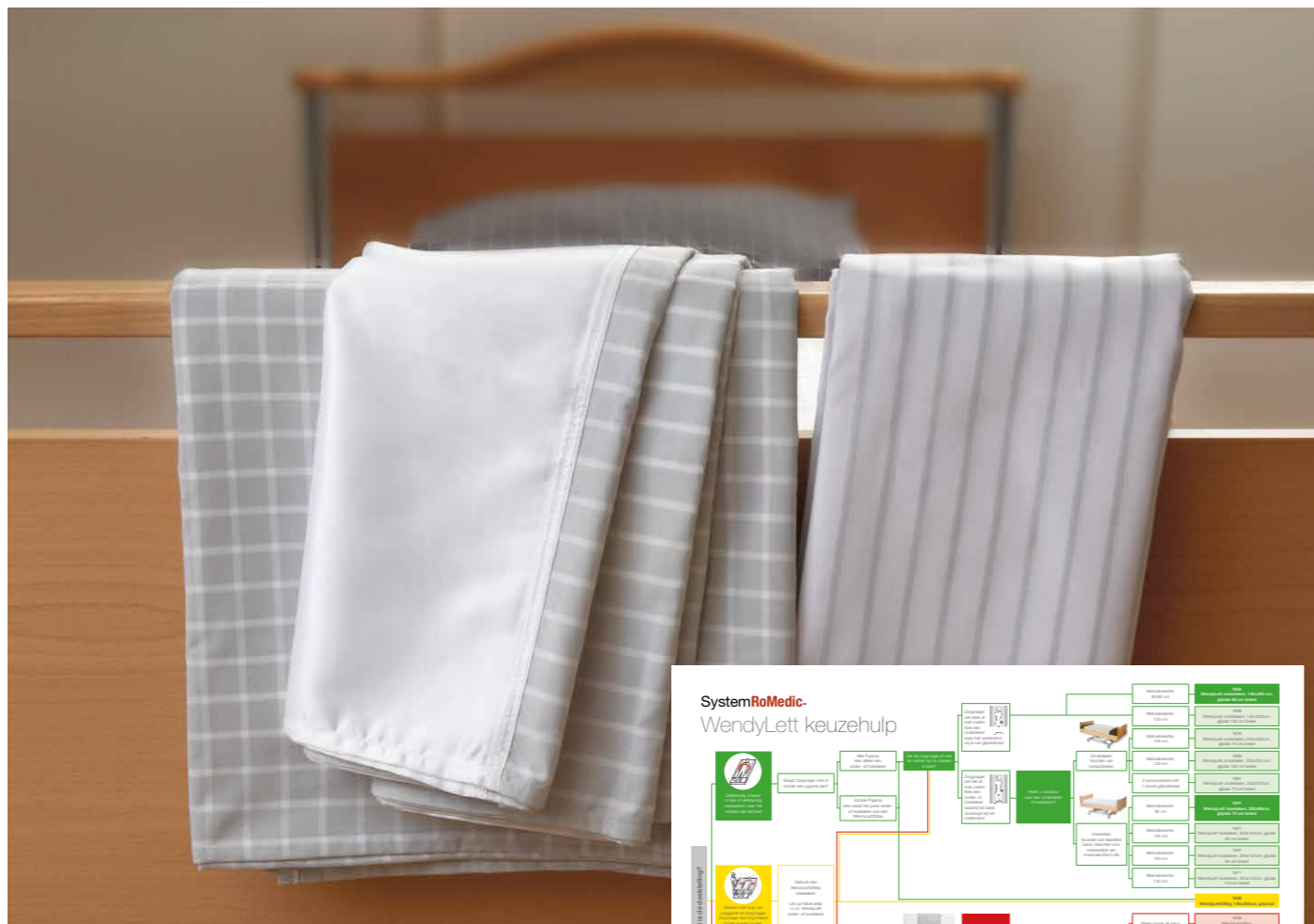

**Drie typen lakens**

WendyLett wordt als een normaal laken in het bed gelegd, met de gladde baan in het midden. Het gladde satijn maakt het draaien en zijwaarts verplaatsen van de zorgvrager mogelijk met minimale inspanning. De speciaal geweven katoenen randen fungeren als anti-glijmateriaal aan de zijkant van het laken. Voor zorgvragers die meer hulp nodig hebben, kan WendyLett gecombineerd worden met het WendyLett2Way treklaken of het WendyLett4Way trek- en glijlaken.

**WendyLett keuze hulp**

Handicare maakt het u graag gemakkelijker. Om eenvoudig het juiste WendyLett product of combinatie aan producten te vinden voor uw situatie, hebben wij de WendyLett Keuzehulp ontwikkeld. Met dit eenvoudige stappenplan komt u tot de passende WendyLett oplossing voor makkelijker draaien en positioneren in bed. Kijk voor de keuzehulp op [www.directhealthcaregroup.com/nl](http://www.directhealthcaregroup.com/nl).

**Comfortabel en functioneel materiaal**

De WendyLett lakens zijn gemaakt van polyester, katoen en satijn. Het witte satijn is glad waardoor het gemakkelijk glijdt. Bij de speciaal geweven katoenen stof is de streep de glijrichting. De lakens zijn sterk, slijtvast en kunnen worden gewassen tot 90° C. In de droger kunnen ze op lage temperatuur worden gedroogd.

**Zelf-instruerend en handig ontwerp**

De wit/grijze strepen en ruitjespatronen geven aan in welke richting het laken kan glijden en dus hoe het laken gebruikt kan worden. Het ontwerp maakt de lakens tevens gemakkelijk te herkennen in de was.

**Een hulpmiddel dat decubitus helpt voorkomen**

Met WendyLett kunnen kleine transfers zoals draaien en positioneren in bed uitgevoerd worden zonder wrijving op de huid van de zorgvrager. De lakens kunnen worden gebruikt bovenop een drukverlagend matras zonder afbreuk te doen aan de drukverlagende eigenschappen van het matras. Voor een maximaal comfort van de zorgvrager hebben de lakens alleen naden tussen de verschillende materialen.

Kijk voor meer informatie en video's met tips voor eindgebruikers op onze website [directhealthcaregroup.com/nl](http://directhealthcaregroup.com/nl).




WendyLett



**Onder- of hoeshlaken**

Voor gebruikers die moeite hebben met zelfstandig draaien in bed. Gebruik WendyLett in plaats van het gewone beddengoed.

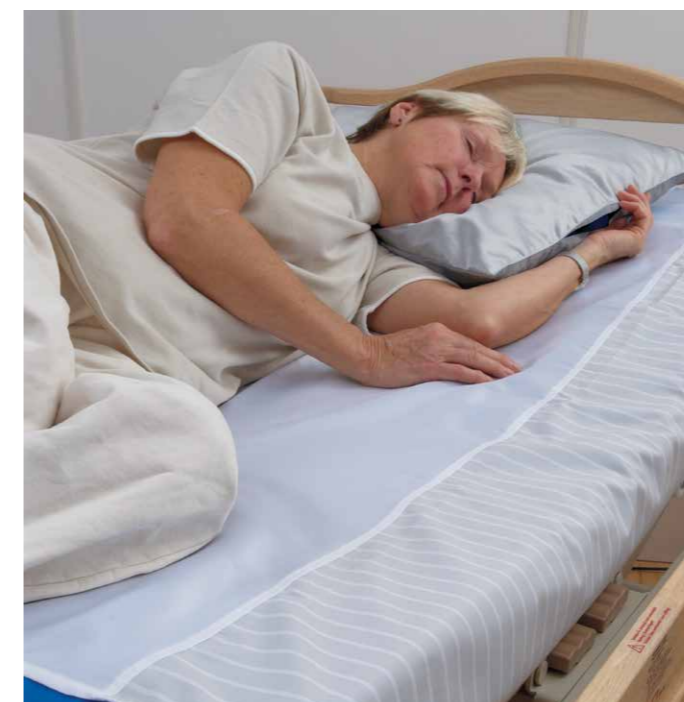

WendyLett2Way



**Steeklaken (i.c.m. WendyLett onder- of hoeshlaken)**

Voor zelfstandige gebruikers, maar ook voor gebruikers die hulp nodig hebben bij het draaien in bed, maar wel actief kunnen participeren.



WendyLett4Way



**Steeklaken (i.c.m. WendyLett onder- of hoeshlaken)**

Deze combinatie is bedoeld voor de zwaardere of passievere gebruiker die met hulp gedraaid of hogerop in bed gepositioneerd moet worden. Dit type steeklaken is aan de onderzijde ook voorzien van glijmateriaal, waardoor de gebruiker eenvoudig is te draaien en herpositioneren.







## WendyLett

### Glij-onderlaken


Dit onderlaken is geschikt voor mensen die moeite hebben met zelfstandig draaien in bed, maar wel het grootste deel van de dag uit bed zijn. Het onderlaken is gemaakt van glad satijn in het midden en heeft een veilige anti-sliprand aan beide zijden van het matras. Door te kiezen voor een onderlaken dat niet helemaal doorloopt tot aan het voeteneind, hebben mensen meer grip bij het voeteneinde waardoor zij hier beter kunnen afzetten met de voeten. Dit type onderlaken wordt op zijn plaats gehouden door de randen van het laken goed in te stoppen onder het matras, vandaar dat de WendyLett onderlakens breed zijn uitgevoerd. Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.

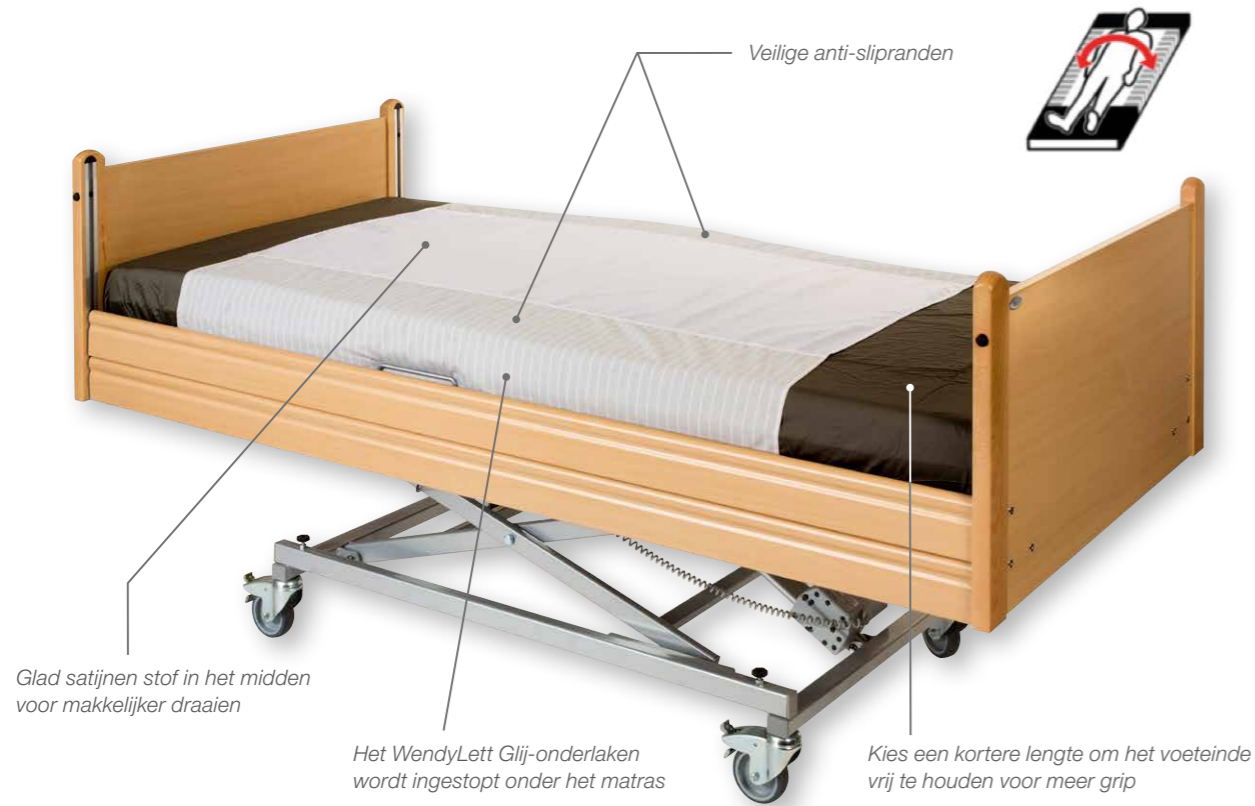


Diverse lengte maten:

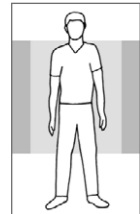

100 cm lang glijvlak:  
Voor verlaging wrijving onder heup of schouders (afhankelijk van waar WendyLett is geplaatst in bed)

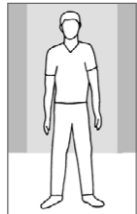

140 cm lang glijvlak:  
Voor verlaging wrijving onder heup en schouders (voeten behouden grip om af te kunnen zetten)

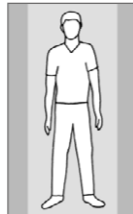

200 cm lang glijvlak:  
Voor verlaging wrijving onder schouders, heup en voeten

Artikel nr.	Productomschrijving (lengte x breedte)	T.b.v. bed breedte	Glijvlak breedte	Eenheid
1609	WendyLett, onderlaken, 100x200cm, wit, glijvlak 100 cm lang	80/90 cm	60 cm	stuk
1614	WendyLett, onderlaken, 140x200cm, wit, glijvlak 140 cm lang	80/90 cm	60 cm	stuk
1629	WendyLett onderlaken, 100x200 cm, grijs/wit, glijvlak 100 cm lang	80/90 cm	60 cm	stuk
1634	WendyLett onderlaken, 140x200 cm, grijs/wit, glijvlak 140 cm lang	80/90 cm	60 cm	stuk
1639	WendyLett onderlaken, 200x200 cm, grijs/wit, glijvlak 200 cm lang	105 cm	70 cm	stuk
1667	WendyLett onderlaken, 100x220 cm, grijs/wit, glijvlak 100 cm lang	120 cm	100 cm	stuk
1668	WendyLett onderlaken, 140x220 cm, grijs/wit, glijvlak 140 cm lang	120 cm	100 cm	stuk
1669	WendyLett onderlaken, 200x220 cm, grijs/wit, glijvlak 200 cm lang	120 cm	100 cm	stuk
1681	WendyLett onderlaken, 200x370 cm, grijs/wit, glijvlak 200 cm lang	2 pers.	70 cm	stuk

1681 betreft een hoelaken met 1 glijvlak van 70 cm breed en heeft extra stof aan beide zijde voor positioneren van glijvlak op een 2 persoonsmatras.


## WendyLett

### Glij-hoeslaken

Dit hoelaken is voorzien van een elastieke band en is geschikt voor mensen die moeite hebben met zelfstandig draaien in bed en een groter deel van de dag in bed liggen. Het is gemaakt van glad satijn in het midden en heeft een veilige anti-sliprand aan de zijkant van het matras. Het gladde satijn geeft nauwelijks wrijving waardoor er minder kans is op doorligplekken, ook op de hielen. Geschikt voor matrassen van maximaal 20 cm dik. Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.



voorzien van uitsparing voor slang luchtwisselmatras

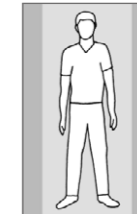

200 cm lang glijvlak: Voor verlaging wrijving onder schouders, heup en voeten

Artikel nr.	Productomschrijving (lengte x breedte)	T.b.v. bed breedte	Glijvlak breedte	Eenheid
1641	WendyLett hoelaken, 200x90 cm, grijs/wit	90 cm	70 cm	stuk
1651	WendyLett hoelaken, 200x105 cm, grijs/wit	105 cm	80 cm	stuk
1661	WendyLett hoelaken, 200x120 cm, grijs/wit	120 cm	95 cm	stuk
1671	WendyLett hoelaken, 200x140 cm, grijs/wit	140 cm	110 cm	stuk

1681 betreft een hoelaken met 1 glijvlak van 70 cm breed en heeft extra stof aan beide zijde voor positioneren van glijvlak op een 2 persoonsmatras.

## WendyLett2Way

### Steeklaken

Dit opleglaken is gemaakt van speciaal geweven katoen. Het glijdt alleen in de richting van de strepen. U kunt het gebruiken om met het hoofdeinde omhoog in bed te zitten zonder naar beneden te schuiven en om gemakkelijker te draaien in bed, eventueel met hulp. Het WendyLett2way opleglaken dient gebruikt te worden bovenop het WendyLett onderlaken of hoeslaken. Zorg ervoor dat u met uw schouder en/of uw heup op het steeklaken ligt. Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.



Artikel nr.	Productomschrijving (lengte x breedte)	Eenheid
1620	WendyLett2Way, trekzeil, 90x180 cm, wit	stuk
1631	WendyLett2Way, 100x200 cm, grijs/wit	stuk
1636	WendyLett2Way, 140x200 cm, grijs/wit	stuk

## WendyLean

### Glij-kussensloop

Deze kussensloop heeft een onderkant van glad satijn. Dit glijdt gemakkelijk over het WendyLett hoeslaken waardoor het hoofd en de schouders van de gebruiker mee omhoog schuiven als u uw hoofdeinde omhoog zet. Hierdoor wordt de gebruiker minder in elkaar gedrukt wat het comfort ten goede komt. Helpt tevens decubitus op de oorschelp voorkomen.




Artikel nr.	Productomschrijving (lengte x breedte)	Eenheid
1680	WendyLean, 50x60cm, grijs/wit kussensloop Maximaal gebruikersgewicht is 200 kg.	stuk

## WendyLett4Way

### Steeklaken

Dit opleglaken heeft een satijnen onderkant waardoor er nog minder wrijving tussen de lakens ontstaat en het positioneren en draaien van zwaardere en passieve cliënten nog makkelijker gaat. Daarnaast glijdt de WendyLett in alle richtingen, waardoor de zorgvrager zowel verticaal, als horizontaal geïmponeerd kan worden in bed. De bovenkant is gemaakt van speciaal geweven katoen wat comfortabel aanvoelt. Het WendyLett4way opleglaken dient gebruikt te worden bovenop het WendyLett onderlaken of hoeslaken. WendyLett4Way is tevens verkrijgbaar in uitvoeringen voorzien van handels en/of met incontinentiemateriaal, waarmee de zorgvrager ook gedraaid en geïmponeerd kan worden met behulp van een tillift.

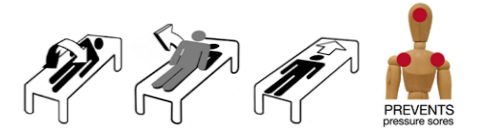

Artikel nr.	Productomschrijving (lengte x breedte)	Eenheid
1637	WendyLett4Way, 140x200 cm, grijs/wit Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.	stuk
1647	WendyLett4Way, 200x200 cm, grijs/wit Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.	stuk
1648	WendyLett4Way, inco, 75x200 cm, grijs/wit Voorzien van zeer absorberend materiaal. Het oppervlak voelt altijd droog aan, waardoor doorliggen (decubitus) wordt voorkomen. Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.	stuk
1649	WendyLett4Way, inco + handgrepen, 140x120 cm, grijs Kan gebruikt worden i.c.m. tillift om zorgvrager te draaien. Maximaal gebruikersgewicht is 200 kg.	stuk
1657	WendyLett4Way, handgrepen, 140x190 cm, grijs/wit Kan gebruikt worden i.c.m. tillift om zorgvrager te draaien. Maximaal gebruikersgewicht is 200 kg.	stuk
1652	WendyLett4Way, 140x260 cm, grijs/wit, Voorzien van extra stof voor zwaardere gebruikers. Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg.	stuk

## SystemRoMedic™

### **Al meer dan 30 jaar in dienst van de eenvoud**

Direct Healthcare Group's unieke en eenvoudige transferconcept is het meest uitgebreide en complete assortiment van slimme, gemakkelijk te gebruiken en veilige transferhulpmiddelen op de markt. Direct Healthcare Group is er voor alle soorten transfers van zorgvragers en voldoet aan alle eisen om een zorgvrager veilig te transfereren.

De filosofie achter het transferassortiment is gericht op het voorkomen en verminderen van beroeps gerelateerde problemen. Hierdoor worden zorgvragers in staat gesteld om een grotere mate van onafhankelijkheid en zelfredzaamheid te ervaren. Door een unieke combinatie van scholing, training en een compleet assortiment van efficiënte transferhulpmiddelen, biedt Direct Healthcare Group een aanmerkelijke verbetering van zowel werkomstandigheden als zorgkwaliteit. Daarnaast levert het assortiment een beduidende kostenbesparing op.

Al meer dan 30 jaar biedt Direct Healthcare Group eenvoudige oplossingen aan met fantastische resultaten en maakt daardoor het dagelijks leven geakklijker voor zowel zorgvragers als personeel in de zorgsector.

***Direct Healthcare Group biedt oplossingen en ondersteuning om de onafhankelijkheid van mindervaliden en oudere mensen te vergroten. Ook bieden de oplossingen een beter werkcomfort voor zorgverleners.***

# Direct Healthcare Group

Advancing Movement & Health®

### **Direct Healthcare Group BV**

Weteringweg 5-9  
2641 KM Pijnacker  
Tel: +31 (0)15 369 54 40  
[www.directhealthcaregroup.com/nl](http://www.directhealthcaregroup.com/nl)  
[info.nl@directhealthcaregroup.com](mailto:info.nl@directhealthcaregroup.com)