



RiseAtlas450M™ med QuickTrolleySystem, high humidity SystemRoMedic™

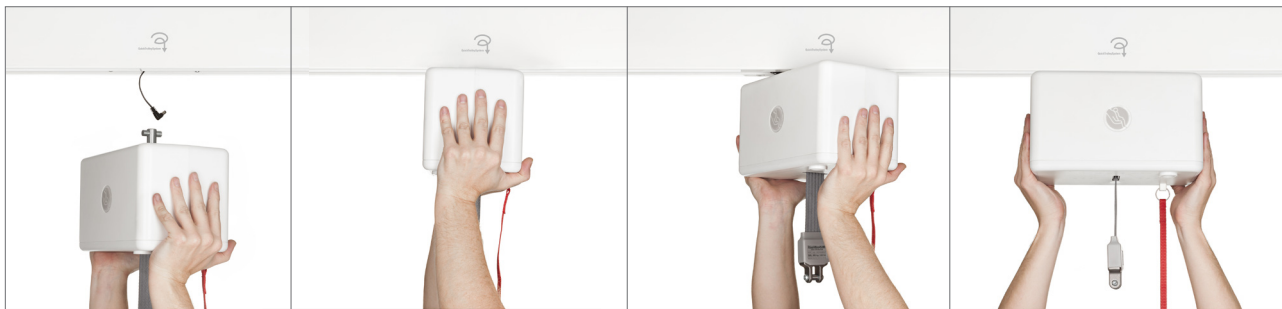

QuickTrolleySystem underlättar både vid montering och när taklyftsmotor ska tas ner från skenan. QuickTrolleySystem gör det också möjligt att flytta taklyftsmotor mellan olika skensystem i olika rum, vilket ger ökad nyttjandegrad och kostnadseffektivitet.

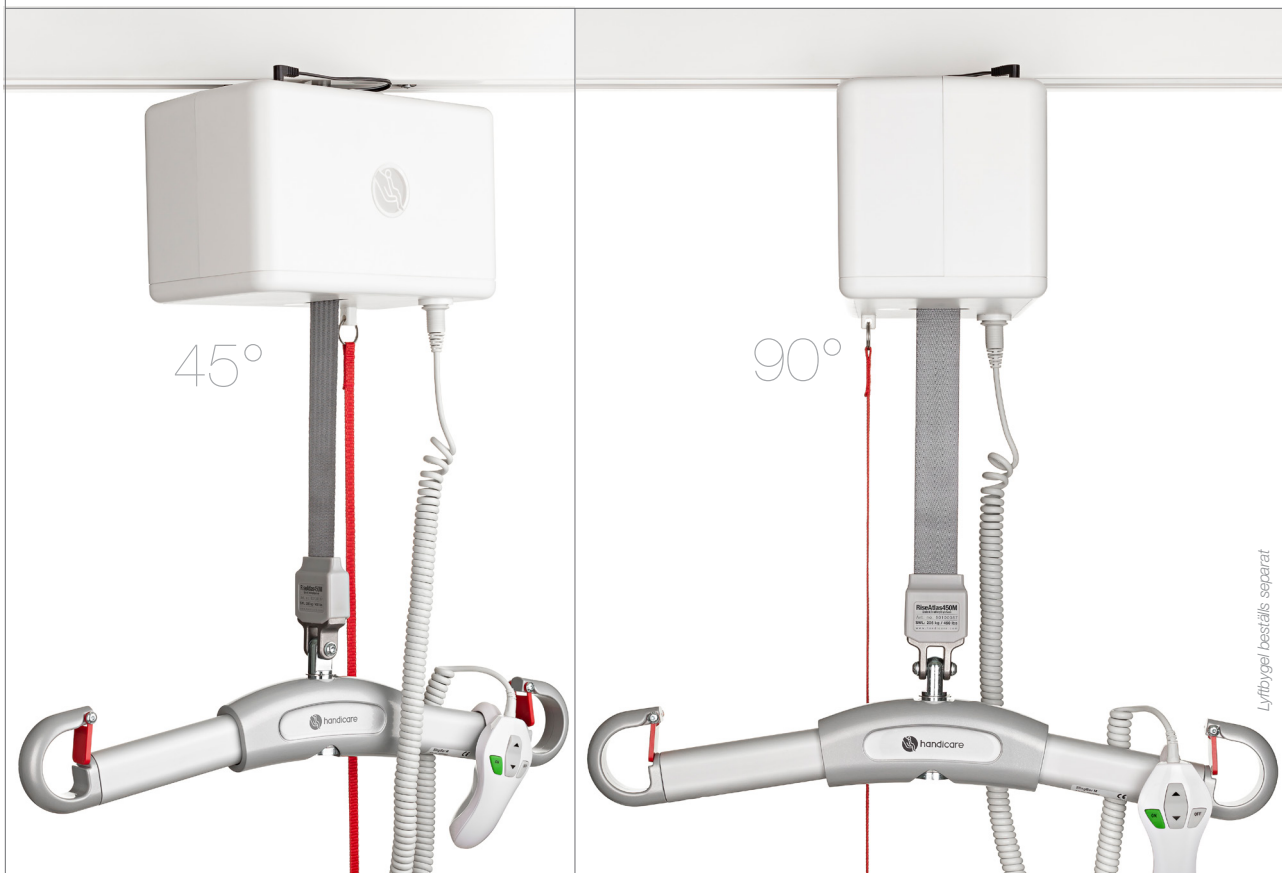

Med QuickTrolleySystem kan taklyftsmotor och lyftbandet enkelt ställas in i 45 eller 90 graders vinkel mot skenan för enkla och smidiga förflyttningar av brukare från ett rum till ett annat.

Lyftbygel beställs separat

Specialversion för fuktiga miljöer - för brukare som väger upp till 205 kg

- SWL 205 kg
- Manuell förflyttning längs skenan
- Specialversion för användning i miljöer där fukt och väta förekommer
- Modern, elegant och hygienisk design
- Ovanligt små yttermått och extremt låg vikt
- För alla skensystem, i alla miljöer och i alla typer av rum
- Erbjuder stort lyftområde och möjlighet till både mycket låga och mycket höga lyft
- För alla situationer, brukare och behov
- Handicares unika SystemRoMedic™ QuickTrolleySystem ger ökad flexibilitet, mångsidighet och bekvämlighet
- Mycket enkel att använda, ger säkra arbetsförhållanden och gör det möjligt för medhjälparen att vara nära brukaren under hela lyftproceduren
- Tystgående, mjuka rörelser samt mjuk start och stopp
- Ergonomisk och användarvänlig handkontroll
- På- och Av-knapparna på handkontrollen förebygger otillåten användning av taklyftsmotorns funktioner
- Manuell nödstopp
- Elektrisk och manuell nödsänkning
- Överbelastningsskydd

- Fallskydd
- Motor stannar automatiskt om lyftbandet inte belastas
- Nattbelysning
- Effektiv styrning av lyftbandet förhindrar oavsiktlig vridning av lyftbandet
- Miljövänligt NiMH-batteri med hög kapacitet
- Unik laddningslösning med en åkvagn för två alternativa laddningsmetoder (skenladdning/ändladdning)
- Diskret informationspanel
- Servicevänlig
- Diagnostik; en speciell mjukvara som finns som tillbehör gör det möjligt att, med hjälp av en PC, få tillgång till ytterligare information om taklyftsmotorn
- Många tillbehör för säkra, enkla och individuellt anpassade lyft av brukare i de allra flesta förflyttningssituationer

RiseAtlas450M™ med QuickTrolleySystem, high humidity

För professionella och mycket funktionella vårdmiljöer med en harmonisk och mänsklig atmosfär.



Ergonomisk och användarvänlig handkontroll



PRODUKTSPECIFIKATION

Art. nr. Produkt

50100051 ___ RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, high humidity

RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, high humidity levereras utrustad med handkontroll och laddare. Lyftbygel beställs separat.

TILLBEHÖR

Art. nr.	Produkt	Beskrivning
70200046	QuickTrolley450	Snabbkopplad åkvagn
70200051	QuickTrolley450 70 mm	Snabbkopplad åkvagn, sänker taklyftsmotorn med 70 mm, ombyggnadssats
70200075	QuickTrolleyUniversal 360	Snabbkopplad åkvagn, vridbar 360 grader
70200048	Software for diagnostics	Mjukvara för diagnostik
50400066	Cover to charger	Kåpa för laddare, för alla modeller och specialversioner av RiseAtlas
50400048	Parking Placard	Parkeringsstavla för bekväm förvaring av lyftbyglar, manualer och lyftselar
50400332	Parking Placard BariBar	Parkeringsstavla för bekväm förvaring av BariBar och lyftselar
70200071	SlingBar XS	Lyftbygel, 250 mm
70200001	SlingBar S	Lyftbygel, 350 mm
70200002	SlingBar M	Lyftbygel, 450 mm
70200003	SlingBar L	Lyftbygel, 600 mm
70200042	SlingBarSpreader M	Sidobyglar för SlingBar XS/S/M/L
70200072	BariBar	Fyrpunktsbygel för taklyftsmotorer, SWL 454 kg
70200017	Sling bar RFL X4	Fyrpunktsbygel, SWL 300 kg
70200053-		
70200058	Lift strap extension	Förlängningsband, 6 längder: 370-970 mm

TEKNISK INFORMATION

Safe working load: _____ 205 kg
Material, chassi: _____ Aluminium
Material, kåpa: _____ Flamsäker ABS-plast
Mått, längd x bredd x höjd: _____ 266 x 151 x 156 mm
Vikt: _____ 7,3 kg
Förflyttning längs skenan: _____ Manuell
Handkontroll: _____ Elektrisk, 4 knappar
Lyftintervall: _____ 2400 mm
Lyft hastighet, utan belastning: _____ 50 mm per sek
Lyft hastighet, med belastning: _____ 39 mm per sek
Ljudnivå, med belastning: _____ 55 dB(A)
Effektiv styrning av lyftband: _____ Standard
Nödsänkning: _____ Elektrisk och manuell
Nödstop: _____ Manuell
Nattbelysning: _____ Standard
Batteri: _____ NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh
Handkontrollsladdning: _____ Nej
Skenladdning: _____ Valfri, standard
Ändladdning: _____ Valfri, standard
Skyddsklass, lyftmotor: _____ IPX4
Skyddsklass, handkontroll: _____ IPX4



CE RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem, high humidity uppfyller kraven för klass 1-produkter i det Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

Besök www.handicare.se för mer information.

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.



handicare

Handicare AB
Maskinvägen 17,
SE 972 54 Luleå, SWEDEN
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.com
info@handicare.se