



RiseAtlas450M™ med QuickTrolleySystem

SystemRoMedic™

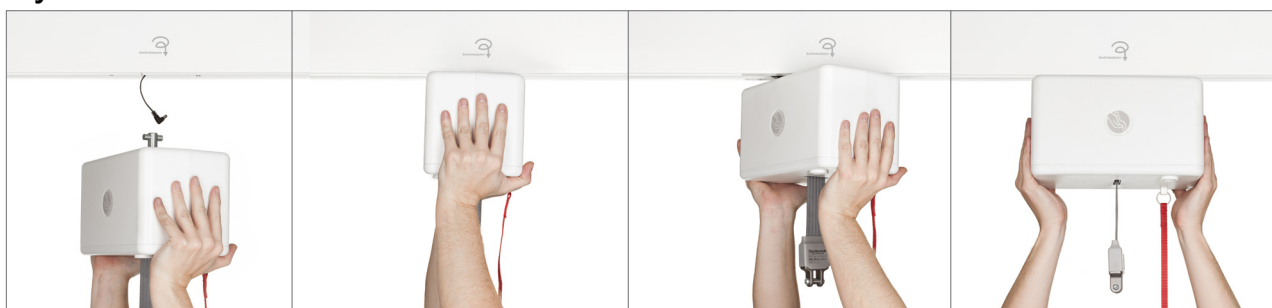

QuickTrolleySystem underlättar både vid montering och när taklyftsmotorn ska tas ner från skenan. QuickTrolleySystem gör det också möjligt att flytta taklyftsmotorn mellan olika skensystem i olika rum, vilket ger ökad nyttjandegrad och kostnadseffektivitet.

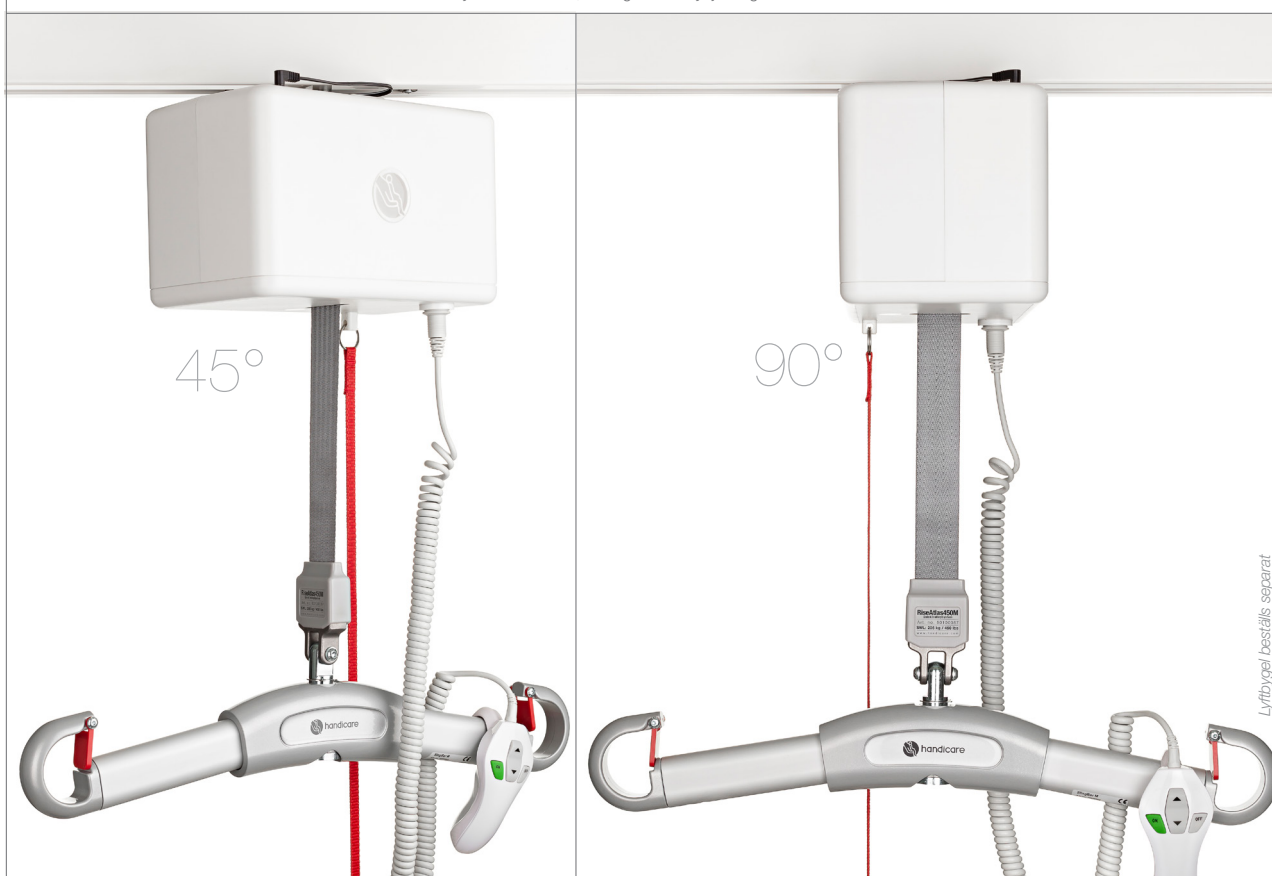

Med QuickTrolleySystem kan taklyftsmotorn och lyftbandet enkelt ställas in i 45 eller 90 graders vinkel mot skenan för enkla och smidiga förflyttningar av brukare från ett rum till ett annat.

Lyftbygel beställs separat

Obegränsade lyftlösningar - för brukare som väger upp till 205 kg

- SWL 205 kg
- Manuell förflyttning längs skenan
- Modern, elegant och hygienisk design
- Ovanligt små ytermått och extremt låg vikt
- För alla skensystem, i alla miljöer och i alla typer av rum
- Erbjuder stort lyftområde och möjlighet till både mycket låga och mycket höga lyft
- För alla situationer, brukare och behov
- Handicaresunika SystemRoMedic™ QuickTrolleySystem ger ökad flexibilitet, mångsidighet och bekvämlighet
- Mycket enkel att använda, ger säkra arbetsförhållanden och gör det möjligt för medhjälparen att vara nära brukaren under hela lyftproceduren
- Tystgående, mjuka rörelser samt mjuk start och stopp
- Ergonomisk och användarvänlig handkontroll
- På- och Av-knapparna på handkontrollen förebygger otillåten användning av taklyftsmotorns funktioner
- Manuell nödstopp
- Elektrisk och manuell nödsänkning
- Överbelastningsskydd
- Fallskydd
- Motorn stannar automatiskt om lyftbandet inte belastas
- Nattbelysning
- Effektiv styrning av lyftbandet förhindrar oavsiktlig vridning av lyftbandet
- Miljövänligt NiMH-batteri med hög kapacitet
- Enkel och bekväm handkontrollsladdning
- En unik laddningslösning med en åkvagn för två alternativa laddningsmetoder (skenladdning/ändladdning) finns som tillbehör
- Diskret informationspanel
- Servicevänlig
- Diagnostik; en speciell mjukvara som finns som tillbehör gör det möjligt att, med hjälp av en PC, få tillgång till ytterligare information om taklyftsmotorn
- Många tillbehör för säkra, enkla och individuellt anpassade lyft av brukare i de allra flesta förflyttningssituationer

RiseAtlas450M™ med QuickTrolleySystem

För professionella och mycket funktionella vårdmiljöer med en harmonisk och mänsklig atmosfär.

Enkel och bekväm handkontrollsladdning är standard

Laddningsstationen för taklyftsmotorn är integrerad i en liten, diskret hållare och parkeringsplats för handkontrollen. Laddningsstationen monteras enkelt på väggen, i nära anslutning till taklyftsmotorns parkeringsplats.



PRODUKTSPECIFIKATION

Art. nr. **Produkt**
50100057 ___ RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem

RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem levereras utrustad med handkontroll och laddare. Lyftbygel beställs separat.

TILLBEHÖR

Art. nr.	Produkt	Beskrivning
70200046	QuickTrolley450	Snabbkopplad åkvagn
70200051	QuickTrolley450 70 mm	Snabbkopplad åkvagn, sänker taklyftsmotorn med 70 mm, ombyggnadssats
70200075	QuickTrolleyUniversal 360	Snabbkopplad åkvagn, vridbar 360 grader
70200062	In-rail/end point charging	Skenladdning/ändladdning
70200065	IR remote controlling	För trådlös manövrering
70200047	9V battery and cable	Batteri och kabel, för nödsänkning
70200048	Software for diagnostics	Mjukvara för diagnostik
50400066	Cover to charger	Kåpa för laddare, för alla modeller och specialversioner av RiseAtlas
50400048	Parking Placard	Parkeringsstavla för bekväm förvaring av lyftbyglar, manualer och lyftselar
50400332	Parking Placard BariBar	Parkeringsstavla för bekväm förvaring av BariBar och lyftselar
70200071	SlingBar XS	Lyftbygel, 250 mm
70200001	SlingBar S	Lyftbygel, 350 mm
70200002	SlingBar M	Lyftbygel, 450 mm
70200003	SlingBar L	Lyftbygel, 600 mm
70200042	SlingBarSpreader M	Sidobyglar för SlingBar XS/S/M/L
70200072	BariBar	Fyrpunktsbygel för taklyftsmotorer, SWL 454 kg
70200017	Sling bar RFL X4	Fyrpunktsbygel, SWL 300 kg
70200053-		
70200058	Lift strap extension	Förlängningsband, 6 längder: 370-970 mm

TEKNISK INFORMATION

Safe working load:	205 kg
Material, chassi:	Aluminium
Material, kåpa:	Flamsäker ABS-plast
Mått, längd x bredd x höjd:	266 x 151 x 156 mm
Vikt:	7,2 kg
Förflyttning längs skenan:	Manuell
Handkontroll:	Elektrisk, 4 knappar
Lyftintervall:	2400 mm
Lyfthastighet, utan belastning:	50 mm per sek
Lyfthastighet, med belastning:	39 mm per sek
Ljudnivå, med belastning:	55 dB(A)
Effektiv styrning av lyftband:	Standard
Nödsänkning:	Elektrisk och manuell
Nödstop:	Manuell
Nattbelysning:	Standard
Batteri:	NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh
Handkontrollsladdning:	Standard
Skenladdning:	Valfri, tillbehör
Ändladdning:	Valfri, tillbehör
Skyddsklass, lyftmotor:	IP20
Skyddsklass, handkontroll:	IPX4



RiseAtlas450M, med QuickTrolleySystem uppfyller kraven för klass 1-produkter i det Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

Besök www.handicare.se för mer information.



handicare

Handicare AB
Veddestavägen 15,
Box 640, 175 27 Järfälla
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.se
info@handicare.se

SystemPoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.