


RiseAtlas450T™

SystemRoMedic™

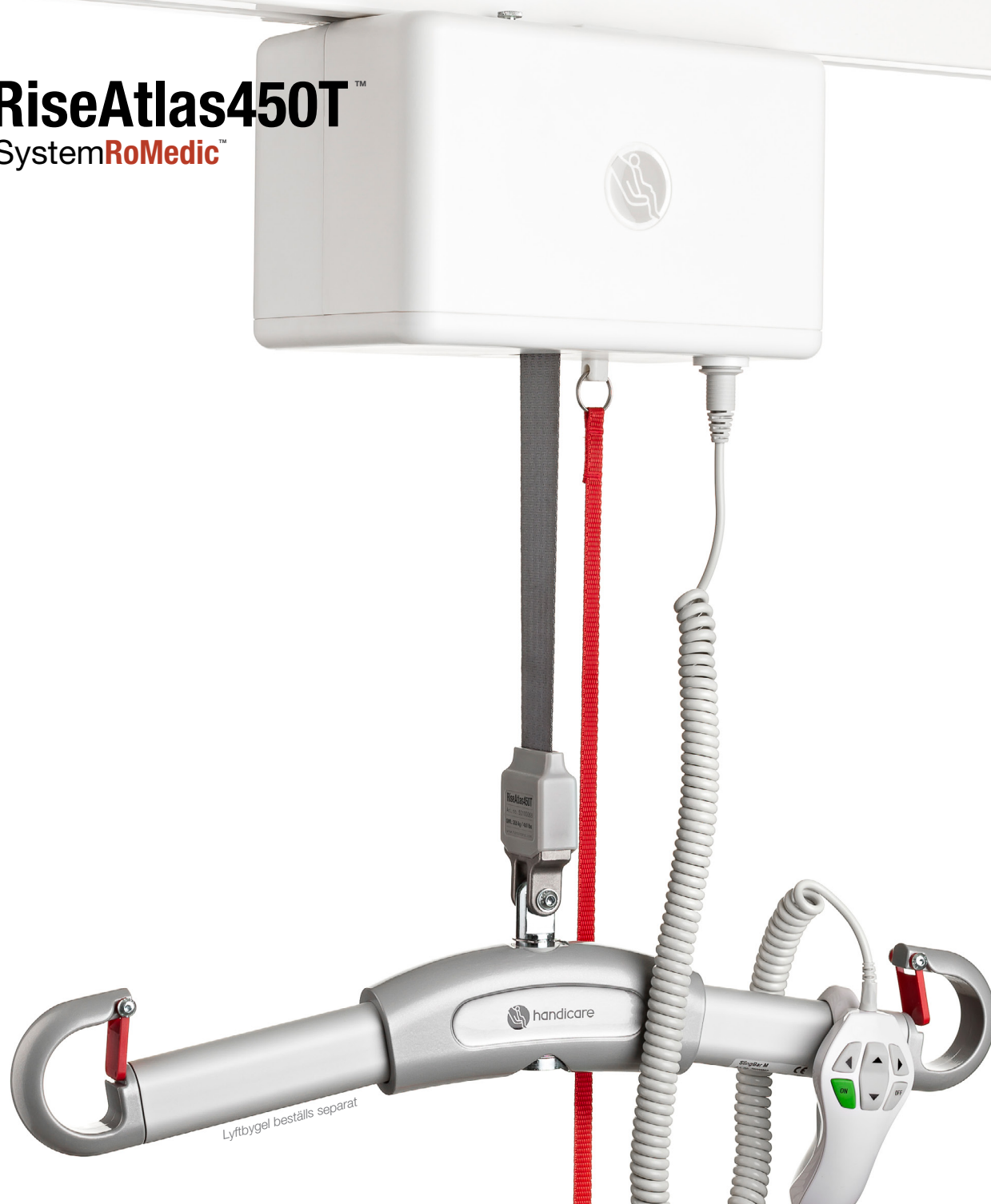

Obegränsade lyftlösningar - för brukare som väger upp till 205 kg

- SWL 205 kg
- Åkrmotor för motor driven förflyttning längs skenan
- Modern, elegant och hygienisk design
- Ovanligt små ytermått och extremt låg vikt
- För alla skensystem, i alla miljöer och i alla typer av rum
- Erbjuder stort lyftområde och möjlighet till både mycket låga och mycket höga lyft
- För alla situationer, brukare och behov
- Mycket enkel att använda, ger säkra arbetsförhållanden och gör det möjligt för medhjälparen att vara nära brukaren under hela lyftproceduren
- Tystgående, mjuka rörelser samt mjuk start och stopp
- Ergonomisk och användarvänlig handkontroll
- På- och Av-knapparna på handkontrollen förebygger otilåtten användning av taklyftsmotorns funktioner
- Manuell nödstopp
- Elektrisk och manuell nödsänkning
- Överbelastningsskydd
- Fallskydd
- Motorn stannar automatiskt om lyftbandet inte belastas
- Nattbelysning
- Effektiv styrning av lyftbandet förhindrar oavsiktlig vridning av lyftbandet
- Miljövänligt NiMH-batteri med hög kapacitet
- Enkel och bekväm handkontrollsladdning
- En unik laddningslösning med en åkqvagn för två alternativa laddningsmetoder (skenladdning/ändladdning) finns som tillbehör
- Diskret informationspanel
- Servicevänlig
- Diagnostik; en speciell mjukvara som finns som tillbehör gör det möjligt att, med hjälp av en PC, få tillgång till ytterligare information om taklyftsmotorn
- Många tillbehör för säkra, enkla och individuellt anpassade lyft av brukare i de allra flesta förflyttningssituationer

RiseAtlas450T™

För professionella och mycket funktionella vårdmiljöer med en harmonisk och mänsklig atmosfär.



Enkel och bekväm handkontrollsladdning är standard

Laddningsstationen för taklyftsmotorn är integrerad i en liten, diskret hållare och parkeringsplats för handkontrollen. Laddningsstationen monteras enkelt på väggen, i nära anslutning till taklyftsmotorns parkeringsplats.



PRODUKTSPECIFIKATION

Art. nr. **Produkt**
50100058 ___ RiseAtlas450T

RiseAtlas450T levereras utrustad med handkontroll och laddare.
Lyftbygel beställs separat.

TILLBEHÖR

Art. nr.	Produkt	Beskrivning
70200062	In-rail/end point charging	Skenladdning/ändladdning
70200047	9V battery and cable	Batteri och kabel, för nödsänkning
70200048	Software for diagnostics	Mjukvara för diagnostik
50400066	Cover to charger	Kåpa för laddare, för alla modeller och specialversioner av RiseAtlas
50400048	Parking Placard	Parkeringstavla för bekväm förvaring av lyftbyglar, manualer och lyftselar
50400332	Parking Placard BariBar	Parkeringstavla för bekväm förvaring av BariBar och lyftselar
70200071	SlingBar XS	Lyftbygel, 250 mm
70200001	SlingBar S	Lyftbygel, 350 mm
70200002	SlingBar M	Lyftbygel, 450 mm
70200003	SlingBar L	Lyftbygel, 600 mm
70200042	SlingBarSpreader M	Sidobyglar för SlingBar XS/S/M/L
70200072	BariBar	Fyrpunktsbygel för taklyftsmotorer, SWL 454 kg
70200017	Sling bar RFL X4	Fyrpunktsbygel, SWL 300 kg
70200053-		
70200058	Lift strap extension	Förlängningsband, 6 längder: 370-970 mm

TEKNISK INFORMATION

Safe working load: _____ 205 kg
Material, chassi: _____ Aluminium
Material, kåpa: _____ Flamsäker ABS-plast
Mått, längd x bredd x höjd: _____ 266 x 151 x 156 mm
Vikt: _____ 7,5 kg
Förflyttning längs skenan: _____ Åkmotor
Hastighet vid förflyttning längs skenan, utan belastning: _____ 140 mm per sek
Hastighet vid förflyttning längs skenan, med belastning: _____ 120 mm per sek
Handkontroll: _____ Elektrisk, 6 knappar
Lyftintervall: _____ 2400 mm
Lyfthastighet, utan belastning: _____ 50 mm per sek
Lyfthastighet, med belastning: _____ 39 mm per sek
Ljudnivå, med belastning _____ 55 dB(A)
Effektiv styrning av lyftband: _____ Standard
Nödsänkning: _____ Elektrisk och manuell
Nödstop: _____ Manuell
Nattbelysning: _____ Standard
Batteri: _____ NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh
Handkontrollsladdning: _____ Standard
Skenladdning: _____ Valfri, tillbehör
Ändladdning: _____ Valfri, tillbehör
Skyddsklass, lyftmotor: _____ IP20
Skyddsklass, handkontroll: _____ IPX4



CE RiseAtlas450T uppfyller kraven för klass 1-produkter i det Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.

Besök www.handicare.se för mer information.

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

Överflyttning, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

Stöd, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.



handicare

Handicare AB
Maskinvägen 17,
SE 972 54 Luleå, SWEDEN
Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.handicare.com
info@handicare.se