


RiseAtlas625T™

SystemRoMedic™

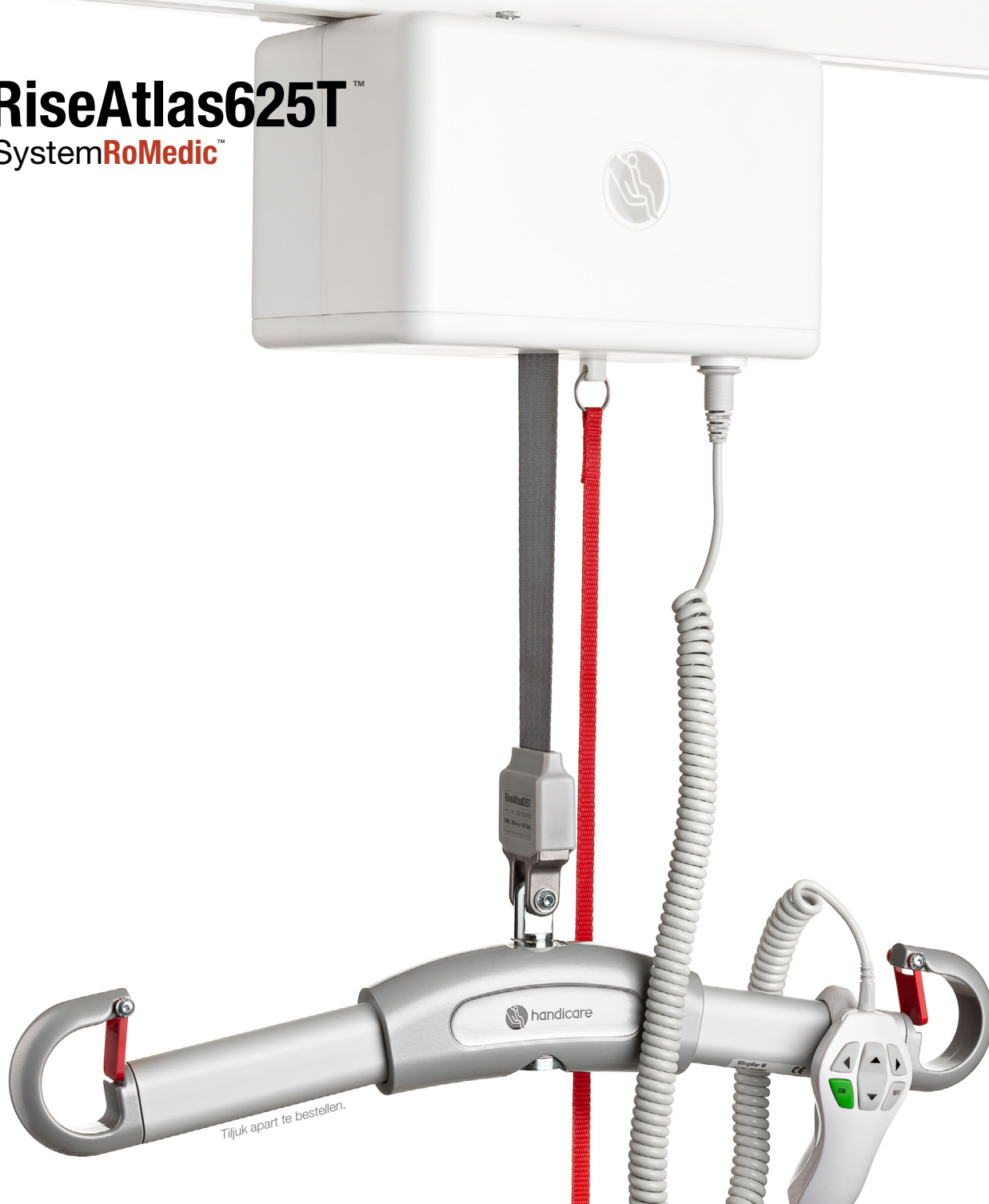

Onbeperkte tiloplossingen voor gebruikers met een gewicht van maximaal 285 kg

- SWL 285 kg
- Verplaatsingsmotor voor gemotoriseerde verplaatsing langs de rails
- Modern, elegant en hygiënisch design
- Ongebruikelijk kleine afmetingen en een ontzettend laag gewicht
- Voor alle railsystemen, in alle omgevingen en in alle kamertypes
- Groot tilbereik biedt de mogelijkheid voor zowel zeer laag als zeer hoog tillen
- Voor alle situaties, gebruikers en behoeften
- Zeer eenvoudig te gebruiken, zorgt voor veilige arbeidsomstandigheden en stelt de zorgverlener in staat om tijdens het hele tilproces in de buurt van de gebruiker te blijven
- Stille, zachte bewegingen en zachte start en stop
- Ergonomische en gebruiksvriendelijke handbediening
- De Aan- en Uitknoppen op de handbediening voorkomen onbedoeld gebruik van de functies van de plafondliftmotor
- Handmatige noodstop
- Elektrische en handmatige nooddaalfunctie
- Overbelastingsbescherming
- Valbescherming
- De motor stopt automatisch als de tilriem niet belast is
- Nachtverlichting
- Effectieve geleiding van de tilriem voorkomt onbedoeld draaien van de tilriem
- Milieuvriendelijke NiMH-batterij met hoge capaciteit
- Eenvoudig en handig opladen via handbediening
- Een unieke laadoplossing met een loopwagen voor twee alternatieve oplaadmethode (via de rails/het uiteinde) is beschikbaar als extra optie
- Discreet informatiepaneel
- Onderhoudsvriendelijk
- Diagnostiek: speciale software is beschikbaar als extra optie waarmee u met behulp van een pc toegang kunt krijgen tot uitgebreide informatie over de plafondliftmotor
- Veel accessoires voor veilig, eenvoudig en individueel aangepast tillen van gebruikers in de meeste verplaatsingssituaties

RiseAtlas625T™

Voor professionele en zeer functionele zorgomgevingen met een harmonische en menselijke sfeer.



Standaard eenvoudig en handig opladen via handbediening

Het laadstation voor de motor van de plafondlift is geïntegreerd in een kleine, discrete houder voor de handbediening. Het laadstation wordt aan de wand bevestigd, in de buurt van de parkeerplaats van de plafondliftmotor.



PRODUCTSPECIFICATIE

Art.nr. Product
50100060 RiseAtlas625T

RiseAtlas625T wordt geleverd met handbediening en oplader.
Tijlук apart te bestellen.

ACCESSOIRES

Art.nr.	Product	Beschrijving
70200062	In-rail/end point charging	Opladen via rail/opladen via uiteinde
70200047	9V battery and cable	Batterij en kabel, voor nooddaalfunctie
70200048	Software for diagnostics	Software voor diagnostiek
50400066	Cover to charger	Behuizing voor oplader, voor alle modellen en speciale versies van RiseAtlas
50400048	Parking Placard	Parkeerbord, voor het gemakkelijk bewaren van tijlукken, handleidingen en tilbanden.
50400332	Parking Placard BariBar	Voor het gemakkelijk opslaan van BariBar en tilbanden
70200071	SlingBar XS	Tijlук, 250 mm
70200001	SlingBar S	Tijlук, 350 mm
70200002	SlingBar M	Tijlук, 450 mm
70200003	SlingBar L	Tijlук, 600 mm
70200042	SlingBarSpreader M	Zijbeugels voor SlingBar XS/S/M/L
70200072	BariBar	Vierpunts tijlук voor plafondliften, max. belasting 454 kg
70200017	Sling bar RFL X4	Vierpunts tijlук, max. belasting 300 kg
70200053-		
70200058	Lift strap extension	Verlengbanden, 6 lengtes: 370-970 mm

TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale belasting: _____ 285 kg
Materiaal, chassis: _____ Aluminium
Materiaal, behuizing: _____ Vlambestendig ABS-plastic
Afmetingen, lengte x breedte x hoogte: _____ 266 x 151 x 156 mm
Verplaatsing langs rail: _____ Verplaatsingsmotor
Förflyttning längs skenan: _____ Åkmotor
Snelheid bij verplaatsing langs de rail, zonder belasting: _____ 140 mm per sek
Snelheid bij verplaatsing langs de rail, met belasting: _____ 120 mm per sek
Handbediening: _____ Elektrisch, 6 knoppen
Tilinterval: _____ 2400 mm
Tilnelheid, zonder belasting: _____ 50 mm per sek
Tilnelheid, met belasting: _____ 39 mm per sek
Geluidsniveau, met belasting: _____ 55 dB(A)
Effectieve geleiding van tilriem: _____ Standaard
Nooddaalfunctie: _____ Elektrisch en handmatig
Noodstop: _____ Handmatig
Nachtverlichting: _____ Standaard
Batterij: _____ NIMH 24V 3,2 Ah/768Wh
Opladen via handbediening: _____ Standaard
Opladen via rail: _____ Naar keuze, accessoire
Opladen via uiteinde: _____ Naar keuze, accessoire
Beschermingsklasse, liftmotor: _____ IP20
Beschermingsklasse, handbediening: _____ IPX4



RiseAtlas625T voldoet aan de vereisten voor klasse 1-producten van de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42/EEG.

Ga naar www.handicare.com voor meer informatie.



handicare

Handicare
Weteringweg 5-9
2641 KM Pijnacker
Tel: 015 - 369 54 40
Fax: 015 - 369 71 64
www.handicare.com
info.LS@handicare.com

SystemRoMedic™ is een totaaloplossing voor eenvoudige transfers. Het concept bevat producten voor vier categorieën transfers die voorzien in de meeste behoeften en transfersituaties.

Transfers, tussen twee locaties verplaatsen. **Positioneren**, op dezelfde locatie herpositioneren.

Begeleiden, bij het mobiliseren. **Tillen**, manueel en mechanisch.