


# RiseAtlas625T™

SystemRoMedic™

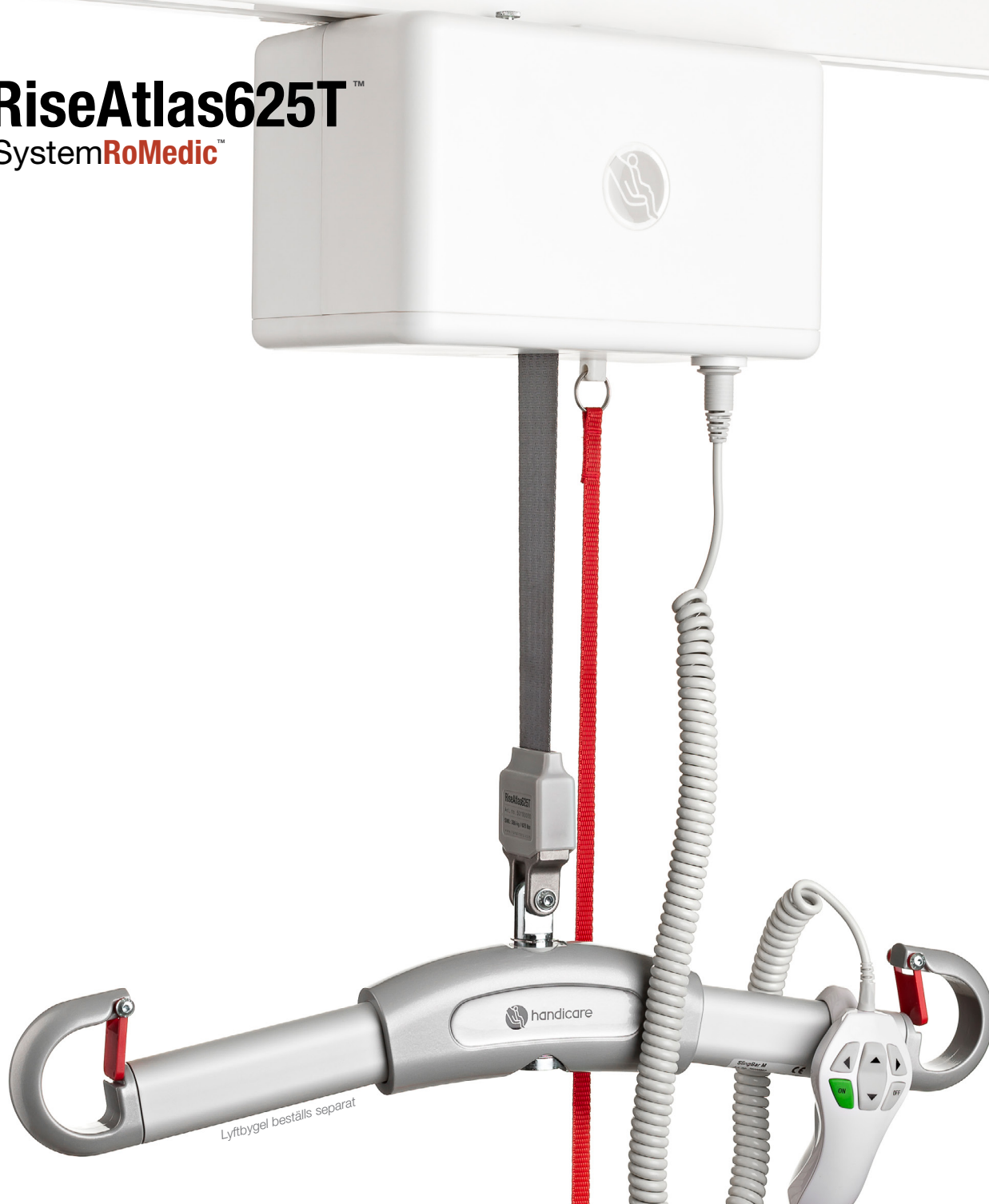

## Obegränsade lyftlösningar - för brukare som väger upp till 285 kg

- SWL 285 kg
- Åkmotor för motordriven förflyttning längs skenan
- Modern, elegant och hygienisk design
- Ovanligt små yttermått och extremt låg vikt
- För alla skensystem, i alla miljöer och i alla typer av rum
- Erbjuder stort lyftområde och möjlighet till både mycket låga och mycket höga lyft
- För alla situationer, brukare och behov
- Mycket enkel att använda, ger säkra arbetsförhållanden och gör det möjligt för medhjälparen att vara nära brukaren under hela lyftproceduren
- Tystgående, mjuka rörelser samt mjuk start och stopp
- Ergonomisk och användarvänlig handkontroll
- På- och Av-knapparna på handkontrollen förebygger otillåten användning av taklyftsmotorns funktioner
- Manuell nödstopp
- Elektrisk och manuell nödsänkning
- Överbelastningsskydd
- Fallskydd
- Motorn stannar automatiskt om lyftbandet inte belastas
- Nattbelysning
- Effektiv styrning av lyftbandet förhindrar oavsiktlig vridning av lyftbandet
- Miljövänligt NiMH-batteri med hög kapacitet
- Enkel och bekväm handkontrollsladdning
- En unik laddningslösning med en åkvagn för två alternativa laddningsmetoder (skenladdning/ändladdning) finns som tillbehör
- Diskret informationspanel
- Servicevänlig
- Diagnostik; en speciell mjukvara som finns som tillbehör gör det möjligt att, med hjälp av en PC, få tillgång till ytterligare information om taklyftsmotorn
- Många tillbehör för säkra, enkla och individuellt anpassade lyft av brukare i de allra flesta förflyttningssituationer

# RiseAtlas625T™

För professionella och mycket funktionella vårdmiljöer med en harmonisk och mänsklig atmosfär.



### Enkel och bekväm handkontrollsladdning är standard

Laddningsstationen för taklyftsmotor är integrerad i en liten, diskret hållare och parkeringsplats för handkontrollen. Laddningsstationen monteras enkelt på väggen, i nära anslutning till taklyftsmotorns parkeringsplats..



## PRODUKTSPECIFIKATION

**Art. nr.**      **Produkt**  
50100060 \_\_\_ RiseAtlas625T

RiseAtlas625T levereras utrustad med handkontroll och laddare.  
Lyftbygel beställs separat.

## TILLBEHÖR

Art. nr.	Produkt	Beskrivning
70200062	In-rail/end point charging	Skenladdning/ändladdning
70200047	9V battery and cable	Batteri och kabel, för nödsänkning
70200048	Software for diagnostics	Mjukvara för diagnostik
50400066	Cover to charger	Kåpa för laddare, för alla modeller och specialversioner av RiseAtlas
50400048	Parking Placard	Parkeringsstavla för bekväm förvaring av lyftbyglar, manualer och lyftselar
50400332	Parking Placard BariBar	Parkeringsstavla för bekväm förvaring av BariBar och lyftselar
70200071	SlingBar XS	Lyftbygel, 250 mm
70200001	SlingBar S	Lyftbygel, 350 mm
70200002	SlingBar M	Lyftbygel, 450 mm
70200003	SlingBar L	Lyftbygel, 600 mm
70200042	SlingBarSpreader M	Sidobyglar för SlingBar XS/S/M/L
70200072	BariBar	Fyrpunktsbygel för taklyftsmotorer, SWL 454 kg
70200017	Sling bar RFL X4	Fyrpunktsbygel, SWL 300 kg
70200053-		
70200058	Lift strap extension	Förlängningsband, 6 längder: 370-970 mm

Besök [www.handicare.se](http://www.handicare.se) för mer information.

## TEKNISK INFORMATION

Safe working load: \_\_\_\_\_ 285 kg  
Material, chassi: \_\_\_\_\_ Aluminium  
Material, kåpa: \_\_\_\_\_ Flamsäker ABS-plast  
Mått, längd x bredd x höjd: \_\_\_\_\_ 266 x 151 x 156 mm  
Vikt: \_\_\_\_\_ 7,5 kg  
Förflyttning längs skenan: \_\_\_\_\_ Åkmotor  
Hastighet vid förflyttning längs skenan, utan belastning: \_\_\_\_\_ 140 mm per sek  
Hastighet vid förflyttning längs skenan, med belastning: \_\_\_\_\_ 120 mm per sek  
Handkontroll: \_\_\_\_\_ Elektrisk, 6 knappar  
Lyftintervall: \_\_\_\_\_ 2400 mm  
Lyfthastighet, utan belastning: \_\_\_\_\_ 50 mm per sek  
Lyfthastighet, med belastning: \_\_\_\_\_ 39 mm per sek  
Ljudnivå, med belastning: \_\_\_\_\_ 55 dB(A)  
Effektiv styrning av lyftband: \_\_\_\_\_ Standard  
Nödsänkning: \_\_\_\_\_ Elektrisk och manuell  
Nödstop: \_\_\_\_\_ Manuell  
Nattbelysning: \_\_\_\_\_ Standard  
Batteri: \_\_\_\_\_ NiMH 24V 3,2 Ah/768Wh  
Handkontrollsladdning: \_\_\_\_\_ Standard  
Skenladdning: \_\_\_\_\_ Valfri, tillbehör  
Ändladdning: \_\_\_\_\_ Valfri, tillbehör  
Skyddsklass, lyftmotor: \_\_\_\_\_ IP20  
Skyddsklass, handkontroll: \_\_\_\_\_ IPX4



RiseAtlas625T uppfyller kraven för klass 1-produkter i det Medicintekniska direktivet 93/42/EEG.



# handicare

Handicare AB  
Maskinvägen 17,  
SE 972 54 Luleå, SWEDEN  
Tel: 08-557 62 200  
Fax: 08-557 62 299  
[www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
[info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

SystemRoMedic™ är en helhetslösning för enkla förflyttningar. I konceptet ingår fyra produktområden som tillgodoser de allra flesta behov i olika förflyttningssituationer.

**Överflyttning**, mellan två enheter. **Positionering**, inom samma enhet.

**Stöd**, vid mobilisering. **Lyft**, manuella och mekaniska.