


# RiseBasic440M™

SystemRoMedic™

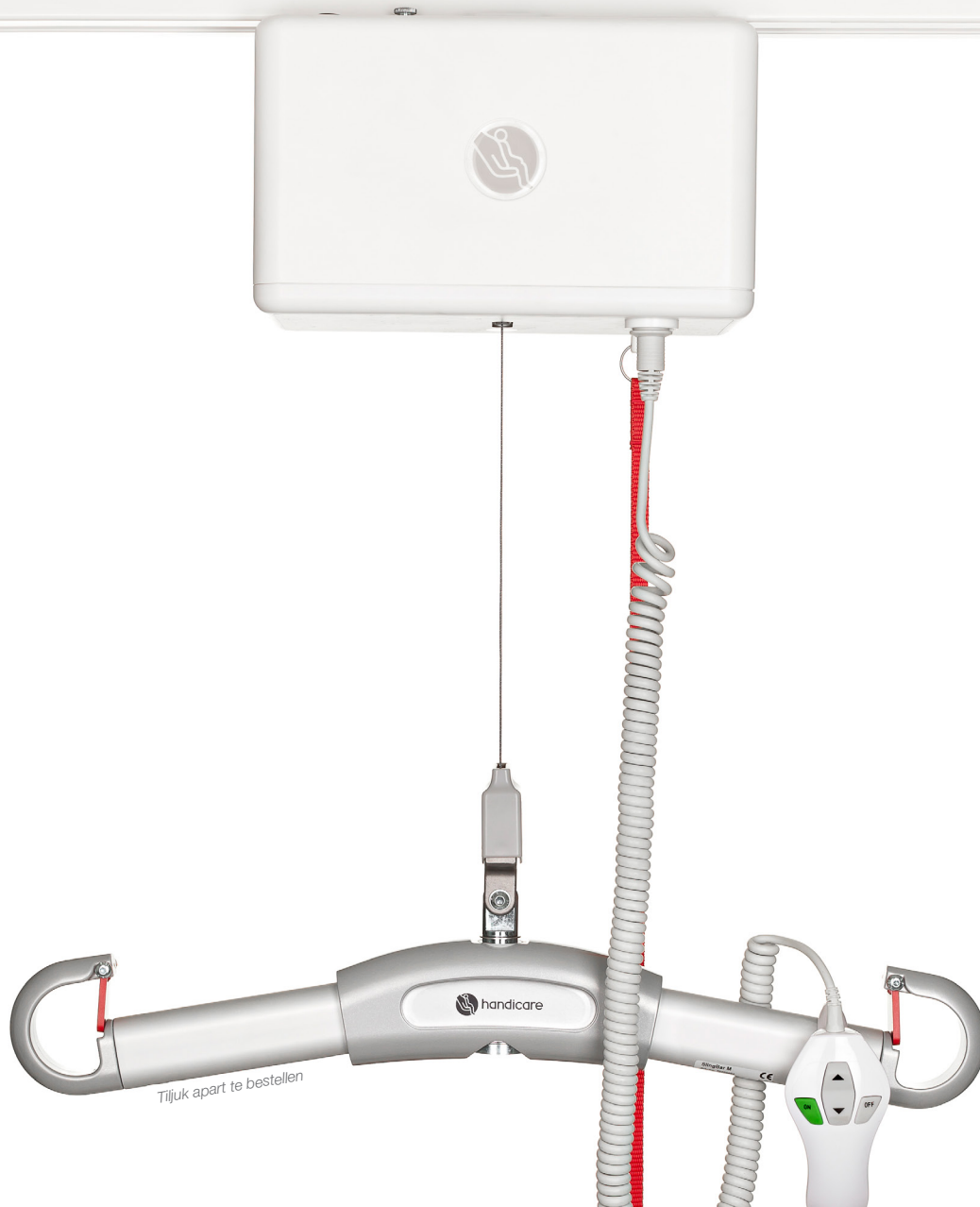

## Bij alle omstandigheden veilig en eenvoudig tillen van gebruikers met een gewicht van maximaal 200 kg

- SWL 200 kg
- Handmatige verplaatsing langs rail
- Modern, elegant en hygiënisch design
- Ongebruikelijk kleine afmetingen en een ontzettend laag gewicht
- Voor alle railsystemen, in alle omgevingen en in alle kamertypes
- Groot tilbereik biedt de mogelijkheid voor zowel zeer laag als zeer hoog tillen
- Voor alle situaties, gebruikers en behoeften
- Zeer eenvoudig te gebruiken, zorgt voor veilige arbeidsomstandigheden en stelt de zorgverlener in staat om tijdens het hele tilproces in de buurt van de gebruiker te blijven
- Stille, zachte bewegingen en zachte start en stop
- Ergonomische en gebruiksvriendelijke handbediening
- De Aan- en Uitknoppen op de handbediening voorkomen onbedoeld gebruik van de functies van de plafondliftmotor
- Wisselbediening, voor het bedienen van draaitafels in het railsysteem met behulp van de handbediening, leverbaar als accessoire
- Handmatige noodstop
- Elektrische en handmatige nooddaalfunctie
- Overbelastingsbescherming
- Valbescherming
- De motor stopt automatisch als de tilriem niet belast is
- Effectieve geleiding van de tilriem voorkomt onbedoeld draaien van de tilriem
- Batterijen met hoge capaciteit en lange levensduur en energiezuinige elektrische motor
- Eenvoudig en handig opladen via handbediening
- Een unieke laadoplossing met een loopwagen voor twee alternatieve oplaadmethode (via de rails/het uiteinde) is beschikbaar als extra optie
- Discreet informatiepaneel
- Onderhoudsvriendelijk
- Diagnostiek: speciale software is beschikbaar als extra optie waarmee u met behulp van een pc toegang kunt krijgen tot uitgebreide informatie over de plafondliftmotor
- Veel accessoires voor veilig, eenvoudig en individueel aangepast tillen van gebruikers in de meeste verplaatsingssituaties

# RiseBasic440M™

Voor professionele en zeer functionele zorgomgevingen met een harmonische en menselijke sfeer.



### Standaard eenvoudig en handig opladen via handbediening

Het laadstation voor de motor van de plafondlift is geïntegreerd in een kleine, discrete houder voor de handbediening. Het laadstation wordt aan de wand bevestigd, in de buurt van de parkeerplaats van de plafondliftmotor.



## PRODUCTSPECIFICATIE

Art.nr. Product  
50100040 \_\_\_ RiseBasic440M

RiseBasic440M wordt geleverd met handbediening en oplader.  
Tijuk apart te bestellen.

## ACCESSOIRES

Art.nr.	Product	Beschrijving
70200075	QuickTrolleyUniversal 360	Trolley met snelle ontgrendeling, draait 360 graden
70200062	In-rail/end point charging	Opladen via rail/opladen via uiteinde
70200066	Switch manoeuvring	Wisselbediening, voor de bediening van draaitafels in het railsysteem met behulp van de handbediening
70200048	Software for diagnostics	Software voor diagnostiek
50400048	Parking Placard	Parkeerbord, voor het gemakkelijk bewaren van tijukken, handleidingen en tilbanden
50400332	Parking Placard BariBar	Voor het gemakkelijk opslaan van BariBar en tilbanden
70200071	SlingBar XS	Tijuk, 250 mm
70200001	SlingBar S	Tijuk, 350 mm
70200002	SlingBar M	Tijuk, 450 mm
70200003	SlingBar L	Tijuk, 600 mm
70200042	SlingBarSpreader M	Zijbeugels voor SlingBar S/M/L
70200072	BariBar	Vierpunts tijuk voor plafondliften, max. belasting 454 kg
70200017	Sling bar RFL X4	Vierpunts tijuk, max. belasting 300 kg
70200053-		
70200058	Lift strap extension	Verlengbanden, 6 lengtes: 370-970 mm

## TECHNISCHE INFORMATIE

Maximale belasting, RiseBasic440M: \_\_\_\_\_ 200 kg  
 Materiaal, chassis: \_\_\_\_\_ Aluminium  
 Materiaal, behuizing: \_\_\_\_\_ Vlambestendig ABS-plastic  
 Afmetingen, lengte x breedte x hoogte: \_\_\_\_\_ 266 x 151 x 156 mm  
 Gewicht: \_\_\_\_\_ 6,8 kg  
 Verplaatsing langs rail: \_\_\_\_\_ Handmatig  
 Handbediening: \_\_\_\_\_ Elektrisch, 4 knoppen  
 Tilinterval: \_\_\_\_\_ 2400 mm  
 Tilnelheid, zonder belasting: \_\_\_\_\_ 30 mm per seconde  
 Tilnelheid, met belasting: \_\_\_\_\_ 20 mm per seconde  
 Geluidsniveau, met belasting: \_\_\_\_\_ 51 dB(A)  
 Effectieve geleiding van tilriem: \_\_\_\_\_ Standaard  
 Nooddaalfunctie: \_\_\_\_\_ Elektrisch en handmatig  
 Noodstop: \_\_\_\_\_ Handmatig  
 Batterijen: \_\_\_\_\_ 2 x 12 V 2,9 Ah  
 Opladen via handbediening: \_\_\_\_\_ Standaard  
 Opladen via rail: \_\_\_\_\_ Naar keuze, accessoire  
 Opladen via uiteinde: \_\_\_\_\_ Naar keuze, accessoire  
 Beschermingsklasse, liftmotor: \_\_\_\_\_ IP20  
 Beschermingsklasse, handbediening: \_\_\_\_\_ IPX4



**CE** RiseBasic440M voldoet aan de vereisten voor klasse 1-producten van de Richtlijn betreffende medische hulpmiddelen 93/42/EEG.

Ga naar [www.handicare.com](http://www.handicare.com) voor meer informatie.



**handicare**

Handicare  
 Weteringweg 5-9  
 2641 KM Pijnacker  
 Tel: 015 - 369 54 40  
 Fax: 015 - 369 71 64  
[www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
 info.LS@handicare.com

SystemRoMedic™ is een totaaloplossing voor eenvoudige transfers. Het concept bevat producten voor vier categorieën transfers die voorzien in de meeste behoeften en transferituaties.

**Transfers**, tussen twee locaties verplaatsen. **Positioneren**, op dezelfde locatie herpositioneren.

**Begeleiden**, bij het mobiliseren. **Tillen**, manueel en mechanisch.