

Sängbord

I Ready for life™ finns ett nytt, smidigt och flexibelt sängbord med många användningsområden för både brukare och medhjälpare.

Sängbordet kan justeras steglöst i höjddled för att användas antingen som avställningsyta vid sidan av sängen eller som arbetsplats med bordet inkört över sängen eller framför en fåtölj eller rullstol.

Bordsskivan kan vinklas steglöst för att passa brukaren vid arbete med bärbar dator, läsning eller andra praktiska sysslor. De upphöjda kanterna förhindrar att böcker eller papper glider av bordet.



Vid behov av extra avställningsyta kan sängbordet förses med en sidoskiva.

Sängbordet är mycket stabilt och klarar en belastning på 20 kg. Bordsskivan är tillverkad av ett tåligt plastmaterial som är enkelt att rengöra och desinficera.

Underredet är försett med fyra lätttrullande hjul för enkla förflyttningar. Två av hjulen har bromsar som effektivt låser bordet i önskad position.



Sängbord - finesser och fördelar

- ♥ Attraktiv, diskret design
- ♥ Stabilt, klarar belastning på 20 kg
- ♥ Flexibelt, enkelt att justera höjd och lutning
- ♥ Enkelt att flytta
- ♥ Enkelt att rengöra
- ♥ Många användningsområden

Förhöjningsklossar

Ready for life™ har också en dubbelsidig förhöjningskloss som kan användas för att höja sängar och fåtöljer i flera olika höjdpåsar. Vilken sida av klossen som ska vändas uppåt respektive nedåt beror dels på om sängen har ben eller medar och dels på hur mycket man vill höja sängen.

Den ena, slätare sidan av förhöjningsklossen har formen av ett upphöjt kors med en 8 cm Ø rund fördjupning i mitten. Denna sida vänds uppåt för användning till sängar med runda eller fyrkantiga ben.



Sängbenet placeras i fördjupningen i mitten, vilket ger en förhöjning med 60 mm.

Genom att placera flera förhöjningsklossar på varandra kan sängen höjas med ytterligare 45 mm för varje extra uppsättning klossar.

Den andra sidan av förhöjningsklossen har formen av ett nedsänkt kors med en 8 cm Ø rund fördjupning i mitten. Denna sida vänds uppåt för att höja antingen sängar med runda eller fyrkantiga ben eller sängar med medar.

Sängbenet placeras i fördjupningen i mitten, vilket ger en förhöjning med 35 mm.



Sängmedar placeras i det nedsänkta korset som har två olika bredder för bästa passform och stabilitet. Förhöjningen för sängar med medar blir 45 mm.

Genom att placera flera förhöjningsklossar på varandra kan sängen höjas med ytterligare 45 mm för varje extra uppsättning klossar.

Förhöjningsklossen kan också användas till att luta sängen genom att endast höja ena änden med klossar. Använd dock inte mer än en kloss på höjden vid lutning av sängen.

Förhöjningsklossar - finesser och fördelar

- ♥ Diskret design
- ♥ Stabila, klarar belastning på 500 kg/4 klossar
- ♥ Smart, flexibel modell
- ♥ Stegvis anpassning av sängens höjd
- ♥ Passar de flesta sängar och fåtöljer
- ♥ Enkla att använda
- ♥ Enkla att rengöra

Produktspecifikation - Sängbord



Bed table _____ sängbord med bordsskiva i vit plast ____ 300400310

Bed table extension ____ sidoskiva till sängbord i vit plast ____ 300500310

Höjd, totalt _____ 65-100 cm

Storlek, bordsskiva _____ 42,5 x 70 cm

Storlek, sidoskiva _____ 36 x 25 cm

Höjd, underrede _____ 9 cm

Vikt _____ 8 kg

Max belastning _____ 20 kg

Hjul _____ Ø 5 cm

Material, bordsskiva/sidoskiva _____ ABS-plast

Material, underrede _____ Pulverlackerat stål

Produktspecifikation - Förhöjningsklossar

Raiser bed and chair ____ 4 st förhöjningsklossar i grå plast ____ 300300003

Höjd, totalt _____ 70 mm

Diameter, förhöjningskloss _____ 150 mm

Max diameter, sängben _____ 80 mm

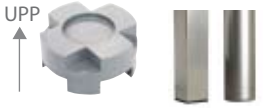


Max bredd, sängmedar _____ 59 mm/69 mm

Max belastning _____ 500 kg/4 förhöjningsklossar

Material _____ PP-plast

Förhöjningsintervall

Genom att använda 1-3 förhöjningsklossar under varje sänghörn, kan sängen höjas med upp till 150 mm beroende på vilken sida av klossen som vänds uppåt.

	1X	2X	3X
UPP 	60 mm	105 mm	150 mm
UPP 	35 mm	80 mm	125 mm
UPP 	45 mm	90 mm	135 mm

Ready for life™

Ready for life™

Ready for life™ – ett nytt produktprogram för bättre livskvalitet åt alla

Inget liv är det andra likt. Vi har alla olika förutsättningar och våra förutsättningar förändras dessutom kontinuerligt under hela vår livstid. Bra och dåliga saker händer oss alla och, om vi har tur, blir vi alla äldre, dag för dag.

Livet, oavsett hur det ter sig, är en gåva, inte en självklarhet. Och det borde inte handla bara om att existera eller överleva. Livet är till för att levas. Vi behöver inte vara unga och friska och inte heller oberoende för att leva. Men vi måste vara redo för livet, ha både vilja och förmåga att leva.

Funktionshinder, vare sig de är permanenta eller tillfälliga, borde inte vara ett hinder för en persons förmåga att leva fullt ut och ha ett tillfredsställande liv. Viljan kommer inifrån, och när det handlar om förmågan kan Ready for life™ bidra till att förbättra villkoren genom att tillhandahålla verktyg som ger alla människor ökad förmåga att leva ett rikt och aktivt liv, varje dag i livet.

Ready for life™ är en serie av hjälpmedel designade för att ge användaren bättre förutsättningar att leva ett så bra och aktivt liv som möjligt varje dag. Produkterna är speciellt framtagna för att passa de förhållanden som råder inom hemvården och andra hemliknande miljöer. Ready for life™ erbjuder rätt kvalitet, rätt funktion och rätt prestanda till rätt pris.

Ready for life™ sovrumstillbehör

Ready for life™ sovrumstillbehör är enkla, smarta och lättanvända produkter för en säker och bekväm sovrumsmiljö. Produkterna erbjuder flexibla och kostnadseffektiva lösningar på vanliga och frekventa problem och behov, både för brukare och för medhjälpare. Ready for life™ sovrumstillbehör har design och funktioner som passar i hemvården och andra hemliknande miljöer, men de fungerar faktiskt lika bra överallt.



Sängbord och förhöjningsklossar

Ready for life™ sängbord och förhöjningsklossar är smarta och lättanvända produkter för en säker och bekväm sovrumsmiljö. Produkterna, som har en diskret design, erbjuder stor flexibilitet och goda möjligheter till individuell anpassning efter olika brukare och behov.

DHG
Moving Health Forward

DHG
Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista,
Sweden Tel: 08-557 62 200
Fax: 08-557 62 299
www.directhealthcaregroup.com
info.se@directhealthcaregroup.com