

# Mercury Advance SMARTcare®

En ny strategi för att förebygga/behandla trycksår

Intelligent®  
Pressure Care  
Management



- **Mercury Advance SMARTcare®** är en innovativ lösning för att förebygga och behandla trycksår.
- Den ger effektiv dubbelterapi i en enda produkt genom att kombinera avancerade, kliniskt bevisade teknologier som tidigare endast fanns tillgängliga i olika produkter.



Klinisk användning/trycksårskategori

Mycket  
hög risk

En unik luftburen hälzon med lågt tryck gör så att hämlarna 'svävar', vilket reducerar trycket på detta extra känsliga område

Det yttre Dartex™-överdraget i multi-stretch-material andas och har HF-svetsade sömmar samt djupa skyddsflikar vid blyxtlåset i enlighet med de strikta reglerna för infektionskontroll.

CPR-flik för enkelt luftutsläpp

Beroende på klinisk bedömning, kan den alternerande funktionen användas på lågt (LO) eller högt (HI) tryck

3 x små skum- och luftceller för att stödja den övre delen av ryggen och skuldromma

Huvudzon i skum

7 stora skum- och luftceller för stöd av torso, korsben, lår och ben

Zone 2

Zone 1

Zone 3

Zone 4

Med ett högkvalitativt CME-skum inneslutet i luftcellerna kan madrassen ge alternerande tryckavlastning i strömläge med ansluten pump

En speciellt designad U-kärna hjälper till att minimera tryck på hälmrådet


När den används utan pump, optimerar kliniskt bevisad, avancerad luftförskjutningsteknologi kontinuerligt tryckomfördelningen efter patientens kroppsvikt och rörelser (t.o.m sårkategori 3).

När den används i strömläge ger **Mercury Advance SMARTcare®** trycklättning via en serie sammankopplade alternerande skum- och luftceller. Utan belastning från ett övre lager av skum på madrassen, garanterar den unika konstruktionen med 'skum i luftcell' en effektiv tryckavlastande terapi (t.o.m sårkategori 4).

## En ny strategi för att förebygga/behandla trycksår

Mercury Advance SMARTcare® är kliniskt bevisad att stödja förebyggandet och behandlingen av trycksår. Den representerar ett nytt synsätt inom trycksårsmangement, som uppnås genom att minska antalet steg och den tid det tar för att se till att patienter får rätt produkt. Mercury Advance SMARTcare® är också en mer kostnadseffektiv lösning, vilket främjar att resurser används på bästa sätt. Mercury Advance SMARTcare® kan enkelt stegras från statiskt till dynamiskt läge, och sedan sänkas igen när detta anses kliniskt lämpligt, utan fördröjning, tillhörande administration och flytt- och hanteringskrav vid patientflyttning.

Mercury Advance SMARTcare® kombinerar de mest innovativa och kliniskt bevisade tryckvårdsteknologierna i en enda produkt.

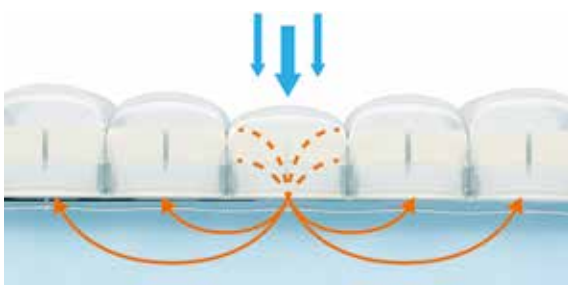

### MER EFFEKTIV, KONTINUERLIGT OPTIMERAD TRYCKKOMFÖRDELNING

- Högkvalitativ CME-skum och luftcells konstruktion
- Avancerad luftförskjutningsteknologi optimerar kontinuerligt tryckomfördelning som anpassas efter patientens vikt och rörelser
- 'Luftburen' hälzon avlastar effektivt trycket på detta känsliga område

Samtliga komponenter är standardiserade och utbytbara, vilket maximerar produktens livslängd och erbjuder en kostnadseffektiv lösning vid trycksårsbehandling.

#### Infektionskontroll/kompatibilitet med hypokloritlösning

Madrassöverdrag/kontrollenhet ska torkas av med en lämpligt utspädd natriumhypokloritlösning och varmvatten alternativt inom vården vanligt förekommande medel såsom Virkon eller Oxyfoam.

### EFFEKTIV TRYCKAVLASTNINGSTERAPI

- Lätt att lägga till strömenhet för alternerande funktion
- Unik konstruktion med 'skum i luftcell' för mer effektiv terapi
- 10 minuter lång, 2-i-1 alternerande cykel
- Val av LO- eller HI-inställning

#### Tekniska specifikationer

Riskkategori	Mycket hög risk
Viktgräns	Ingen gräns för lägsta vikt. Produkten bedöms klara 254 kg
Garanti	2 år
Mått	80/85/90/105/120 x 200 x 15 (cm)
Produktvikt	13,3 kg madrass/1,7 kg strömenhet
Cykeltid	10 minuter
Driftsätt	elektroniskt
Spänning	220 V–240 V/50 HZ
Effektförbrukning	10 W
Klassificering/MDD	Ila
Färg	Blå

**DHG**  
Moving Health Forward

Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 08-557 62 200  
Direct Healthcare Group Sverige AB  
Torshamnsgatan 35 | SE-164 40 Kista  
info.se@directhealthcaregroup.com  
www.directhealthcaregroup.com