

LECKEY®

Squiggles
Sitte-
system

~~Squiggles~~
Squiggles



LECKEY^o

Sterkere sammen.

Vi jobber sammen med enkeltpersoner, terapeuter og omsorgspersoner for å utvikle produkter med både et klinisk og et emosjonelt fokus. Ved å bruke den nyeste forskningen og kliniske forståelsen lager vi praktiske løsninger som er enkle å integrere i familielivet. For oss handler livet om å bevege seg, oppleve, delta og utføre.

Det handler om framskritt.

24 timers
posisjonering for
babyer, barn og voksne.
Sove, sitte, stå, gå,
forflytte seg, bad og
toalett.





Vi er dedikerte til å sikre at vi spiller vår rolle i å hjelpe barn til å få mest mulig ut av hver dag ved å følge våre nøkkelprinsipper innen design:

- 1 Fokus på barnet og klinisk forsvarlig
- 2 Enkel i bruk og lett i vekt
- 3 Holdbar og pålitelig
- 4 Attraktiv og ettertraktet
- 5 Gjenvinningsbar og gjenbruksbar




Squiggles



Det nye og forbedrede 2010 Squiggles setet for barn i alderen 1-5 år drar nytte av en rekke forbedrede egenskaper og mer avanserte materialer, slik at det er mer komfortabelt og enklere å vedlikeholde.

Mer praktisk

Maskinvaskbare trekk, 40°C.

Mer holdbar

Unbraco skruer leveres standard med antivibrasjonsskiver for å hindre at skruene løsner over tid.

Mer komfort

Vi har økt komforten ved hjelp av en 30mm hel setepute.



Og vi har tilført mye mer!

Hode

Bredere og formet hodestøtte gir bedre sidestøtte for hodet.

Overkropp

Skulderstøtte øker rygghøyden med 75mm.

Hendelen for rygghøyderegulering er endret til italienergrep. Forbedret låsemekanisme for bordet

Polstret frontbøyle kan benyttes i stedet for bord når setet benyttes på vognunderstell.

Bekken

Bekkenbeltets festepunkter og bånd er forsterket for å kunne imøtekomme barn med sterkere strekkemønstre.

Økt breddejustering på hoftestøttene +40mm (maks 260mm).

Ben og føtter

Tilleggsbolstring på utsiden av knær, opp til 30mm begge sider. Bidrar til å hindre at barn med lav tonus sitter abduisert med bena – tilbehør.

Minimum legglengde redusert til 122,5mm (fra 160mm).

Understell

10° ytterligere tilt på Hi-Low understell gir 30° tilt bakover.




Men sine klare farger og kliniske fokus har Squiggles setet alltid handlet om å oppfylle de posturale og emosjonelle behovene til barn og deres familier.

Det nye 2010 Squiggles setet kan bidra til at et enda større spekter av barn kan utføre dagligdagse aktiviteter i hjemmet, i klasserommet eller ute i omgivelsene.





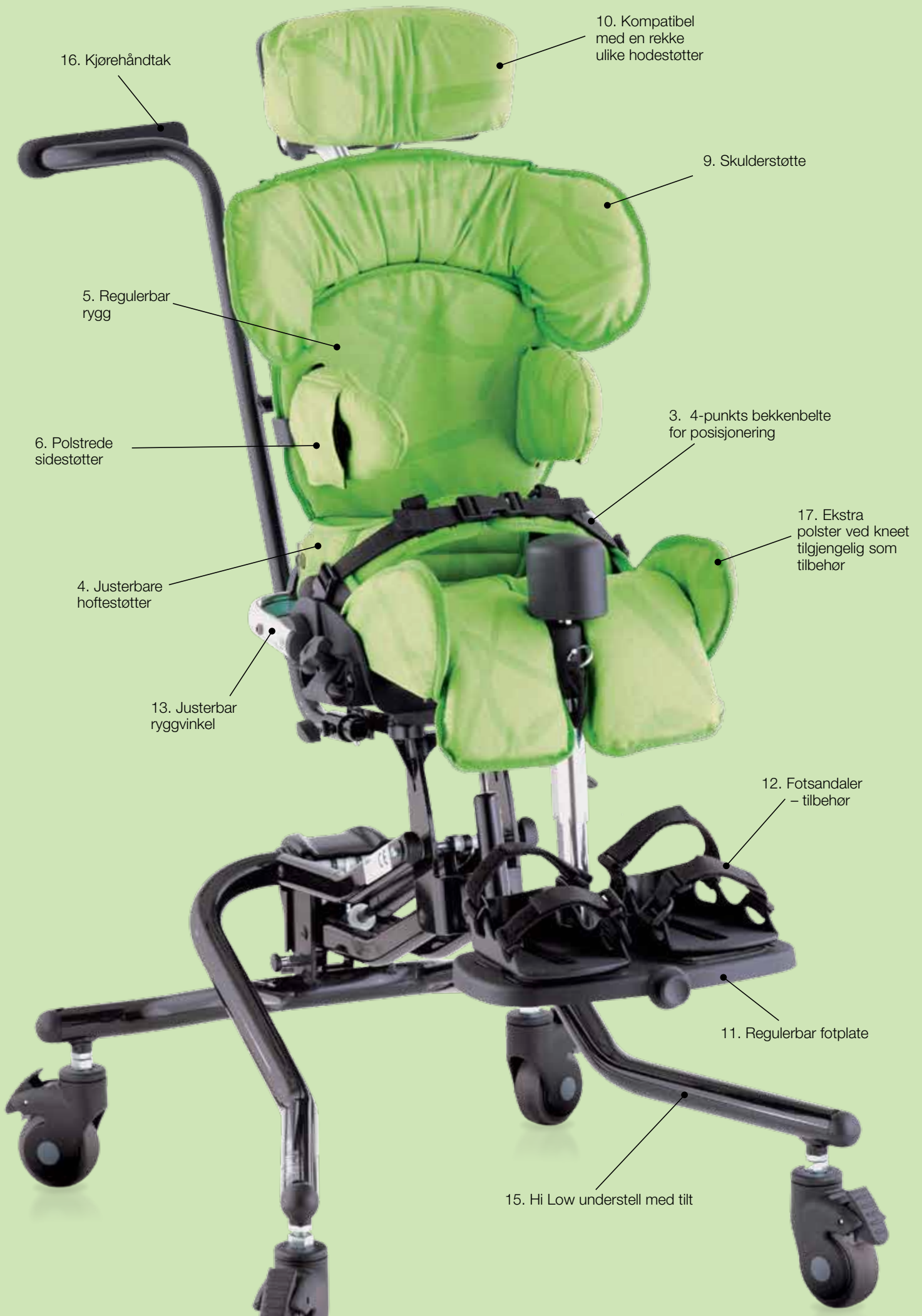

1. Fleksibel bekkenstøtte som kan formes etter barnets fasong, støtter nedre del av ryggen i ønsket stilling ved å oppmuntre til en gradvis framovertiltet stilling i bekkenet og strekk i nedre del av overkroppen.
2. Støtte under lårene sikrer barnet ytterligere fra å sklir fram i setet.
3. 4-punkt bekkenbeltet er regulerbart og gir en trygg og stabil støttebase og er polstret for økt komfort.
4. Hoftestøtter er justerbare for optimal postural støtte.
5. Ryggen kan reguleres til den høyden barnet har behov for.
6. Polstrede sidestøtter bidrar til å vedlikeholde en trygg, oppreist stilling.
7. Bryststøtte kan monteres for ytterligere støtte samtidig som den opprettholder barnets bevegelsesfrihet i aktivitet.
8. Vest kan benyttes dersom barnet har behov for støtte på sidene, foran og over skuldrene.
9. Skulderstøtten kan vinkeljusteres for å gi støtte til skuldrene for bedre balanse av hodet og overkropp over bekkenet.
10. Hodestøttefestet er kompatibelt med et bredt utvalg hodestøtter – Whitmyer, Otto Bock og andre ledende merker.
11. Regulerbart fotbrett kan stilles i ønsket vinkel slik at føttene får god støtte og gir et trygg base for maksimal funksjon i overkroppen. Fotplaten kan vippes opp for enklere forflytning.
12. Fotsandaler kan benyttes for å posisjonere føttene.
13. Vinkelregulering av ryggen er designet for å opprettholder riktig plassering av hodestøtte og sidestøtter uavhengig av ryggvinkel.
14. Bord støtter en rekke ulike aktiviteter. En støtte- og aktivitetsstang kan monteres på bordet ved behov.
15. Hi-Low understell kan reguleres fra gulvnivå og opp til bordhøyde og gir barnet muligheter til å utføre en rekke ulike aktiviteter, fra gruppeaktiviteter på gulv til familiemåltider. Understellet har tilt som støtter en rekke ulike stillinger. Alle reguleringer kan utføres enkelt mens barnet sitter i setet.
16. Kjørehåndtaket bidrar til enkel manøvrering av stolen rundt i hjemmet, i klasserommet eller i barnehagen.



1. Fleksibel bekkenstøtte



2. Støtte under lårene



7. Bryststøtte-tilbehør



8. Vest - tilbehør



14. Bord



Squiggles sittesystem

Standard produkt inneholder: Setebase, rygg, bekkenstøtte, benstøtte, sammenkoblingsmekanisme for understell.

Norsk konfigurasjon, varenr. 120-610-03, inneholder: Setebase, rygg, bekkenstøtte, benstøtte, sammenkoblingsmekanisme for understell, blått trekk, bekkenbelte str small, fotstøtte, abduksjonskloss, faste sidestøtter og hodestøtte.

Alder (ca.)	Opp til 5 år	
Maks brukervekt	22kg	
Brukerhøyde	Min 750 mm	Maks 1100 mm
Setebredde (avstand mellom hoftestøtter)	Min 160 mm	Maks 260 mm
Setedybde (ryggstøtte til bak kneet)	Min 190 mm	Maks 290 mm
Knebredde (avstand mellom abduksjonskloss og siden av setet)	Maks 90 mm	
Fotplate	Plantarfleksjon 10°	Dorsalfleksjon 10°
Bryst bredde (avstand mellom sidestøtter)	Min 160 mm	Maks 220 mm
Rygg høyde (setet til skulderhøyde)	Min 320 mm	Maks 380 mm
Rygg høyde (inkludert skulderstøtte)	Min 420 mm	Maks 480 mm
Ryggvinkel	Fremover 10°	Bakover 25°
Sete til fotplate (fotsåle til bak kneet)	Min 122.5 mm	Maks 270 mm
Tilt Hi-Low understell	Fremover 10°	Bakover 30°
Tilt Easy understell	Fremover 20°	Bakover 20°
Toppen av setet til gulvet (Easy understell)	Min 280 mm	Maks 380 mm
Toppen av setet til gulvet (Hi-Low understell)	Min 270 mm	Maks 650 mm
Bordhøyde (setet til toppen av bordet)	Min 115 mm	Maks 170 mm
Bord størrelse	460 mm x 560 mm	
Seteenhet (minimum dimensjoner for lagring)	Vekt 6 kg Bredde 370 mm	Lengde 370 mm Høyde 400 mm
Hi-Low understell (uten kjørehåndtak, minimum dimensjoner for lagring)	Vekt 9 kg Bredde 540 mm	Lengde 640 mm Høyde 315 mm
Easy understell (uten kjørehåndtak, minimum dimensjoner for lagring)	Vekt 4.5 kg Bredde 525 mm	Lengde 630 mm Høyde 265 mm

Understell alternativer

120-1800

Hi Low understell

Inneunderstell, høyderregulering ved gassfjær med fotpedal




102-12763

Hi -ow understell

Kombinert inne-/utebruk, høyderregulering ved gassfjær med fotpedal

102-12765

Hi-low understell kombinert inne-/utebruk, høyderregulering ved gassfjær med fotpedal. Høyderregulering elektrisk.

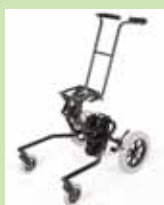

E6061

Rullestolunderstell

Squiggles sittemodul passer også på vognunderstell Kimba str1.



Adaptorplate

Standard 300mm adaptorplate for Invacare Spree XT, Sunrise Quickie TS, Spree.



122-1717

Easy understell

Manuell høyderregulering



102-12764

Hi-low understell kombinert inne-/utebruk, høyderregulering ved gassfjær med fotpedal. Høyderregulering hydraulisk.

Service

Kontakt Handicares Kundesenter på tlf: 03250 for serviceforespørsel på alle Leckey produkter. James Leckey Designs Ltd som produsent og eneansvarlig erklærer at produktene er i samsvar med retningslinjene i 93/42/EEC og EN12182 Technical aids for disabled persons general requirements and test methods.

Målskjema og dele katalog inneholdende deler for å forlenge produktets levetid og gjennomføre gjenbruk er tilgjengelige på forespørsel eller elektronisk på www.handicare.no.

Seteskall

Farge muligheter



120-610
Sittemodul Squiggles
seteskall



120-710-01
Setetrekk grønn



120-710-02
Setetrekk oransje



120-710-03
Setetrekk blå



120-710-04
Setetrekk rosa

Setetrekk inneholder: Ryggpute, setepute, bekkenstøttepute og trekk til lår støtter.

Tilbehør

Tilbehør merket med * skal etterfølges av fargekode ved bestilling, -01 grønt, -02 oransje, -03 blå eller -04 rosa.



117-697 Hodestøtte uten pute



137-698* Hodestøttepute
formet, inkluderer ikke
hodestøtten



117-850* Hodestøttepute flat,
inkluderer ikke hodestøtten



118-667 Sidestøtter til
hodestøtte uten putetrekk



137-807* Trekk sidestøtter
hodestøtte



120-844* Bekkenbelte str small



120-762* Sidestøtter faste
120-837* Sidestøtter
utsvingbare



120-777* Utforingspute rygg 1"
inkludert sidestøtter



117-1781 Fotsandaler str small
117-2781 Fotsandaler str medium



120-799 Vest str small
120-757 Vest str medium



120-270 Polster bord



120-641 Abduksjonskloss



120-639 Fotplate



RC01 Regntrekk (kun til bruk
med vognunderstell)



???????



120-954 Sidestøtter med
armstøtte uten trekk



117-769 Støtte- og
aktivitetsstang



120-945 Svop (til bruk på
vognunderstell for avskjerming)



120-702 Skulderstøtte
120-828* Pute til skulderstøtte



120-672 Bord



117-832 Solskjerm (kun til
bruk med vognunderstell)

LECKEY^o

Leckey ble etablert i 1983 og er en anerkjent pioner innen forskning og utvikling av produkter som hjelper voksne og barn med funksjonsnedsettelse å bevege seg, utføre, oppleve og delta i dagligdagse aktiviteter gjennom hele døgnet.

Vi tilnærmer oss produktdesign og- utvikling med et høyt klinisk fokus. Gjennom grundige kliniske forskningsstudier i samarbeid med ledende universiteter og omfattende brukerstudier sammen med ergoterapeuter, fysioterapeuter, brukere og deres familier forsetter vi å utvikle familievennlige produkter som gir god posisjonering, for hele døgnet og i alle stadier av livet.

Gjennom tidlig intervensjon, barndom og voksen alder jobber Leckey's erfarne team av designere, terapeuter og ingeniører sammen for å utvikle produkter som tilfredsstillende de kliniske behovene til helsepersonell samt de sosiale behovene til brukeren.

For å oppnå dette arbeider vi sammen med helsepersonell, enkeltpersoner og omsorgspersoner som benytter våre produkter hver dag. Med deres hjelp lager vi produkter som er pålitelige, holdbare, testede og har høy ytelse, produkter som vi er kjent for verden rundt.



Service

Kontakt Handicares Kundesenter på tlf: 03250 for serviceforespørsel på alle Leckey produkter. James Leckey Designs Ltd som produsent og eieansvarlig erklærer at produktene er i samsvar med retningslinjene i 93/42/EEC og EN12182 Technical aids for disabled persons general requirements and test methods. Målskjema og dele katalog inneholdende deler for å forleng produktets levetid og gjennomføre gjenbruk er tilgjengelige på forespørsel eller elektronisk på www.handicare.no.



sleepfirm

24 timers
posisjonering for
babyer, barn og
voksne. Sove,
sitte, stå, gå,
forflytte seg, bad
og toalett.