



Benstöd

Amputationsstödet är snabbt omvandlat till ett benstöd med enkel fastsättning Swing-away. Samma enhet för både vänster och höger sida - enkel montering.



Passar alla Combistolar

Amputationsstöd
Artikelnr. 201060004

Förlängningsdyna för benstöd
Artikelnr.: 201061004



Fotstöd

Vi rekommenderar att fotstöd alltid används tillsammans med Combistolarna. Justerbar i höjd via SnapLock - 4 hål / positioner. Löstagbart. Undansvängbart. Sväng in för att fällas ned. Vänd upp polypropolene fotplattorna. Rostfria stålrör.



Passar alla Combistolar

Fotstöd
Artikelnummer: 200810004



Häl- & vadband

Rekommenderas som standardtillbehör för Combi Tilt- och Turnmodeller. Förhindrar användarens fötter att fastna bakom fotstöd. Består av två delar. Montera på höger och vänster fotstöd. Koppla ihop delarna med kardborrelås. Nylon.


Passar alla Combi Stolar

Häl- & vadband
Artikelnummer.: 200384004

COMBI

Duschstol Tillbehör

Olika
lösningar
för olika
behov

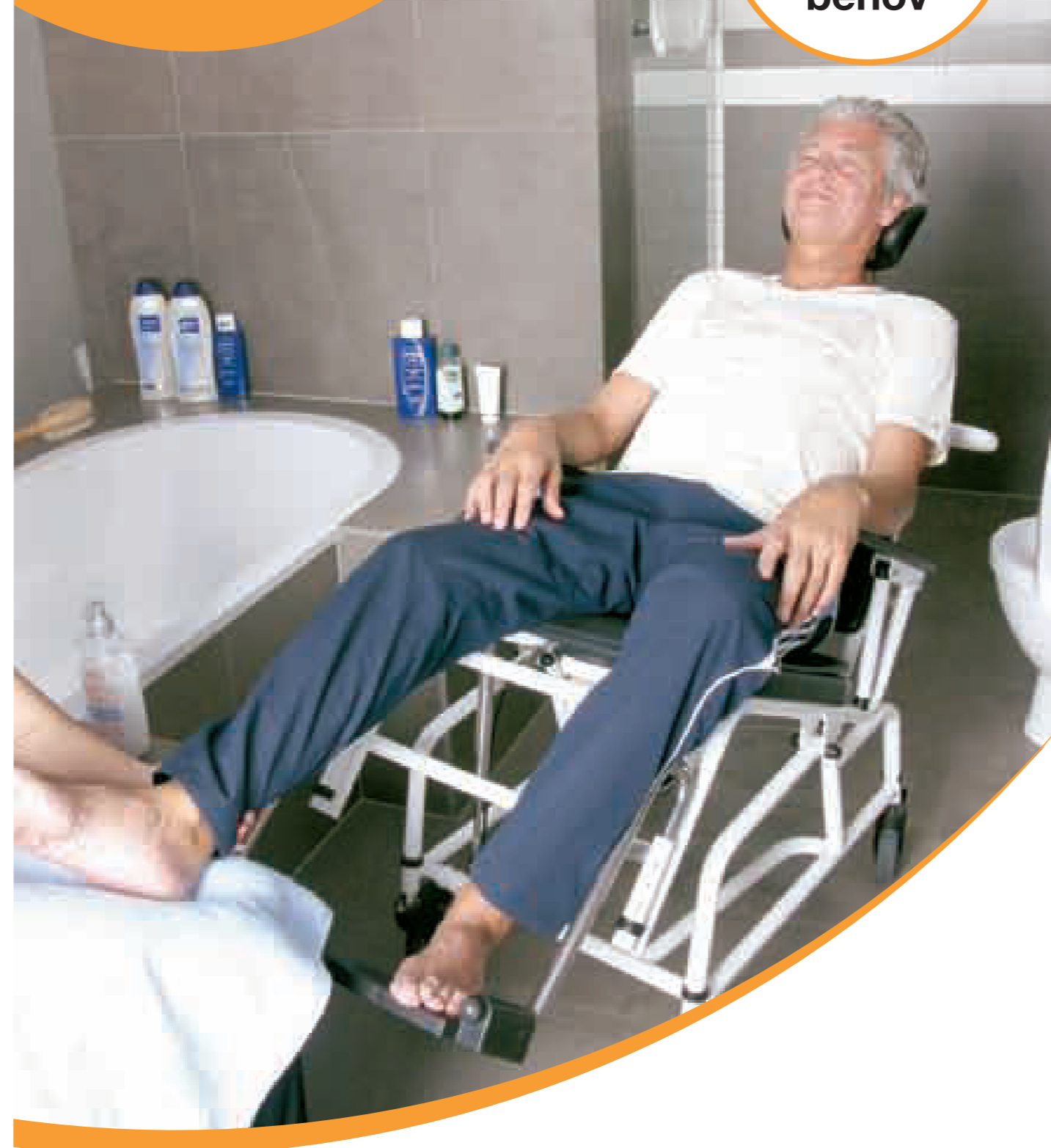

Hel sits

Passar löst ovanpå vanliga sitsen
Stolen kan nu användas som en transportrullstol.

Passar alla Combistolar

Hel sits
Artikelnr: 853.100.604. Svart.



Uppsamlingskärl

3 modeller finns:
Nyckelformad: passar alla Combistolar.
Rund: passar alla Combi Stolar utom
Combi Turn.

Rund hink med vattenspår
Artikelnr. 853100033

Nyckelålsformad hink
Artikelnr.: 853100034

Veddestavägen 15
Box 640
175 27 Järfälla

Tel: +46 557 622 00
Fax: +46 557 622 99

Tillbehörsprogram för Combi Duschstolar

Ett omfattande sortiment av tillbehör gör att Combi kan anpassas för specifika krav och behov hos brukare och vårdare.




Huvudstöd: Standardmodell

Huvudstödet är format för optimalt nackstöd. Tillverkat av vadderande polyuretanmaterial för extra komfort. Justerbar i höjd: 25 cm upp och ner. Vinkeljustering: 45 ° bakåt, 180 ° framåt. Vi rekommenderar att huvudstöd alltid används tillsammans med Combi Tiltstolar.

Monteras på ryggstöd till alla Combistolar.
Kudde/ Yttre bredd: 23 cm
Kudde/ Höjd: 13,5 cm

Huvudstöd: Standardmodell
Artikelnummer: 200360004

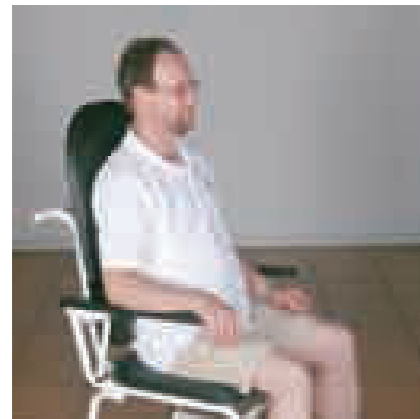

Högt ryggstöd mjukt

Ger extra stöd, t.ex. för långa personer. Integrerad lägre höftstöd. Mjukt vadderat, konstläder. Monteras enkelt på ryggstödet ram. Kan användas med nackstöd.

Passar Combi tilt
Höjd: 70 cm

Högt ryggstöd
Artikelnummer: 201121314



Sits med framåttilt

Rekommenderas exempelvis för höftopererade patienter som inte kan eller bör sitta med 90 ° höftvinkel. Sitsen vinkeljusteras genom att lyfta den bakre delen av sätet och placera justeringsstiften i önskat läge. Sitsvinkel: 5 ° och 10 framåt °.



Passar alla Combistolar utom Combi Tilt och Combi Turn.

Sits med framåttilt
Artikel nr.: 201.120.040. Svart.



Vadderat höftbälte

Förhindrar att man glider framåt. Fästs på sidan av ryggstödet ram. Lås med säkerhetsspänne. Längd justerbart. Vadderat syntetmaterial.



Passar alla Combi Stolar
Bredd x Längd: 7,5 x 50-120 cm

Vadderat höftbälte
Artikelnummer: 200382004



Amputationsstöd

Undansvängbart. Rostfri stålram. Kupad polyuretandyna. Samma enhet för både vänster och höger sida - enkel montering.

Polyuretandyna:
Bredd: 21,5 cm
Djup: 16,5-20 cm

Amputationsstöd
Artikelnummer: 201060004



Barriär

Rekommenderas för användare som är instabila eller sitter oroligt i stol. Barriären kan öppnas på två sätt: parallellt med armstöden respektive uppåt. Från vänster sida, öppna baren, svängbara parallella med armstöd, och lås på baksidan av armstödet. Från den högra sidan, öppna baren, lyfta upp och över. Vi rekommenderar att barriären används med vinkelfasta/låsta armstöd.

Passar alla Combistolar med standard bredd.

Barriär
Artikel nr.: 201.040.314. Vit / svart



Armstödslås

Låser det uppfällbara armstödet i horisontellt läge och förhindrar användaren från att dra upp det. Rekommenderas för användning på Combi Tilt.

Passar alla Combistolar.

Armstöd Lås
Artikelnummer: 201030310



Bålstöd

Justeras med ratt. Swing-away. Manuell höjdjustering i 3 lägen. Kupade polyuretandynor kan längdjusteras i 4 lägen.

Passar alla Combistolar.
Standardmodell/ Bredd: 30-36 cm
Bred modell / Bredd: 36-42 cm
Höjd/ sätets sittyta till överkant 33-37 cm

Bålstöd / Standard / Höger
Artikelnr: 201070314

Bålstöd / Standard / Vänster
Artikelnr: 201072314